



**INDUSTRIAL  
MICROBIOLOGY**

# **BATTERIOLOGIA INDUSTRIALE**

## **CATALOGO GENERALE 2010**

*Valido dal 01/03/2010 - Rev. 1.1*

**LICKSON S.r.l.**

**S.S. 189 (PA-AG) C.da Pettineo  
90020 VICARI (PA) - ITALY**

**Casella Postale 90025 Lercara Friddi (PA)**

**Tel. 0039. 091. 8252670 - 8248561- Fax: 0039. 091. 8213696**

**E-mail: [info@lickson.com](mailto:info@lickson.com) - [licksonsr1@virglio.it](mailto:licksonsr1@virglio.it)**

**Sito web: <http://www.lickson.com>**

## **PRESENTAZIONE**

La **Lickson S.r.l.** rappresenta un'impresa giovane e moderna, in continuo sviluppo. Con più di 15 Anni di esperienza nella produzione di Prodotti per Microbiologia.

Negli ultimi anni, la **Lickson S.r.l.** ha investito notevoli risorse nella ricerca, nella qualità aziendale e nel campo delle Biotecnologie, vantando oggi un "Know How" ad elevato contenuto tecnologico.

La **Lickson S.r.l.** ha sede in Sicilia, con uno stabilimento a Vicari (PALERMO), dotato di sistemi di produzione all'avanguardia.

I nostri prodotti, vengono realizzati da una "Equipe" altamente specializzata, che segue ogni fase della produzione con grande professionalità, secondo le norme di buona fabbricazione, rispondendo pienamente ai requisiti delle norme europee.

La **LICKSON S.r.l.** dal 1996 è dotata di un sistema di Qualità Certificato. L'attuale Sistema Qualità è conforme alle seguenti Norme: UNI EN ISO 9001:2000 ed UNI EN ISO 13485: 2003, Settori EA: 12. 13. 29A.

## **I NOSTRI INDIRIZZI**

**LICKSON S.r.l.**  
**S.S. 189 (PA-AG) - C.da Pettineo,**  
**90020 VICARI (PA) - ITALY**  
**Casella Postale 90025 Lercara Friddi (PA)**

## **NUMERI TELEFONICI**

**Tel.: 0039. 091. 8252670 - 8248561**  
**Fax: 0039. 091. 8213696**

## **INDIRIZZO E-MAIL**

**Amministrazione: licksonsr1@virgilio.it**  
**Commerciale: info@lickson.com**

## **SITO WEB**

**[http: //www.lickson.com](http://www.lickson.com)**

## SISTEMA QUALITÀ

La LICKSON S.r.l. dal 1996 è dotata di un sistema di Qualità Certificato. L'attuale Sistema Qualità è conforme alle seguenti Norme:

UNI EN ISO 9001:2000  
UNI EN ISO 13485: 2003  
Settori EA: 12. 13. 29A



## SCHEDE TECNICHE

Le schede tecniche dei singoli prodotti possono essere richieste presso il nostro ufficio **Tel. 091/8252670** o possono essere consultabili sul sito Internet **www.lickson.com**, o richieste al seguente indirizzo e-mail: **info@lickson.com - licksonsr@virgilio.it**

## SCHEDE DI SICUREZZA

La classificazione dei preparati pericolosi fabbricati da LICKSON S.r.l. è stata effettuata in accordo alle Direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE, attuate con il Decreto Legislativo 14 marzo 2003 n° 65. È stata inoltre eseguita una ri-classificazione dei preparati NON considerati pericolosi in accordo alla Direttiva 1999/45/CE ma contenenti almeno una sostanza che presenti pericoli per la salute o per l'ambiente in concentrazione individuale  $\geq 1\%$ .

Per tali preparati, in accordo alla Direttiva 2001/58/CE, recepita dal Decreto del Ministero della Salute del 7/09/2002, è previsto che il fabbricante fornisca la Scheda di Sicurezza su richiesta dell'utilizzatore professionale. Le schede di sicurezza sono consultabili sul sito Internet **www.lickson.com**, o richieste al seguente indirizzo e-mail: **info@lickson.com - licksonsr@virgilio.it**

## DIRETTIVA 98/79/CE E MARCATURA CE

I Dispositivi Medici Diagnostici *in vitro* fabbricati e distribuiti dalla LICKSON S.r.l. sono immessi in commercio dal 7 dicembre 2003 in conformità al D.Lgs n° 332 del 8/9/2000 "Attuazione della Direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici *in vitro*" e sono provvisti del marchio CE.

Gran parte dei diagnostici *in vitro* fabbricati e distribuiti dalla LICKSON S.r.l. riportano le istruzioni per l'uso sull'etichetta (terreni di coltura in polvere) o includono nella confezione il foglio istruzioni per una loro utilizzazione appropriata e del tutto sicura. Per alcune linee di prodotto il cui impiego è largamente consolidato nei laboratori di microbiologia clinica (terreni pronti all'uso in piastra provetta e fialone), le istruzioni per l'uso sono consultabili sul nostro sito Internet **www.lickson.com**, o richieste al seguente indirizzo e-mail: **info@lickson.com - licksonsr@virgilio.it**

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

**ORDINI:** Gli ordini devono contenere tutte le informazioni necessarie a consentire l'identificazione univoca della richiesta di fornitura (codice prodotto, descrizione prodotto, tipo di confezione, numero di pezzi) e devono essere completi di numero d'ordine ed indirizzo di consegna e fatturazione. L'emissione dell'ordine comporta l'accettazione delle presenti condizioni generali di vendita.

**ABBONAMENTI:** Le spedizioni in abbonamento possono consentire ulteriori sensibili economie. Il nostro ufficio vendite è disponibile ad offrire, a richiesta, le soluzioni più adeguate alle Vostre esigenze.

**ORDINE MINIMO:** L'importo minimo per richieste di fornitura è **Euro 75,00 + IVA**

**PREZZI:** I prezzi indicati sul listino sono per merce resa franco Vicari e al netto di i.v.a.

**SPEDIZIONI:** Tutta la merce viaggia assicurata per il suo intero valore contro il furto e i danni. Nel caso, il destinatario è tenuto ad effettuare la riserva di accettazione direttamente al ritiro della merce o inoltrando regolare lettera raccomandata al vettore entro 48 ore dal ricevimento della stessa.

Per spedizioni con corrieri convenzionati con LICKSON, la copertura assicurativa vale anche per il mancato freddo; il reclamo va inoltrato entro 10 giorni dal ricevimento della merce.

**PAGAMENTO:** Valgono termini di pagamento indicati sulla fattura. In caso di ritardato pagamento è prevista l'applicazione degli interessi di mora al tasso ufficiale di sconto maggiorato di tre punti. Fatture non contestate entro 8 giorni dal ricevimento della merce si intendono accettate.

In caso di fornitura ripartita in più fatturazioni, il mancato o ritardato pagamento anche di una sola fattura autorizza a subordinare il proseguimento delle consegne al pagamento anticipato di ciascuna di esse.

**MODALITA' DI UTILIZZO DEI PRODOTTI:** Seguire fedelmente le istruzioni d'uso contenute nelle confezioni. E' esclusa qualsiasi responsabilità per la nostra società per eventuali conseguenze derivanti da errate modalità di impiego dei prodotti.

**RECLAMI:** Reclami devono essere formulati per iscritto, nei termini di 15 giorni dal ricevimento della merce e allegando copia della bolla di consegna. In caso di accettazione dell'oggetto del reclamo è prevista la sostituzione completa del materiale contestato.

### DECORRENZA

Il presente Catalogo ha validità a decorrere dal 1 Marzo 2010.

**CONTROVERSIE:** Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Termini Imerese (PA).

**IL PRESENTE CATALOGO LISTINO ANNULLA E SOSTITUISCE I PRECEDENTI**

## LICKSON S.r.l.

### Uffici amministrativi e Stabilimento:

S.S. 189 (PA-AG) C.da Pettineo  
90020 VICARI (PA) - ITALY  
Casella Postale 90025 Lercara Friddi (PA)  
Cap. soc. Euro 93.600,00 i.v.  
C.C.I.A.A. n. 146724  
Reg. Trib. Termini Imerese n. 2970  
C.F. e P.I. 03668810827

**Telefono:** 0039. 091. 8252670 - 8248561

**Fax:** 0039. 091. 8213696

**E-mail:** Amministrazione: licksonsr@virgilio.it  
Commerciale: info@lickson.com

**Sito web:** www.lickson.com

# BATTERIOLOGIA INDUSTRIALE

CONTENUTO	PAG
<b>1. TERRENI DI COLTURA</b>	
TERRENI DI COLTURA	8
DILUENTI PRONTI ALL'USO	28
TERRENI DI COLTURA "CROMOGENICI"	30
INGREDIENTI DI BASE	33
SUPPLEMENTI	35
SANGUE E DERIVATI	38
ANAEROBIOSI, MICROAEROFILIA E CARBOSSIFILIA	39
NUTRIENT PETRI AGAR (NPA)	40
<b>2. ANALISI AMBIENTALE</b>	
ANALISI BATTERIOLOGICA DI ARIA E SUPERFICI	47
CAMPIONAMENTO DELLE SUPERFICI	51
ANALISI BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE	55
CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE	67
FILTRAZIONE DELLE ACQUE	71
<b>3. IDENTIFICAZIONE BATTERICA</b>	
COLORAZIONI BATTERICHE	80
TEST DI IDENTIFICAZIONE	80
SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE	82
ANTISIERI	83
<b>4. CONTROLLO DI QUALITA'</b>	
CEPPI BATTERICI	86
INDICATORI PER STERILIZZAZIONE	89
<b>5. ANALISI ALIMENTARE</b>	
ANALISI ALIMENTI VARI	92
ANALISI DEL LATTE	92
ANALISI DEL VINO	95
TOSSINE BATTERICHE & TOSSINE NATURALI	98
<b>6. ACCESSORI PER BATTERIOLOGIA</b>	
MATERIALE DI CONSUMO	101
VETRERIA	101
REATTIVI VARI	109
<b>7. STRUMENTAZIONE</b>	
STRUMENTAZIONE PER BATTERIOLOGIA	111
STRUMENTAZIONE PER ANALISI CHIMICHE DELLE ACQUE	126

# **TERRENI DI COLTURA**

- ✦ **TERRENI DI COLTURA**
- ✦ **DILUENTI PRONTI ALL'USO**
- ✦ **TERRENI DI COLTURA  
"CROMOGENICI"**
- ✦ **INGREDIENTI DI BASE**
- ✦ **SUPPLEMENTI**
- ✦ **SANGUE E DERIVATI**
- ✦ **ANAEROBIOSI,  
MICROAEROFILIA  
E CARBOSSIFILIA**
- ✦ **NUTRIENT PETRI AGAR (NPA)**

# TERRENI DI COLTURA

CONTENUTO	PAG
-----------	-----

## TERRENI DI COLTURA

DISIDRATATI, PRONTI IN FLACONE, TUBI E PIASTRE PETRI	8
--	---

## DILUENTI PRONTI ALL'USO

DILUENTI PRONTI ALL'USO PER L'ANALISI ALIMENTARE	28
DILUITORI	29

## TERRENI DI COLTURA "CROMOGENICI"

DISIDRATATI, PRONTI IN FLACONE E PIASTRE PETRI	30
--	----

## INGREDIENTI DI BASE

AGAR, PEPTONI ED INGREDIENTI VARI	33
-----------------------------------	----

## SUPPLEMENTI

SUPPLEMENTI SELETTIVI LIOFILIZZATI PER TERRENI DI COLTURA	35
SUPPLEMENTI SELETTIVI LIQUIDI PER TERRENI DI COLTURA	37

## SANGUE E DERIVATI

SANGUE ANIMALE STERILE DEFIBRINATO	38
SANGUE ANIMALE STERILE IN SOLUZIONE DI ALSEVER	38
PRODOTTI DERIVATI	38

## ANAEROBIOSI, MICROAEROFILIA E CARBOSSIFILIA

REAGENTI PER GIARA	39
REAGENTI PER ANAEROBIOSI, MICROAEROFILIA E CARBOSSIFILIA	39

## NUTRIENT PETRI AGAR (NPA)

KIT (NPA) NUTRIENT PETRI AGAR (MF)	40
------------------------------------	----

## TERRENI DI COLTURA

### DISIDRATATI, PRONTI IN FLACONI, TUBI E PIASTRE PETRI

Terreni di coltura disidratati, pronti in flacone, Tubi, piastre petri e piastre da contatto.

I terreni disidratati sono anche disponibili in confezioni da **5 kg e 10 kg**. Formulazioni e/o preparazioni particolari sono eseguibili a richiesta (quantitativi da definire).

(\*) Prodotto disponibile con ordine minimo: **5 Conf.**

(°) **Solo per uso controllo microbiologia industriale.**



PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>A1 MEDIUM</b> ° Terreno selettivo per la determinazione dei coliformi fecali con il metodo MPN nell'acqua di mare, nelle acque trattate e negli alimenti.		<b>500 g</b>	<b>10017</b>
<b>A1 MEDIUM + CAMPANELLA</b>		<b>10 Tubi x 10 ml</b>	<b>5001</b>
<b>ACETAMIDE BROTH</b> ° Terreno per la prova di conferma di <i>Pseudomonas aeruginosa</i> nelle acque secondo la metodica delle membrane filtranti.	<b>ISO 12780:2002</b>	<b>500 g</b> <b>6 Flaconi x 100 ml</b> <b>10 Tubi x 5 ml</b>	<b>10300</b> <b>63302*</b> <b>5002</b>
<b>ACETATE AGAR</b> Terreno per l'isolamento di acetobatteri.		<b>2x10 Piastre ø 90 mm</b>	<b>0054535/20*</b>
<b>ACQUA DISTILLATA STERILE</b> Acqua distillata sterile per uso diagnostico.		<b>1 Flacone x 500 ml</b> <b>12 Flaconi x 200 ml</b> <b>20 Provette x 10 ml</b> <b>100 Provette x 10 ml</b>	<b>23001</b> <b>23501</b> <b>17000</b> <b>17002</b>
<b>ACQUA BIDISTILLATA STERILE</b> Acqua bidistillata sterile per uso diagnostico.		<b>1 Flacone x 500 ml</b> <b>12 Flaconi x 200 ml</b>	<b>23002</b> <b>23502</b>
<b>AEROMONAS MEDIUM (RYAN)</b> Terreno selettivo e differenziale per l'isolamento di <i>Aeromonas hydrophila</i> .			
<b>AEROMONAS MEDIUM BASE (RYAN)</b> ° <b>Ampicillin Selective Supplement (5.0 mg/lt)</b> °		<b>500 g</b> <b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>10000</b> <b>16021</b>
<b>m-AEROMONAS MEDIUM (AVELAAR)</b> Terreno selettivo e differenziale per l'isolamento di <i>Aeromonas</i> con la tecnica delle membrane filtranti (MF).			
<b>m-AEROMONAS MEDIUM BASE (AVELAAR)</b> ° <b>Ampicillin Selective Supplement (10.0 mg/lt)</b> °		<b>100 g</b> <b>500 g</b> <b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>11026</b> <b>10026</b> <b>16053</b>
<b>m-AEROMONAS SELECTIVE AGAR</b>		<b>2x10 Piastre ø 60 mm</b>	<b>0381310/20</b>
<b>AFP (ASPERGILLUS FLAVUS/PARASITICUS) AGAR</b> <sup>NEW</sup> Terreno selettivo per l'identificazione di <i>Aspergillus flavus</i> e di <i>A. parasiticus</i> .			
<b>AFP (ASPERGILLUS FLAVUS/PARASITICUS) AGAR BASE</b> ° <b>Chloramphenicol Selective Supplement (100 mg/lt)</b> °		<b>100 g</b> <b>500 g</b> <b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>11282</b> <b>10282</b> <b>16005</b>
<b>AGAR COMUNE / NUTRIENT AGAR</b> Terreno per la crescita ed il conteggio dei microorganismi.	<b>ISO 10678: 1998</b> <b>ISO 12780: 2002</b> <b>ISO 21528-2: 2004</b>	<b>100 g</b> <b>500 g</b> <b>6 Flaconi x 100 ml</b> <b>6 Flaconi x 200 ml</b> <b>10 Tubi x 10 ml</b> <b>10 Tubi x 22 ml</b> <b>2x10 Piastre ø 90 mm</b>	<b>11115</b> <b>10115</b> <b>63313</b> <b>63213</b> <b>5065</b> <b>17195*</b> <b>0024005/20</b>



**DISIDRATATI, PRONTI IN FLACONI, TUBI E PIASTRE**

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>ALKALINE PEPTONE WATER</b> Terreno di arricchimento per l'isolamento di <i>Vibrio spp.</i>		100 g 500 g 6 Flaconi x 100 ml	11123 10123 63304
<b>AMIES TRANSPORT MEDIUM</b> Terreno semi-solido per il trasporto di campioni clinici ed altro.		500 g 5 Kg	10002 13002
<b>AMIES TRANSPORT MEDIUM (W/CHARCOAL)</b> Terreno semi-solido per il trasporto di campioni clinici ed altro.		500 g 5 Kg	10009 13009
<b>ANAEROBIC AGAR</b> Terreno per la coltivazione di microrganismi anaerobi.		100 g 500 g 2x10 Piastre ø 90 mm	11006 10006 0104536/20*
<b>AZIDE DEXTROSE BROTH</b> Terreno selettivo per la determinazione degli streptococchi fecali.		100 g 500 g 6 Flaconi x 100 ml 10 Tubi x 10 ml	11005 10005 64325 5005
<b>AZIDE DEXTROSE BROTH 2x (DOPPIA CONCENTRAZIONE)</b>		10 Tubi x 10 ml	5006
<b>BACILLUS CEREUS SELECTIVE MEDIUM (MYP)</b> Terreno selettivo per l'isolamento selettivo ed il conteggio di <i>Bacillus cereus</i> .	ISO 7932: 2005		
<b>BACILLUS CEREUS AGAR BASE (MYP) ♦</b> <b>Bacillus Cereus Selective Supplement ♦</b> <b>Eggy Yolk Emulsion ♦</b>		100 g 500 g 10 Fiale x 500 ml 4 Flaconi x 50 ml	11324 10324 16018 16003
<b>BACILLUS CEREUS SELECTIVE AGAR (MYP) ♦</b>		2x10 Piastre ø 90 mm	0132901/20
<b>BACILLUS CEREUS SELECTIVE MEDIUM (PEMBA)</b> Terreno selettivo per l'isolamento selettivo ed il conteggio di <i>Bacillus cereus</i> .	ISO 7932: 1993		
<b>BACILLUS CEREUS AGAR BASE ♦</b> <b>Bacillus Cereus Selective Supplement ♦</b> <b>Eggy Yolk Emulsion ♦</b>		100 g 500 g 10 Fiale x 500 ml 4 Flaconi x 50 ml	11013 10013 16018 16003
<b>BACILLUS CEREUS SELECTIVE AGAR (PEMBA) ♦</b>		2x10 Piastre ø 90 mm	0110605/20
<b>BAIRD PARKER MEDIA</b> Terreno selettivo per l'isolamento di <i>Stafilococcus aureus</i> negli alimenti.	ISO 6888-1: 2004		
<b>BAIRD PARKER AGAR BASE ♦</b> <b>Eggy Yolk Tellurite Emulsion ♦</b>		500 g 6 Flaconi x 100 ml 2 Flaconi x 50 ml	10015 63100 16001
<b>BAIRD PARKER AGAR ♦</b>		3 Flaconi x 100 ml (+3 Suppl. x 10 ml) 2x10 Piastre ø 60 mm 2x10 Piastre ø 90 mm 5x4 Piastre ø 65 mm	63300 0321005/20 0204768/20 31024*
<b>BAIRD PARKER AGAR + NEUTRALIZZANTE</b>		5x4 Piastre ø 65 mm	31026
<b>BAIRD PARKER AGAR + SULPHAMETAZINE ♦</b> Terreno selettivo per l'isolamento di <i>Stafilococcus aureus</i> negli alimenti.		2x10 Piastre ø 90 mm	0221009/20*
<b>BAIRD PARKER MEDIA (RPF)</b> Terreno selettivo per l'identificazione degli stafilococchi coagulasi-positivi, negli alimenti.	ISO 6888-2: 2004		
<b>BAIRD PARKER AGAR BASE ♦</b> <b>R.P.F. Supplement ♦</b>		500 g 5 Fiale x 100 ml 10 Fiale x 100 ml	10015 16032 16035
<b>BAIRD PARKER AGAR (RPF) ♦</b>		6 Flaconi x 90 ml (+ 6x10 ml Suppl. RFP) 2x10 Piastre ø 90 mm	63301 0210705/20

**DISIDRATATI, PRONTI IN FLACONI, TUBI E PIASTRE**

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>BAT AGAR<sup>NEW</sup></b> Terreno per la ricerca di <i>Alicyclobacillus spp.</i> nei succhi di frutta.		500 g 2x10 Piastre ø 90 mm	10348 0221609/20*
<b>BCP (BROMOCRESOL PURPLE LACTOSE BROTH)</b> Terreno per la ricerca presuntiva dei coliformi nelle acque.		100 g 500 g	11023 10023
<b>BILE AESCULIN AGAR</b> Terreno selettivo per l'isolamento degli streptococchi di gruppo D.		100 g 500 g 2x10 Piastre ø 90 mm	11001 10001 0294879/20
<b>BILE AESCULIN BROTH</b> Terreno selettivo per l'isolamento degli streptococchi di gruppo D.		100 g 500 g 10 Tubi x 10 ml	11026 10026 5004
<b>BILE AESCULIN AZIDE AGAR<sup>◊</sup></b> Terreno per la conferma degli enterococchi nelle acque, secondo la norma ISO 7899-2: 2003.	ISO 7899-2: 2003	500 g 6 Flaconi x 100 ml 2x10 Piastre ø 60 mm 2x10 Piastre ø 90 mm	10024 63305 0341006/20 0304525/20
<b>BISMUTH SULFITE AGAR</b> Terreno selettivo per l'isolamento di Salmonella.		500 g 2x10 Piastre ø 60 mm 2x10 Piastre ø 90 mm	10025 0364174/20* 0354073/20*
<b>BLOOD AGAR MEDIA</b> Terreno per l'isolamento di microorganismi esigenti.			
<b>BLOOD AGAR BASE</b>  Sangue defibrinato di cavallo Sangue defibrinato di montone		100 g 500 g 6 Flaconi x 100 ml 6 Flaconi x 200 ml  1 Flacone x 100 ml 1 Flacone x 100 ml	11020 10020 63306 63206  5475 5459
<b>BLOOD AGAR (SANGUE DI MONTONE 5%)</b>		2x10 Piastre ø 90 mm	0404696/20
<b>BLOOD AGAR N. 2 MEDIA</b> Terreno per l'isolamento di microorganismi esigenti.	ISO 11290-1-2: 1996 Adm.1: 2004 ISO 11290-1-2: 2005		
<b>BLOOD AGAR BASE N. 2</b>  Sangue defibrinato di montone		100 g 500 g  1 Flacone x 100 ml	11022 10022  5459
<b>BLOOD AGAR N. 2 (SANGUE DI MONTONE 5%)</b>		2x10 Piastre ø 90 mm	3122902/20
<b>BRAIN HEART INFUSION AGAR</b> Terreno per la coltivazione di microorganismi esigenti.		500 g 2x10 Piastre ø 90 mm	10030 0604418/20
<b>BRAIN HEART INFUSION BROTH</b> Terreno per la coltivazione di microorganismi esigenti.	ISO 10678: 1998 ISO 6888-1: 2004	100 g 500 g 10 Tubi x 10 ml 20 Provette x 10 ml	11031 10031 5015 5015/20
<b>BRILLIANT GREEN AGAR<sup>◊</sup></b> Terreno selettivo per l'isolamento della Salmonella negli alimenti.		500 g 2x10 Piastre ø 90 mm	10035 0654285/20
<b>BRILLIANT GREEN AGAR MODIFIED<sup>◊</sup></b> Terreno selettivo per l'isolamento della Salmonella negli alimenti.	ISO 6579: 2002 /Adm.1: 2007 (E) ISO 6579: 2008	500 g 2x10 Piastre ø 90 mm	10034 0684285/20
<b>BRILLIANT GREEN BILE BROTH 2%<sup>◊</sup></b> Terreno selettivo per la determinazione dei coliformi.	ISO 6579: 2008 ISO 4832: 2006	100 g 500 g	11036 10036
<b>BRILLIANT GREEN BILE BROTH 2% + CAMPANELLA</b>		10 Tubi x 10 ml	5025
<b>BRILLIANT GREEN BILE BROTH 2% 2x<sup>◊</sup></b> <b>(DOPPIA CONCENTRAZIONE) + CAMPANELLA</b> Terreno selettivo per la determinazione dei coliformi.		10 Tubi x 10 ml	5026

**DISIDRATATI, PRONTI IN FLACONI, TUBI E PIASTRE**

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>BRODO COMUNE / NUTRIENT BROTH</b> Terreno per la crescita di microorganismi.	ISO 10678: 1998 ISO 12780: 2002 ISO 21528-2: 2004	100 g 500 g 6 Flaconi x 100 ml 10 Tubi x 10 ml 20 Provette x 10 ml 100 Provette x 10 ml	11116 10116 64311 5070 5070/20 5070/A
<b>BRUCELLA SELECTIVE MEDIA</b> Terreno per l'isolamento selettivo delle brucelle.			
<b>BRUCELLA AGAR BASE</b>  Brucella Selective Supplement Siero di cavallo ( <i>Horse serum</i> )		100 g 500 g  10 Fiale x 500 ml 1 Flacone x 100 ml	11037 10037  16020 16004
<b>BRUCELLA SELECTIVE AGAR</b>		2x10 Piastre ø 90 mm	0694179/20*
<b>BRUCELLA BROTH BASE</b>  Brucella Selective Supplement Siero di cavallo ( <i>Horse serum</i> )		100 g 500 g  10 Fiale x 500 ml 1 Flaconi x 100 ml	11302 10302  16020 16004
<b>BUFFERED PEPTONE WATER</b> ♦ Terreno per il prearricchimento di Salmonella.	ISO 6579: 2002 /Adm.1: 2007 (E) ISO 6579: 2008	100 g 500 g 5 Kg 6 Flaconi x 90 ml 6 Flaconi x 225 ml 12 Flaconi x 225 ml 10 Tubi x 9 ml	11041 10041 13041 64130* 23248 23548 5027
<b>CAMPYLOBACTER SELECTIVE ENRICHMENT BROTH</b> Terreno selettivo per l'arricchimento di Campylobacter			
<b>NUTRIENT BROTH N. 2</b>  Siero di cavallo laccato ( <i>Laked horse blood</i> ) Campylobacter Growth Supplement Campylobacter Selective Supplement (Preston)		100 g 500 g  1 Flacone x 100 ml 10 Fiale x 500 ml 10 Fiale x 500 ml	11232 10232  16032 16022 16030
<b>CAMPYLOBACTER SELECTIVE MEDIA (BLASER-WANG)</b> Terreno selettivo per l'isolamento di <i>Campylobacter</i> spp.			
<b>CAMPYLOBACTER AGAR BASE</b>  Sangue di montone defibrinato Campylobacter <u>Growth</u> Supplement Campylobacter Selective Supplement ( <i>Blaser-Wang</i> )		100 g 500 g  1 Flacone x 100 ml 10 Fiale x 500 ml 10 Fiale x 500 ml	11032 10032  5459 16022 16024
<b>CAMPYLOBACTER SELECTIVE MEDIA (BLASER-WANG)</b> + (SANGUE MONTONE 5 %)		2x10 Piastre ø 90 mm	0720706/20*
<b>CAMPYLOBACTER ENRICHMENT BROTH (BOLTON)</b> <sup>NEW</sup> Terreno selettivo per l'isolamento di <i>Campylobacter</i> spp negli alimenti	ISO 10272-1: 2006		
<b>CAMPYLOBACTER ENRICHMENT BROTH BASE (BOLTON)</b>  Campylobacter Selective Supplement (Bolton)		100 g 500 g  10 Fiale x 500 ml	11340 10340  16052
<b>CAMPYLOBACTER BLOOD FREE SELECTIVE AGAR (CCDA BOLTON)</b> <sup>NEW</sup> Terreno selettivo per l'isolamento di <i>Campylobacter</i> spp negli alimenti.	ISO 10272-1: 2006		
<b>CAMPYLOBACTER BLOOD FREE AGAR BASE (CCDA BOLTON)</b>  Campylobacter Selective Supplement (CCDA Bolton)		100 g 500 g  10 Fiale x 500 ml	11343 10343  16054
<b>CAMPYLOBACTER BLOOD FREE SELECTIVE AGAR (CCDA BOLTON)</b>		2x10 Piastre ø 90 mm	3132903/20*

**DISIDRATATI, PRONTI IN FLACONI, TUBI E PIASTRE**

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>CAMPYLOBACTER SELECTIVE MEDIA (BUTZLER)</b> Terreno selettivo per l'isolamento di <i>Campylobacter spp.</i>			
<b>CAMPYLOBACTER AGAR BASE</b>		100 g 500 g	11232 10232
Siero di cavallo laccato ( <i>Laked horse blood</i> ) Campylobacter Growth Supplement Campylobacter Selective Supplement (Butzler)		1 Flacone x 100 ml 10 Fiale x 500 ml 10 Fiale x 500 ml	16032 16032 16026
<b>CAMPYLOBACTER SELECTIVE MEDIA (KARMALI)</b> Terreno selettivo per l'isolamento di <i>Campylobacter jejuni</i> e di <i>Campylobacter coli</i> da campioni clinici.			
<b>CAMPYLOBACTER AGAR BASE (KARMALI)</b>		100 g 500 g	11028 10028
Campylobacter Selective Supplement (Karmali)		10 Fiale x 500 ml	16028
<b>CAMPYLOBACTER SELECTIVE AGAR (KARMALI)</b>		2x10 Piastre ø 90 mm	0730707/20*
<b>CAMPYLOBACTER SELECTIVE MEDIA (PRESTON)</b> Terreno selettivo per l'isolamento di <i>Campylobacter spp.</i> da campioni di origine umana, animale e ambientale.			
<b>CAMPYLOBACTER AGAR BASE</b>		100 g 500 g	11032 10032
Siero di cavallo laccato ( <i>Laked horse blood</i> ) Campylobacter Growth Supplement Campylobacter Selective Supplement (Preston)		1 Flacone x 100 ml 10 Fiale x 500 ml 10 Fiale x 500 ml	16032 16022 16030
<b>CAMPYLOBACTER SEL. AGAR (PRESTON) + Laked Horse Blood 5 %</b>		2x10 Piastre ø 90 mm	0704279/20*
<b>CAMPYLOBACTER SELECTIVE MEDIA (SKIRROW)</b> Terreno selettivo per l'isolamento di <i>Campylobacter spp.</i>			
<b>CAMPYLOBACTER AGAR BASE</b>		100 g 500 g	11032 10032
Siero di cavallo laccato ( <i>Laked horse blood</i> ) Campylobacter Growth Supplement Campylobacter Selective Supplement (Skirrow)		1 Flacone x 100 ml 10 Fiale x 500 ml 10 Fiale x 500 ml	16032 16022 16031
<b>CAMPYLOBACTER SEL. AGAR (SKIRROW) + Laked Horse Blood 5%</b>		2x10 Piastre ø 90 mm	0710705/20*
<b>CETRIMIDE (PSEUDOMONAS) MEDIUM → VEDI PSEUDOMONAS SELECTIVE MEDIA</b>			
<b>CHINA BLUE LACTOSE AGAR</b> Terreno per il conteggio dei batteri nel latte.		500 g	10042
<b>COLUMBIA MEDIA</b> Terreno per l'isolamento di microorganismi esigenti.	ISO 10272-1: 2006		
<b>COLUMBIA BLOOD AGAR BASE</b>		100 g 500 g 6 Flaconi x 100 ml 6 Flaconi x 200 ml	11050 10050 63316 63126
Sangue defibrinato di monotone		1 Flacone x 100 ml	5459
<b>COLUMBIA BLOOD AGAR + SANGUE DI MONTONE 5%</b>		2x10 Piastre ø 90 mm	0454792/20
<b>m-CP (Membrane Clostridium Perfringens) MEDIUM</b> Terreno selettivo per l'isolamento di <i>Clostridium perfringens</i> nelle acque, secondo il <b>D. L. 2/2/2001 n° 31.</b>	D. L. 2/2/2001 n° 31		
<b>m-CP (Membrane Clostridium Perfringens) AGAR BASE<sup>◊</sup></b>		100 g 500 g	11063 10063
m-CP Selective Supplement <sup>◊</sup> m-CP Soluzione A (1/500 g) <sup>◊</sup> m-CP Soluzione B (1/500 g) <sup>◊</sup> m-CP Soluzione C (1/500 g) <sup>◊</sup>		10 Fiale x 500 ml 1 Fiala (750 mg) 1 Fiala (700 mg) 1 Fiala (450 mg)	16048 16050 16051 16049
<b>m-CP (Membrane Clostridium Perfringens) AGAR<sup>◊</sup></b>		2x10 Piastre ø 60 mm	0382202/20

**DISIDRATATI, PRONTI IN FLACONI, TUBI E PIASTRE**

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>CYSTINE TRYPTIC AGAR (CTA)</b> Terreno per la coltivazione ed il mantenimento di microorganismi.	ISO 10678: 1998	100 g 500 g 6 Flacons x 100 ml 10 Tubi x 10 ml	11053 10053 63337 5029
<b>CZAPEK DOX AGARMODIFIED</b> Terreno selettivo per la coltivazione di funghi saprofiti.		500 g	10058
<b>CZAPEK DOX BROTH MEDIUM MODIFIED</b> Terreno selettivo per la coltivazione di funghi saprofiti.		500 g	10059
<b>DESOXYCHOLATE AGAR</b> Terreno selettivo per l'isolamento degli enterobatteri.		100 g 500 g 2x10 Piastre ø 90 mm	11060 10060 1054274/20
<b>DESOXYCHOLATE CITRATE AGAR (HYNES)</b> Terreno selettivo per l'isolamento degli enterobatteri.		500 g 2x10 Piastre ø 90 mm	10065 1071811/20
<b>DEXTROSE TRYPTONE AGAR</b> ♦ Terreno per la determinazione e il conteggio di microorganismi termofili e mesofili in prodotti alimentari.		100 g 500 g 6 Flacons x 100 ml 2x10 Piastre ø 60 mm 5x4 Piastre ø 65 mm	11073 10073 63309 0392210/20 31027*
<b>DEXTROSE TRYPTONE BROTH</b> ♦ Terreno per la determinazione e il conteggio di microorganismi termofili e mesofili in prodotti alimentari.		100 g 500 g	11072 10072
<b>DEXTROSE TRYPTONE BROTH + CAMPANELLA</b>		10 Tubi x 10 ml	5035*
<b>DICHLORAN-GLYGEROL (DG18) AGAR</b> <sup>New</sup> Terreno per la ricerca di muffe xerofile in alimenti anidri o semi-solidi.	ISO 21527-2: 2008		
<b>DICHLORAN-GLYGEROL (DG18) AGAR BASE</b> Chloramphenicol Selective Supplement (50 mg)		500 g 10 Fiale x 500 ml	10143 16005
<b>DICHLORAN-GLYGEROL (DG18) AGAR</b>		6 Flacons x 100 ml 6 Flacons x 200 ml	63380 63280
<b>DNase TEST AGAR</b> Terreno per la ricerca dell'attività desossiribonucleasi (Dnase) nei microorganismi.	ISO 10678: 1998	500 g	10070
<b>DICHLORAN ROSE-BENGAL CHLORAMPHENICOL (DRBC) AGAR</b> Terreno per la ricerca di muffe e lieviti che causano il deterioramento degli alimenti.	ISO 21527-1: 2008		
<b>DRBC AGAR BASE</b> Chloramphenicol Selective Supplement (50 mg)		500 g 10 Fiale x 500 ml	10144 16005
<b>DICHLORAN ROSE-BENGAL CHLORAMPHENICOL (DRBC) AGAR</b>		6 Flacons x 100 ml 6 Flacons x 200 ml	63385 63285
<b>E.C. BROTH (APHA)</b> ♦ Terreno selettivo per la ricerca dei coliformi.		100 g 500 g	11074 10074
<b>E.C. BROTH + CAMPANELLA</b> ♦		10 Tubi x10 ml	5036*
<b>E.C. BROTH + MUG</b> ♦ Terreno selettivo fluorogenico per la ricerca dei coliformi e di <i>E. Coli</i> .			
<b>E.C. BROTH (APHA)</b> ♦		500 g	10074
<b>MUG Supplement</b>		10 Fiale x 500 ml	16015
<b>E.E. BROTH</b> ♦ Terreno per l'arricchimento selettivo degli enterobatteri.	ISO 21528-1: 2004	100 g 500 g	11077 10077

**DISIDRATATI, PRONTI IN FLACONI, TUBI E PIASTRE**

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>m-ENDO AGAR MEDIA</b> Terreno per la determinazione di coliformi nelle acque.			
<b>m-ENDO AGAR (BASE) ♦</b> <b>Fucsina Basica Soluzione 10 % ♦</b>		<b>500 g</b> <b>10 Fiale x 8 ml</b>	<b>10080</b> <b>16088</b>
<b>m-ENDO AGAR LES MEDIA (APHA)</b> Terreno per la determinazione di coliformi nelle acque.	<b>APAT CNR IRSA</b> <b>7010 Met. C</b> <b>Man 29 2003</b>		
<b>m-ENDO AGAR LES (BASE) ♦</b> <b>Fucsina Basica Soluzione 10 % ♦</b>		<b>500 g</b> <b>10 Fiale x 8 ml</b>	<b>10076</b> <b>16088</b>
<b>m – ENDO AGAR LES (APHA) ♦</b>		<b>2x10 Piastre ø 60 mm</b>	<b>1234836/20</b>
<b>m-ENDO BROTH (BASE) ♦</b> <b>Fucsina Basica Soluzione 10 % ♦</b>		<b>100 g</b> <b>500 g</b> <b>10 Fiale x 8 ml</b>	<b>11081</b> <b>10081</b> <b>16088</b>
<b>m-ENTEROCOCCUS (Slanetz and bartley) AGAR → VEDI SLANETZ &amp; BARTLEY AGAR</b>			
<b>E.V.A. (ETHYL VIOLET AZIDE) BROTH ♦</b> Terreno selettivo per la ricerca degli enterococchi.		<b>100 g</b> <b>500 g</b> <b>10 Tubi x 10 ml</b>	<b>11086</b> <b>10086</b> <b>5040</b>
<b>E.V.A. (ETHYL VIOLET AZIDE) BROTH 2x ♦ (DOPPIA CONCENTRAZIONE)</b> Terreno selettivo per la ricerca degli enterococchi.		<b>10 Tubi x 10 ml</b>	<b>5041*</b>
<b>m – FAECAL COLIFORM MEDIA</b> Terreno selettivo per l'isolamento ed il conteggio dei coliformi fecali.	<b>APAT CNR IRSA</b> <b>7010 Met. B</b> <b>Man 29 2003</b>		
<b>m – FC (FAECAL COLIFORM) AGAR BASE ♦</b> <b>Acido Rosolico Supplement 1 % ♦</b>		<b>100 g</b> <b>500 g</b> <b>10 Fiale x 0,1 g</b>	<b>11082</b> <b>10082</b> <b>16090</b>
<b>m – FC (FAECAL COLIFORM) AGAR (W/O ACIDO ROSOLICO) ♦</b>		<b>2x10 Piastre ø 60 mm</b>	<b>2061706/20*</b>
<b>m – FC (FAECAL COLIFORM) AGAR (WITH ACIDO ROSOLICO) ♦</b>		<b>6 Flacons x 100 ml</b> <b>2x10 Piastre ø 60 mm</b> <b>5x4 Piastre ø 65 mm</b>	<b>63334</b> <b>2054678/20</b> <b>31007</b>
<b>m – FC (FAECAL COLIFORM) BROTH BASE ♦</b> <b>Acido Rosolico Supplement 1 % ♦</b>		<b>100 g</b> <b>500 g</b> <b>10 Fiale x 0,1 g</b>	<b>11083</b> <b>10083</b> <b>16090</b>
<b>FISIOLOGICA SOLUZIONE STERILE</b> Soluzione fisiologica sterile per uso diagnostico.		<b>1 Flacone x 500 ml</b> <b>12 Flacons x 200 ml</b> <b>20 Provette x 10 ml</b> <b>100 Provette x 10 ml</b>	<b>23026</b> <b>23526</b> <b>17035/20</b> <b>17037</b>
<b>Fluid THIOGLYCOLLATE MEDIUM (USP)</b> Terreno per i test di sterilità		<b>100 g</b> <b>500 g</b> <b>10 Tubi x 10 ml</b>	<b>11180</b> <b>10180</b> <b>5054</b>
<b>GELATIN PEPTONE AGAR (AGAR GELISATO) ♦</b> Terreno per il conteggio batterico totale, secondo il <b>O.M. 11/10/78 n° 346.</b>	<b>O.M. 11/10/78 n° 346.</b>	<b>100 g</b> <b>500 g</b> <b>10 Tubi x 22 ml</b> <b>2x10 Piastre ø 90 mm</b>	<b>11019</b> <b>10019</b> <b>17180*</b> <b>1261212/20*</b>
<b>GIOLITTI CANTONI MEDIA</b> Terreno per l'arricchimento di Staphylococcus aureus.	<b>ISO 6888-3: 2003</b>		
<b>GIOLITTI CANTONI BROTH BASE ♦</b> <b>TELLURITO DI POTASSIO 3.5 % ♦</b>		<b>500 g</b> <b>1 Flacone x 20 ml</b>	<b>10230</b> <b>16072</b>
<b>GIOLITTI CANTONI BROTH</b>		<b>10 Tubi x 10 ml</b>	<b>5045</b>
<b>GIOLITTI CANTONI BROTH 2x (DOPPIA CONCENTRAZIONE)</b>		<b>10 Tubi x 10 ml</b>	<b>5046*</b>

**DISIDRATATI, PRONTI IN FLACONI, TUBI E PIASTRE**

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>GLICEROL BROTH (NUTRIENT AGAR + GLICEROLO) <sup>NEW</sup></b> Terreno per controllo di qualità terreni di coltura per la ricerca legionella nelle acque.	<b>ISO 11731-2: 2004</b>	<b>6 Flaconi x 200 ml</b>	<b>63216*</b>
<b>GLUCOSE AGAR → VEDI PURPLE GLUCOSE AGAR</b>			
<b>G.N. HAJNA BROTH</b> Terreno per l'arricchimento degli enterobatteri.		<b>100 g 500 g 10 Tubi x 10 ml</b>	<b>11079 10079 5055*</b>
<b>HALOPHILIC AGAR <sup>NEW</sup></b> Terreno per l'isolamento di halophilic bacteria.		<b>500 g</b>	<b>10283</b>
<b>HALOPHILIC BROTH <sup>NEW</sup></b> Terreno per l'isolamento di halophilic bacteria.		<b>500 g</b>	<b>10284</b>
<b>HEKTOEN ENTERIC AGAR</b> Terreno selettivo per l'isolamento dei patogeni intestinali.		<b>500 g 6 Flaconi x 100 ml 2x10 Piastre ø 90 mm</b>	<b>10085 63320 1304853/20</b>
<b>HERELLEA AGAR</b> Terreno selettivo per l'isolamento di batteri gram negativi.		<b>2x10 Piastre ø 90 mm</b>	<b>1354909/20</b>
<b>IRON AGAR SULPHITE AGAR <sup>◇</sup></b> Terreno per la determinazione degli anaerobi termofili.		<b>100 g 500 g</b>	<b>11084 10084</b>
<b>KANAMYCIN AESCULIN AZIDE AGAR BASE</b> Terreno per l'isolamento degli enterococchi negli alimenti.			
<b>KANAMYCIN AESCULIN AZIDE AGAR BASE <sup>◇</sup></b>		<b>100 g 500 g</b>	<b>11194 10194</b>
<b>Kanamycin Selective Supplement <sup>◇</sup></b>		<b>10 Fiale x 2 ml</b>	<b>16009</b>
<b>KF-STREPTOCOCCUS MEDIA</b> Terreno per l'isolamento ed il conteggio degli streptococchi fecali.			
<b>KF-STREPTOCOCCUS AGAR BASE <sup>◇</sup></b>		<b>500 g</b>	<b>10999</b>
<b>TTC Soluzione 1 % <sup>◇</sup></b>		<b>5 Fiale x 10 ml</b>	<b>16071</b>
<b>KF STREPTOCOCCUS AGAR + TTC</b>		<b>2x10 Piastre ø 60 mm 2x10 Piastre ø 90 mm</b>	<b>1504497/20 1454496/20*</b>
<b>KINGS A MEDIUM (PSEUDOMONAS P) <sup>◇</sup></b> Terreno per la conta e l'identificazione di <i>Pseudomonas aeruginosa</i> nelle acque secondo la metodica delle membrane filtranti (MF).	<b>ISO 12780: 2002</b>	<b>500 g 10 Tubi x 5 ml</b>	<b>10366 5154*</b>
<b>KINGS B MEDIUM (PSEUDOMONAS S) <sup>◇</sup></b> Terreno per la conta e l'identificazione di <i>Pseudomonas aeruginosa</i> nelle acque secondo la metodica delle membrane filtranti (MF).	<b>ISO 12780: 2002</b>	<b>500 g 10 Tubi x 5 ml 2x10 Piastre ø 60 mm 2x10 Piastre ø 90 mm</b>	<b>10298 5156* 3270706/20* 3280806/20*</b>
<b>KLIGLER IRON AGAR</b> Terreno differenziale per l'identificazione degli enterobatteri.		<b>500 g 10 Tubi x 10 ml</b>	<b>10094 5020</b>
<b>LACTOSE BROTH <sup>◇</sup></b> Terreno per la ricerca dei coliformi.		<b>100 g 500 g 6 Flaconi x 200 ml</b>	<b>11093 10093 63274</b>
<b>LACTOSE BROTH + CAMPANELLA <sup>◇</sup></b>		<b>10 Tubi x 10 ml</b>	<b>5050</b>
<b>LACTOSE BROTH 2x (DOPPIA CONCENTRAZIONE) + CAMPANELLA <sup>◇</sup></b>		<b>10 Tubi x 10 ml</b>	<b>5051*</b>
<b>LACTOSE GELATIN MEDIUM <sup>◇</sup></b> Terreno per le prove del lattosio e della gelatina su <i>Clostridium perfringens</i> .	<b>ISO 7937: 2005</b>	<b>500 g 6 Flaconi x 200 ml</b>	<b>10237 63272</b>
<b>LACTOSE SULFITE BROTH (LS) <sup>◇</sup></b> Terreno per le prove del lattosio e dei solfiti per la conferma di <i>C. Perfringens</i> negli alimenti.	<b>ISO 7937: 2005</b>	<b>100 g 500 g</b>	<b>11346 10346</b>
<b>LACTOSE SULFITE BROTH (LS) <sup>◇</sup> + CAMPANELLA <sup>◇</sup></b>		<b>10 Tubi x 10 ml</b>	<b>5052</b>



**DISIDRATATI, PRONTI IN FLACONI, TUBI E PIASTRE**

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>LAURYL (TRYPTOSE) SULFATE BROTH</b> Terreno per la ricerca dei coliformi.	<b>ISO 4831: 1991</b> <b>ISO 7251: 1994</b> <b>ISO 11866-1: 1997</b>	<b>100 g</b> <b>500 g</b> <b>10 Tubi x 10 ml</b>	<b>11101</b> <b>10101</b> <b>5022</b>
<b>LAURYL (TRYPTOSE) SULFATE BROTH + CAMPANELLA</b> ◊		<b>10 Tubi x 10 ml</b>	<b>5023*</b>
<b>LAURYL SULPHATE TRYPTOSE BROTH Modified (mLST)</b> Terreno d'arricchimento selettivo per la ricerca specifica di <i>Cronobacter</i> ( <i>Enterobacter</i> ) <i>sakazakii</i> .	<b>ISO 22964: 2006</b>	<b>500 g</b>	<b>10354</b>
<b>VANCOMICINA Selective Supplement (10 mg/lt)</b>		<b>10 Fiale x 100 ml</b>	<b>16043</b>
<b>LEGIONELLA BCYE MEDIA</b> (Buffered Charcoal Yeast Extract Agar) Terreno non selettivo per la ricerca di <i>Legionella</i> spp.	<b>ISO 11731-2: 2004</b>		
<b>LEGIONELLA CYE AGAR BASE</b> ◊		<b>100 g</b> <b>500 g</b> <b>6 Flaconi x 90 ml</b>	<b>11119</b> <b>10119</b> <b>63131</b>
<b>Legionella (BCYE) α-Growth Supplement</b> ◊		<b>10 Fiale x 100 ml</b> <b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16011</b> <b>16089</b>
<b>Legionella (BCYE) α-Growth Supplement (W/O L-CYSTEINE)</b> ◊		<b>10 Fiale x 100 ml</b> <b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16087</b> <b>16138</b>
<b>LEGIONELLA BCYE AGAR</b> ◊	<b>ISO 11731- 2: 2004</b>	<b>2x10 Piastre ø 90 mm</b> <b>5x4 Piastre ø 65 mm</b>	<b>1554183/20</b> <b>31030</b>
<b>LEGIONELLA BCYE AGAR (W/O L-CYSTEINE)</b> ◊	<b>ISO 11731- 2: 2004</b>	<b>2x10 Piastre ø 90 mm</b> <b>5x4 Piastre ø 65 mm</b>	<b>1592308/20</b> <b>31032*</b>
<b>LEGIONELLA SELECTIVE MEDIUM (BMPA)</b> Terreno per l'isolamento selettivo di <i>Legionella</i> spp.			
<b>LEGIONELLA CYE AGAR BASE</b> ◊		<b>100 g</b> <b>500 g</b> <b>6 Flaconi x 90 ml</b>	<b>11119</b> <b>10119</b> <b>63131</b>
<b>Legionella (BCYE) α Growth Supplement</b> ◊		<b>10 Fiale x 100 ml</b> <b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16011</b> <b>16089</b>
<b>Legionella (BMPA) Selective Supplement</b> ◊		<b>10 Fiale x 100 ml</b> <b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16085</b> <b>16136</b>
<b>LEGIONELLA SELECTIVE MEDIUM (GVPC)</b> Terreno per l'isolamento selettivo di <i>Legionella</i> spp da campioni di origine ambientale.	<b>ISO 11731- 2: 2004</b>		
<b>LEGIONELLA CYE AGAR BASE</b> ◊		<b>100 g</b> <b>500 g</b> <b>6 Flaconi x 90 ml</b>	<b>11119</b> <b>10119</b> <b>63131</b>
<b>Legionella (BCYE) α-Growth Supplement</b> ◊		<b>10 Fiale x 100 ml</b> <b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16011</b> <b>16089</b>
<b>Legionella (GVPC) Selective Supplement</b> ◊		<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16083</b>
<b>LEGIONELLA SELECTIVE AGAR (GVPC)</b> ◊	<b>ISO 11731- 2: 2004</b>	<b>2x10 Piastre ø 60 mm</b> <b>2x10 Piastre ø 90 mm</b> <b>5x4 Piastre ø 65 mm</b>	<b>1822110/20</b> <b>1601604/20</b> <b>31034*</b>
<b>LEGIONELLA SELECTIVE MEDIUM MWY( Modified Wadowsky Yee)</b> Terreno per l'isolamento selettivo di <i>L. pneumophila</i> nei campioni di acqua potabile.			
<b>LEGIONELLA CYE AGAR BASE</b> ◊		<b>100 g</b> <b>500 g</b> <b>6 Flaconi x 90 ml</b>	<b>11119</b> <b>10119</b> <b>63131</b>
<b>Legionella BCYE α Growth Supplement</b> ◊		<b>10 Fiale x 100 ml</b>	<b>16011</b>
<b>Legionella (MWY) Selective Supplement</b> ◊		<b>10 Fiale x 100 ml</b>	<b>16086</b>



**DISIDRATATI, PRONTI IN FLACONI, TUBI E PIASTRE**

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>LISTERIA BUFFERED ENRICHMENT MEDIUM</b> Terreno di arricchimento per l'isolamento di <i>Listeria monocytogenes</i> .			
<b>LISTERIA BUFFERED ENRICHMENT BROTH BASE</b> ♦		<b>100 g</b> <b>500 g</b>	<b>11038</b> <b>10038</b>
<b>Listeria Selective Enrichment Supplement (FDA)</b> ♦		<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16062</b>
<b>LISTERIA SELECTIVE ENRICHMENT MEDIUM (FDA)</b> Terreno di arricchimento per l'isolamento di <i>Listeria monocytogenes</i> .			
<b>LISTERIA ENRICHMENT BROTH BASE (FDA)</b> ♦		<b>100 g</b> <b>500 g</b>	<b>11202</b> <b>10202</b>
<b>Listeria Selective Enrichment Supplement (FDA)</b> ♦		<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16062</b>
<b>LISTERIA ENRICHMENT BROTH (FDA)</b> ♦		<b>6 Flacons x 225 ml</b> <b>10 Tubi x 10 ml</b>	<b>64225</b> <b>5059</b>
<b>LISTERIA SELECTIVE ENRICHMENT MEDIUM (UVM)</b> Terreno di arricchimento per l'isolamento di <i>Listeria monocytogenes</i>			
<b>LISTERIA ENRICHMENT BROTH BASE (UVM)</b> ♦		<b>500 g</b>	<b>10203</b>
<b>Listeria Primary Selective Enrichment Supplement (UVM I)</b> ♦		<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16016</b>
<b>Listeria Secondary Selective Enrichment Supplement (UVM II)</b> ♦		<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16017</b>
<b>LISTERIA FRASER MEDIUM</b> Terreno di arricchimento per l'isolamento di <i>Listeria monocytogenes</i> negli alimenti.	<b>ISO 11290-1:</b> <b>1996</b>		
<b>LISTERIA FRASER BROTH BASE</b> ♦		<b>100 g</b> <b>500 g</b>	<b>11206</b> <b>10206</b>
<b>Listeria Fraser Selective Supplement</b> ♦		<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16019</b>
<b>LISTERIA FRASER BROTH</b> ♦	<b>ISO 11290-1:</b> <b>1996</b>	<b>6 Flacons x 225 ml</b> <b>12 Flacons x 225 ml</b> <b>10 Tubi x 10 ml</b>	<b>64226</b> <b>64526</b> <b>5058</b>
<b>LISTERIA HALF FRASER MEDIUM</b> Terreno di arricchimento per l'isolamento di <i>Listeria monocytogenes</i> negli alimenti.	<b>ISO 11290-1:</b> <b>1996</b> <b>ISO 11290-1:</b> <b>2005</b>		
<b>LISTERIA FRASER BROTH BASE</b> ♦		<b>100 g</b> <b>500 g</b>	<b>11206</b> <b>10206</b>
<b>Listeria Half Fraser Selective Supplement (1/2 conc.)</b> ♦		<b>10 Fiale x 225 ml</b>	<b>16029</b>
<b>LISTERIA HALF FRASER BROTH 1/2 Conc</b> ♦		<b>6 Flacons x 225 ml</b> <b>12 Flacons x 225 ml</b> <b>10 Tubi x 10 ml</b>	<b>64228</b> <b>64528</b> <b>5056</b>
<b>LISTERIA SELECTIVE MEDIUM (OXFORD)</b> Terreno selettivo per l'isolamento di <i>Listeria monocytogenes</i> .	<b>ISO 11290-1-2:</b> <b>1996</b>		
<b>LISTERIA SELECTIVE AGAR BASE (OXFORD)</b> ♦		<b>500 g</b>	<b>10096</b>
<b>Listeria Selective Supplement (Oxford) (con cicloeximide)</b>		<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16012</b>
<b>LISTERIA SELECTIVE AGAR (OXFORD)</b> ♦		<b>6 Flacons x 100 ml</b> <b>6 Flacons x 200 ml</b> <b>2x10 Piastre ø 90 mm</b> <b>5x4 Piastre ø 65 mm</b>	<b>63333</b> <b>63233</b> <b>1530397/20</b> <b>31016*</b>
<b>LISTERIA SELECTIVE MEDIUM (PALCAM)</b> Terreno selettivo per l'isolamento di <i>Listeria monocytogenes</i> .	<b>ISO 11290-1-2:</b> <b>1996</b>		
<b>LISTERIA SELECTIVE AGAR BASE (PALCAM)</b> ♦		<b>500 g</b>	<b>10124</b>
<b>Listeria (PALCAM) Selective Supplement</b> ♦		<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16057</b>
<b>LISTERIA SELECTIVE AGAR (PALCAM)</b> ♦		<b>6 Flacons x 100 ml</b> <b>2x10 Piastre ø 90 mm</b>	<b>63331</b> <b>1580602/20</b>

**DISIDRATATI, PRONTI IN FLACONI, TUBI E PIASTRE**

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>LITMUS MILK</b> Terreno differenziale per test batteriologici su prodotti lattiero caseari.		500 g	10097
<b>LYSINE IRON AGAR</b> Terreno differenziale per l'identificazione degli enterobatteri.		100 g 500 g 10 Tubi x 10 ml	11092 10092 5049
<b>M 17 AGAR</b> ♦ Terreno per il conteggio degli streptococchi lattici.		500 g 2x10 Piatre ø 90 mm	10113 1854857/20*
<b>M 17 BROTH</b> ♦ Terreno per il conteggio degli streptococchi lattici.		100 g 500 g	11114 10114
<b>MAC CONKEY AGAR (W/O CRYSTAL VIOLET)</b> Terreno selettivo per l'isolamento dei coliformi.		500 g	10100
<b>MAC CONKEY AGAR (W/O SALT)</b> Terreno selettivo per l'isolamento dei coliformi.		500 g	10214
<b>MAC CONKEY AGAR N. 2</b> Terreno selettivo per l'isolamento dei coliformi.		500 g 2x10 Piatre ø 90 mm	10112 1663103/20*
<b>MAC CONKEY AGAR N. 3 (APHA) (With CRYSTAL VIOLET)</b> Terreno selettivo per l'isolamento dei coliformi.		500 g 6 Flacons x 100 ml 6 Flacons x 200 ml 2x10 Piatre ø 90 mm 5x4 Piatre ø 65 mm	10212 63312 63221 1654075/20 31015
<b>MAC CONKEY AGAR + MUG</b> Terreno selettivo per l'isolamento di <i>Escherichia coli</i> .		2x10 Piatre ø 90 mm	1664012/20
<b>MAC CONKEY SORBITOL AGAR</b> ♦ Terreno selettivo per l'isolamento di <i>Escherichia coli</i> 0157:H7.		500 g 2x10 Piatre ø 90 mm	10216 1674012/20
<b>E. COLI O157 (CEFEXIME-TELLURITE) Selective Supplement</b>		10 Fiale x 500 ml	16040
<b>MAC CONKEY BROTH</b> ♦ Terreno selettivo per l'isolamento dei coliformi.		100 g 500 g	11102 10102
<b>MAC CONKEY PURPLE BROTH (USP)</b> ♦ Terreno selettivo per l'isolamento di <i>E. coli</i> da prodotti farmaceutici non sterili.		100 g 500 g 6 Flacons x 100 ml	11122 10122 63351*
<b>MALT EXTRACT AGAR</b> Terreno per l'isolamento di lieviti e muffe.		500 g 2x10 Piatre ø 90 mm	10104 1704024/20*
<b>MALT EXTRACT BROTH</b> Terreno per l'isolamento di lieviti e muffe.		100 g 500 g	11220 10220
<b>MANNITOL SALT AGAR</b> Terreno selettivo per l'isolamento di stafilococchi patogeni.		500 g 6 Flacons x 100 ml 6 Flacons x 200 ml 2x10 Piatre ø 60 mm 2x10 Piatre ø 90 mm 5x4 Piatre ø 65 mm	10105 63323 63223 1814407/20* 1804306/20 31025
<b>MARINE AGAR</b> Terreno per il conteggio e l'isolamento di heterotrophic marine.		500 g	10332
<b>MAXIMUM RECOVERY DILUENT</b> ♦ Diluyente isotonic per il recupero ottimale dei microorganismi .	ISO 6887-1: 2000 ISO 7932: 2005	100 g 500 g 6 Flacons x 200 ml 6 Flacons x 225 ml 12 Flacons x 225 ml 10 Tubi x 9 ml	11276 10276 63339 63439 63539 5160
<b>M-BROTH</b>		10 Tubi x 10 ml	5068
<b>MILK PLATE COUNT AGAR</b> ♦ Terreno per la determinazione della carica batterica totale nei prodotti lattiero-caseari	ISO/DIS 6610 – DIN 10192	500 g 6 Flacons x 100 ml	10129 63370

**DISIDRATATI, PRONTI IN FLACONI, TUBI E PIASTRE**

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>MINERALS MODIFIED GLUTAMATE MEDIUM</b> Terreno per l'enumerazione dei coliformi e di <i>E.coli</i> <i>E.coli</i> beta glucuronidasi positivo nelle acque (ISO 16649-3)	ISO 16649-3		
<b>MINERALS MODIFIED GLUTAMATE MEDIUM BASE</b>		500 g	10222
<b>SODIUM GLUTAMATE</b>		1 x 300 g	15120
<b>MOTILITY NITRATE BROTH</b> Terreno per le prove della mobilità edei nitrati su <i>C. Perfringens</i> .	ISO 7937: 2005	500 g 10 Tubi x 10 ml	10128 5061
<b>MOTILITY TEST MEDIUM</b> Terreno per la determinazione della mobilità batterica.	ISO 11290-1: 1996	10 Tubi x 10 ml	5067
<b>M.R.S. AGAR</b> ♦ Terreno per l'isolamento dei lattobacilli.	ISO 15214: 1998	500 g 6 Flacons x 100 ml 6 Flacons x 200 ml 10 Tubi x 22 ml 2x10 Piastre ø 90 mm	10224 63324* 63234* 17200* 2104660/20*
<b>M.R.S. BROTH</b> ♦ Terreno per l'isolamento dei lattobacilli.	ISO 15214: 1998	100 g 500 g 10 Tubi x 10 ml	11225 10225 5057*
<b>MR-VP MEDIUM</b> ♦ Terreno per l'esecuzione dei test Rosso Metile (MR) e Voges – Proskauer (VP).	6785: 2001	100 g 500 g 10 Tubi x 10 ml	11103 10103 5034*
<b>MSRV (Modified Semi-solid Rappaport-Vassiliadis) MEDIUM</b> Terreno selettivo utilizzato per l'isolamento di inclusa <i>Salmonella Typhi</i> e <i>Salmonella Paratyphi</i> negli alimenti e nei mangimi per animali.	ISO 6579: 2002 Adm.1: 2007 (E)		
<b>MSRV MEDIUM BASE</b> ♦		100 g 500 g	11294 10294
<b>NOVOBIOCINE Selective Supplement (20 mg/lt)</b> ♦		10 Fiale x 500 ml	16294
<b>MSRV MEDIUM + NOVOBIOCINE</b>		6 Flacons x 200 ml	64338*
<b>MULLER KAUFFMAN TETRATHIONATE MEDIUM</b> Terreno per l'arricchimento selettivo delle salmonelle.	ISO 3566 ISO 6785		
<b>MULLER KAUFFMAN TETRATHIONATE BROTH BASE</b> ♦		100 g 500 g	11226 10226
<b>Muller Kauffman Supplement</b> ♦		2 Flacons x 50 ml + (1 Flacone x 50 ml)	16092
<b>MULLER KAUFFMAN TETRATHIONATE BROTH</b> ♦		6 Flacons x 100 ml 10 Tubi x 10 ml	64315 5062
<b>MULLER KAUFFMAN TETRATHIONATE-NOVOBIOCINE (MKTT-n) BROTH</b> Terreno per l'arricchimento selettivo delle salmonelle.	ISO 6579: 2008		
<b>MULLER KAUFFMAN TETRATHIONATE BROTH BASE</b> ♦		100 g 500 g	11227 10227
<b>Iodine Soluzione</b> ♦ <b>Novobiocine Selective Supplement (40 mg/lt)</b> ♦		10 x 10 ml 10 Fiale x 500 ml	16098 16126
<b>MULLER KAUFFMAN TETRATHIONATE-NOVOBIOCINE (MKTT-n) BROTH</b> ♦		6 Flacons x 100 ml 10 Tubi x 10 ml	63316 5069
<b>MYP (Mannitol Egg Yolk Polymyxin) SELECTIVE MEDIA → VEDI BACILLUS CEREUS SELECTIVE MEDIUM (MOSSEL) MYP</b>			
<b>NEUTRALIZZANTE DILUENT</b> <sup>New</sup> Diluente universale in accordo alla norma ISO 18593: 2004, per inibire le proprietà batteriostatiche dei campioni da sottoporre all'analisi microbiologica.	ISO 18593: 2004	6 Flacons x 200 ml 12 Flacons x 200 ml 100 Provette x 5 ml 100 Provette x 10 ml	63317 63517 5162 5164
<b>NITRATE BROTH</b>		100 g 500 g	11118 10118

**DISIDRATATI, PRONTI IN FLACONI, TUBI E PIASTRE**

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>NUTRIENT AGAR W/O NaCl</b> Terreno per la crescita ed il conteggio dei microorganismi.	ISO 8523: 1991 ISO 10273: 1994 ISO 6579: 2008	100 g 500 g 6 Flaconi x 100 ml 6 Flaconi x 200 ml	11138 10138 63312 63212
<b>NUTRIENT AGAR / AGAR COMUNE</b> Terreno per la crescita ed il conteggio dei microorganismi.	ISO 10678: 1998 ISO 12780: 2002 ISO 21528-2: 2004	100 g 500 g 6 Flaconi x 100 ml 6 Flaconi x 200 ml 10 Tubi x 10 ml 10 Tubi x 22 ml 2x10 Piastre ø 90 mm	11115 10115 63313 63213 5065 17195* 0024005/20
<b>NUTRIENT AGAR SEMI-SOLID</b> Terreno per la crescita ed il conteggio dei microorganismi.	ISO 6579: 2008	100 g 500 g 6 Flaconi x 200 ml	11235 10235 63215
<b>NUTRIENT BROTH / BRODO COMUNE</b> Terreno per la crescita di microorganismi.	ISO 10678: 1998 ISO 12780: 2002 ISO 21528-2: 2004	100 g 500 g 6 Flaconi x 100 ml 10 Tubi x 10 ml 20 Provette x 10 ml 100 Provette x 10 ml	11116 10116 64311 5070 5070/20 5070/A
<b>NUTRIENT BROTH W/O NaCl</b> Terreno per la crescita di microorganismi.		100 g 500 g	11280 10280
<b>NUTRIENT BROTH N. 2</b> Terreno per la crescita di microorganismi.		100 g 500 g	11232 10232
<b>NUTRIENT GELATIN</b> Terreno per il test di fluidificazione della gelatina.		500 g	10234
<b>O.G.Y.E. (Oxytetracycline Glucose Yeast Extract) SELECTIVE MEDIUM</b> Terreno selettivo per l'isolamento di lieviti e muffe.	ISO 7954: 1987		
<b>O.G.Y.E. (Oxytetracycline Glucose Yeast Extract) AGAR BASE<sup>◇</sup></b> <b>O.G.Y.E. (Oxytetracycline) Selective Supplement (100 mg/l)<sup>◇</sup></b>		100 g 500 g 10 Fiale x 500 ml	11238 10238 16027
<b>O.G.Y.E. (Oxytetracycline Glucose Yeast Extract) SELECTIVE AGAR<sup>◇</sup></b>		2x10 Piastre ø 90 mm 5x4 Piastre ø 65 mm	2314811/20 31042*
<b>O.N.P.G. AGAR</b> Terreno per la differenziazione dei batteri lattosio-fermentanti.		10 Tubi x 10 ml	5080*
<b>ORANGE SERUM AGAR</b> Terreno per l'isolamento ed il conteggio di batteri e miceti negli agrumi e derivati.		500 g	10236
<b>PAGE'S SALINE</b>		100 g	11239
<b>PEPTONE WATER<sup>◇</sup></b> Terreno per promuovere la crescita di batteri senza particolari esigenze nutrizionali, per la diluizione e per la preparazione delle diluizioni scalari per la numerazione dei microorganismi.	ISO 21528-2:2004 ISO 4832: 2006	100 g 500 g 6 Flaconi x 90 ml 6 Flaconi x 100 ml 6 Flaconi x 225 ml 12 Flaconi x 225 ml 10 Tubi x 9 ml 20 Provette x 9 ml 100 Provette x 9 ml	11125 10125 23252 64310 64313 64513 5090 5090/20 5090/A
<b>PEPTONE WATER 1% (w/o NaCl)<sup>◇</sup></b> Soluzione per la preparazione dei campioni.		6 Flaconi x 90 ml 10 Tubi x 9 ml	62313 5091
<b>PEPTONE (TRYPTONE) WATER 0,1 % (w/o NaCl)<sup>◇</sup></b> Soluzione, raccomandata per la diluizione e per la preparazione delle diluizioni scalari per la numerazione dei microorganismi.		6 Flaconi x 90 ml	62312

**DISIDRATATI, PRONTI IN FLACONI, TUBI E PIASTRE**

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>PERFRINGENS SELECTIVE MEDIUM (OPSP)</b> Terreno per l'isolamento selettivo di <i>Clostridium perfringens</i> negli alimenti.			
<b>PERFRINGENS AGAR BASE (OPSP) ♦</b>		<b>100 g</b> <b>500 g</b>	<b>11240</b> <b>10240</b>
<b>Perfringens (OPSP) Supplement A ♦</b> <b>Perfringens (OPSP) Supplement B ♦</b>		<b>10 Fiale x 500 ml</b> <b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16066</b> <b>16068</b>
<b>PERFRINGENS SELECTIVE MEDIUM (SFP)</b> Terreno selettivo per l'identificazione presuntiva e il conteggio di <i>Clostridium perfringens</i>			
<b>PERFRINGENS AGAR BASE (TSC/SFP) ♦</b>		<b>100 g</b> <b>500 g</b>	<b>11244</b> <b>10244</b>
<b>Eggy Yolk Emulsion ♦</b> <b>Perfringens (SFP) Selective Supplement ♦</b>		<b>4 Flaconi x 50 ml</b> <b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16003</b> <b>16069</b>
<b>PERFRINGENS SELECTIVE MEDIUM (TSC)</b> Terreno selettivo per l'identificazione presuntiva e il conteggio di <i>Clostridium perfringens</i>	<b>ISO 7937: 2005</b> <b>ISO/WD 6461- 2</b> <b>2001</b> <b>ISO 15213: 2003</b>		
<b>PERFRINGENS AGAR BASE (TSC/SFP) ♦</b>		<b>100 g</b> <b>500 g</b>	<b>11244</b> <b>10244</b>
<b>Eggy Yolk Emulsion ♦</b> <b>Perfringens (TSC) Selective Supplement ♦</b>		<b>4 Flaconi x 50 ml</b> <b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16003</b> <b>16070</b>
<b>TRYPTOSE SULPHITE CYCLOSERINE AGAR (TSC)</b>		<b>10 Tubi x 22 ml</b>	<b>5143</b>
<b>PHARMACOPOEIA DILUENT (SOLUZIONE SALINA PEPTONATA) → VEDI MAXIMUM RECOVERY DILUENT</b>			
<b>PLATE COUNT AGAR (APHA) ♦</b> Terreno per determinare la carica batterica nei prodotti alimentari e nelle acque.	<b>ISO 17410: 2001</b> <b>ISO 4833: 2004</b> <b>APAT CNR IRSA</b> <b>7050</b> <b>Man 29 2003</b>	<b>100 g</b> <b>500 g</b> <b>6 Flaconi x 100 ml</b> <b>6 Flaconi x 200 ml</b> <b>12 Flaconi x 200 ml</b> <b>10 Tubi x 10 ml</b> <b>10 Tubi x 22 ml</b> <b>2x10 Piastre ø 60 mm</b> <b>2x10 Piastre ø 90 mm</b> <b>5x4 Piastre ø 65 mm</b>	<b>11130</b> <b>10130</b> <b>63314</b> <b>63214</b> <b>63514</b> <b>5043</b> <b>17205*</b> <b>2404480/20</b> <b>2354479/20</b> <b>31000</b>
<b>PLATE COUNT AGAR + NEUTRALIZZANTE ♦</b> Terreno per la carica batterica totale delle superfici con inattivazione dei disinfettanti.		<b>2x10 Piastre ø 90 mm</b> <b>5x4 Piastre ø 65 mm</b>	<b>2361409/20*</b> <b>31002</b>
<b>PLATE COUNT AGAR + NEUTRALIZZANTE (IRRADIATO) ♦</b> Piastrine da contatto per la carica batterica totale delle superfici con inattivazione dei disinfettanti.		<b>5x4 Piastre ø 65 mm</b>	<b>31001</b>
<b>m-PLATE COUNT BROTH (TRYPTONE GLUCOSE YEAST BROTH) ♦</b> Terreno per la carica batterica totale con il metodo della membrane filtranti (MF).		<b>100 g</b> <b>500 g</b>	<b>11138</b> <b>10138</b>
<b>POTATO DEXTROSE AGAR ♦</b> Terreno per il conteggio di lieviti e muffe.		<b>500 g</b> <b>2x10 Piastre ø 90 mm</b>	<b>10127</b> <b>2454481/20</b>
<b>PSEUDOMONAS SELECTIVE MEDIA (CN)</b> Terreno selettivo per l'isolamento di <i>Pseudomonas</i> negli alimenti, nelle acque e nell'ambiente.	<b>ISO 12780: 2002</b>		
<b>PSEUDOMONAS AGAR BASE ♦</b> <b>Pseudomonas (C.N.) Selective Supplement</b>		<b>500 g</b> <b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>10204</b> <b>16058</b>
<b>PSEUDOMONAS SELECTIVE AGAR (CN) ♦</b>		<b>6 Flaconi x 100 ml</b> <b>2x10 Piastre ø 60 mm</b>	<b>63311</b> <b>2521105/20</b>

**DISIDRATATI, PRONTI IN FLACONI, TUBI E PIASTRE**

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>PSEUDOMONAS SELECTIVE MEDIA (CFC)</b> Terreno selettivo per l'isolamento di <i>Pseudomonas</i> nei campioni clinici.			
<b>PSEUDOMONAS AGAR BASE</b> <b>Pseudomonas (C.F.C.) Selective Supplement</b>		500 g 10 Fiale x 500 ml	10204 16060
<b>PSEUDOMONAS SELECTIVE MEDIA</b> Terreno selettivo per l'isolamento di <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .	ISO 8360-1: 1998		
<b>PSEUDOMONAS (CETRIMIDE) AGAR BASE</b> <b>Glicerolo Soluzione</b>		500 g 1 Flacone x 200 ml	10039 16038
<b>PSEUDOMONAS (CETRIMIDE) AGAR</b>		2x10 Piastre ø 60 mm 2x10 Piastre ø 90 mm 5x4 Piastre ø 65 mm	2515028/20 2504927/20 31020
<b>PURPLE GLUCOSE AGAR (GLUCOSE AGAR)</b> Terreno per il test di conferma delle <i>Enterobacteriaceae</i> .	ISO 21528-1-2: 2004	100 g 500 g 6 Flaconi x 200 ml	11328 10328 63235
<b>R2 AGAR</b> Terreno per il conteggio di microorganismi eterotrofici in campioni di acqua potabile.		500 g 6 Flaconi x 200 ml 2x10 Piastre ø 60 mm	10143 64250 1902502/20*
<b>RAPPAPORT VASSILIADIS (RV) ENRICHMENT BROTH</b> ◊ Terreno per l'arricchimento di <i>Salmonella</i> .	ISO 6785: 2001	100 g 500 g 6 Flaconi x 100 ml 10 Tubi x 10 ml	11133 10133 64335 5092
<b>RAPPAPORT VASSILIADIS SOYA (RVS) PEPTONE BROTH</b> Terreno selettivo per l'arricchimento di <i>Salmonella</i>	ISO 6579: 2008	100 g 500 g 6 Flaconi x 100 ml 10 Tubi x 10 ml	11132 10132 64252 5093
<b>REINFORCED CLOSTRIDIAL AGAR (RCM)</b> Terreno per l'isolamento ed il conteggio di anaerobi e <i>Clostridium spp.</i>	ISO 6461-1:1986	500 g	10134
<b>RINGER SOLUTION 1/4</b> Terreno selettivo per l'isolamento ed il conteggio dei lattobacilli.		100 g 500 g 6 Flaconi x 100 ml 10 Tubi x 10 ml	11137 10137 64336 5120
<b>ROGOSA AGAR</b> ◊ Terreno selettivo per l'isolamento ed il conteggio dei lattobacilli.		500 g 2x10 Piastre ø 90 mm	10140 2554480/20
<b>ROSE BENGAL CHLORAMPHENICOL AGAR</b> Terreno per l'isolamento ed il conteggio di lieviti e muffe.			
<b>ROSE BENGAL CHLORAMPHENICOL AGAR BASE</b> <b>Chloramphenicol Selective Supplement</b>		100 g 500 g 10 Fiale x 500 ml	11141 10141 16005
<b>ROSE BENGAL CHLORAMPHENICOL AGAR</b>		6 Flaconi x 100 ml 2x10 Piastre ø 90 mm	63352 2564003/20
<b>SABOURAUD DEXTROSE AGAR</b> Terreno per l'isolamento di lieviti e muffe.		500 g 6 Flaconi x 100 ml 6 Flaconi x 200 ml 10 Tubi x 10 ml 2x10 Piastre ø 60 mm 2x10 Piastre ø 90 mm 5x4 Piastre ø 65 mm	10145 63326 63226 5095 1754224/20 2604109/20 31010
<b>SABOURAUD DEXTROSE AGAR + NEUTRALIZZANTE</b> Piastrine da contatto per l'isolamento e il conteggio di lieviti e muffe con inattivazione dei disinfettanti.		5x4 Piastre ø 65 mm	31012*
<b>SABOURAUD DEXTROSE AGAR + NEUTRALIZZANTE (IRRADIATO)</b> Piastrine da contatto per l'isolamento e il conteggio di lieviti e muffe con inattivazione dei disinfettanti (irradiato).		5x4 Piastre ø 65 mm	31014

**DISIDRATATI, PRONTI IN FLACONI, TUBI E PIASTRE**

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>SABOURAUD DEXTROSE AGAR + CAF</b> Terreno selettivo per l'isolamento di lieviti e muffe.		100 g 500 g 6 Flaconi x 100 ml 10 Tubi x 10 ml 2x10 Piastre ø 90 mm 5x4 Piastre ø 65 mm	11150 10150 63327 5100 2654324/20 31013
<b>SABOURAUD DEXTROSE AGAR + ACTIDIONE + CAF</b> Terreno selettivo per l'isolamento dei funghi patogeni.		100 g 500 g 6 Flaconi x 100 ml 2x10 Piastre ø 90 mm	11149 10149 63328* 2660802/20
<b>SABOURAUD DEXTROSE AGAR + CAF + Gentamicina</b> Terreno selettivo per l'isolamento di funghi patogeni.		500 g 6 Flaconi x 100 ml 2x10 Piastre ø 90 mm	10151 63332 2684112/20
<b>SABOURAUD DEXTROSE AGAR + Gentamicina</b> Terreno selettivo per l'isolamento di funghi patogeni.		2x10 Piastre ø 90 mm	2674111/20
<b>SABOURAUD DEXTROSE BROTH (USP)</b> Terreno per la coltivazione di lieviti e muffe.		100 g 500 g 10 Tubi x 10 ml	11146 10146 5105
<b>SABOURAUD MALTOSE AGAR</b> Terreno per la coltivazione di lieviti e muffe.		500 g	10152
<b>SELENITE MEDIA</b> Terreno per l'arricchimento selettivo di Salmonella.			
<b>SELENITE BROTH BASE</b> <b>SODIO SELENITE</b>		100 g 500 g 100 g	11159 10159 15097
<b>SELENITE BROTH</b>		6 Flaconi x 100 ml 6 Flaconi x 200 ml 10 Tubi x 9 ml 20 Provette x 9 ml 100 Provette x 9 ml	64317 64217 5110 5110/20 5110/A
<b>SELENITE BROTH 2X (DOPPIA CONCENTRAZIONE)</b>		10 Tubi x 9 ml	5117*
<b>SELENITE CYSTINE MEDIA</b> Terreno per l'arricchimento selettivo di Salmonella.	ISO 6785: 2001		
<b>SELENITE CYSTINE BROTH BASE</b> ◊ <b>SODIO SELENITE</b>		100 g 500 g 100 g	11164 10164 15097
<b>SELENITE CYSTINE BROTH</b> ◊		6 Flaconi x 100 ml 10 Tubi x 10 ml	64321 5108
<b>S.F. BROTH</b> Terreno selettivo per l'isolamento degli streptococchi fecali.		500 g 10 Tubi x 10 ml	10166 5111
<b>SIM MEDIUM</b> Terreno differenziale per i tests indolo, mobilità e H <sub>2</sub> S.		100 g 500 g 10 Tubi x 10 ml	11169 10169 5112
<b>SIMMONS CITRATE AGAR</b> Terreno differenziale per l'identificazione degli enterobatteri.		100 g 500 g 10 Tubi x 10 ml 2x10 Piastre ø 90 mm	11163 10163 5115 2704325



**DISIDRATATI, PRONTI IN FLACONI, TUBI E PIASTRE**

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>SLANETZ AND BARTLEY (m-ENTEROCOCCUS) AGAR<sup>◊</sup></b> Terreno selettivo per l'isolamento ed il conteggio degli streptococchi fecali.	ISO 7899-2: 2003		
<b>SLANETZ AND BARTLEY (m-ENTEROCOCCUS) AGAR BASE<sup>◊</sup></b>		100 g 500 g	11064 10064
<b>TTC Soluzione 1 %</b>		5x10 ml	16071
<b>SLANETZ AND BARTLEY (m-ENTEROCOCCUS) AGAR + TTC<sup>◊</sup></b>		6 Flaconi x 100 ml 6 Flaconi x 200 ml 2x10 Piastre ø 60 mm 2x10 Piastre ø 90 mm	63325 63225 1954747/20 2724425/20*
<b>SLANETZ AND BARTLEY (m-ENTEROCOCCUS) AGAR + TTC<sup>◊</sup> + NEUTRALIZZANTE</b>		5x4 Piastre ø 65 mm	31028
<b>S.P.S. AGAR<sup>◊</sup></b> Terreno per l'isolamento ed il conteggio di <i>Clostridium perfringens</i> .	APAT CNR IRSA 7010 Met. B	100 g 500 g 10 Tubi x 10 ml 10 Tubi x 22 ml 2x10 Piastre ø 60 mm 2x10 Piastre ø 90 mm 5x4 Piastre ø 65 mm	11165 10165 5033 17210* 2760306/20 2754845/20* 31040*
<b>S.S. (SALMONELLA-SHIGELLA) AGAR</b> Terreno selettivo per l'isolamento di Salmonella.		500 g 6 Flaconi x 100 ml 6 Flaconi x 200 ml 2x10 Piastre ø 90 mm 5x4 Piastre ø 65 mm	10155 63329 63229 2804074/20 31022*
<b>STUART TRANSPORT MEDIUM</b> Terreno di trasporto.		500 g 5 Kg	10210 13210
<b>T.C.B.S. AGAR</b> Terreno selettivo per l'isolamento di <i>Vibrio spp.</i>	ISO 8914: 1990	500 g 2x10 Piastre ø 90 mm	10170 2904650/20
<b>TERGITOL-7 MEDIA</b> Terreno per l'identificazione ed il conteggio dei coliformi.	ISO 9308-1: 2002		
<b>TERGITOL-7 AGAR BASE<sup>◊</sup></b>		500 g	10257
<b>TTC Soluzione 0.5 % (0,025 g/l)<sup>◊</sup></b>		10 Flaconi x 5 ml (1/1000 ml)	16081
<b>TERGITOL-7 AGAR + TTC<sup>◊</sup></b>		6 Flaconi x 100 ml 6 Flaconi x 200 ml 2x10 Piastre ø 60 mm	63338 63238 2821107/20
<b>TERGITOL-7 BROTH BASE<sup>◊</sup></b>		100 g 500 g	11259 10259
<b>TTC Soluzione 0.125 %<sup>◊</sup></b>		10 Flaconi x 2 ml (1/100 ml)	16076
<b>TETRATHIONATE MEDIA</b> Terreno di arricchimento per <i>Salmonella spp.</i>			
<b>TETRATHIONATE BROTH BASE (USA)</b>		100 g 500 g	11171 10171
<b>Iodine Soluzione</b>		10 Flaconi x 5 ml (1/500 ml)	16098
<b>TETRATHIONATE BROTH (USA)</b>		10 Tubi x 8 ml	5125
<b>THIOGLYCOLLATE (Fluid) MEDIUM (USP)<sup>◊</sup></b> Terreno per i test di sterilità di prodotti biologici e per la coltura dei batteri aerobi, anaerobi e microaerofili.	ISO 7937: 2005	100 g 500 g 10 Tubi x 10 ml	11180 10180 5127
<b>T.S.I. (TRIPLE SUGAR IRON) AGAR</b> Terreno differenziale per l'identificazione degli enterobatteri.	ISO 6579: 2008	500 g 6 Flaconi x 100 ml 10 Tubi x 10 ml (BECCO DI CLARINO)	10190 63342 5135



**DISIDRATATI, PRONTI IN FLACONI, TUBI E PIASTRE**

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>TRYPTONE BILE AGAR<sup>◊</sup></b> Terreno per la ricerca ed il conteggio di <i>E. coli</i> biotipo 1 negli alimenti.	ISO 9308-1: 2002	100 g 500 g 6 Flaconi x 100 ml 2x10 Piastre ø 60 mm	11186 10186 63336 2840902/20*
<b>TRYPTONE GLUCOSE EXTRACT AGAR<sup>◊</sup></b> Terreno per il conteggio della carica batterica totale nei prodotti lattiero-caseari.		100 g 500 g	11189 10189
<b>TRYPTONE (TRYPTIC) SOY AGAR</b> ) Terreno per la crescita di batteri esigenti.	ISO 9308-1: 2002	100 g 500 g 6 Flaconi x 100 ml 6 Flaconi x 200 ml 2x10 Piastre ø 90 mm 5x4 Piastre ø 65 mm	11195 10195 63330 63230 2954369/20 31035*
<b>TRYPTONE (TRYPTIC) SOY AGAR + NEUTRALIZZANTE<sup>◊</sup></b> Terreno per la determinazione della carica batterica con inattivazione dei disinfettanti.		5x4 Piastre ø 65 mm	31036
<b>TRYPTONE (Tryptic) SOY AGAR (IRRADIATO)<sup>◊</sup></b> Piastre da contatto per la carica batterica totale delle suerfici (irradiato).		5x4 Piastre ø 65 mm	31038
<b>TRYPTONE (TRYPTIC) SOY AGAR + 0.1% PENASE + NEUTRALIZZANTE<sup>◊</sup></b> Terreno per la determinazione della carica batterica con inattivazione di una gamma di penicillina e di disinfettanti.		5x4 Piastre ø 65 mm	31004*
<b>TRYPTONE (TRYPTIC) SOY AGAR (SANGUE DI MONTONE 5%)</b> Terreno per l'isolamento di batteri esigenti.		2x10 Piastre ø 90 mm	2982302/20
<b>TRYPTONE (TRYPTIC) SOY BROTH (USP)</b> Terreno per la crescita di batteri esigenti.		100 g 500 g 6 Flaconi x 100 ml 6 Flaconi x 200 ml 10 Tubi x 10 ml 20 Provette x 10 ml 100 Provette x 10 ml	11196 10196 64319 64219 5140 5140/20 5140/A
<b>m-TSB (MODIFIED TRYPTONE SOY BROTH)<sup>◊</sup></b> Terreno liquido per l'arricchimento di <i>Escherichia coli</i> O 157 nei campioni alimentari.	ISO/DIS 16654: 1999		
<b>m-TSB (MODIFIED TRYPTONE SOY BROTH) BASE<sup>◊</sup></b>		100 g 500 g	11193 10193
<b>NOVOBIOCINA Selective Supplement (40 mg/lt)</b>		10 Flaconi x 500 ml	10126
<b>T.S.Y.E. (TRYPTONE SOY YEAST EXTRACT) AGAR<sup>◊</sup></b> Per la subcoltura e la purificazione delle colonie di <i>Listeria spp.</i>	ISO 11290-1-2: 1996 ISO 11290-1-2: 2005	500 g 6 Flaconi x 200 ml	10277 63390
<b>T.S.Y.E. (TRYPTONE SOY YEAST EXTRACT) BROTH<sup>◊</sup></b> Terreno per la coltivazione di <i>Listeria spp.</i>	ISO 11290-1-2: 1996	100 g 500 g 6 Flaconi x 200 ml	11276 10276 63391
<b>TRYPTONE WATER<sup>◊</sup></b> Terreno per evidenziare la produzione di indolo.	ISO 3811: 1979 ISO 7251	100 g 500 g 6 Flaconi x 100 ml 6 Flaconi x 225 ml 10 Tubi x 10 ml 20 Provette x 10 ml	11191 10191 23242 64220 5024 5024/A
<b>TRYPTOPHANE BROTH<sup>◊</sup></b> Terreno raccomandato per l'esecuzione del test dell'indolo, come test di conferma di <i>Salmonella spp.</i> e di <i>E. Coli</i> .	ISO 9308-1 2002	100 g 500 g 6 Flaconi x 100 ml 10 Tubi x 3 ml	11192 10192 63303 5021
<b>TRYPTOSE PHOSPHATE BROTH</b> Terreno per la coltivazione di una larga varietà di microrganismi.		100 g 500 g	11199 10199

**DISIDRATATI, PRONTI IN FLACONI, TUBI E PIASTRE**

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>T.S.N. (Tryptone Sulfite Neomycin) AGAR</b> Terreno per la ricerca di batteri anaerobi solfito riduttori.		100 g 500 g 10 Tubi x 10 ml	11304 10304 5139
<b>UREA MEDIA</b> Terreno per la determinazione dell'indolo e dell'attività ureasica.	ISO 6579: 2004 ISO 6785: 2002		
<b>UREA AGAR BASE</b>		100 g 500 g	11256 10256
<b>UREA Soluzione 40 %</b>		10 Fiale x 5 ml	16074
<b>UREA (CHRISTENSEN) AGAR (BECCO DI CLARINO)</b>		10 Tubi x 10 ml	5138*
<b>UREA BROTH BASE</b>		100 g 500 g	11258 10258
<b>UREA Soluzione 40 %</b>		10 Fiale x 5 ml	16074
<b>UREA BROTH</b>		10 Tubi x 6 ml 20 Provette x 6 ml 100 Provette x 6 ml	5144 5144/20 5144/A
<b>VIOLET RED BILE GLUCOSE AGAR</b> Terreno selettivo per l'isolamento ed il conteggio degli enterobatteri.	ISO 21528-2: 2004	100 g 500 g 6 Flacons x 100 ml 6 Flacons x 200 ml 10 Flacons x 200 ml 2x10 Piastre ø 90 mm 5x4 Piastre ø 65 mm	11201 10201 63340 63240 63540 3054012/20 31005
<b>VIOLET RED BILE GLUCOSE AGAR + NEUTRALIZZANTE<sup>◊</sup></b> Terreno selettivo per l'isolamento ed il conteggio degli enterobatteri con l'inattivazione dei disinfettanti.		5x4 Piastre ø 65 mm	31018
<b>VIOLET RED BILE (LACTOSE) AGAR</b> Terreno selettivo per l'isolamento ed il conteggio di coliformi.	ISO 4832:2006	100 g 500 g 6 Flacons x 100 ml 6 Flacons x 200 ml 12 Flacons x 200 ml 2x10 Piastre ø 60 mm 2x10 Piastre ø 90 mm 5x4 Piastre ø 65 mm	11200 10200 63350 63250 63550 2810209/20* 3064113/20 31005
<b>VIOLET RED BILE (LACTOSE) AGAR + NEUTRALIZZANTE<sup>◊</sup></b> Terreno selettivo per l'isolamento ed il conteggio di coliformi con l'inattivazione dei disinfettanti.		5x4 Piastre ø 65 mm	31006
<b>VIOLET RED BILE (LACTOSE) AGAR + MUG (FDA)</b> Terreno selettivo per l'isolamento ed il conteggio di coliformi ed <i>Escherichia coli</i> .			
<b>VIOLET RED BILE (LACTOSE) AGAR BASE</b>		100 g 500 g	11200 10200
<b>MUG Supplement</b>		10 Fiale x 500 ml	16015
<b>VIOLET RED BILE (LACTOSE) AGAR + MUG (FDA)</b>		2x10 Piastre ø 90 mm	3071803/20
<b>VOGEL JOHNSON AGAR (USP)</b> Terreno selettivo per l'isolamento di <i>Staphylococcus aureus</i> .		100 g 500 g	11207 10207
<b>WATER PLATE COUNT AGAR<sup>◊</sup></b> Terreno per determinare la carica batterica nelle acque.		100 g 500 g	11261 10261
<b>WILKINS CHALGREEN ANAEROBE AGAR</b> Terreno per la coltura ed i test di sensibilità degli anaerobi.		100 g 500 g	11260 10260
<b>WILKINS CHALGREEN ANAEROBE BROTH</b> Terreno per la coltura ed i test di sensibilità degli anaerobi.		100 g 500 g	11262 10262

**DISIDRATATI, PRONTI IN FLACONI, TUBI E PIASTRE**

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>W.L. NUTRIENT AGAR</b> <sup>◊</sup> Per la determinazione della flora microbica nei processi di fermentazione.		<b>500 g</b>	<b>10264</b>
<b>W.L. DIFFERENTIAL AGAR</b> <sup>◊</sup> Per la determinazione della flora microbica nei processi di fermentazione. La cicloeximide inibisce la crescita della maggior parte dei lieviti e delle muffe.			
<b>W.L. NUTRIENT AGAR</b> <sup>◊</sup> <b>Actidione (Cicloeximide) Supplement (4 mg/l)</b> <b>Actidione (Cicloeximide) Supplement (10 mg/l)</b>		<b>500 g</b> <b>10 Fiale x 500 ml</b> <b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>10264</b> <b>16097</b> <b>16098</b>
<b>W.L. DIFFERENTIAL AGAR + ACTIDIONE (4 mg/l)</b> <sup>◊</sup> Per la determinazione della flora microbica nei processi di fermentazione.		<b>2x10 Piastre ø 90 mm</b>	<b>3110108/20*</b>
<b>WORT AGAR</b> Terreno per la coltura ed il conteggio dei lieviti.		<b>100 g</b> <b>500 g</b>	<b>11266</b> <b>10266</b>
<b>X.L.D. AGAR</b> Terreno selettivo e differenziale per l'isolamento degli enterobatteri patogeni.	<b>ISO 6579: 2002</b> <b>Adm.1 2007 (E)</b> <b>ISO 6579: 2008</b>	<b>500 g</b> <b>2x10 Piastre ø 90 mm</b>	<b>10268</b> <b>3154788/20</b>
<b>YEAST AND MOULD MEDIUM</b> Terreno per l'isolamento di lieviti e muffe.			
<b>YEAST AND MOULD AGAR BASE</b>		<b>100 g</b> <b>500 g</b>	<b>11270</b> <b>10270</b>
<b>Acido Lattico 10 % Soluzione</b>		<b>10 Fiale x 5 ml</b>	<b>16079</b>
<b>YEAST EXTRACT AGAR</b> <sup>◊</sup> Terreno per il conteggio della carica batterica totale nelle acque.	<b>ISO 6222: 2001</b>	<b>100 g</b> <b>500 g</b> <b>6 Flacons x 200 ml</b> <b>12 Flacons x 200 ml</b> <b>2x10 Piastre ø 60 mm</b>	<b>11272</b> <b>10272</b> <b>63253</b> <b>63553</b> <b>2431901/20*</b>
<b>YEAST GLUCOSE CHLORAMPHENICOL AGAR</b> Terreno per la ricerca e il conteggio di lieviti e muffe nei prodotti lattiero-caseari e altri alimenti.	<b>ISO 7954: 1987</b>	<b>100 g</b> <b>500 g</b> <b>6 Flacons x 100 ml</b> <b>6 Flacons x 200 ml</b> <b>2x10 Piastre ø 90 mm</b>	<b>11271</b> <b>10271</b> <b>63354</b> <b>63254</b> <b>3222510/20</b>
<b>YERSINIA PSB BROTH</b> <sup>◊</sup> Brodo d'arricchimento per la ricerca di <i>Yersinia enterocolitica</i> negli alimenti e nelle acque, secondo la metodica ISO 10273.	<b>ISO 10273</b>	<b>500 g</b>	<b>10273</b>
<b>YERSINIA ITC BROTH</b> Brodo d'arricchimento per la ricerca di <i>Yersinia enterocolitica</i> negli alimenti e nelle acque, secondo la metodica ISO 10273.	<b>ISO 10273</b>		
<b>YERSINIA ITC BROTH BASE</b> <sup>◊</sup> <b>Ticarillina-Irgasan Selective Supplement</b> <sup>◊</sup> <b>Clorato di Potassio Soluzione 5 %</b> <sup>◊</sup>		<b>500 g</b> <b>10 Fiale x 500 ml</b> <b>10 Fiale x 5 ml</b>	<b>10279</b> <b>16031</b> <b>16094</b>
<b>YERSINIA SELECTIVE MEDIUM (CIN)</b> Terreno selettivo per l'isolamento di <i>Yersinia enterocolitica</i> .	<b>ISO 10273</b>		
<b>YERSINIA SELECTIVE AGAR BASE</b> <b>Yersinia Selective Supplement</b>		<b>500 g</b> <b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>10274</b> <b>16120</b>
<b>YERSINIA SELECTIVE AGAR</b>		<b>2x10 Piastre ø 90 mm</b>	<b>3254817/20</b>

## DILUENTI PRONTI ALL'USO



### DILUENTI PRONTI ALL'USO PER L'ANALISI ALIMENTARE

Terreni di coltura pronti all'uso per il pre-arricchimento di *Salmonella* secondo la norma **ISO 6579: 2008**, per l'arricchimento di *Listeria Monocytogenes* secondo la norma **ISO 11290-1: 1996/Adm. 1:2004, ISO 11290-1: 2005** da campioni alimentari, e per la preparazione del campione e delle sue diluizioni decimali per l'esame microbiologico, come indicato dalle norme **ISO 6887-1: 2000, ISO 7932: 2005, ISO 21528-2:2004, e ISO 4832: 2006**.

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>BUFFERED PEPTONE WATER<sup>◇</sup></b> Terreno per il pre-arricchimento di <i>Salmonella</i> .	<b>ISO 6579: 2002/Adm. 1: 2007(E)</b>  <b>ISO 6579: 2008</b>	6 Flaconi x 90 ml 6 Flaconi x 225 ml 12 Flaconi x 225 ml 10 Tubi x 9 ml	<b>64130*</b> <b>23248</b> <b>23548</b> <b>5027</b>
<b>LISTERIA FRASER BROTH<sup>◇</sup></b> Terreno per arricchimento <i>Listeria monocytogenes</i> negli alimenti.	<b>ISO 11290-1: 1996</b>	6 Flaconi x 225 ml 12 Flaconi x 225 ml 10 Tubi x 10 ml	<b>64226</b> <b>64526</b> <b>5058</b>
<b>LISTERIA HALF FRASER BROTH 1/2 Conc<sup>◇</sup></b> Terreno per arricchimento <i>Listeria monocytogenes</i> negli alimenti.	<b>ISO 11290-1: 1996</b> <b>ISO 11290-1: 2005</b>	6 Flaconi x 225 ml 12 Flaconi x 225 ml 10 Tubi x 10 ml	<b>64228</b> <b>64528</b> <b>5056</b>
<b>MAXIMUM RECOVERY DILUENT<sup>◇</sup></b> Diluente isotonic per il recupero ottimale dei microorganismi .	<b>ISO 6887-1: 2000</b> <b>ISO 7932: 2005</b>	6 Flaconi x 100 ml 6 Flaconi x 225 ml 12 Flaconi x 225 ml	<b>63239</b> <b>63439</b> <b>63539</b>
<b>PEPTONE WATER<sup>◇</sup></b> Terreno per promuovere la crescita di batteri senza particolari esigenze nutrizionali .	<b>ISO 21528-2:2004</b> <b>ISO 4832: 2006</b>	6 Flaconi x 90 ml 6 Flaconi x 100 ml 6 Flaconi x 225 ml 12 Flaconi x 225 ml 10 Tubi x 9 ml 20 Provette x 9 ml 100 Provette x 9 ml	<b>23252</b> <b>64310</b> <b>64313</b> <b>64513</b> <b>5090</b> <b>5090/20</b> <b>5090/A</b>
<b>PEPTONE WATER 1 % (w/o NaCl)<sup>◇</sup></b> Soluzione, raccomandata per la diluizione e per la preparazione delle diluizioni scalari per la numerazione dei microrganismi.		6 Flaconi x 90 ml 10 Tubi x 9 ml	<b>62313</b> <b>5091</b>
<b>PEPTONE (TRYPTONE) WATER 0,1 % (w/o NaCl)<sup>◇</sup></b> Soluzione, raccomandata per la diluizione e per la preparazione delle diluizioni scalari per la numerazione dei microrganismi.		6 Flaconi x 90 ml	<b>62312</b>

## DILUITORI

Il diluitore gravimetrico Gravimat® è impiegato per la diluizione dei campioni solidi con l'appropriata quantità (*m*) di diluente. Ogni metodo di diluizione e di dispensazione usato in laboratorio può essere scelto sullo strumento. Il fattore di diluizione prescelto è automaticamente salvato per applicazioni future.

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>DILUITORE GRAVIMETRICO BABY GRAVIMAT®</b>	<b>1 Unità</b>	<b>500230</b>
<div data-bbox="153 517 331 763">  </div> <p>Il diluitore gravimetrico Baby Gravimat® è impiegato per la diluizione dei campioni solidi con l'appropriata quantità (<i>m</i>) di diluente. Ogni metodo di diluizione e di dispensazione usato in laboratorio può essere scelto sullo strumento. Il fattore di diluizione prescelto è automaticamente salvato per applicazioni future.</p> <p><b>Specifiche Tecniche:</b>  Tempo di diluizione &lt; 20 sec (per 250 ml) - Fattore di diluizione da 1:2 a 1:99 - Accuratezza &lt; 0,05 g (per il peso del campione) 99% (per la quantità di diluente) - Quantità massima <b>1000 g</b>.  Parametri: data e ora, identificazione del campione, peso iniziale, peso totale, fattore di diluizione, accuratezza della diluizione. - Piattaforma di peso Accuratezza &lt; 0,05 g.  Funzioni di distribuzione liquidi da 1 g a 2500 g (accuratezza &lt; 0,1 g). - Lingua del display Italiano. - Dimensioni 25 x 42 x 30 cm - Peso 10 kg.</p>		
<b>DILUITORE GRAVIMETRICO GRAVIMAT®</b>	<b>1 Unità</b>	<b>500230</b>
<div data-bbox="153 857 376 1097">  </div> <p>Il diluitore gravimetrico Gravimat® è impiegato per la diluizione dei campioni solidi con l'appropriata quantità (<i>m</i>) di diluente. Ogni metodo di diluizione e di dispensazione usato in laboratorio può essere scelto sullo strumento. Il fattore di diluizione prescelto è automaticamente salvato per applicazioni future.</p> <p><b>Specifiche Tecniche:</b>  Tempo di diluizione &lt; 20 sec (per 250 ml) - Fattore di diluizione da 1:2 a 1:99 - Accuratezza &lt; 0,05 g (per il peso del campione) 99% (per la quantità di diluente) - Quantità massima <b>2500 g</b>.  Parametri: data e ora, identificazione del campione, peso iniziale, peso totale, fattore di diluizione, accuratezza della diluizione. - Piattaforma di peso Accuratezza &lt; 0,05 g.  Funzioni di distribuzione liquidi da 1 g a 2500 g (accuratezza &lt; 0,1 g). - Lingua del display Italiano. - Dimensioni 25 x 42 x 30 cm - Peso 10 kg.</p>		



## TERRENI DI COLTURA "CROMOGENICI"

### DISIDRATATI, PRONTI IN FLACONE E PIASTRE PETRI

Terreni di coltura "Cromogenici" disidratati, pronti in flacone e piastre petri per l'analisi di campioni clinici, alimentari e acque.

(\*) Prodotto disponibile con ordine minimo.

PRODOTTO	Cont.	REF
<b>BACILLUS CEREUS</b>		
<b>BACILLUS CEREUS CHROMOGENIC AGAR BASE</b>	<b>500 g</b>	<b>10312</b>
<b>BACILLUS CEREUS Selective Supplement</b>	<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16018</b>

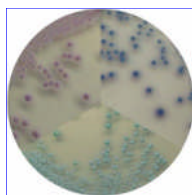
Terreno selettivo cromogenico per l'isolamento di *Bacillus cereus*.

Risultato: **24 h**

Caratteristiche colonie: colonie larghe di colore rosa-arancio con un distinto alone opaco.

### CANDIDA

<b>CANDIDA CHROMOGENIC AGAR</b>	<b>500 g</b> (10,89/Lt)	<b>10314</b>
	<b>6 Flacons x 100 ml</b> <b>2x10 Piastre ø 90 mm</b>	<b>63360</b> <b>3102804/20</b>



Terreno selettivo cromogenico per l'isolamento e la differenziazione di *C. albicans*, *C. tropicalis* e *C. krusei*.

Norme di riferimento: /

Periodo e temperatura d'incubazione: Risultato: **24 h** - Osservare dopo 48 – 72 ore a 35.0 ± 2,5 °C.

Caratteristiche colonie: *Candida albicans*: verdi - *Candida krusei*: rosa-porpora - *Candida Tropicalis*: blu

### E. COLI / COLIFORMI

<b>C-EC CHROMOGENIC AGAR<sup>NEW</sup></b>	<b>100 g</b> <b>500 g</b> (12,8/Lt)	<b>11340</b> <b>10340</b>
	<b>6 Flacons x 100 ml</b> <b>2x10 Piastre ø 60 mm</b>	<b>64354*</b> <b>2962601/20*</b>

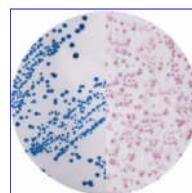
Terreno selettivo fluorogenico e cromogenico, per la determinazione simultanea di *E.coli* e dei coliformi nelle acque e negli alimenti.

Norme di riferimento: (APAT CNR-IRSA N° 7010/7020/7030)

Risultato: **18-24 h**

Caratteristiche colonie: *E. Coli*: verde blu, fluorescenti alla lampada di Wood, positive al test dell'indolo - *Coliformi*: verde-blu - Altri batteri Gram negativi: incolori.

<b>E. COLI / COLIFORMS CHROMOGENIC AGAR</b>	<b>525 g</b> (19,8/Lt)	<b>10306</b>
	<b>6 Flacons x 100 ml</b> <b>6 Flacons x 200 ml</b> <b>2x10 Piastre ø 60 mm</b> <b>2x10 Piastre ø 90 mm</b>	<b>63310</b> <b>63210</b> <b>2780702/20</b> <b>1110203/20</b>



Terreno selettivo cromogenico per il conteggio e l'identificazione di *E. Coli* e dei coliformi nelle acque e negli alimenti.

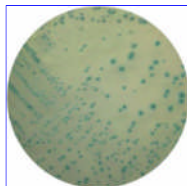
Norme di riferimento: /

Risultato: **24 h**

Caratteristiche colonie: *E. Coli*: blu scuro-violetto - *Citrobacter freundii*: salmone - *Salmonella enteritidis*: incolori - *Streptococcus faecalis*: inibito

**DISIDRATATI, PRONTI IN FLACONE E PIASTRE PETRI**

PRODOTTO	Cont.	REF
TBX (Tryptone Bile X-Glucuronide) AGAR	<b>500 g</b> (13,6/Lt)	<b>10310</b>
	<b>6 Flaconi x 100 ml</b>	<b>63318</b>
	<b>6 Flaconi x 200 ml</b>	<b>62218</b>
	<b>2x10 Piastre ø 60 mm</b>	<b>2790106/20</b>
	<b>2x10 Piastre ø 90 mm</b>	<b>2924650/20</b>
	<b>5x4 Piastre ø 65 mm</b>	<b>31008*</b>



Terreno selettivo cromogenico per il conteggio e l'identificazione di ***Escherichia coli*** negli alimenti e nelle acque.

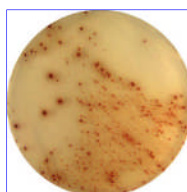
Norme di riferimento: (ISO 10980: 2002 / ISO16649-2:2001 / APAT IRSA-CNR 7030 Met. F Man 29 2003)

Risultato: **24 h**

Caratteristiche colonie: *E. Coli*: blu-verde - *Escherichia Coli* 0157: H7: β-D-glucuronidase negativa, colonie incolori - *Salmonella*, *Streptococcus*, *Klebsiella*: inibita

**E. COLI 0157**

<b>E. COLI CHROMOGENIC AGAR BASE 0157</b> <small>NEW</small>	<b>500 g</b> (13,2/Lt)	<b>10335</b>
<b>E. COLI 0157 (CEFEXIME-TELLURITE) SELECTIVE SUPPLEMENT</b>	<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16040</b>



Terreno selettivo e differenziale per la determinazione di ***E.coli* 0157: H7**.

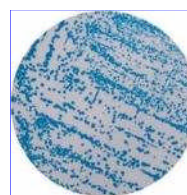
Norme di riferimento: /

Risultato: **18-24 h**

Caratteristiche colonie: ***E. Coli* 0157: H7**: Rosa

**ENTEROBACTER SAKAZAKII**

<b>ENTEROBACTER SAKAZAKII ISOLATION AGAR CHROMOGENIC (ESIA)</b>	<b>500 g</b> <b>2x10 Piastre ø 90 mm</b>	<b>10330</b> <b>3150209/20*</b>
---	---	------------------------------------



Terreno selettivo cromogenico per il conteggio e l'identificazione di ***Enterobacter Sakazakii***.

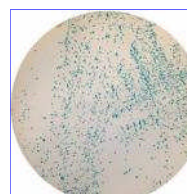
Norme di riferimento: **ISO 22964: 2006**

Risultato: **24 h**

Caratteristiche colonie: *Enterobacter sakazakii*: blu-verdi - *E. coli*: trasparenti / rosso-viola - *Staphylococcus sp.*: inibita

**ENTEROCOCCI**

<b>m-EI CHROMOGENIC AGAR BASE</b>	<b>500 g</b> <b>6 Flaconi x 100 ml</b> <b>2x10 Piastre ø 60 mm</b> <b>2x10 Piastre ø 90 mm</b>	<b>10322</b> <b>63384*</b> <b>2941501/20*</b> <b>3142904/20*</b>
-----------------------------------	---	---



Terreno selettivo cromogenico per la conta e l'isolamento di **enterococchi** nelle acque con il metodo delle membrane filtranti (MF)

Norme di riferimento:

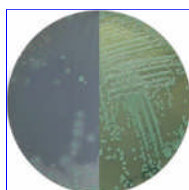
Risultato: **24 h**

Caratteristiche colonie: *Enterococcus faecium*: blu- ***Enterococcus faecalis***: blu



**DISIDRATATI, PRONTI IN FLACONE E PIASTRE PETRI**

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>LISTERIA MONOCYTOGENES</b>		
<b>LISTERIA CHROMOGENIC AGAR BASE**</b>	<b>500 g</b> (7,0/Lt)	<b>10316</b>
<b>LISTERIA LIPASE C SUPPLEMENT</b>	<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16122</b>
<b>LISTERIA CHROMOGENIC SELECTIVE SUPPLEMENT</b>	<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16124</b>
<b>LISTERIA CHROMOGENIC AGAR**</b>	<b>6 Flaconi x 100 ml</b> <b>2x10 Piastre ø 90 mm</b>	<b>63362*</b> <b>2910502/20</b>



Terreno selettivo cromogenico per l'isolamento di *Listeria monocytogenes*, negli alimenti.

Norme di riferimento: **ISO 11290: 2005.**

Risultato: **48 h.**

Caratteristiche colonie: *L. monocytogenes*: blu (alone positivo) - *L. innocua*: blu (alone negativo) - *Streptococcus faecalis*, *E. coli*: inibita.

(\*\*) In accordo con Agosti Ottaviani.

**SALMONELLA**

<b>SALMONELLA CHROMOGENIC AGAR</b>	<b>575 g</b> (13,5/Lt)	<b>10158</b>
	<b>6 Flaconi x 100 ml</b> <b>2x10 Piastre ø 90 mm</b>	<b>63364</b> <b>2692102/20</b>



Terreno selettivo cromogenico per l'isolamento e l'identificazione di *Salmonella*, negli alimenti, nelle acque e nei campioni clinici.

Norme di riferimento: /

Risultato: **24 h.**

Caratteristiche colonie: *Salmonella sp.*: magneta - *E. coli* : blu-verde - *Proteus vulgaris*: incolore.



## INGREDIENTI DI BASE

### AGAR, PEPTONI ED INGREDIENTI VARI

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>AGAR BATTERIOLOGICO</b> Agar batteriologico per la preparazione dei terreni di coltura.		<b>500 g</b> <b>5 Kg</b>	<b>15000</b> <b>15000/A</b>
<b>AGAR PURIFICATO</b> Agar altamente purificato, usato per la preparazione di terreni di coltura.		<b>500 g</b>	<b>15002</b>
<b>BILE SALTS</b> Estratto purificato di bile bovina, costituito da sodio taurocolato e sodio glicolato.		<b>250 g</b>	<b>15095</b>
<b>BILE SALTS N. 3</b> Estratto purificato di bile bovina, costituita da sodio colato e sodio desossicolato.		<b>250 g</b> <b>5 Kg</b>	<b>15008</b> <b>15008/A</b>
<b>CASEIN HYDROLYSATE (ACID)</b> Prodotto ottenuto dalla <b>idrolisi acida della caseina</b> .		<b>500 g</b>	<b>15040</b>
<b>DEXTROSE (GLUCOSE) BATTERIOLOGICO</b> Destrosio (glucosio) per uso batteriologico.		<b>500 g</b>	<b>15035</b>
<b>EMOGLOBINA</b> Emoglobina in polvere solubile.		<b>500 g</b>	<b>15036</b>
<b>GELATINA BATTERIOLOGICA</b> Gelatina ottenuta da <b>idrolisi enzimatica di tessuti animali</b> .		<b>500 g</b>	<b>15020</b>
<b>LATTOSIO BATTERIOLOGICO</b> Lattosio per uso batteriologico.		<b>500 g</b>	<b>15050</b>
<b>MALTOSIO BATTERIOLOGICO</b> Maltosio per uso batteriologico.		<b>500 g</b>	<b>15054</b>
<b>ESTRATTO DI CARNE (MEAT EXTRACT)</b> Estratto di carne ottenuto dall' <b>idrolisi enzimatica delle proteine animali</b> .		<b>500 g</b> <b>5 Kg</b>	<b>15005</b> <b>15005/A</b>
<b>ESTRATTO DI FEGATO (LIVER EXTRACT)</b> Estratto essiccato di fegato bovino.		<b>500 g</b>	<b>15056</b>
<b>ESTRATTO DI LIEVITO (YEAST EXTRACT)</b> Frazione idrosolubile di autolisato di lievito, in polvere.		<b>500 g</b> <b>5 Kg</b>	<b>15015</b> <b>15015/A</b>
<b>ESTRATTO DI MALTO (MALT EXTRACT)</b> Estratto di malto essiccato ottenuto da cereali germogliati.		<b>500 g</b>	<b>15052</b>
<b>PEPTONE BATTERIOLOGICO</b> Peptone ottenuto dall' <b>idrolisi enzimatica di tessuti animali (enzymatic digest of animal tissue)</b>		<b>500 g</b> <b>5 Kg</b>	<b>15055</b> <b>15055/A</b>
<b>PEPTONE BATTERIOLOGICO NEUTRALIZZATO</b> Peptone <b>neutralizzato</b> ottenuto dall' <b>idrolisi enzimatica di tessuti animali</b> .		<b>500 g</b>	<b>15058</b>
<b>PEPTONE DI SOYA NEUTRALIZZATO</b> Peptone di soia ottenuto dall' <b>idrolisi enzimatica della farina di semi di soia (enzymatic digest of soya)</b> .		<b>500 g</b>	<b>15085</b>
<b>PEPTONE MYCOLOGICO</b> Miscela di peptoni per la coltura di miceti.		<b>500 g</b>	<b>15060</b>
<b>PROTEOSE PEPTONE</b> Peptone <b>speciale</b> ottenuto da <b>idrolisi enzimatica di tessuti animali</b> .		<b>500 g</b>	<b>15090</b>
<b>SACCAROSIO BATTERIOLOGICO</b> Saccarosio per uso batteriologico.		<b>500 g</b>	<b>15102</b>
<b>SKIM MILK</b> Latte scremato in polvere per batteriologia.		<b>500 g</b>	<b>15051</b>
<b>SODIUM BISELENITE</b> Biselenite di sodio per uso batteriologico.		<b>100 g</b>	<b>15097</b>
<b>SODIO CLORURO BATTERIOLOGICO</b> Sodio cloruro per uso batteriologico.		<b>500 g</b>	<b>15105</b>

**AGAR, PEPTONI ED INGREDIENTI VARI**

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>SODIO GLUTAMMATO</b>		<b>300 g</b>	<b>15120</b>
<b>TRYPTONE</b> Tryptone ottenuto dall'idrolisi enzimatica della caseina ( <i>enzymatic digest of casein</i> )		<b>500 g</b> <b>5 Kg</b>	<b>15115</b> <b>15115/A</b>
<b>TRYPTOSE</b> Tryptose ottenuto dall'idrolisi enzimatica della caseina e tessuti animali ( <i>Enzymatic digest of animal and plant tissue</i> )		<b>500 g</b>	<b>15110</b>
<b>XILOSE</b>		<b>500 g</b>	<b>15120</b>

## SUPPLEMENTI

### SUPPLEMENTI SELETTIVI LIOFILIZZATI PER TERRENI DI COLTURA

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>ACIDO ROSOLICO 1 %</b> Supplemento selettivo da utilizzare in aggiunta al terreno m-FC Agar Base (Ref. 10082) e m-FC Broth Base (Ref. 10083) per l'isolamento dei coliformi.		<b>10 Fiale x 0,1 g (1/1000 ml)</b>	<b>16090</b>
<b>ACTIDIONE (Cicloeximide) SUPPLEMENT (4 mg/lt)</b> Supplemento selettivo per il conteggio dei batteri nelle bevande fermentate.		<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16097</b>
<b>ACTIDIONE (Cicloeximide) SUPPLEMENT (10 mg/lt)</b> Supplemento selettivo per il conteggio dei batteri nelle bevande fermentate.		<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16098</b>
<b>AMPICILLINA Selective Supplement (5 mg/lt)</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di <i>Aeromonas hydrophila</i> .		<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16021</b>
<b>AMPICILLINA Selective Supplement (10 mg/lt)</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di <i>Aeromonas hydrophila</i> .		<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16053</b>
<b>BACILLUS Cereus Selective Supplement</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di <i>Bacillus cereus</i> .	<b>ISO 7932: 2005</b>	<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16018</b>
<b>BACILLUS Cereus Chromogenic Selective Supplement</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di <i>Bacillus cereus</i> .		<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16045</b>
<b>BRUCELLA Selective Supplement</b> Supplemento selettivo per l'isolamento delle <i>Brucelle</i> .	<b>ISO 10272-1: 2006</b>	<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16020</b>
<b>CAMPYLOBACTER Growth Selective Supplement</b> Supplemento di crescita per l'isolamento di <i>Campylobacter spp.</i>	<b>ISO 10272-1: 2006</b>	<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16022</b>
<b>CAMPYLOBACTER Selective Supplement BLASER WANG</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di <i>Campylobacter spp.</i>		<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16024</b>
<b>CAMPYLOBACTER Selective Supplement BOLTON</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di <i>Campylobacter spp.</i>	<b>ISO 10272-1: 2006</b>	<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16052</b>
<b>CAMPYLOBACTER CCDA Selective Supplement BOLTON</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di <i>Campylobacter spp.</i>	<b>ISO 10272-1: 2006</b>	<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16054</b>
<b>CAMPYLOBACTER Selective Supplement BUTZLER</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di <i>Campylobacter spp.</i>		<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16026</b>
<b>CAMPYLOBACTER Selective Supplement PRESTON</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di <i>Campylobacter spp.</i>	<b>ISO 10272-1: 2006</b>	<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16030</b>
<b>CAMPYLOBACTER Selective Supplement KARMALI</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di <i>Campylobacter spp.</i>		<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16028</b>
<b>CAMPYLOBACTER Selective Supplement SKIRROW</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di <i>Campylobacter spp.</i>		<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16031</b>
<b>CHLORAMPHENICOL Selective Supplement (100 mg/lt)</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di lieviti e muffe.	<b>ISO 21527-1-2: 2008</b>	<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16005</b>
<b>m-CP Selective Supplement</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di <i>Clostridium perfringens</i>		<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16123</b>
<b>m-CP Supplement A</b> (Fenofaleina disossato) (1/500 g) <b>m-CP Supplement B</b> (Cloruro ferrico esaidrato) (1/500 g) <b>m-CP Supplement C</b> (Indosil $\beta$ -D-glucoside) (1/500 g) Substrati selettivi per l'isolamento di <i>Clostridium perfringens</i>	<b>DL n. 31 del 020/02/2001</b>	<b>1 Fiala x 750 mg 1 Fiala x 700 mg 1 Fiala x 450 mg</b>	<b>16050 16051 16049</b>
<b>GENTAMICIN Selective Supplement (50 mg/lt)</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di lieviti e muffe.	<b>ISO 7954: 1987</b>	<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16046</b>
<b>KANAMYCIN Selective Supplement</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di streptococchi di gruppo D.		<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16009</b>
<b>LEGIONELLA (BCYE) Growth Supplement</b> Supplemento di crescita per l'isolamento delle Legionelle.	<b>ISO 11731: 2: 2004</b>	<b>10 Fiale x 100 ml 10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16011 16089</b>

**SUPPLEMENTI SELETTIVI LIOFILIZZATI PER TERRENI DI COLTURA**

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>LEGIONELLA (BCYE) Supplement (w/o L-cysteine)</b> Supplemento di crescita per l'isolamento delle Legionelle.	ISO 11731: 2: 2004	10 Fiale x 100 ml 10 Fiale x 500 ml	16087 16138
<b>LEGIONELLA (BMPA) Selective Supplement</b> Supplemento selettivo per l'isolamento delle Legionelle.		10 Fiale x 100 ml 10 Fiale x 500 ml	16085 16136
<b>LEGIONELLA (GVPC) Selective Supplement</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di Legionella spp.	ISO 11731: 2: 2004	10 Fiale x 500 ml	16083
<b>LEGIONELLA (MWY) Selective Supplement</b> Supplemento selettivo per l'isolamento delle Legionelle.		10 Fiale x 100 ml 10 Fiale x 500 ml	16086 16134
<b>LISTERIA FRASER Selective Supplement</b> Supplemento selettivo per l'isolamento della Listeria.	ISO 11290-1: 1996 Adm. 1: 2004	10 Fiale x 500 ml	16019
<b>LISTERIA HALF FRASER Selective Supplement (1/2 conc.)</b> Supplemento selettivo per l'isolamento della Listeria.	ISO 11290-1: 1996 Adm. 1: 2004 ISO 11290-1: 2005	10 Fiale x 225 ml	16029
<b>LISTERIA Selective Supplement (OXFORD)</b> Supplemento selettivo per l'isolamento della Listeria.	ISO 11290-1/2: 1996 Adm. 1: 2004	10 Fiale x 500 ml	16012
<b>LISTERIA Selective Supplement (PALCAM)</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di Listeria monocytogenes.	ISO 11290-1/2: 1996 Adm. 1: 2004	10 Fiale x 500 ml	16057
<b>LISTERIA Selective Enrichment Supplement (FDA)</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di Listeria monocytogenes.		10 Fiale x 500 ml	16062
<b>LISTERIA Selective Enrichment Supplement UVM I</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di Listeria monocytogenes.		10 Fiale x 500 ml	16016
<b>LISTERIA Selective Enrichment Supplement UVM II</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di Listeria monocytogenes.		10 Fiale x 500 ml	16017
<b>LISTERIA LIPASE C SUPPLEMENT</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di Listeria monocytogenes.	ISO 11290: 2005	10 Fiale x 500 ml	16122
<b>LISTERIA CHROMOGENIC SELECTIVE SUPPLEMENT</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di Listeria monocytogenes.		10 Fiale x 500 ml	16124
<b>MUG Supplement</b> Supplemento per l'identificazione di Escherichia coli.		10 Fiale x 500 ml	16015
<b>NOVOBIOCINE Selective supplement (20 mg/lt)</b> Supplemento selettivo per la preparazione del MSRV Medium, per la determinazione dei ceppi mobili di salmonella.	ISO 6579: 2002 Adm.1: 2007 (E)	10 Fiale x 500 ml	16294
<b>NOVOBIOCINA Selective Supplement (40 mg/lt)</b> Supplemento selettivo da utilizzare con il Mueller Kauffman Tetrathionate Broth Base (Ref. 10227) per l'isolamento di Salmonella, e può essere utilizzato nel brodo di arricchimento m-TSB (Ref. 10193) per la ricerca di Escherichia coli sierotipo O157:H7.	ISO 6579: 2008 ISO/DIS 16654: 1999	10 Fiale x 500 ml	16126
<b>O.G.Y.E. Selective Supplement (100 mg/lt)</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di lieviti e muffe.	ISO 7954: 1987	10 Fiale x 500 ml	16027
<b>PERFRIGENS OPSP Supplement A</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di Clostridium perfringens.		10 Fiale x 500 ml	16066
<b>PERFRIGENS OPSP Supplement B</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di Clostridium perfringens.		10 Fiale x 500 ml	16068
<b>PERFRIGENS SFP Selective Supplement</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di Clostridium perfringens.		10 Fiale x 500 ml	16069
<b>PERFRIGENS TSC Selective Supplement</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di Clostridium perfringens.	ISO 7937:2005	10 Fiale x 500 ml	16070
<b>PSEUDOMONAS Selective Supplement CN</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di Pseudomonas.	ISO 12780: 2002 ISO 16266: 2008	10 Fiale x 500 ml	16058
<b>PSEUDOMONAS Selective Supplement CFC</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di Pseudomonas.		10 Fiale x 500 ml	16060

**SUPPLEMENTI SELETTIVI LIOFILIZZATI PER TERRENI DI COLTURA**

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>R.P.F. Selective Supplement</b> Supplemento selettivo per l'identificazione di stafilococchi coagulasi positivi.	<b>ISO 6888-2: 2004</b>	<b>5 Fiale x 100 ml</b> <b>10 Fiale x 100 ml</b>	<b>16032</b> <b>16035</b>
<b>TICARCILLINA –IRGASAN Selective Supplement</b>		<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16031</b>
<b>VANCOMICINA Selective Supplement (10 mg/L)</b>		<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16043</b>
<b>YERSINIA Selective Supplement</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di <i>Yersinia</i> .		<b>10 Fiale x 500 ml</b>	<b>16120</b>

**SUPPLEMENTI SELETTIVI LIQUIDI PER TERRENI DI COLTURA**

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>ACIDO LATTICO Soluzione 10 %</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di lieviti e muffe.		<b>10 Fiale x 5 ml</b> <b>(1/500 ml)</b>	<b>16079</b>
<b>CLORATO DI POTASSIO Soluzione 5 %</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di coliformi fecali.		<b>10 Fiale x 5 ml</b> <b>(1/250 ml)</b>	<b>16094</b>
<b>EGGY YOLK EMULSION</b> Supplemento di arricchimento per l'isolamento di batteri produttori di lecitinasi ( <i>Bacillus</i> e <i>Clostridium</i> ).	<b>ISO 7937:2005</b>	<b>4 Flaconi x 50 ml</b>	<b>16003</b>
<b>EGGY YOLK TELLURITE EMULSION</b> Supplemento di arricchimento per l'isolamento di stafilococchi coagulasi positivi.	<b>ISO 7932: 2005</b> <b>ISO 6888-1: 2004</b>	<b>4 Flaconi x 50 ml</b>	<b>16002</b>
<b>FUCSINA BASICA Soluzione 10 %</b> Supplemento selettivo da utilizzare in aggiunta ai terreni m-Endo Agar Les Base (Ref. 10076) e m-Endo Broth Base (Ref. 10081) per l'isolamento dei coliformi.	<b>APAT CNR IRSA</b> <b>7010 Met. C</b>	<b>10 Fiale x 8 ml</b> <b>(1/1000 ml)</b>	<b>16088</b>
<b>GLICEROLO Soluzione</b> Supplemento per la preparazione di terreni di coltura.	<b>ISO 12780: 2002</b> <b>ISO 16266: 2008</b>	<b>2 Flaconi x 200 ml</b>	<b>16038</b>
<b>IODINE Soluzione</b> Supplemento da utilizzare in aggiunta al terreno Mueller Kauffman Tetrathionate Broth Base (Ref. 10227) per l'isolamento di <i>Salmonella</i> .	<b>ISO 6579: 2008</b>	<b>10 Fiale x 10 ml</b> <b>(1/500 ml)</b>	<b>16098</b>
<b>MULLER KAUFMANN Selective Supplement</b> Supplemento selettivo per l'isolamento di <i>Salmonella</i> .	<b>ISO 3566</b> <b>ISO 6785</b>	<b>2 Flaconi x 50 ml</b> <b>+1 Flacone x 50 ml</b>	<b>16092</b>
<b>TELLURITE DI POTASSIO 3,5 %</b> Supplemento selettivo per l'identificazione di stafilococchi patogeni.		<b>1 Flacone x 20 ml</b>	<b>16072</b>
<b>TWEEN 80</b> Tensioattivo da aggiungere ai terreni di coltura per diminuire la tensione superficiale intorno ai batteri e per neutralizzare l'azione dei disinfettanti utilizzati per la pulizia delle superfici di lavoro.		<b>1 Flacone x 100 ml</b>	<b>16080</b>
<b>TTC Soluzione 0.125 %</b> Supplemento da utilizzare in aggiunta al terreno Tergitol 7 Agar Base (Ref. 10257), per la differenziazione dei batteri.		<b>10 Fiale x 2 ml</b> <b>(1/100 ml)</b>	<b>16076</b>
<b>TTC Soluzione 0.05 % (0,025 g/l)</b>	<b>ISO 9308-1: 2002</b>	<b>10 Fiale x 5 ml</b> <b>(1/100 ml)</b>	<b>16075</b>
<b>TTC Soluzione 0.5 % (0,025 g/l)</b> Supplemento da utilizzare in aggiunta al terreno Tergitol 7 Agar Base (Ref. 10257), per la differenziazione dei batteri.		<b>10 Fiale x 5 ml</b> <b>(1/1000 ml)</b>	<b>16081</b>
<b>TTC Soluzione 1 %</b> Supplemento da utilizzare in aggiunta ai terreni Slanetz and Bartley Agar Base (Ref. 10064) e Kf-Streptococcus Agar (Ref. 10099), per la differenziazione dei batteri.	<b>ISO 7899-2: 2003</b>	<b>5 Fiale x 10 ml</b> <b>(1/1000 ml)</b>	<b>16071</b>
<b>UREA Soluzione 40 %</b> Supplemento da utilizzare in aggiunta ai terreni Urea Agar Base (Ref. 10256) e Urea Broth Base (Ref. 10258), per la determinazione dell'attività ureasica dei batteri.		<b>10 Fiale x 5 ml</b> <b>(1/100 ml)</b>	<b>16074</b>

## SANGUE E DERIVATI

### SANGUE ANIMALE STERILE DEFIBRINATO

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>SANGUE DEFIBRINATO DI CAVALLO</b> Sangue di cavallo defibrinato sterile per uso batteriologico		25 ml 50 ml 100 ml 500 ml	5471 5473 5475 5477
<b>SANGUE DI MONTONE DEFIBRINATO</b> Sangue di montone defibrinato sterile per uso batteriologico.		25 ml 50 ml 100 ml 500 ml	5449 5451 5459 5454

### SANGUE ANIMALE STERILE IN SOLUZIONE ELSEVER

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>SANGUE DI CONIGLIO 10 %</b> Sangue di coniglio sterile in soluzione elsever al 10 % per reazioni sierologiche.		10 ml	5463
<b>SANGUE DI MONTONE 10 %</b> Sangue di montone sterile in soluzione elsever al 10 % per reazioni sierologiche		25 ml 50 ml 100 ml	5461 5456 5467
<b>SANGUE DI POLLO 10 %</b> Sangue di pollo sterile in soluzione elsever al 10 % per reazioni sierologiche.		10 ml	5458

### PRODOTTI DERIVATI

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>SIERO BOVINO (BOVINE SERUM)</b> Siero bovino sterile per uso batteriologico.		100 ml	16036
<b>SIERO DI CAVALLO (HORSE SERUM)</b> Siero di cavallo sterile per uso batteriologico.		100 ml	16004
<b>SIERO DI CAVALLO LACCATO (LAKED HORSE SERUM)</b> Siero di cavallo laccato sterile per uso batteriologico.		100 ml	16033

## ANAEROBIOSI, MICROAEROFILIA E CARBOSSIFILIA



### REAGENTI PER GIARA

Sistemi di incubazione in giara

PRODOTTO	Cont.	REF.
<b>ANAEROGEN 2.5</b> Buste per giare di 2.5 litri. Non richiedono l'uso di catalizzatore, né l'aggiunta di acqua.	<b>10 Buste</b>	<b>AN0025A</b>
<b>ANAEROGEN 3.5</b> Buste per giare di 3.5 litri. Non richiedono l'uso di catalizzatore, né l'aggiunta di acqua.	<b>10 Buste</b>	<b>AN0035A</b>
<b>INDICATORE DI ANAEROBIOSI</b>	<b>100 Strisce</b>	<b>BR0055B</b>
<b>CAMPYGEN 2.5</b> Buste per giare di 2.5 litri. Non richiedono l'uso di catalizzatore, né l'aggiunta di acqua.	<b>10 Buste</b>	<b>CN0025A</b>
<b>CAMPYGEN 3.5</b> Buste per giare di 3.5 litri. Non richiedono l'uso di catalizzatore, né l'aggiunta di acqua.	<b>10 Buste</b>	<b>AN0035A</b>
<b>CO2GEN 2.5</b> Buste per giare di 2.5 litri. Non richiedono l'uso di catalizzatore, né l'aggiunta di acqua.	<b>10 Buste</b>	<b>CD0025A</b>

## REAGENTI PER ANAEROBIOSI, MICROAEROFILIA E CARBOSSIFILIA

Sistemi di incubazione individuale in busta. Non richiedono l'uso del catalizzatore, né l'aggiunta di acqua.

PRODOTTO	Cont.	REF.
<b>ANAEROGEN COMPACT</b> Buste per anaerobiosi. Ogni busta contiene 10 bustine di carta AnaeroGen Compact sigillate singolarmente in involucro protettivo di alluminio e 10 sacchetti di plastica trasparente per l'incubazione.	<b>10 Buste + 10 Sacchetti</b>	<b>AN0010C</b>
<b>ANAEROGEN W-ZIP COMPACT</b> Buste per anaerobiosi. Ogni busta contiene 10 bustine di carta AnaeroGen Compact sigillate singolarmente in involucro protettivo di alluminio e 10 sacchetti di plastica trasparente per l'incubazione.	<b>10 Buste + 10 Sacchetti</b>	<b>AN0010W</b>
<b>ANAEROGEN COMPACT</b> Buste per anaerobiosi. Ogni confezione contiene 20 bustine di carta AnaeroGen Compact sigillate singolarmente in involucro protettivo di alluminio. Da utilizzare con Plastic Pouches (sacchetti di plastica trasparente per l'incubazione).	<b>20 Buste</b>	<b>AN0020C</b>
<b>CAMPYGEN COMPACT</b> Buste per microaerofilia. Ogni confezione contiene 20 bustine di carta CampyGen Compact sigillate singolarmente in involucro protettivo di alluminio. Da utilizzare con Plastic Pouches (sacchetti di plastica trasparente per l'incubazione).	<b>20 Buste</b>	<b>CN0020C</b>
<b>CO<sub>2</sub>GEN COMPACT</b> Buste per carbossifilia. Ogni confezione contiene 20 bustine di carta CO <sub>2</sub> Gen Compact sigillate singolarmente in involucro protettivo di alluminio. Da utilizzare con Plastic Pouches (sacchetti di plastica trasparente per l'incubazione).	<b>20 Buste</b>	<b>CD0020C</b>
<b>SEALING CLIPS</b> Barrette di plastica per sigillare i sacchetti di incubazione. Garantiscono una perfetta tenuta dell'aria e sono riutilizzabili.	<b>5 Barrette</b>	<b>AN0005C</b>
<b>PLASTIC POUCHES</b> Sacchetti di plastica trasparente per l'incubazione.	<b>20 sacchetti</b>	<b>AG0020C</b>
<b>SISTEMA GIARA 2,5 Lt.</b> Il sistema comprende: giara da 2,5 litri in policarbonato, anello di guarnizione ad "O", coperchio monoblocco con clips e maniglia, cestello porta-piastre per 12 piastre a Ø 100 mm. Dimensioni: Ø 14 cm. x h 18 cm. Deve essere utilizzata esclusivamente con le buste AnaeroGen 2.5, CampyGen 2.5 e Co <sub>2</sub> Gen.	<b>1 Sistema</b>	<b>AG0025A</b>



## NUTRIENT PETRI AGAR (NPA)

### KIT (NPA) NUTRIENT PETRI AGAR (MF)

Kit completi contenenti terreni di coltura pronti in piastra petri Ø 60 mm + le membrane di filtrazione con reticolo, in confezione singola sterile.

I Kit completi (NPA) Nutrient Petri Agar (MF), vengono impiegati in combinazione con il metodo delle membrane filtranti (MF), per l'analisi microbiologica alimentare e ambientale.

Per la loro praticità di utilizzo semplificano il procedimento per l'analisi microbiologica, garantendo una migliore crescita delle colonie.

Il Kit (NPA) Nutrient Petri Agar (MF), consiste in una membrana filtrante specifica per il tipo di crescita di colonie, sterile, confezionata in busta singola, ed una piastra petri dal diam. di 60 mm. con terreno di coltura pronto all'uso, prodotto secondo le GMP e in accordo con le formulazioni UNI EN ISO, APAT IRSA-CNR.



I Vantaggi per l'utilizzatore sono:

1) **La convenienza** (Confezioni da 50 determinazioni);

2) **Nessuna perdita di tempo** per la preparazione dei terreni di coltura (sterilizzazione, diidratazione, ecc.);

3) **Semplicità d'uso**: Tutti i materiali all'interno del kit sono pronti all'uso;

4) **Qualità**: in produzione, ciascun lotto di terreno di coltura pronti in piastre petri viene testato con i ceppi di riferimento ATCC. **Certificato di Qualità**: incluso nella confezione.

5) **Conservazione**: I Kit (NPA) Nutrient Petri Agar (MF) hanno una durata di 6 mesi, se conservati in un luogo buio e asciutto ad una temperatura di 2-8 °C e 4-25 °C.

(\*) Prodotto disponibile con ordine minimo: 5 Conf.

#### PRODOTTO

#### Cont.

#### REF.

#### BRETTANOMYCES

**KIT (NPA) BRETTANOMYCES (MF)** <sup>NEW</sup>  
*Kit per la conta di Brettanomyces dekkera nei vini.*

50 Test

40052

Il Kit contiene: n. 50 piastre petri (Ø 60 mm.) con terreno pronto **Brettanomyces Selective Agar** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.), **fondo bianco** con reticolo nero, porosità 0,45 µm - Ø 47 mm.

Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C - **Certificato di Qualità**: incluso nella confezione.

Campo di applicazione: Bevande. **Norme di riferimento**: /

Periodo e temperatura d'incubazione: 2/5 giorni a 30 °C

Aspetto tipico delle colonie: Colonie di colore variabile tra il dorato e il giallo arancione.

#### CLOSTRIDIUM

**KIT (NPA) CLOSTRIDIUM PERFRINGENS 1 (MF)**  
*Kit per la ricerca e la conta di Clostridium perfringens.*

50 Test

40030

Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno **SPS Agar** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – **Fondo bianco** con reticolo nero - Porosità 0,45 µm - Ø 47 mm.

Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C - **Certificato di Qualità**: incluso nella confezione.

Campo di applicazione: Acque.

**Norme di riferimento**: APAT IRSA-CNR 7060 Metodo B.

Periodo e temperatura d'incubazione: 48 ± 2 ore a 37,0 ± 0,5 °C (anaerobiosi).

Aspetto tipico delle colonie: Le colonie sono di colore nero con alone nerastro.

**KIT (NPA) CLOSTRIDIUM PERFRINGENS 2 (MF)** <sup>NEW</sup>  
*Kit per la ricerca e la conta di Clostridium perfringens.*

50 Test

40030

Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno **M-CP Agar** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – **Fondo bianco** con reticolo nero - Porosità 0,45 µm - Ø 47 mm.

Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C - **Certificato di Qualità**: incluso nella confezione.

Campo di applicazione: Acque.

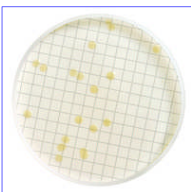
**Norme di riferimento**: D.L. n 31/2001

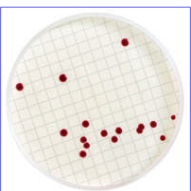
Periodo e temperatura d'incubazione: 21 ± 3 ore a 44 ± 1 °C.

Aspetto tipico delle colonie: Giallo opache, rosse dopo esposizione ai vapori di ammonio idrossido.

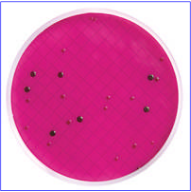


**KIT (NPA) NUTRIENT PETRI AGAR (MF)**

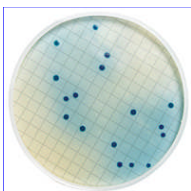
PRODOTTO	Cont.	REF.
<b>CONTA TOTALE</b>		
<b>KIT (NPA) CONTA TOTALE 1 (MF)</b> <i>Kit per la conta delle cariche microbiche.</i>	<b>50 Test</b>	<b>40000</b>
 <p>Il Kit contiene: n. 50 piastre petri (Ø 60 mm.) con terreno pronto <b>Plate Count Agar (Standard Methods)</b> / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.), <b>fondo bianco</b> con reticolo nero, porosità 0,45 µm - Ø 47 mm  <b>Stabilità:</b> 6 Mesi a 4/25 °C - <b>Certificato di Qualità:</b> incluso nella confezione.</p> <p><b>Campo di applicazione:</b> Acque, alimenti, bevande.</p> <p><b>Norme di riferimento:</b> <b>APHA (1998) - Standard Methods for the Examination of water and wastewater.</b></p> <p><b>Periodo e temperatura d'incubazione:</b> 48 ore a 22.0 ± 1 °C, 48 ore a 37 ± 0.5 °C.</p> <p><b>Aspetto tipico delle colonie:</b> Le colonie sono da trasparenti a bianche cremose, alcune possono essere pigmentate.</p>		

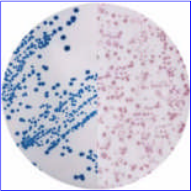
<b>KIT (NPA) CONTA TOTALE 2 (MF)</b> <i>Kit per la conta delle cariche microbiche.</i>	<b>50 Test</b>	<b>40002*</b>
 <p>Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno <b>Plate Count Agar (Standard Methods) Agar + TTC</b> / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) - <b>Fondo bianco</b> con reticolo nero - Porosità 0,45 µm - Ø 47 mm.  <b>Stabilità:</b> 6 Mesi a 4/25 °C - <b>Certificato di Qualità:</b> incluso nella confezione.</p> <p><b>Campo di applicazione:</b> Acque, alimenti, bevande.</p> <p><b>Norme di riferimento:</b> <b>APHA (1998) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.</b></p> <p><b>Periodo e temperatura d'incubazione:</b> Da 24 a 72 ore a 25.0 - 37.0 ± 0.5 °C.</p> <p><b>Aspetto tipico delle colonie:</b> Le colonie assumono una colorazione rossa dovuta alla riduzione del trifeniltetrazolio cloruro (TTC)</p>		

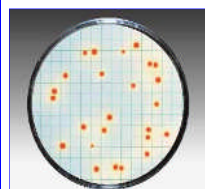
**COLIFORMI TOTALI**

<b>KIT (NPA) COLIFORMI TOTALI (MF)</b> <i>Kit per la ricerca e la conta di coliformi totali.</i>	<b>50 Test</b>	<b>40005</b>
 <p>Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno <b>m-Endo Agar Les</b> / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) - Fondo bianco con reticolo nero - Porosità 0,45 µm - Ø 47 mm.  <b>Stabilità:</b> 6 Mesi a 4/25 °C (al riparo della luce) - <b>Certificato di Qualità:</b> incluso nella confezione.</p> <p><b>Campo di applicazione:</b> Acque, latte.</p> <p><b>Norme di riferimento:</b> <b>APHA (1998) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - APAT IRSA-CNR 7010 Med. C.</b></p> <p><b>Periodo e temperatura d'incubazione:</b> Da 18 a 24 ore a 37.0 ± 0.5 °C.</p> <p><b>Aspetto tipico delle colonie:</b> Le colonie sono rosso scuro e/o con lucentezza metallica verde-dorata cresciute entro le 24 ore. La lucentezza può interessare l'intera colonia o essere limitata nella zona centrale del perimetro.</p>		

**E. COLI e COLIFORMI FECALI**

<b>KIT (NPA) COLIFORMI FECALI (MF)</b> <i>Kit per la ricerca e la conta di Coliformi fecali.</i>	<b>50 Test</b>	<b>40010</b>
 <p>Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno <b>m-FC Agar + Acido Rosolico</b> / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) - <b>Fondo bianco</b> con reticolo nero - Porosità 0,45 µm - Ø 47 mm.  <b>Stabilità:</b> 6 Mesi a 4/25 °C - <b>Certificato di Qualità:</b> incluso nella confezione.</p> <p><b>Campo di applicazione:</b> Acque.</p> <p><b>Norme di riferimento:</b> <b>APHA (1998) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - APAT IRSA-CNR 7020 Metodo B.</b></p> <p><b>Periodo e temperatura d'incubazione:</b> 24 ore a 44.5 ± 0.2 °C.</p> <p><b>Aspetto tipico delle colonie:</b> I coliformi fecali si presentano con colonie <b>colorate di blu</b>, i coliformi non fecali si presentano con colonie variabili dal grigio-crema al panna. Alcuni <b>Escherichia coli</b> possono formare colonie atipiche di colore giallo chiaro.</p>		

<b>KIT (NPA) E. COLI/COLIFORMI CHROMOGENIC (MF) <sup>NEW</sup></b> <i>Kit per la ricerca e la conta di E. Coli e Coliformi.</i>	<b>50 Test</b>	<b>40014</b>
 <p>Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno selettivo cromogenico differenziale <b>E. Coli/Coliforms Chromogenic Agar</b> / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) - <b>Fondo bianco</b> con reticolo nero - Porosità 0,45 µm - Ø 47 mm.  <b>Stabilità:</b> 6 Mesi a 2/8 °C - <b>Certificato di Qualità:</b> incluso nella confezione.</p> <p><b>Campo di applicazione:</b> Acque.</p> <p><b>Norme di riferimento:</b> /</p> <p><b>Periodo e temperatura d'incubazione:</b> 18/24 ore a 37.0 ± 0.5 °C.</p> <p><b>Aspetto tipico delle colonie:</b> <b>Escherichia coli:</b> colonie <b>grigio blu</b>, indolo positive. Coliformi (diversi da <i>E. coli</i>): colonie <b>color salmone</b>. <i>Proteus</i>: colonie con alone marroncino. Altri enterobatteri: colonie incolori.</p>		

**KIT (NPA) NUTRIENT PETRI AGAR (MF)**
**PRODOTTO**
**Cont.**
**REF.**
**E. COLI e COLIFORMI FECALI**
**KIT (NPA) E. COLI (MF)**
*Kit per la ricerca e la conta di E. coli.*
**50 Test**
**40013**


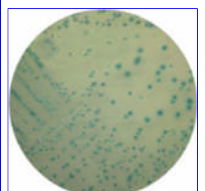
Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno **Tergitol 7 Agar + TTC** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – Fondo bianco con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm ero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.  
Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C - **Certificato di Qualità**: incluso nella confezione.

Campo di applicazione: Acque.

Norme di riferimento: **ISO 9308: 2002**

Periodo e temperatura d'incubazione: 24 ore a 37.0 ± 0.5 °C.

Aspetto tipico delle colonie: *E. coli*: colonie da giallo ad arancio con alone giallo. *Enterobacter/Klebsiella*: colonie giallo-verde. *Salmonella/Proteus*: colonie rosse con alone bluastro

**E. COLI BETA GLUCORONIDASI**
**KIT (NPA) E. COLI BETA GLUCORONIDASI (MF) <sup>NEW</sup>**
*Kit per l'identificazione e la conta di E. Coli beta glucuronidasi.*
**50 Test**
**40032**


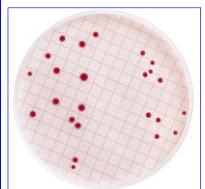
Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno selettivo cromogenico differenziale **T.B.X. Chromogenic Agar** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – **Fondo bianco** con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.  
Stabilità: 6 Mesi a **2/8 °C** - **Certificato di Qualità**: incluso nella confezione.

Campo di applicazione: Acque, alimenti.

Norme di riferimento: **APAT IRSA-CNR 7030 Metodo F.**

Periodo e temperatura d'incubazione: 18/24 ore a 44.0 ± 0.5 °C.

Aspetto tipico delle colonie: *Escherichia coli*: *E. Coli*: **blu-verde** - *Escherichia Coli* 0157: H7: β-D-glucuronidase negativa, **colonie incolori** - *Salmonella*, *Streptococcus*, *Klebsiella*: inibita

**ENTEROCOCCHI e STREPTOCOCCHI FECALI**
**KIT (NPA) ENTEROCOCCHI 1 (MF)**
*Kit per la ricerca e la conta di enterococchi.*
**50 Test**
**40035**


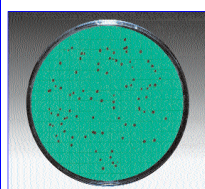
Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno **Slanetz and Bartley Agar +TTC** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – **Fondo bianco** con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.  
Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C - **Certificato di Qualità**: incluso nella confezione.

Campo di applicazione: Acque, latte.

Norme di riferimento: **ISO 7899: 2003 - APAT IRSA-CNR 7040 Metodo C.**

Periodo e temperatura d'incubazione: 48 a 37.0 ± 0.5 °C.

Aspetto tipico delle colonie: *Enterococchi*: colonie **rosse, marrone rossicce o rosa**.

**KIT (NPA) ENTEROCOCCHI 2 (MF)**
*Kit per la ricerca e la conta di enterococchi.*
**50 Test**
**40036**


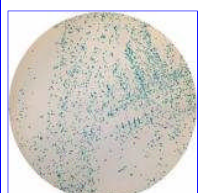
Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno **Bile Aesculin Azide Agar** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – **Fondo bianco** con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.  
Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C. **Certificato di Qualità**: incluso nella confezione.

Campo di applicazione: Acque, latte.

Norme di riferimento: **ISO 7899: 2003 - APAT IRSA-CNR 704 Metodo C.**

Periodo e temperatura d'incubazione: 18-24 ore a 37.0 ± 0.5 °C. / 2 ore a 44.0 ± 0.5 °C, per il test di conferma degli enterococchi nelle acque, secondo la norma ISO 7899-2: 2003.

Aspetto tipico delle colonie: Colonie con un alone da bruno a nero.

**KIT (NPA) ENTEROCOCCHI 3 (MF) <sup>NEW</sup>**
*Kit per la ricerca e la conta di enterococchi.*
**50 Test**
**40034\***


Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno **m-EI Chromogenic Agar** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – **Fondo bianco** con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.  
Stabilità: **6 Mesi a 2/8 °C** - **Certificato di Qualità**: incluso nella confezione.

Campo di applicazione: Acque.

Norme di riferimento: /

Periodo e temperatura d'incubazione: 24 ore a 37.0 ± 0.5 °C.

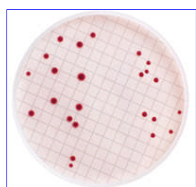
Aspetto tipico delle colonie: *Enterococcus faecium*: **blu** - *Enterococcus faecalis*: **blu**.

**KIT (NPA) NUTRIENT PETRI AGAR (MF)**

PRODOTTO	Cont.	REF.
----------	-------	------

**ENTEROCOCCI e STREPTOCOCCI FECALI**

<b>KIT (NPA) STREPTOCOCCI FECALI (MF)</b> <i>Kit per la ricerca di streptococchi fecali.</i>	<b>50 Test</b>	<b>40025</b>
---	----------------	--------------



Il Kit contiene: n. 50 piastre ( $\varnothing$  60 mm.) con terreno **Kf-Streptococcus Agar + TTC** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – **Fondo bianco** con reticolo nero - Porosità 0,45  $\mu$ m –  $\varnothing$  47 mm.  
Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C - **Certificato di Qualità**: incluso nella confezione.

Campo di applicazione: Acque

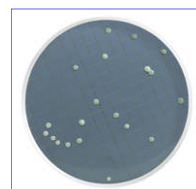
Norme di riferimento: /

Periodo e temperatura d'incubazione: 48 ore a 37,0  $\pm$  0,5 °C.

Aspetto tipico delle colonie: Gli Streptococchi danno luogo a colonie rosse o rosa circondate da un alone giallo.

**FLORA BATTERICA**

<b>KIT (NPA) FLORA BATTERICA 1 (MF)</b> <sup>NEW</sup> <i>Kit per la ricerca e la conta della flora batterica.</i>	<b>50 Test</b>	<b>40038*</b>
---	----------------	---------------



Il Kit contiene: n. 50 piastre ( $\varnothing$  60 mm.) con terreno **WL Nutrient Agar** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – **Fondo nero** con reticolo nero - Porosità 0,45  $\mu$ m –  $\varnothing$  47 mm.  
Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C - **Certificato di Qualità**: incluso nella confezione.

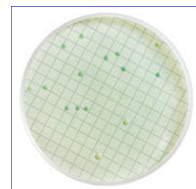
Campo di applicazione: Processi di fermentazione bevande (birra, vino).

Norme di riferimento: /

Periodo e temperatura d'incubazione: Incubare a 30  $\pm$  2 (lieviti e muffe), 35  $\pm$  2 °C (batteri) per 48-72 ore.

Aspetto tipico delle colonie: Le colonie si presentano piccole di colore verde, con il centro verde scuro. I lieviti in colonie più grandi, bianche e di consistenza cremosa.

<b>KIT (NPA) FLORA BATTERICA 2 (MF)</b> <sup>NEW</sup> <i>Kit per la ricerca e la conta della flora batterica, con inibizione di lieviti e muffe.</i>	<b>50 Test</b>	<b>40040*</b>
--	----------------	---------------



Il Kit contiene: n. 50 piastre ( $\varnothing$  60 mm.) con terreno **WL Differential Agar + Cycloeximide** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – **Fondo bianco** con reticolo nero - Porosità 0,45  $\mu$ m –  $\varnothing$  47 mm.  
Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C - **Certificato di Qualità**: incluso nella confezione.

Campo di applicazione: Processi di fermentazione bevande (birra, vino).

Norme di riferimento: /

Periodo e temperatura d'incubazione: Incubare a 30 o 35 °C per 48- 72 ore.

Aspetto tipico delle colonie: Le colonie si presentano verde-blu.

**LATTOBACILLI**

<b>KIT (NPA) LATTOBACILLI (MF)</b> <sup>NEW</sup> <i>Kit per la ricerca e la conta di lattobacilli.</i>	<b>50 Test</b>	<b>40042*</b>
--	----------------	---------------

Il Kit contiene: n. 50 piastre ( $\varnothing$  60 mm.) con terreno **MRS Agar** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – **Fondo bianco** con reticolo nero - Porosità 0,45  $\mu$ m –  $\varnothing$  47 mm.

Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C - **Certificato di Qualità**: incluso nella confezione.

Campo di applicazione: Bevande (Vino, latte).

Norme di riferimento: **ISO/DIS 15214**.

Periodo e temperatura d'incubazione: lattobacilli termofili: 42 °C per 48 ore; lattobacilli mesofili: 35 °C per 48 ore; lattobacilli psicrofili: 25°C per 5 giorni; mesofili e psicrofili: 30 °C per 48 ore + 22 °C per 24 ore.

Aspetto tipico delle colonie: *Lactobacillus*: Le colonie sono piccole, bianche e di consistenza cremosa. *Saccharomyces*: le colonie sono grandi, bianche e di consistenza cremosa.

**LEGIONELLA**

<b>KIT (NPA) LEGIONELLA (MF)</b> <sup>NEW</sup> <i>Kit per la ricerca e la conta di Legionella .</i>	<b>50 Test</b>	<b>40044</b>
---	----------------	--------------

Il Kit contiene: n. 50 piastre ( $\varnothing$  60 mm.) con terreno **Legionella Selective Agar(GVPC)** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – **Fondo bianco** con reticolo nero - **Porosità 0,22  $\mu$ m** –  $\varnothing$  47 mm.

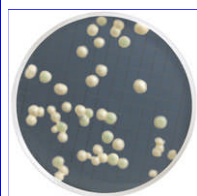
Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C - **Certificato di Qualità**: incluso nella confezione.

Campo di applicazione: Acque.

Norme di riferimento: **ISO 11731-2: 2004**.

Periodo e temperatura d'incubazione: Incubare le piastre a 37 °C ed esaminare giornalmente per 7 giorni.

Aspetto tipico delle colonie: *L. pneumophila* forma colonie di colore bianco-grigio, di diametro fino a 2 mm e con tipico aspetto a "ground-glass".

**KIT (NPA) NUTRIENT PETRI AGAR (MF)**
**PRODOTTO**
**Cont.**
**REF.**
**LIEVITI E MUFFE**
**KIT (NPA) LIEVITI E MUFFE (MF)**
*Kit per la ricerca e la conta di Lieviti e Muffe.*
**50 Test**
**40015**


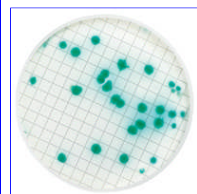
Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno **Sabouraud Dextrose Agar** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – **Fondo nero** con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.  
 Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C - **Certificato di Qualità**: incluso nella confezione.

Campo di applicazione: Acque, bevande (vino).

Norme di riferimento: /

Periodo e temperatura d'incubazione: 48/72 ore a 28/32 ± 0.5 °C.

Aspetto tipico delle colonie: I lieviti formano grandi colonie verdi opache. Le colonie di muffa appaiono verdi e filamentose.

**PSEUDOMONAS**
**KIT (NPA) PSEUDOMONAS (MF)**
*Kit per la ricerca e la conta di Pseudomonas aeruginosa.*
**50 Test**
**40016**


Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno **Pseudomonas Selective Agar CN** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – **Fondo bianco** con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.  
 Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C - **Certificato di Qualità**: incluso nella confezione.

Campo di applicazione: Acque.

Norme di riferimento: **ISO 12780: 2002**.

Periodo e temperatura d'incubazione: 24/48 ore a 37.0 ± 0.5 °C.

Aspetto tipico delle colonie: Le colonie sono **blu verdi** con aloni blu e, illuminate da luce ultravioletta a corta lunghezza d'onda (254 nm), sono fluorescenti.

**SALMONELLA**
**KIT (NPA) SALMONELLA (MF) <sup>NEW</sup>**
*Kit per la ricerca e la conta di Salmonella.*
**50 Test**
**40046\***

Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno **Bismuth Sulphite Agar** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – **Fondo bianco** con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.

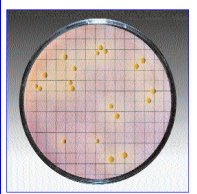
Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C - **Certificato di Qualità**: incluso nella confezione.

Campo di applicazione: Acque, latte.

Norme di riferimento: **APHA**

Periodo e temperatura d'incubazione: 24/48 ore a 37.0 ± 0.5 °C

Aspetto tipico delle colonie: *Salmonella Typhi*: colonie nere, piatte, asciutte, circondate da una zona nera-marrone con riflessi metallici generalmente presenti; *Salmonella Enteritidis*: colonie nere senza zone; *Salmonella Gallinarum*, *Salmonella Choleraesuis*, *Salmonella Paratyphi*, *Shigella*: colonie verdi o marroncine senza zone. I batteri coliformi, Proteus e Shigella sono fortemente inibiti, ma talvolta possono generare colonie verdastre o marroncine.

**STAFILOCOCCI**
**KIT (NPA) STAFILOCOCCI 1 (MF)**
*Kit per la ricerca e la conta di Stafilococchi.*
**50 Test**
**40018\***


Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno **Mannitol Salt Agar** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – **Fondo bianco** con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.  
 Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C - **Certificato di Qualità**: incluso nella confezione.

Campo di applicazione: Acque, latte. **Norme di riferimento:** /

Periodo e temperatura d'incubazione: 36 ore a 37.0 ± 0.5 °C, o 3 giorni (APHA) a 32 °C.

Aspetto tipico delle colonie: Si enumerano le colonie che producono un alone **giallo-brillante** (Stafilococchi coagulasi-positivi), mentre stafilococchi coagulasi negativi sono circondati da un alone rosso o porpora.

**KIT (NPA) STAFILOCOCCI 2 (MF) <sup>NEW</sup>**
*Kit per la ricerca e la conta di Stafilococchi coagulasi positivi.*
**50 Test**
**40048**

Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno **Baird Parker Agar** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – **Fondo bianco** con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.

Stabilità: 6 Mesi a 2/8 °C - **Certificato di Qualità**: incluso nella confezione.

Campo di applicazione: Acque.

Norme di riferimento: **ISO 10678: 1998 - Rapporti ISTISAN 07/5**.

Periodo e temperatura d'incubazione: 24/48 ore a 37.0 ± 0.5 °C

Aspetto tipico delle colonie: I microrganismi appartenenti al genere *Staphylococcus* coagulasi positivi producono colonie nere con margini netti per effetto della riduzione del tellurito a tellurio metallico, circondate in genere da un alone chiaro dovuto all'attività lecitinasica.

# ANALISI AMBIENTALE

- ✦ **ANALISI BATTERIOLOGICA  
DI ARIA E SUPERFICI**
- ✦ **CAMPIONAMENTO  
DELLE SUPERFICI**
- ✦ **ANALISI BATTERIOLOGICA  
DELLE ACQUE**
- ✦ **CAMPIONAMENTO  
DELLE ACQUE**
- ✦ **FILTRAZIONE  
DELLE ACQUE**

# ANALISI AMBIENTALE

## CONTENUTO

## PAG

### ANALISI BATTERIOLOGICA DI ARIA E SUPERFICI

PIASTRE DA CONTATTO	47
SLIDE FLESSIBILI DA CONTATTO	49
STRUMENTAZIONE	50
CLEAN TEST	50

### CAMPIONAMENTO DELLE SUPERFICI

KIT PER IL CAMPIONAMENTO DI SUPERFICI	51
ACCESSORI	52
SACCHETTI STERILI CON "SPUGNA" PER CAMPIONAMENTO	53
"SPUGNE" STERILI PER CAMPIONAMENTO	53
TAMPONI DI TRASPORTO	54

### ANALISI BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE

TERRENI DI COLTURA PRONTI IN PIASTRE DIAM. 60 MM.	55
KIT (NPA) NUTRIENT PETRI AGAR (MF) PER ANALISI BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE	58
KIT (DPS) DROPPER PAD SET (MF) PER ANALISI BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE	63
PETRI PAD	64
KIT (NPS) NUTRIENT PAD SET (MF) PER ANALISI BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE	65
FILTRI A SIRINGA PRONTI	66

### CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE

FLACONI STERILI CON SODIO TIOSOLFATO	67
SACCHETTI STERILI CON SODIO TIOSOLFATO	68
CONTENITORI STERILI	68
FLACONI MONOUSO STERILI	68
FLACONI MONOUSO	69
FLACONI GRADUATI IN VETRO	70
SONDA PRELEVA CAMPIONI	70

### FILTRAZIONE DELLE ACQUE

SISTEMI MULTIPLI PER FILTRAZIONE SOTTO VUOTO	71
ACCESSORI PER SISTEMI MULTIPLI	74
SISTEMI SINGOLI PER FILTRAZIONE SOTTOVUOTO	74
IMBUTI FILTRANTI MONOUSO MICROFIL®	75
ACCESSORI VARI	75
MEMBRANE FILTRANTI	76
EZ PAK® E MEMBRANE FILTRANTI	77



## ANALISI BATTERIOLOGICA DI ARIA E SUPERFICI

### PIASTRE DA CONTATTO "CONTACT PLATES"

Terreni di coltura pronti in piastre da contatto (ø 65 mm), per l'analisi microbiologica dell'aria e delle superfici.

Le **Contact Plates** sono delle piastre da contatto sterili con diametro di 65 mm., con terreno a menisco, con fondo retinato e contrassegnato dalle lettere A/B/CD e dai numeri 1/2/3/4. Essendo destinate al controllo delle superfici, presentano la caratteristica di avere il terreno in rilievo, formando un menisco, che permette di asportare, per adesione i microrganismi presenti. **Utilizzo:** Il prodotto è indicato per il monitoraggio dell'igiene microbiologica ambientale (superfici ed aria) in locali di produzioni industriali, od in aree protette in ambienti nel campo clinico. Possono essere utilizzate con il campionatore d'aria Portatile "Microflow 60". **Conservazione:** a 2-8°C / 4- 25 °C- **Stabilità:** 4/6 Mesi. Preparazioni particolari sono eseguibili a richiesta, per quantitativi superiori a 200 Piastre. (\*) Prodotto disponibile con ordine minimo: **5 Conf.**



PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
----------	-------	-------	-----

### BACILLUS STEAROTHERMOPHILUS (SPORE, BATTERI TERMOFILI E MESOFILI)

<b>DEXTROSE TRYPTONE AGAR</b> Terreno a menisco per l'isolamento ed il conteggio di bacillus stearothermophilus (spore, batteri termofili e mesofili).		5x4 Piastre ø 65 mm	31027*
---	--	---------------------	--------

### CLOSTRIDIUM PERFRINGENS

<b>S.P.S. AGAR</b> Terreno per l'isolamento ed il conteggio di <i>Clostridium perfringens</i> .		5x4 Piastre ø 65 mm	31040*
--	--	---------------------	--------

### CONTA TOTALE

<b>PLATE COUNT AGAR</b> Piastre da contatto per la carica batterica totale delle superfici e dell'aria.		5x4 Piastre ø 65 mm	31000
<b>PLATE COUNT AGAR + NEUTRALIZZANTE</b> Piastre da contatto per la carica batterica totale delle superfici con inattivazione dei disinfettanti.	ISO 18593: 2004 + ISO 4833: 2004	5x4 Piastre ø 65 mm	31002
<b>PLATE COUNT AGAR + NEUTRALIZZANTE (IRRADIATO)</b> Piastre da contatto per la carica batterica totale delle superfici con inattivazione dei disinfettanti (irradiato).		5x4 Piastre ø 65 mm	31001
<b>TRYPTONE (Tryptic) SOY AGAR</b> Piastre da contatto per la carica batterica totale delle superfici e dell'aria.		5x4 Piastre ø 65 mm	31035*
<b>TRYPTONE (Tryptic) SOY AGAR + NEUTRALIZZANTE</b> Piastre da contatto per la carica batterica totale delle superfici e dell'aria, con inattivazione dei disinfettanti.		5x4 Piastre ø 65 mm	31036*
<b>TRYPTONE (Tryptic) SOY AGAR (IRRADIATO)</b> Piastre da contatto per la carica batterica totale delle superfici (irradiato), con inattivazione dei disinfettanti.		5x4 Piastre ø 65 mm	31038
<b>TRYPTONE (Tryptic) SOY AGAR + 0,1% PENICILLINASI + NEUTRALIZZANTE</b> Piastre da contatto per la carica batterica totale delle superfici con inattivazione dei disinfettanti e di una gamma di penicilline.		5x4 Piastre ø 65 mm	31004*

### COLIFORMI / E. COLI

<b>MAC CONKEY AGAR</b> Piastre da contatto per l'isolamento selettivo e il conteggio dei coliformi.		5x4 Piastre ø 65 mm	31015
<b>T.B.X. AGAR</b> Piastre da contatto per l'isolamento selettivo e il conteggio di <i>E. Coli</i> e coliformi.		5x4 Piastre ø 65 mm	31008*
<b>VIOLET RED BILE (LACTOSE) AGAR</b> Piastre da contatto per l'isolamento selettivo e il conteggio dei coliformi.		5x4 Piastre ø 65 mm	31005
<b>VIOLET RED BILE (LACTOSE) AGAR + NEUTRALIZZANTE</b> Piastre da contatto per l'isolamento selettivo e il conteggio dei coliformi con inattivazione dei disinfettanti.	ISO 18593: 2004 + ISO 4832: 2006	5x4 Piastre ø 65 mm	31006



## PIASTRE DA CONTATTO "CONTACT PLATES"

Terreni di coltura pronti in piastre da contatto ø 65 mm, per l'analisi microbiologica dell'aria e delle superfici.

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>COLIFORMI FECALI</b>			
<b>M-FC AGAR W/ ACIDO ROSOLICO</b> Piastre da contatto per l'isolamento selettivo e il conteggio dei coliformi fecali.		5x4 Piastre ø 65 mm	31007
<b>ENTEROBATTERI</b>			
<b>VIOLET RED BILE GLUCOSE</b> Piastre da contatto per l'isolamento selettivo e il conteggio degli enterobatteri.		5x4 Piastre ø 65 mm	31017
<b>VIOLET RED BILE GLUCOSE AGAR + NEUTRALIZZANTE</b> Piastre da contatto per l'isolamento selettivo e il conteggio degli enterobatteri, con inattivazione dei disinfettanti.	ISO 18593: 2004 + ISO 21528-2: 2004	5x4 Piastre ø 65 mm	31018
<b>ENTEROCOCCI</b>			
<b>SLANETZ &amp; BARTLEY AGAR + TTC + NEUTRALIZZANTE</b> Piastre da contatto per l'isolamento selettivo e il conteggio degli enterococchi.		5x4 Piastre ø 65 mm	31028
<b>LEGIONELLA</b>			
<b>LEGIONELLA BCYE AGAR</b> Piastre da contatto con terreno non selettivo per l'isolamento e il conteggio di <i>Legionella spp.</i>		5x4 Piastre ø 65 mm	31030
<b>LEGIONELLA BCYE AGAR (W/O CYSTEINE)</b> Piastre da contatto con terreno non selettivo per l'isolamento e il conteggio di <i>Legionella spp.</i>		5x4 Piastre ø 65 mm	31032
<b>LEGIONELLA SELECTIVE AGAR (GVPC)</b> Piastre da contatto per l'isolamento selettivo e il conteggio di <i>Legionella spp.</i>		5x4 Piastre ø 65 mm	31034
<b>LIEVITI E MUFFE</b>			
<b>O.G.Y.E. (Oxytetracycline Glucose Yeast Extract) AGAR</b> Piastre da contatto per l'isolamento selettivo e il conteggio di lieviti e muffe.		5x4 Piastre ø 65 mm	31042*
<b>ROSE BENGALA CHLORAMPHENICOL AGAR + NEUTRALIZZANTE</b> Piastre da contatto per l'isolamento e il conteggio di lieviti e muffe.		5x4 Piastre ø 65 mm	31009*
<b>SABOURAUD DEXTROSE AGAR</b> Piastre da contatto per l'isolamento e il conteggio di lieviti e muffe.		5x4 Piastre ø 65 mm	31010
<b>SABOURAUD DEXTROSE AGAR + CAF</b> Piastre da contatto per l'isolamento selettivo e il conteggio di lieviti e muffe.		5x4 Piastre ø 65 mm	31013*
<b>SABOURAUD DEXTROSE AGAR + CAF (IRRADIATO)<sup>NEW</sup></b> Piastre da contatto per l'isolamento selettivo e il conteggio di lieviti e muffe.		5x4 Piastre ø 65 mm	31011
<b>SABOURAUD DEXTROSE AGAR + NEUTRALIZZANTE</b> Piastre da contatto per l'isolamento e il conteggio di lieviti e muffe con in attivazione dei disinfettanti.		5x4 Piastre ø 65 mm	31012*
<b>SABOURAUD DEXTROSE AGAR + NEUTRALIZZANTE (IRRADIATO)</b> Piastre da contatto per l'isolamento e il conteggio di lieviti e muffe con in attivazione dei disinfettanti (irradiato).		5x4 Piastre ø 65 mm	31014
<b>LISTERIA</b>			
<b>LISTERIA SELECTIVE AGAR (OXFORD)</b> Piastre da contatto per l'isolamento e il conteggio di Listerie.		5x4 Piastre ø 65 mm	31016*

## PIASTRE DA CONTATTO "CONTACT PLATES"

Terreni di coltura pronti in piastre da contatto ø 65 mm, per l'analisi microbiologica dell'aria e delle superfici.

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>PSEUDOMONAS</b>			
<b>CETRIMIDE (PSEUDOMONAS) AGAR</b> Piastrre da contatto per l'isolamento selettivo, e il conteggio di Pseudomonas.		5x4 Piastrre ø 65 mm	31020
<b>SALMONELLA</b>			
<b>S.S. (SALMONELLA – SHIGELLA) AGAR</b> Piastrre da contatto per l'isolamento selettivo, e il conteggio di Salmonella.		5x4 Piastrre ø 65 mm	31022*
<b>STAFILOCOCCI</b>			
<b>MANNITOL SALT AGAR</b> Piastrre da contatto per l'isolamento selettivo, e il conteggio degli stafilococchi patogeni.		5x4 Piastrre ø 65 mm	31025
<b>BAIRD PARKER AGAR</b> Piastrre da contatto per l'isolamento selettivo, e il conteggio degli stafilococchi coagulasi positivi.		5x4 Piastrre ø 65 mm	31024*
<b>BAIRD PARKER AGAR + NEUTRALIZZANTE</b> Piastrre da contatto per l'isolamento selettivo, e il conteggio degli stafilococchi coagulasi positivi.	ISO 18593: 2004 + 6888-1: 2004	5x4 Piastrre ø 65 mm	31026

## SLIDE FLESSIBILI DA CONTATTO

Terreni di coltura pronti in slide flessibili da contatto, per il controllo microbiologico delle superfici.

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>CONTA TOTALE / ENTEROBATTERI</b>			
<b>CONTACT SLIDE 1</b> (PCA + TTC + NEUTR. / V.R.B.G. AGAR + NEUTRALIZZANTE) Slide per conta batterica totale e ricerca enterobatteri.		20 Slide	31050/20
<b>CONTA TOTALE / LIEVITI E MUFFE</b>			
<b>CONTACT SLIDE 2</b> (PCA + TTC + NEUTR. / ROSE BENGALA AGAR + CAF + NEUTRALIZZANTE) Slide per conta batterica totale e ricerca lieviti e muffe.		20 Slide	31055/20
<b>CONTA TOTALE / STAFILOCOCCI</b>			
<b>CONTACT SLIDE 3</b> (PCA + TTC + NEUTR. / VOGEL JOHNSON AGAR) Slide per conta batterica totale e ricerca stafilococchi.		20 Slide	31060/20
<b>PSEUDOMONAS / LIEVITI E MUFFE</b>			
<b>CONTACT SLIDE 4</b> (CETRIMIDE AGAR / ROSE BENGAL AGAR + CAF) Slide per la ricerca di Pseudomonas e lieviti e muffe.		20 Slide	31070/20
<b>ENTEROBATTERI / STREPTOCOCCI FECALI</b>			
<b>CONTACT SLIDE 5</b> (V.R.B.G. AGAR + NEUTR. / BILE ESCULIN AGAR + NEUTRALIZZANTE) Slide per la ricerca di enterobatteri e streptococchi fecali.		20 Slide	31080/20

## STRUMENTAZIONE

PRODOTTO	Cont.	REF
----------	-------	-----

### APPLICATORE PER PIASTRE DA CONTATTO

APPLICATORE "RODAC-WEIGHT"	1 Unità	15496
----------------------------	---------	-------



Applicatore per piastre da contatto costituito da un supporto metallico sterilizzabile in stufa o in autoclave e da un temporizzatore digitale estraibile. Consente di applicare sempre la stessa pressione per lo stesso tempo sulla piastra a contatto; in questo modo il campionamento microbiologico delle superfici è sempre riproducibile e confrontabile indipendentemente dall'operatore. Specifiche tecniche: a richiesta.

### CAMPIONATORE D'ARIA

MICROFLOW 60	1 Unità	G1001
MICROFLOW 90	1 Unità	G1010



Kit per il controllo microbiologico ambientale con Contact Plates (Rodac) da Ø 55 mm completo di: valigetta di trasporto, lo strumento, una testa di ricambio in alluminio anodizzato, carica batteria, telecomando, penna flambatrice, certificato di calibrazione.

### ACCESSORI

<b>STATIVO A TRE PIEDI tipo MASTER</b> Stativo a tre piedi tipo Master, in metallo, completo di morsetto per il fissaggio del campionatore.	1 Pz	A2004
--	------	-------

### BIOLUMINOMETRO

BIOLUMINOMETRO Mod. LUMICONTROL II	1 Unità	91415
------------------------------------	---------	-------



bioluminometro portatile per il monitoraggio dell'igiene delle superfici - **risultati in soli 10 secondi** - leggero e facile da usare - mantiene in memoria fino a 2000 risultati - funzionamento a batteria (durata 20.000 letture) - interfaccia USB - incluso software per trasferimento dati in excel - dim.: 65x175x32 mm - peso 235 g - completo di sostegno per posizionamento verticale sul banco di lavoro.

### ACCESSORI

REATTIVI MONODOSE PER BIOLUMINOMETRO Mod. LUMICONTROL II	100 Pz	91436
BORSA DI TRASPORTO PER BIOLUMINOMETRO Mod. LUMICONTROL II	1 Unità	91437

## CLEAN TEST

Test rapido per il controllo di igiene di tutte le superfici

PRODOTTO	Cont.	REF
----------	-------	-----



### CLEAN TEST

Tampone per la rilevazione di proteine di grasso e residui di zucchero, per il controllo di igiene di superfici - **Risultato in 10 min.**

50 Test

86001

## CAMPIONAMENTO DELLE SUPERFICI



### KIT PER IL CAMPIONAMENTO DELLE SUPERFICI

I kit per il campionamento delle superfici permettono di eseguire il controllo microbiologico quantitativo di batteri e funghi su superfici di lavoro, pavimenti, muri e apparecchiature ospedaliere, farmaceutiche, alimentari e macelli, in conformità alle norme ISO.





Il Kit **SNK (Swab Neutralizing Kit)**, studiato per inibire le proprietà batteriostatiche dei campioni da sottoporre all'analisi microbiologica e per l'inattivazione dei più comuni disinfettanti o agenti sanitizzanti (composti fenolici, ipoclorito, aldeidi), grazie alla formulazione della soluzione diluente (**Neutralizzante Diluent**) in accordo alla norma **ISO 18593: 2004**, lo rende universalmente utilizzabile per il controllo delle superfici.

Il Kit **SBK (Swab Buffered Kit)** contiene la soluzione diluente **Buffered Peptone Water**, specifico per la ricerca di **Salmonella** sulle superfici, in accordo alla norma **ISO 6579: 2008**, e alla **ISO 17604: 2003**, per il campionamento microbiologico delle carcasse animali.






Il Kit **SFK (Swab Half Fraser Kit)** contiene la soluzione diluente **Listeria Half Fraser Broth**, specifico per la ricerca di **Listeria** sulle superfici, in accordo alla norma **ISO 11290-1/2: 1996/Adm. 1: 2004** e **ISO 11290-1/2: 2005**.

Il Kit **SLK (Swab Lethen Kit)** contiene la soluzione diluente **Lethen Broth**, previsto dalle FDA, specifico per il settore farmaceutico e cosmetico. Il Kit **SMK (Swab Maximum Kit)** contiene la soluzione diluente **Maximum Recovery Diluent**, indicato per il recupero dei microrganismi dalle superfici di alimenti ed ambienti, in accordo alla norma **ISO 6887-1: 2000**, e al regolamento **CE 2073: 2005**, per il campionamento delle carcasse animali.


**Conservazione:** a 4-25 °C - **Stabilità:** 24 Mesi. Preparazioni. (\*) Prodotto disponibile con ordine minimo: 2 Conf.

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF.
 <b>KIT SSK (Swab Sampling Kit) 10 ML<sup>NEW</sup></b> Il kit comprende: n. 10 delimitatori di area sterili 10x10 cm (conf. sing.), n. 10 Tamponi (conf. sing.) punta in fibra sintetica ( <b>rayon</b> ), n. 10 Provette ( <b>tappo a vite</b> ) con <b>10 ml</b> di soluzione diluente <b>Neutralizzante Diluent</b> .	<b>ISO 18593: 2004</b>	<b>10 Pz</b>	<b>32050</b>
 <b>KIT SNK 1 (Swab Neutralizing Kit) 5 ML</b> Il kit comprendente: n. 100 tamponi sterili (conf. sing.), asta in plastica con punta in fibra sintetica ( <b>rayon</b> ), n. 100 Provette ( <b>tappo a vite</b> ) con <b>5 ml</b> di soluzione diluente <b>Neutralizzante Diluent</b> , formulata in accordo alla norma <b>ISO 18593: 2004</b> .	<b>ISO 18593: 2004</b>	<b>100 Pz</b>	<b>32000*</b>
<b>KIT SNK 1 (Swab Neutralizing Kit) 10 ML</b> Il kit comprendente: n. 100 tamponi sterili (conf. sing.), asta in plastica con punta in fibra sintetica ( <b>rayon</b> ), n. 100 Provette ( <b>tappo a vite</b> ) con <b>10 ml</b> di soluzione diluente <b>Neutralizzante Diluent</b> , formulata in accordo alla norma <b>ISO 18593: 2004</b> .	<b>ISO 18593: 2004</b>	<b>100 Pz</b>	<b>32005</b>
 <b>KIT SNK 2 (Swab Neutralizing Kit) 5 ML<sup>NEW</sup></b> Il kit comprendente: n. 100 Provette con <b>5 ml</b> di soluzione diluente <b>Neutralizzante Diluent</b> , formulata in accordo alla norma <b>ISO 18593: 2004</b> , con tampone (lunghezza 80 mm) punta in fibra sintetica ( <b>rayon</b> ), <b>immerso</b> nella soluzione.	<b>ISO 18593: 2004</b>	<b>100 Pz</b>	<b>32010*</b>
<b>KIT SNK 2 (Swab Neutralizing Kit) 10 ML<sup>NEW</sup></b> Il kit comprendente: n. 100 Provette con <b>10 ml</b> di soluzione diluente <b>Neutralizzante Diluent</b> , formulata in accordo alla norma <b>ISO 18593: 2004</b> , con tampone (lunghezza 80 mm) punta in fibra sintetica ( <b>rayon</b> ), <b>immerso</b> nella soluzione.	<b>ISO 18593: 2004</b>	<b>100 Pz</b>	<b>32015</b>
 <b>KIT SNK 3 (Swab Neutralizing Kit) 5 ML</b> Il kit comprendente: n. 100 tamponi sterili in provetta <b>12x150</b> , asta in plastica con punta in fibra sintetica ( <b>rayon</b> ), n. 100 Provette ( <b>tappo a vite</b> ) con <b>5 ml</b> di soluzione diluente <b>Neutralizzante Diluent</b> , formulata in accordo alla norma <b>ISO 18593: 2004</b> .	<b>ISO 18593: 2004</b>	<b>100 Pz</b>	<b>32020*</b>
<b>KIT SNK 3 (Swab Neutralizing Kit) 10 ML</b> Il kit comprendente: n. 100 tamponi sterili in provetta <b>12x150</b> , asta in plastica con punta in fibra sintetica ( <b>rayon</b> ), n. 100 Provette ( <b>tappo a vite</b> ) con <b>10 ml</b> di soluzione diluente <b>Neutralizzante Diluent</b> , formulata in accordo alla norma <b>ISO 18593: 2004</b> .	<b>ISO 18593: 2004</b>	<b>100 Pz</b>	<b>32025</b>

**KIT PER IL CAMPIONAMENTO DELLE SUPERFICI**


PRODOTTO	Norma	Cont.	REF.
 <b>KIT SNK 5 (Swab Neutralizing Kit) 5 ML</b> Il kit comprendente: n. 100 tamponi sterili (conf. sing.), asta in plastica con punta in fibra sintetica ( <b>rayon</b> ), n. 100 Provette ( <b>tappo a pressione</b> ) con <b>5 ml</b> di soluzione diluente <b>Neutralizzante Diluent</b> , formulata in accordo alla norma <b>NMKL Metodo N. 5: 2001</b> .	<b>NMKL Metodo N. 5: 2001</b>	<b>100 Pz</b>	<b>32040*</b>
<b>KIT SNK 5 (Swab Neutralizing Kit) 10 ML</b> Il kit comprendente: n. 100 tamponi sterili (conf. sing.), asta in plastica con punta in fibra sintetica ( <b>rayon</b> ), n. 100 Provette ( <b>tappo a pressione</b> ) con <b>10 ml</b> di soluzione diluente <b>Neutralizzante Diluent</b> , formulata in accordo alla norma <b>NMKL Metodo N. 5: 2001</b> .	<b>NMKL Metodo N. 5: 2001</b>	<b>100 Pz</b>	<b>32045</b>
<b>KIT SBK 1 (Swab Buffered Kit) 10 ML <sup>NEW</sup></b> Il kit comprendente: n. 100 tamponi (conf. sing.), asta in plastica con punta in fibra sintetica ( <b>rayon</b> ), n. 100 Provette ( <b>tappo a vite</b> ) con <b>10 ml</b> di soluzione diluente <b>Buffered Peptone Water</b> , formulata in accordo alla norma <b>ISO 6578: 2008</b> .	<b>ISO 6578: 2008</b> <b>ISO 17604: 2003</b> <b>ISO 6887-1: 2000</b>	<b>100 Pz</b>	<b>32060</b>
 <b>KIT SBK 2 (Swab Buffered Kit) 10 ML <sup>NEW</sup></b> Il kit comprendente: n. 100 Provette con <b>10 ml</b> di soluzione diluente <b>Buffered Peptone Water</b> , formulata in accordo alla norma <b>ISO 6578: 2008</b> , con tampone (lunghezza 80 mm) punta in fibra sintetica ( <b>rayon</b> ), <b>immerso</b> nella soluzione.	<b>ISO 6578: 2008</b> <b>ISO 17604: 2003</b> <b>ISO 6887-1: 2000</b>	<b>100 Pz</b>	<b>32065</b>
<b>KIT SFK 1 (Swab Half Fraser Kit) 10 ML <sup>NEW</sup></b> Il kit comprendente: n. 100 tamponi (conf. sing.), asta in plastica con punta in fibra sintetica ( <b>rayon</b> ), n. 100 Provette ( <b>tappo a vite</b> ) con <b>10 ml</b> di soluzione diluente <b>Listeria Half Fraser Broth</b> , formulata in accordo alla norma <b>ISO</b> .	<b>ISO 11290-1: 1996/Adm. 1: 2004</b> <b>ISO 11290-1: 2005</b>	<b>100 Pz</b>	<b>32070</b>
 <b>KIT SFK 2 (Swab Half Fraser Kit) 10 ML <sup>NEW</sup></b> Il kit comprendente: n. 100 Provette con <b>10 ml</b> di soluzione diluente <b>Listeria Half Fraser Broth</b> , formulata in accordo alla norma <b>ISO</b> , con tampone (lunghezza 80 mm) punta in fibra sintetica ( <b>rayon</b> ), <b>immerso</b> nella soluzione.	<b>ISO 11290-1: 1996/Adm. 1: 2004</b> <b>ISO 11290-1: 2005</b>	<b>100 Pz</b>	<b>32075</b>
<b>KIT SLK 1 (Swab Letheen Kit) 10 ML <sup>NEW</sup></b> Il kit comprendente: n. 100 tamponi (conf. sing.), asta in plastica con punta in fibra sintetica ( <b>rayon</b> ), n. 100 Provette ( <b>tappo a vite</b> ) con <b>10 ml</b> di soluzione diluente <b>Letheen Broth</b> , previsto dalla <b>FDA</b> .	<b>FDA</b>	<b>100 Pz</b>	<b>32080</b>
 <b>KIT SLK 2 (Swab Letheen Kit) 10 ML <sup>NEW</sup></b> Il kit comprendente: n. 100 Provette con <b>10 ml</b> di soluzione diluente <b>Letheen Broth</b> previsto dalla <b>FDA</b> , con tampone (lunghezza 80 mm) punta in fibra sintetica ( <b>rayon</b> ), <b>immerso</b> nella soluzione.	<b>FDA</b>	<b>100 Pz</b>	<b>32085</b>
<b>KIT SMK 1 (Swab Maximum Kit) 10 ML <sup>NEW</sup></b> Il kit comprendente: n. 100 tamponi (conf. sing.), asta in plastica con punta in fibra sintetica ( <b>rayon</b> ), n. 100 Provette ( <b>tappo a vite</b> ) con <b>10 ml</b> di soluzione diluente <b>Maximum Recovery Diluent</b> , formulata in accordo alla norma <b>ISO 6887-1: 2000</b> .	<b>ISO 6887-1: 2000</b> <b>Reg. 2073: 2005</b>	<b>100 Pz</b>	<b>32090</b>
 <b>KIT SMK 2 (Swab Maximum Kit) 10 ML <sup>NEW</sup></b> Il kit comprendente: n. 100 Provette con <b>10 ml</b> di soluzione diluente <b>Maximum Recovery Diluent</b> , formulata in accordo alla norma <b>ISO 6887-1: 2000</b> , con tampone (lunghezza 80 mm) punta in fibra sintetica ( <b>rayon</b> ), <b>immerso</b> nella soluzione.	<b>ISO 6887-1: 2000</b> <b>Reg. 2073: 2005</b>	<b>100 Pz</b>	<b>32095</b>

## ACCESSORI

PRODOTTO	Cont.	REF
<b>DELIMITATORI DI AREA SETRILI 10X10</b> Schermo in plastica sterile, 10 x 10 cm – Cf. 5 pz.	<b>50 Pz</b>	<b>502256</b>
 <b>DELIMITATORI DI AREA SETRILI 10X10</b> Schermo in plastica sterile, 10 x 10 cm – Conf. sing.	<b>100 Pz</b>	<b>20918</b>


## SACCHETTI STERILI "CON SPUGNA" PER CAMPIONAMENTO

Sacchetti sterili con **spugna sterile** per il campionamento microbiologico di **superfici e carcasse animali**.

PRODOTTO	Cont.	REF
<b>SACCHETTI STERILI CON SPUGNA Mis. 115x230 – Capacità 540 ml</b>	<b>100 Pz</b>	<b>13273</b>
 Sacchetto in plastica speciale ad alta resistenza - <b>sterile</b> - trasparente - con area di scrittura - sigillo superiore a strappo per garantire la sterilità - sistema di chiusura a nastro animato - saldatura su tre lati - dotato di spugna (dim.: 35x75 mm) per la raccolta del campione - ideale per il campionamento microbiologico (Listeria, Salmonella ed altri microrganismi patogeni) delle superfici e per il campionamento su carcasse animali per la ricerca di E. coli (metodo USA Federal Register).		
<b>SACCHETTI STERILI CON SPUGNA "PREINUMIDITA"</b> <b>Mis. 115x230 – Capacità 540 ml</b>	<b>100 Pz</b>	<b>35118</b>
<b>KIT CAMPIONAMENTO CARCASSE ANIMALI</b> <b>SACCHETTI STERILI CON SPUGNA "PREINUMIDITA" + GUANTI</b>	<b>100 Pz</b>	<b>35119</b>
 Sacchetto in plastica speciale ad alta resistenza - <b>sterile</b> - trasparente - dimensioni sacchetto <b>115x230 mm</b> - capacità <b>540 mL</b> - spessore 0.064 mm - sigillo superiore a strappo per garantire la sterilità - sistema di chiusura a nastro animato - saldatura su tre lati - dotato di spugna (dim. 35x75 mm) per la raccolta del campione - completo di guanti sterili - ideale per il campionamento microbiologico (Listeria, Salmonella ed altri microrganismi patogeni) delle superfici e per il campionamento su carcasse animali per la ricerca di E. Coli (metodo USA Federal Register).		

## "SPUGNE" STERILI PER IL CAMPIONAMENTO DI SUPERFICI

Il sistema "Sponge-Poliwipe" permette di eseguire campionamenti in conformità alle norme ISO in virtù della formulazione dei neutralizzanti contenuti. I codici 91903 e 91890 sono indicati per campionamenti per la ricerca di carica batterica totale e Salmonella spp secondo la norma **ISO 18593:2004**; il codice 91901 è indicato per il campionamento delle carcasse animali per la ricerca di Salmonella spp ed E.coli secondo la norma **ISO 17604:2004** ed il regolamento 1441:2007 (ex 2073:2005).

PRODOTTO	Cont.	REF
<b>SPUGNA "SPONGE-POLIWIPE" PRE-INUMIDITA STERILE - CONF. SINGOLA</b>	<b>50 Pz</b>	<b>91903</b>
<b>SACCHETTO CON SPUGNA "SPONGE-POLIWIPE" – SPUGNA CON TAMPONE FOSFATO - GUANTI - SACCHETTO STERILE TIPO "PRESTO-CHIUSO"</b>	<b>50 Pz</b>	<b>91890</b>
<b>SACCHETTO CON SPUGNA "SPONGE-POLIWIPE" – SPUGNA CON PEPTONE SALINE - GUANTI - SACCHETTO STERILE CON CHIUSURA A PRESSIONE</b>	<b>50 Pz</b>	<b>91901</b>
 Sacchetto <b>sterile</b> con spugna sterile pre-inumidita con soluzione neutralizzante dei disinfettanti - spugna pronta all'uso, in speciale materiale che garantisce un alto livello di recupero di microrganismi e la loro vitalità durante il trasporto - il colore blu favorisce l'identificazione della spugna in caso di caduta accidentale - i certificati allegati ad ogni singola confezione attestano la sterilità ed il recupero di <i>E.coli</i> , <i>S.aureus</i> , <i>Salmonella typhimurium</i> e <i>Listeria monocytogenes</i> - confezione singola - disponibile nella versione con sacchetto richiudibile a pressione e guanti oppure con sacchetto tipo "Presto-Chiuso" e guanti - dimensioni spugna: <b>100x45 mm</b> - scadenza 12 mesi dalla data di produzione.		



**TAMPONI DI TRASPORTO**

PRODOTTO	Cont.	REF
----------	-------	-----

**TAMPONI SECCHI**

<b>TAMPONI SECCHI IN LEGNO STERILI / Punta Cotone</b> Tampone <b>cotone</b> sterile confezionato in busta singola / <b>Asta in legno.</b>	<b>500 Pz</b> <b>1000 Pz</b>	<b>26075</b> <b>5100/SG/CS</b>
<b>TAMPONI SECCHI IN PLASTICA STERILI / Punta rayon</b> Tampone in fibra sintetica ( <b>rayon</b> ), sterile confezionato in busta singola - <b>Asta in plastica</b>	<b>100 Pz</b> <b>1000 Pz</b>	<b>26080</b> <b>6100/SG/CS</b>

**TAMPONI SECCHI IN PROVETTA**

<b>TAMPONI SECCHI STERILI IN PROVETTA</b> Tampone <b>cotone</b> sterile in provetta <b>12x150</b> + Etichetta / <b>Asta in legno</b>	<b>100 Pz</b> <b>400 Pz</b> <b>6x400 Pz</b>	<b>26060</b> <b>2150/SG</b> <b>1421000</b>
<b>TAMPONI SECCHI STERILI IN PROVETTA</b> Tampone <b>fibra sintetica (rayon)</b> sterile in provetta <b>12x150</b> + Etichetta - <b>Asta in plastica</b>	<b>100 Pz</b> <b>10x100 Pz</b> <b>400 Pz</b> <b>6x400 Pz</b>	<b>26061</b> <b>26061/100</b> <b>2160/SG</b> <b>1422000</b>
<b>TAMPONI SECCHI STERILI IN PROVETTA</b> Tampone <b>fibra sintetica (rayon)</b> sterile in provetta <b>16x150</b> + Etichetta - <b>Asta in plastica</b>	<b>1000 Pz</b>	<b>51500/E/SG</b>

**TAMPONI CON TERRENO DI TRASPORTO AMIES E STUART**

<b>AMIES MEDIUM</b> Tamponi con terreno amies per la raccolta e il trasporto materiali.	<b>150 Pz</b> <b>6x150 Pz</b>	<b>301/SG</b> <b>1412000</b>
<b>STUART'S MEDIUM</b> Tamponi con terreno stuart per la raccolta e il trasporto materiali.	<b>150 Pz</b> <b>6x150 Pz</b>	<b>305/SG</b> <b>1414000</b>



## ANALISI BATTERIOLOGICA DELLE ACQUE



### TERRENI DI COLTURA PRONTI IN PIASTRA Ø 60 mm

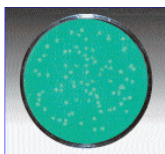
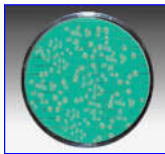
Terreni di coltura pronti in piastra Ø 60 mm, per l'analisi microbiologica delle acque con il metodo delle membrane filtranti (MF).

**Conservazione:** 2-8 °C / 4-25 °C – **Stabilità:** 6 Mesi. Preparazioni particolari sono eseguibili a richiesta, per quantitativi superiori a 200 Piastre.

(\*) Prodotto disponibile con ordine minimo: **5 Conf.**

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>AEROMONAS</b>			
<b>m-AEROMONAS AGAR</b> Terreno per la determinazione e il conteggio di aeromonas.	<b>APAT IRSA-CNR 7070</b>	<b>2x10 Piastre Ø 60 mm</b>	<b>0301310/20</b>


### CONTA TOTALE

<b>DEXTROSE TRYPTONE AGAR</b> Terreno per la determinazione e il conteggio dei microrganismi termofili e mesofili.		<b>2x10 Piastre Ø 60 mm</b>	<b>0392210/20*</b>
 <b>PLATE COUNT AGAR (APHA)</b> Terreno per la determinazione della carica batterica sia a 22 °C che a 37°C.	<b>APAT CNR IRSA 7050</b>	<b>2x10 Piastre Ø 60 mm</b>	<b>2404480/20</b>
<b>R2 AGAR</b> Terreno per il conteggio di microrganismi eterotrofici in campioni di acqua potabile.	<b>APAT CNR IRSA 7050</b>	<b>2x10 Piastre Ø 60 mm</b>	<b>2902502/20*</b>
<b>TRYPTONE (TRYPTIC) SOY AGAR</b> Terreno per la determinazione della carica batterica sia a 22 °C che a 37°C.		<b>2x10 Piastre Ø 60 mm</b>	<b>2421210/20*</b>
 <b>YEAST EXTRACT AGAR</b> Terreno per la determinazione della carica batterica sia a 22 °C che a 37°C.	<b>ISO 6222: 2001</b> <b>APAT CNR IRSA 7050</b>	<b>2x10 Piastre Ø 60 mm</b>	<b>2431901/20</b>

### CLOSTRIDIUM

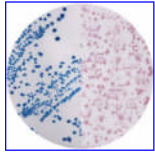
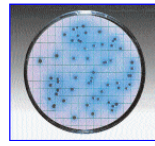

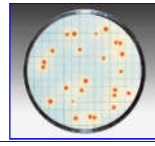
<b>M-CP (Membrane Clostridium Perfringens) AGAR</b> Terreno per l'isolamento di <i>Clostridium perfringens</i> .	<b>D.L. n 31/2001</b>	<b>2x10 Piastre Ø 60 mm</b>	<b>0382202/20</b>
<b>S.P.S. AGAR</b> Terreno per l'isolamento di <i>Clostridium perfringens</i> .	<b>APAT CNR IRSA 7060 Met. B</b>	<b>2x10 Piastre Ø 60 mm</b>	<b>2760306/20</b>

### COLIFORMI TOTALI

 <b>m-ENDO AGAR (LES)</b> Terreno per l'isolamento e il conteggio dei coliformi.	<b>APAT CNR IRSA 7010 Met. C</b>	<b>2x10 Piastre Ø 60 mm</b>	<b>1234836/20</b>
--	----------------------------------	-----------------------------	-------------------

**TERRENI DI CULTURA PRONTI IN PIASTRA Ø 60 mm**

Terreni di coltura pronti in piastra Ø 60 mm, per l'analisi microbiologica delle acque con il metodo delle membrane filtranti (MF).

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>COLIFORMI FECALI / E. COLI</b>			
<b>C-EC CHROMOGENIC AGAR<sup>NEW</sup></b> Terreno selettivo fluorogenico e cromogenico, per la determinazione simultanea di <i>E.coli</i> e dei coliformi nelle acque e negli alimenti.	<b>APAT CNR-IRSA 7010/7020/7030</b>	2x10 Piastre Ø 60 mm	2962601/20*
 <b>E. COLI/COLIFORMS CHROMOGENIC AGAR</b> Terreno selettivo <b>cromogenico</b> per l'isolamento e la conta di <i>E. Coli</i> e dei Coliformi.		2x10 Piastre Ø 60 mm	0341006/20
 <b>m-FC AGAR (WITH ROSOLIC ACID)</b> Terreno selettivo per l'isolamento ed il conteggio dei Coliformi fecali.	<b>APAT CNR IRSA 7020 Met. B</b>	2x10 Piastre Ø 60 mm	2054678/20
<b>m-FC AGAR (W/O ROSOLIC ACID)</b> Terreno selettivo per l'isolamento ed il conteggio dei Coliformi fecali.		2x10 Piastre Ø 60 mm	2061706/20*
 <b>T.B.X. CHROMOGENIC AGAR</b> Terreno selettivo <b>cromogenico</b> per il conteggio e l'identificazione di <i>E. Coli</i>	<b>APAT CNR IRSA 7030 Met. F</b>	2x10 Piastre Ø 60 mm	2790106/20
 <b>TERGITOL 7 AGAR + TTC</b> Terreno per l'isolamento di <i>E. Coli</i> e Coliformi.	<b>ISO 9308-1: 2002</b>	2x10 Piastre Ø 60 mm	2821107/20
<b>TRYPTONE BILE AGAR</b> Terreno per l'isolamento di <i>E. Coli</i> .	<b>ISO 9308-1: 2002</b>	2x10 Piastre Ø 60 mm	2840902/20*
<b>VIOLET RED BILE (LACTOSE) AGAR</b> Terreno selettivo per l'isolamento ed il conteggio di coliformi.		2x10 Piastre Ø 60 mm	2810209/20*

**ENTEROCOCCI**

 <b>BILE AESCULIN AZIDE AGAR</b> Terreno per la conferma degli enterococchi nelle acque, secondo la norma ISO 7899-2: 2003.	<b>APAT CNR IRSA 7040 Met. C</b>  <b>ISO 7899-2: 2003</b>	2x10 Piastre Ø 60 mm	0341006/20
<b>SLANETZ &amp; BARTLEY AGAR + TTC</b> Terreno selettivo per l'isolamento e il conteggio di Enterococchi e Streptococchi fecali.	<b>APAT CNR IRSA 7040 Met. C</b>  <b>ISO 7899-2: 2003</b>	2x10 Piastre Ø 60 mm	1954747/20
<b>KF-STREPTOCOCCUS AGAR + TTC</b> Terreno per l'isolamento selettivo e il conteggio di streptococchi fecali.		2x10 Piastre Ø 60 mm	15044987/20

**LEGIONELLA**

<b>LEGIONELLA SELECTIVE AGAR (GVPC)</b> Terreno per l'isolamento selettivo di <i>Legionella spp.</i>	<b>ISO 11731-2:2004</b>	2x10 Piastre Ø 60 mm	1822110/20
---	-------------------------	----------------------	------------

**TERRENI DI COLTURA PRONTI IN PIASTRA Ø 60 mm**

Terreni di coltura pronti in piastra Ø 60 mm, per l'analisi microbiologica delle acque con il metodo delle membrane filtranti (MF).

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>LIEVITI E MUFFE</b>			
 <b>SABOURAUD DEXTROSE AGAR</b> Terreno per l'isolamento di lieviti e muffe.		2x10 Piastre Ø 60 mm	1754224/20
<b>PSEUDOMONAS</b>			
 <b>CETRIMIDE (PSEUDOMONAS) AGAR</b> Terreno per l'isolamento selettivo di <i>Pseudomonas</i>		2x10 Piastre Ø 60 mm	2515028/20
<b>PSEUDOMONAS SELECTIVE AGAR (CN)</b> Terreno per l'isolamento selettivo di <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .	ISO 12780: 2002	2x10 Piastre Ø 60 mm	2521105/20
<b>SALMONELLA</b>			
 <b>BISMUTH SULFITE AGAR</b> Terreno selettivo per l'isolamento di Salmonella.		2x10 Piastre Ø 60 mm	0364174/20*
<b>STAFILOCOCCI</b>			
<b>BAIRD PARKER AGAR</b> Terreno selettivo per l'isolamento ed il conteggio degli stafilococchi coagulasi positivi.	ISO 10678: 1998	2x10 Piastre Ø 60 mm	0321005/20
 <b>MANNITOL SALT AGAR</b> Terreno selettivo per l'isolamento e il conteggio di Stafilococchi.		2x10 Piastre Ø 60 mm	1714407/20*

## KIT (NPA) NUTRIENT PETRI AGAR (MF) PER ANALISI BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE

Kit completi contenenti terreni di coltura pronti in piastra  $\varnothing$  60 mm + le membrane di filtrazione con reticolo, in confezione singola sterile.

I Kit completi (NPA) Nutrient Petri Agar (MF), vengono impiegati in combinazione con il metodo delle membrane filtranti (MF), per l'analisi microbiologica delle acque.

Per la loro praticità di utilizzo semplificano il procedimento per l'analisi microbiologica, garantendo una migliore crescita delle colonie.

Il Kit (NPA) Nutrient Petri Agar (MF), consiste in una membrana filtrante specifica per il tipo di crescita di colonie, sterile, confezionata in busta singola, ed una piastra petri dal diam. di 60 mm. con terreno di coltura pronto all'uso, prodotto secondo le GMP e in accordo con le formulazioni UNI EN ISO, APAT IRSA-CNR.

I Vantaggi per l'utilizzatore sono:

- 1) **La convenienza** (Confezioni da 50 determinazioni);
- 2) **Nessuna perdita di tempo** per la preparazione dei terreni di coltura (sterilizzazione, diidratazione, ecc.);
- 3) **Semplicità d'uso**: Tutti i materiali all'interno del kit sono pronti all'uso;
- 4) **Qualità**: in produzione, ciascun lotto di terreno di coltura pronti in piastre petri viene testato con i ceppi di riferimento ATCC. **Certificato di Qualità**: incluso nella confezione.
- 5) **Conservazione**: I Kit (NPA) Nutrient Petri Agar (MF) hanno una durata di 6 mesi, se conservati in un luogo buio e asciutto ad una temperatura di 2-8 °C e 4-25 °C. (\*) Prodotto disponibile con ordine minimo: 2 Conf.



### PRODOTTO

### Cont.

### REF.

#### CLOSTRIDIUM

##### KIT (NPA) CLOSTRIDIUM PERFRINGENS 1 (MF)

*Kit per la ricerca e la conta di Clostridium perfringens.*

50 Test

40030

Il Kit contiene: n. 50 piastre ( $\varnothing$  60 mm.) con terreno **SPS Agar** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – **Fondo bianco** con reticolo nero - Porosità 0,45  $\mu$ m –  $\varnothing$  47 mm.

Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C - **Certificato di Qualità**: incluso nella confezione.

Campo di applicazione: Acque.

Norme di riferimento: **APAT IRSA-CNR 7060 Metodo B.**

Periodo e temperatura d'incubazione: 48  $\pm$  2 ore a 37,0  $\pm$  0,5 °C (anaerobiosi).

Aspetto tipico delle colonie: Le colonie sono di colore nero con alone nerastro.

##### KIT (NPA) CLOSTRIDIUM PERFRINGENS 2 (MF) <sup>NEW</sup>

*Kit per la ricerca e la conta di Clostridium perfringens.*

50 Test

40030

Il Kit contiene: n. 50 piastre ( $\varnothing$  60 mm.) con terreno **m-CP Agar** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – **Fondo bianco** con reticolo nero - Porosità 0,45  $\mu$ m –  $\varnothing$  47 mm.

Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C - **Certificato di Qualità**: incluso nella confezione.

Campo di applicazione: Acque.

Norme di riferimento: **D.L. n 31/2001**

Periodo e temperatura d'incubazione: 21  $\pm$  3 ore a 44  $\pm$  1 °C.

Aspetto tipico delle colonie: Giallo opache, rosse dopo esposizione ai vapori di ammonio idrossido.

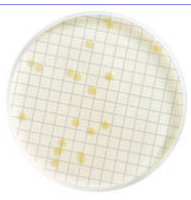
#### CONTA TOTALE

##### KIT (NPA) CONTA TOTALE 1 (MF)

*Kit per la conta delle cariche microbiche.*

50 Test

40000



Il Kit contiene: n. 50 piastre petri ( $\varnothing$  60 mm.) con terreno pronto **Plate Count Agar (Standard Methods)** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.), **fondo bianco** con reticolo nero, porosità 0,45  $\mu$ m –  $\varnothing$  47 mm.

Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C - **Certificato di Qualità**: incluso nella confezione.

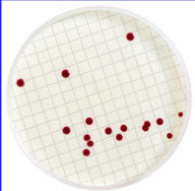
Campo di applicazione: Acque, alimenti, bevande.

Norme di riferimento: **APHA (1998) - Standard Methods for the Examination of water and wastewater.**


Periodo e temperatura d'incubazione: 48 ore a 22,0  $\pm$  1 °C, 48 ore a 37  $\pm$  0,5 °C.

Aspetto tipico delle colonie: Le colonie sono da trasparenti a bianche cremose, alcune possono essere pigmentate.

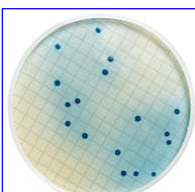
**KIT (NPA) NUTRIENT PETRI AGAR (MF)**

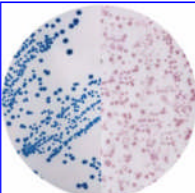
PRODOTTO	Cont.	REF.
<b>KIT (NPA) CONTA TOTALE 2 (MF)</b> <i>Kit per la conta delle cariche microbiche.</i>	<b>50 Test</b>	<b>40002*</b>
 <p>Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno <b>Plate Count Agar (Standard Methods) Agar + TTC</b> / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – <b>Fondo bianco</b> con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.  Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C - <b>Certificato di Qualità:</b> incluso nella confezione.</p> <p>Campo di applicazione: Acque, alimenti, bevande.</p> <p>Norme di riferimento: <b>APHA (1998) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater.</b></p> <p>Periodo e temperatura d'incubazione: Da 24 a 72 ore a 25.0 – 37.0 ± 0.5 °C.</p> <p>Aspetto tipico delle colonie: Le colonie assumono una colorazione rossa dovuta alla riduzione del trifeniltetrazolio cloruro (TTC)</p>		

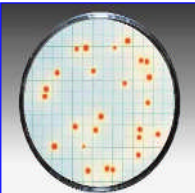
**COLIFORMI TOTALI**

<b>KIT (NPA) COLIFORMI TOTALI (MF)</b> <i>Kit per la ricerca e la conta di coliformi totali.</i>	<b>50 Test</b>	<b>40005</b>
 <p>Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno <b>m-Endo Agar Les</b> / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – Fondo bianco con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.  Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C - <b>Certificato di Qualità:</b> incluso nella confezione.</p> <p>Campo di applicazione: Acque, latte.</p> <p>Norme di riferimento: <b>APHA (1998) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - APAT IRSA-CNR 7010 Med. C.</b></p> <p>Periodo e temperatura d'incubazione: Da 18 a 24 ore a 37.0 ± 0.5 °C.</p> <p>Aspetto tipico delle colonie: Le colonie sono rosso scuro e/o con lucentezza metallica verde-dorata cresciute entro le 24 ore. La lucentezza può interessare l'intera colonia o essere limitata nella zona centrale del perimetro.</p>		

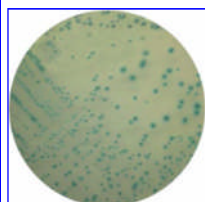
**E. COLI e COLIFORMI FECALI**

<b>KIT (NPA) COLIFORMI FECALI (MF)</b> <i>Kit per la ricerca e la conta di Coliformi fecali.</i>	<b>50 Test</b>	<b>40010</b>
 <p>Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno <b>m-FC Agar + Acido Rosolico</b> / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – <b>Fondo bianco</b> con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.  Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C - <b>Certificato di Qualità:</b> incluso nella confezione.</p> <p>Campo di applicazione: Acque.</p> <p>Norme di riferimento: <b>APHA (1998) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - APAT IRSA-CNR 7020 Metodo B.</b></p> <p>Periodo e temperatura d'incubazione: 24 ore a 44.5 ± 0.2 °C.</p> <p>Aspetto tipico delle colonie: I coliformi fecali si presentano con colonie <b>colorate di blu</b>, i coliformi non fecali si presentano con colonie variante dal grigio-crema al panna. Alcuni <b>Escherichia coli</b> possono formare colonie atipiche di colore giallo chiaro.</p>		

<b>KIT (NPA) E. COLI/COLIFORMI CHROMOGENIC (MF) <sup>NEW</sup></b> <i>Kit per la ricerca e la conta di E. Coli e Coliformi.</i>	<b>50 Test</b>	<b>40014</b>
 <p>Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno selettivo cromogenico differenziale <b>E. Coli/Coliforms Chromogenic Agar</b> / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – <b>Fondo bianco</b> con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.  Stabilità: 6 Mesi a <b>2/8 °C</b> - <b>Certificato di Qualità:</b> incluso nella confezione.</p> <p>Campo di applicazione: Acque.</p> <p>Norme di riferimento: /</p> <p>Periodo e temperatura d'incubazione: 18/24 ore a 37.0 ± 0.5 °C.</p> <p>Aspetto tipico delle colonie: <b>Escherichia coli</b>: colonie <b>grigio blu</b>, indolo positive. Coliformi (diversi da <i>E. coli</i>): colonie <b>color salmone</b>. <i>Proteus</i>: colonie con alone marroncino. Altri enterobatteri: colonie incolori.</p>		

<b>KIT (NPA) E. COLI (MF)</b> <i>Kit per la ricerca e la conta di E. coli.</i>	<b>50 Test</b>	<b>40013</b>
 <p>Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno <b>Tergitol 7 Agar + TTC</b> / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – Fondo bianco con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm ero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.  Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C - <b>Certificato di Qualità:</b> incluso nella confezione.</p> <p>Campo di applicazione: Acque.</p> <p>Norme di riferimento: <b>ISO 9308: 2002</b></p> <p>Periodo e temperatura d'incubazione: 24 ore a 37.0 ± 0.5 °C.</p> <p>Aspetto tipico delle colonie: <i>E. coli</i>: colonie da giallo ad arancio con alone giallo. Enterobacter/<i>Klebsiella</i>: colonie giallo-verde. <i>Salmonella/Proteus</i>: colonie rosse con alone bluastro</p>		



**KIT (NPA) NUTRIENT PETRI AGAR (MF)**
**PRODOTTO**
**Cont.**
**REF.**
**E. COLI BETA GLUCORONIDASI**
**KIT (NPA) E. COLI BETA GLUCORONIDASI (MF) <sup>NEW</sup>**
**50 Test**
**40032**
*Kit per l'identificazione e la conta di E. Coli beta glucuronidasi.*


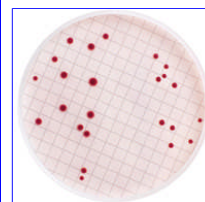
Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno selettivo cromogenico differenziale **T.B.X. Chromogenic Agar** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – **Fondo bianco** con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.  
Stabilità: 6 Mesi a 2/8 °C - **Certificato di Qualità**: incluso nella confezione.

Campo di applicazione: Acque, alimenti.

Norme di riferimento: **APAT IRSA-CNR 7030 Metodo F.**

Periodo e temperatura d'incubazione: 18/24 ore a 44.0 ± 0.5 °C.

Aspetto tipico delle colonie: *Escherichia coli*: *E. Coli*: **blu-verde** - *Escherichia Coli* 0157: H7: β-D-glucuronidase negativa, **colonie incolore** - *Salmonella*, *Streptococcus*, *Klebsiella*: inibita

**ENTEROCOCCHI e STREPTOCOCCHI FECALI**
**KIT (NPA) ENTEROCOCCHI 1 (MF)**
**50 Test**
**40035**
*Kit per la ricerca e la conta di enterococchi.*


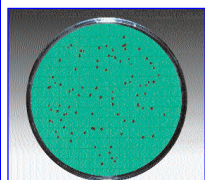
Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno **Slanetz and Bartley Agar +TTC** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – **Fondo bianco** con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.  
Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C - **Certificato di Qualità**: incluso nella confezione.

Campo di applicazione: Acque, latte.

Norme di riferimento: **ISO 7899: 2003 - APAT IRSA-CNR 7040 Metodo C.**

Periodo e temperatura d'incubazione: 48 a 37.0 ± 0.5 °C.

Aspetto tipico delle colonie: *Enterococchi*: colonie **rosse, marrone rossicce o rosa**.

**KIT (NPA) ENTEROCOCCHI 2 (MF)**
**50 Test**
**40036**
*Kit per la ricerca e la conta di enterococchi.*


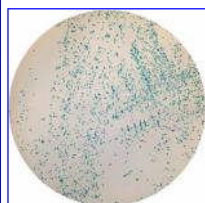
Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno **Bile Aesculin Azide Agar** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – **Fondo bianco** con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.  
Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C. **Certificato di Qualità**: incluso nella confezione.

Campo di applicazione: Acque, latte.

Norme di riferimento: **ISO 7899: 2003 - APAT IRSA-CNR 704 Metodo C.**

Periodo e temperatura d'incubazione: 18-24 ore a 37.0 ± 0.5 °C. / 2 ore a 44.0 ± 0.5 °C, per il test di conferma degli enterococchi nelle acque, secondo la norma ISO 7899-2: 2003.

Aspetto tipico delle colonie: Colonie con un alone da bruno a nero.

**KIT (NPA) ENTEROCOCCHI 3 (MF) <sup>NEW</sup>**
**50 Test**
**40034\***
*Kit per la ricerca e la conta di enterococchi.*


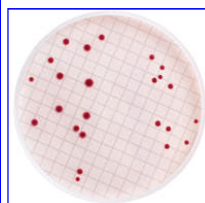
Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno **m-EI Chromogenic Agar** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – **Fondo bianco** con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.  
Stabilità: 6 Mesi a 2/8 °C - **Certificato di Qualità**: incluso nella confezione.

Campo di applicazione: Acque.

Norme di riferimento: /

Periodo e temperatura d'incubazione: 24 ore a 37.0 ± 0.5 °C.

Aspetto tipico delle colonie: *Enterococcus faecium*: **blu** - *Enterococcus faecalis*: **blu**.

**KIT (NPA) STREPTOCOCCHI FECALI (MF)**
**50 Test**
**40025**
*Kit per la ricerca di streptococchi fecali.*


Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno **Kf-Streptococcus Agar + TTC** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – **Fondo bianco** con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.  
Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C - **Certificato di Qualità**: incluso nella confezione.

Campo di applicazione: Acque

Norme di riferimento: /


Periodo e temperatura d'incubazione: 48 ore a 37.0 ± 0.5 °C.

Aspetto tipico delle colonie: Gli Streptococchi danno luogo a colonie rosse o rosa circondate da un alone giallo.

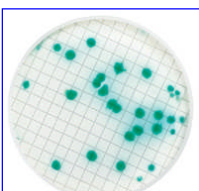
**KIT (NPA) NUTRIENT PETRI AGAR (MF)**

PRODOTTO	Cont.	REF.
<b>LEGIONELLA</b>		
<b>KIT (NPA) LEGIONELLA (MF) <sup>NEW</sup></b> <i>Kit per la ricerca e la conta di Legionella.</i>	<b>50 Test</b>	<b>40044</b>
<p>Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno <b>Legionella Selective Agar (GVPC)</b> / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – <b>Fondo bianco</b> con reticolo nero - Porosità 0,22 µm – Ø 47 mm.            Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C - <b>Certificato di Qualità</b>: incluso nella confezione.</p> <p>Campo di applicazione: Acque.</p> <p>Norme di riferimento: <b>ISO 11731-2: 2004</b>.</p> <p>Periodo e temperatura d'incubazione: Incubare le piastre a 37 °C ed esaminare giornalmente per 7 giorni.</p> <p>Aspetto tipico delle colonie: L. pneumophila forma colonie di colore bianco-grigio, di diametro fino a 2 mm e con tipico aspetto a "ground-glass".</p>		

**LIEVITI E MUFFE**

<b>KIT (NPA) LIEVITI E MUFFE (MF)</b> <i>Kit per la ricerca e la conta di Lieviti e Muffe.</i>	<b>50 Test</b>	<b>40015</b>
<div>  </div> <p>Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno <b>Sabouraud Dextrose Agar</b> / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – <b>Fondo nero</b> con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.            Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C - <b>Certificato di Qualità</b>: incluso nella confezione.</p> <p>Campo di applicazione: Acque, bevande (vino).</p> <p>Norme di riferimento: /</p> <p>Periodo e temperatura d'incubazione: 48/72 ore a 28/32 ± 0.5 °C.</p> <p>Aspetto tipico delle colonie: I lieviti formano grandi colonie verdi opache. Le colonie di muffa appaiono verdi e filamentose.</p>		

**PSEUDOMONAS**

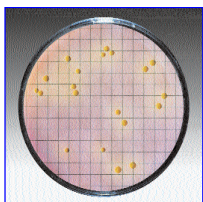
<b>KIT (NPA) PSEUDOMONAS (MF)</b> <i>Kit per la ricerca e la conta di Pseudomonas aeruginosa.</i>	<b>50 Test</b>	<b>40016</b>
<div>  </div> <p>Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno <b>Pseudomonas Selective Agar CN</b> / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – <b>Fondo bianco</b> con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.            Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C - <b>Certificato di Qualità</b>: incluso nella confezione.</p> <p>Campo di applicazione: Acque.</p> <p>Norme di riferimento: <b>ISO 12780: 2002</b>.</p> <p>Periodo e temperatura d'incubazione: 24/48 ore a 37.0 ± 0.5 °C.</p> <p>Aspetto tipico delle colonie: Le colonie sono <b>blu verdi</b> con aloni blu e, illuminate da luce ultravioletta a corta lunghezza d'onda (254 nm), sono fluorescenti.</p>		

**SALMONELLA**

<b>KIT (NPA) SALMONELLA (MF) <sup>NEW</sup></b> <i>Kit per la ricerca e la conta di Salmonella.</i>	<b>50 Test</b>	<b>40046*</b>
<p>Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno <b>Bismuth Sulphite Agar</b> / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – <b>Fondo bianco</b> con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.            Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C - <b>Certificato di Qualità</b>: incluso nella confezione.</p> <p>Campo di applicazione: Acque, latte.</p> <p>Norme di riferimento: APHA.</p> <p>Periodo e temperatura d'incubazione: 24/48 ore a 37.0 ± 0.5 °C</p> <p>Aspetto tipico delle colonie: <i>Salmonella Typhi</i>: colonie nere, piatte, asciutte, circondate da una zona nera-marrone con riflessi metallici generalmente presenti; <i>Salmonella Enteritidis</i>: colonie nere senza zone; <i>Salmonella Gallinarum</i>, <i>Salmonella Choleraesuis</i>, <i>Salmonella Paratyphi</i>, <i>Shigella</i>: colonie verdi o marroncine senza zone. I batteri coliformi, Proteus e Shigella sono fortemente inibiti, ma talvolta possono generare colonie verdastre o marroncine.</p>		



**KIT (NPA) NUTRIENT PETRI AGAR (MF)**

PRODOTTO	Cont.	REF.
<b>STAFILOCOCCI</b>		
<b>KIT (NPA) STAFILOCOCCI 1 (MF)</b> <i>Kit per la ricerca e la conta di Stafilococchi.</i>	<b>50 Test</b>	<b>40018*</b>
<div>  <p> Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno <b>Mannitol Salt Agar</b> / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – <b>Fondo bianco</b> con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.  Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C - <b>Certificato di Qualità</b>: incluso nella confezione.  Campo di applicazione: Acque, latte.  Norme di riferimento: /  Periodo e temperatura d'incubazione: 36 ore a 37.0 ± 0.5 °C, o 3 giorni (APHA) a 32 °C.  Aspetto tipico delle colonie: Si enumerano le colonie che producono un alone <b>giallo-brillante</b> (Stafilococchi coagulasi-positivi), mentre stafilococchi coagulasi negativi sono circondati da un alone rosso o porpora. </p> </div>		
<b>KIT (NPA) STAFILOCOCCI 2 (MF) <sup>NEW</sup></b> <i>Kit per la ricerca e la conta di Stafilococchi coagulasi positivi.</i>	<b>50 Test</b>	<b>40048</b>
<p> Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno <b>Baird Parker Agar</b> / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – <b>Fondo bianco</b> con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.  Stabilità: 6 Mesi a <b>2/8 °C</b> - <b>Certificato di Qualità</b>: incluso nella confezione.  Campo di applicazione: Acque.  Norme di riferimento: <b>ISO 10678: 1998- Rapporti ISTISAN 07/5</b>.  Periodo e temperatura d'incubazione: 24/48 ore a 37.0 ± 0.5 °C  Aspetto tipico delle colonie: I microrganismi appartenenti al genere <i>Staphylococcus</i> coagulasi positivi producono colonie nere con margini netti per effetto della riduzione del tellurito a tellurio metallico, circondate in genere da un alone chiaro dovuto all'attività lecitinasica. </p>		

## KIT (DPS) DROPPER PAD SET (MF) PER ANALISI BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE

**Kit completi contenenti terreni di coltura pronti in Dropper + Pad sterili + le membrane di filtrazione con reticolo, in confezione singola sterile.**

I Kit completi **(DPS) Dropper Pad Set (MF)**, vengono impiegati in combinazione con il metodo delle **membrane filtranti (MF)**, per l'analisi microbiologica **delle acque**.

Per la loro praticità di utilizzo semplificano il procedimento per l'analisi microbiologica, garantendo una **migliore crescita delle colonie**.

Il **Kit (DPS) Dropper Pad Set (MF)**, consiste in **una membrana filtrante** specifica per il tipo di crescita di colonie, sterile, confezionata in busta singola, un **tampone assorbente (PAD) sterile Ø 47 mm.**, precaricato in piastre di Petri sterile, e **un dropper con 2 ml di terreno di coltura pronto all'uso**, prodotto secondo le GMP e in accordo con le formulazioni **UNI EN ISO, APAT IRSA-CNR**.

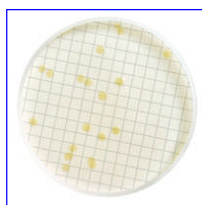
**I Vantaggi per l'utilizzatore sono:**

- 1) La convenienza** (Confezioni da 50 determinazioni);
  - 2) Nessuna perdita di tempo** per la preparazione dei terreni di coltura (sterilizzazione, diidratazione, ecc.);
  - 3) Semplicità d'uso:** Tutti i materiali all'interno del kit **sono pronti all'uso**;
  - 4) Qualità:** in produzione, ciascun lotto di terreno di coltura pronti in piastre petri viene testato con i ceppi di riferimento ATCC.
- Certificato di Qualità:** incluso nella confezione.
- 5) Conservazione:** I **Kit (DPS) Dropper Pad Set (MF)** hanno una durata di **24 mesi**, se conservati in un luogo buio e asciutto ad una temperatura di **4-25 °C**. (\*) Prodotto disponibile con ordine minimo: **2 Conf.**

PRODOTTO	Cont.	REF.
----------	-------	------

### CONTA TOTALE

<b>KIT (DPS) CONTA TOTALE 1 (MF)</b> <i>Kit per la conta delle cariche microbiche.</i>	<b>50 Test</b>	<b>40002*</b>
---	----------------	---------------



Il Kit contiene: n. 50 dropper con 2 ml di terreno pronto **Plate Count Broth** (Standard Methods) / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.), **fondo bianco** con reticolo nero, porosità 0,45 µm - Ø 47 mm. / n. 50 piastre Petri sterili (Ø 60 mm.) con cartoncino assorbente (PAD) (Ø 47 mm.).

**Stabilità:** 24 Mesi a 4/25 °C - **Certificato di Qualità:** incluso nella confezione.

**Campo di applicazione:** Acque, alimenti, bevande.

**Norme di riferimento:** **APHA (1998) - Standard Methods for the Examination of water and wastewater.**

**Periodo e temperatura d'incubazione:** 48 ore a 22.0 ± 1 °C, 48 ore a 37 ± 0.5 °C.

**Aspetto tipico delle colonie:** Le colonie sono da trasparenti a bianche cremose, alcune possono essere pigmentate.

### COLIFORMI TOTALI

<b>KIT (DPS) COLIFORMI TOTALI (MF)</b> <i>Kit per la ricerca e la conta di coliformi totali.</i>	<b>50 Test</b>	<b>40007*</b>
---	----------------	---------------



Il Kit contiene: n. 50 dropper con 2 ml di terreno pronto **m-Endo Broth** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.), **fondo bianco** con reticolo nero, porosità 0,45 µm - Ø 47 mm. / n. 50 piastre Petri sterili (Ø 60 mm.) con cartoncino assorbente (PAD) (Ø 47 mm.).

**Stabilità:** 24 Mesi a 4/25 °C - **Certificato di Qualità:** incluso nella confezione.

**Campo di applicazione:** Acque, latte.

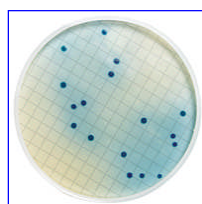
**Norme di riferimento:** **APHA (1998) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - APAT IRSA-CNR 7010 Med. C.**

**Periodo e temperatura d'incubazione:** Da 18 a 24 ore a 37.0 ± 0.5 °C.

**Aspetto tipico delle colonie:** Le colonie sono rosso scuro e/o con lucentezza metallica verde-dorata cresciute entro le 24 ore. La lucentezza può interessare l'intera colonia o essere limitata nella zona centrale del perimetro.

### E. COLI e COLIFORMI FECALI

<b>KIT (DPS) COLIFORMI FECALI (MF)</b> <i>Kit per la ricerca e la conta di Coliformi fecali.</i>	<b>50 Test</b>	<b>40012*</b>
---	----------------	---------------



Il Kit contiene: n. 50 dropper con 2 ml di terreno pronto **m-FC Broth** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.), **fondo bianco** con reticolo nero, porosità 0,45 µm - Ø 47 mm. / n. 50 piastre Petri sterili (Ø 60 mm.) con cartoncino assorbente (PAD) (Ø 47 mm.).

**Stabilità:** 24Mesi a 4/25 °C - **Certificato di Qualità:** incluso nella confezione.

**Campo di applicazione:** Acque.

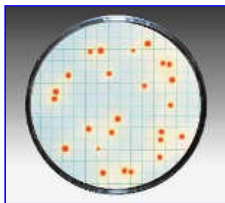
**Norme di riferimento:** **APHA (1998) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater - APAT IRSA-CNR 7020 Metodo B.**

**Periodo e temperatura d'incubazione:** 24 ore a 44.5 ± 0.2 °C.

**Aspetto tipico delle colonie:** I coliformi fecali si presentano con colonie **colorate di blu**, i coliformi non fecali si presentano con colonie variabili dal grigio-crema al panna. Alcuni **Escherichia coli** possono formare colonie atipiche di colore giallo chiaro.

## KIT (DPS) DROPPER PAD SET (MF)

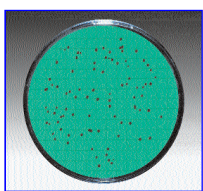
PRODOTTO	Cont.	REF.
<b>KIT (DPS) E. COLI (MF)</b> <i>Kit per la ricerca e la conta di E. coli.</i>	<b>50 Test</b>	<b>40014*</b>



Il Kit contiene: n. 50 dropper con 2 ml di terreno pronto **Tergitol 7 Broth + TTC** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.), **fondo bianco** con reticolo nero, porosità 0,45 µm - Ø 47 mm. / n. 50 piastre Petri sterili (Ø 60 mm.) con cartoncino assorbente (PAD) (Ø 47 mm.).  
**Stabilità:** 24 Mesi a 4/25 °C - **Certificato di Qualità:** incluso nella confezione.  
**Campo di applicazione:** Acque.  
**Norme di riferimento:** **ISO 9308: 2002**  
**Periodo e temperatura d'incubazione:** 24 ore a 37.0 ± 0.5 °C.  
**Aspetto tipico delle colonie:** *E. coli*: colonie da giallo ad arancio con alone giallo. *Enterobacter/Klebsiella*: colonie giallo-verde. *Salmonella/Proteus*: colonie rosse con alone bluastrò

## ENTEROCOCCHI

<b>KIT (DPS) ENTEROCOCCHI (MF)</b> <i>Kit per la ricerca e la conta di enterococchi.</i>	<b>50 Test</b>	<b>40019*</b>
---	----------------	---------------



Il Kit contiene: n. 50 dropper con 2 ml di terreno pronto **Azide Dextrose Broth** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.), **fondo bianco** con reticolo nero, porosità 0,45 µm - Ø 47 mm. / n. 50 piastre Petri sterili (Ø 60 mm.) con cartoncino assorbente (PAD) (Ø 47 mm.).  
**Stabilità:** 24 Mesi a 4/25 °C. **Certificato di Qualità:** incluso nella confezione.  
**Campo di applicazione:** Acque, latte.  
**Norme di riferimento:** **ISO 7899: 2003 - APAT IRSA-CNR 704 Metodo C.**  
**Periodo e temperatura d'incubazione:** 18-24 ore a 37.0 ± 0.5 °C. / 2 ore a 44.0 ± 0.5 °C, per il test di conferma degli enterococchi nelle acque, secondo la norma ISO 7899-2: 2003.  
**Aspetto tipico delle colonie:** Colonie con un alone da bruno a nero.

## PETRI PAD

PRODOTTO	Cont.	REF.
<b>PIASTRE PETRI STERILI Ø 60 mm.</b>	<b>680 Pz</b>	<b>18130</b>
<b>PAD STERILI</b> Tamponi assorbenti, sterili Ø 47 mm.	<b>10x10 Pz</b>	<b>AP10047E0</b>
	<b>10x100 Pz</b>	<b>AP10045S0</b>
<b>PAD STERILI + N. 1 DISTRIBUTORE</b> N. 200 Tamponi assorbenti sterili Ø 47 mm. + n. 1 distributore di tamponi	<b>2x100 Pz</b>	<b>AP10045S1</b>
<b>PAD STERILI + PIASTRE</b> Tamponi assorbenti sterili Ø 47 mm., precaricate in piastre di Petri sterili.	<b>150+150 Pz</b>	<b>PD20047S0</b>
	<b>600 Pz</b>	<b>PD20047S5</b>
<b>PAD STERILI + MEMBRANE + DISTRIBUTORE</b> N. 600 Tamponi assorbenti sterili Ø 47 mm., n. 3 dispensatori di tamponi + n. 600 membrane filtranti S-Pak da 0,45 µm, 47 mm, bianchi, quadrettati, sterili.	<b>600 Pz</b>	<b>HAWG647SP</b>
<b>DISTRIBUTORE PAD</b>	<b>680 Pz</b>	<b>18130</b>

## KIT (NPS) NUTRIENT PADS SET (MF) PER L'ANALISI BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE

**Membrane con reticolo, in confezione sterile singola + cartone nutriente secco in piastra di Petri sterile.**

Kit completi contenenti 50 piastre di Petri (in 5 pacchi sterili da 10 piastre), ognuna delle quali contiene un cartoncino già imbibito di terreno di coltura specifico disidratato e sterile e n. 50 membrane con reticolo, confezionate in busta singola sterile, per l'analisi microbiologica delle acque con il metodo della membrane filtranti (MF).

**Conservazione:** 4-25 °C – **Stabilità:** 24 Mesi.



PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>CONTA TOTALE COLONIE</b>			
<b>NUTRIENT PAD / CONTA TOTALE 1</b> <b>Kit per la conta delle cariche microbiche delle acque potabili e acque reflue.</b> Il Kit contiene: n. 50 piastre di petri con cartoncino nutriente secco imbibito di terreno <b>Standard</b> / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – Fondo verde con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.		<b>50 Test</b>	<b>NPS-STDD</b>
<b>NUTRIENT PAD / CONTA TOTALE 2</b> <b>Kit per la conta delle cariche microbiche delle acque.</b> Il Kit contiene: n. 50 piastre di petri con cartoncino nutriente secco imbibito di terreno <b>Standard TTC</b> / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – Fondo verde con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.		<b>50 Test</b>	<b>NPS-CTOT</b>
<b>COLIFORMI TOTALI</b>			
<b>NUTRIENT PAD / COLIFORMI TOTALI</b> <b>Kit per la conta di Coliformi totali nelle acque.</b> Il Kit contiene: n. 50 piastre di petri con cartoncino nutriente secco imbibito di terreno <b>m-Endo</b> / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – Fondo bianco con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.	<b>Dir. 98/93/CE ISO 7899</b>	<b>50 Test</b>	<b>NPS-ECOL</b>
<b>E. COLI / COLIFORMI FECALI</b>			
<b>NUTRIENT PAD / COLIFORMI FECALI</b> <b>Kit per la conta di Coliformi fecali nelle acque.</b> Il Kit contiene: n. 50 piastre di petri con cartoncino nutriente secco imbibito di terreno <b>m-FC</b> / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – Fondo bianco con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.		<b>50 Test</b>	<b>NPS-CFEC</b>
<b>NUTRIENT PAD / E. COLI e COLIFORMI</b> <b>Kit per la conta selettiva di E.coli e Coliformi fecali nelle acque.</b> Il Kit contiene: n. 50 piastre di petri con cartoncino nutriente secco imbibito di terreno <b>Lactose TTC Tergitol</b> / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – Fondo bianco con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.	<b>Dir. 98/93/CE ISO 9308</b>	<b>50 Test</b>	<b>NPS-LCTE</b>
<b>NUTRIENT PAD / E. COLI e COLIFORMI FECALI 1</b> <b>Kit per la conta e la differenziazione di E. Coli e Coliformi fecali nelle acque.</b> Il Kit contiene: n. 50 piastre di petri con cartoncino nutriente secco imbibito di terreno <b>Miscela speciale</b> / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – Fondo bianco con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.	<b>Dir. 98/93/CE</b>	<b>50 Test</b>	<b>NPS-COLC</b>
<b>NUTRIENT PAD / E. COLI e COLIFORMI FECALI 2</b> <b>Kit per la conta e la selezione di E.coli, coliformi fecali e coliformi che non fermentano lattosio nelle acque.</b> Il Kit contiene: n. 50 piastre di petri con cartoncino nutriente secco imbibito di terreno <b>Teepol</b> / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – Fondo bianco con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.		<b>50 Test</b>	<b>NPS-TEEP</b>

**KIT (NPS) NUTRIENT PADS SET (MF)**

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>ENTEROCOCCHI / STREPTOCOCCHI FECALI</b>			
<b>NUTRIENT PAD / ENTEROCOCCHI</b> <b>Kit per la conta selettiva di Enterococchi (Streptococchi fecali) nelle acque.</b> Il Kit contiene: n. 50 piastre di petri con cartoncino nutriente secco imbibito di terreno <b>Enterococcus</b> / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – Fondo bianco con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.		<b>50 Test</b>	<b>NPS-ENTC</b>
<b>NUTRIENT PAD / STREPTOCOCCHI FECALI</b> <b>Kit per la conta di Streptococchi fecali nelle acque.</b> Il Kit contiene: n. 50 piastre di petri con cartoncino nutriente secco imbibito di terreno <b>Azide</b> / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – Fondo bianco con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.		<b>50 Test</b>	<b>NPS-ENTR</b>

**PSEUDOMONAS AERUGINOSA**

<b>NUTRIENT PAD / PSEUDOMONAS 1</b> <b>Kit per la conta selettiva di Pseudomans aeruginosa nelle acque.</b> Il Kit contiene: n. 50 piastre di petri con cartoncino nutriente secco imbibito di terreno <b>Cetrimide</b> / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – Fondo bianco con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.	<b>USP / DIN</b>	<b>50 Test</b>	<b>NPS-PSDM</b>
<b>NUTRIENT PAD / PSEUDOMONAS 2</b> <b>Kit per la conta selettiva di Pseudomans aeruginosa nelle acque.</b> Il Kit contiene: n. 50 piastre di petri con cartoncino nutriente secco imbibito di terreno <b>Pseudomonas</b> / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – Fondo bianco con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.	<b>Dir. 98/93/CE ISO 12780</b>	<b>50 Test</b>	<b>NPS-PSCN</b>

**SALMONELLA**

<b>NUTRIENT PAD / SALMONELLA</b> <b>Kit per la conta di Salmonelle nelle acque.</b> Il Kit contiene: n. 50 piastre di petri con cartoncino nutriente secco imbibito di terreno <b>Bismuto Sulfito</b> / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – Fondo verde con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.		<b>50 Test</b>	<b>NPS-SALM</b>
---	--	----------------	-----------------

**FILTRI A SIRINGA PRONTI**
**Filtri a siringa Advantec MFS, pronti all'uso.**

Questa serie di filtri, applicabili a una siringa con attacco Luer o cono, prevede i seguenti diametri: 13, 25 o 50 mm. con una membrana interna in acetato o nitrato di cellulosa, PTFE e nylon. In uscita hanno un attacco conico Luer maschio, per applicare eventualmente un ago di tipo ipodermico.

PRODOTTO	Cont.	REF
<b>ACETATO DI CELLULOSA</b>		
<b>FILTRO A SIRINGA – Porosità 0,2 µm / Ø 25 mm.</b>	<b>50 Pz</b>	<b>MD-25CS020AS</b>
<b>FILTRO A SIRINGA – Porosità 0,45 µm / Ø 25 mm.</b>	<b>50 Pz</b>	<b>MD-25CS045AS</b>

**Metodo d'uso degli NPS (Nutrient Pad Sterile):**

1) Prendere una piastra Petri contenente il terreno in cartoncino secco, aprirla ed aggiungere 2 o 2,5 ml di acqua distillata sterile con una pipetta o con una siringa munita di un filtro MD (Disposable Syringe Filter) da 0,45 o 0,2 µm sterilizzante avente un diametro di 13 o 25 mm. Una umidificazione corretta si ha quando si nota un anello di liquido sul bordo esterno del cartoncino. 2) Aprire una bustina, estrarre la membrana con la pinzetta sterilizzata e depositarla sul disco supporto della membrana (preventivamente sterilizzato). Se si usa la flambatura ed il disco è di acciaio inossidabile, è consigliabile passare per breve tempo la fiamma sul disco tenendo aperto il vuoto; in questo modo il calore si infiltrerà nella trama dell'acciaio poroso per una migliore sterilizzazione.

## CAMPIONAMENTO DELLE ACQUE

### FLACONI STERILI CON SODIO TIOSOLFATO

Flaconi in polietilene sterili contenenti tiosolfato di sodio per il campionamento delle acque potabili, per neutralizzare l'eventuale cloro attivo presente nelle acque.

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>FLACONE COLLO STRETTO</b>			
FLACONE STERILE 120 ML / Sodio Tiosolfato 2,5 mg Tappo a strappo – COLLO STRETTO Ø 22 mm	ISO 19458: 2006	1 Flacone 100 Flaconi	8443 8443/A
FLACONE STERILE 250 ML / Sodio Tiosolfato 5 mg Tappo a strappo – COLLO STRETTO Ø 22 mm	ISO 19458: 2006	1 Flacone 100 Flaconi	8449 8449/A
FLACONE STERILE 500 ML / Sodio Tiosolfato 10 mg Tappo a strappo – COLLO STRETTO Ø 22 mm	ISO 19458: 2006	1 Flacone 100 Flaconi	8842 8442/A
FLACONE STERILE 1000 ML / Sodio Tiosolfato 20 mg Tappo a strappo – COLLO STRETTO Ø 22 mm	ISO 19458: 2006	1 Flacone 100 Flaconi	8441 8441/A



Flacone in polietilene sterile a **collo stretto** (Ø 22 mm.) contenente sodio tiosolfato. Soluzione **finale 20 mg/L** per la neutralizzazione del cloro presente nel campione di acqua.  
Dotato di tappo a vite con **apertura del sigillo a strappo**, ideale per gli impieghi in cui non debba essere consentita l'apertura indesiderata nelle fasi successive al riempimento.  
Con **etichetta** per la registrazione dei dati del campione, che assicura anche una completa tracciabilità del prodotto grazie al numero di lotto e data di scadenza riportati sull'etichetta apposta su ciascun flacone.  
Conforme alla norma internazionale **ISO 19458: 2006(E)**.

### FLACONE COLLO LARGO

FLACONE STERILE 500 ML / Sodio Tiosolfato 10 mg Tappo a strappo – COLLO LARGO Ø 30 mm	ISO 19458: 2006	1 Flacone 100 Flaconi	8448 8448/A
FLACONE STERILE 1000 ML / Sodio Tiosolfato 20 mg Tappo a strappo – COLLO LARGO Ø 30 mm	ISO 19458: 2006	1 Flacone 100 Flaconi	8846 8446/A
FLACONE STERILE 2000 ML / Sodio Tiosolfato 40 mg Tappo a strappo – COLLO LARGO Ø 30 mm	ISO 19458: 2006	1 Flacone 100 Flaconi	8447 8447/A



Flacone in polietilene sterile a **collo largo** (Ø 30 mm.) contenente sodio tiosolfato. Soluzione **finale 20 mg/L** per la neutralizzazione del cloro presente nel campione di acqua.  
Dotato di tappo a vite con **apertura del sigillo a strappo**, ideale per gli impieghi in cui non debba essere consentita l'apertura indesiderata nelle fasi successive al riempimento.  
Con **etichetta** per la registrazione dei dati del campione, che assicura anche una completa tracciabilità del prodotto grazie al numero di lotto e data di scadenza riportati sull'etichetta apposta su ciascun flacone.  
Conforme alla norma internazionale **ISO 19458: 2006(E)**.

### FLACONE RETTANGOLARE COLLO LARGO<sup>NEW</sup>

FLACONE RETTANGOLARE STERILE 500 ML / Sodio Tiosolfato 10 mg Tappo a strappo – COLLO LARGO Ø 35 mm	ISO 19458: 2006	1 Flacone 125 Flaconi	8450 8450/A
FLACONE RETTANGOLARE STERILE 1000 ML / Sodio Tiosolfato 20 mg Tappo a strappo – COLLO LARGO Ø 35 mm	ISO 19458: 2006	1 Flacone 135 Flaconi	8452 8452/A
FLACONE RETTANGOLARE STERILE 2000 ML / Sodio Tiosolfato 40 mg Tappo a strappo – COLLO LARGO Ø 35 mm	ISO 19458: 2006	1 Flacone 60 Flaconi	8453 8453/A



Flacone **rettangolare** (salva spazio) in polietilene sterile a **collo largo** (Ø 35 mm.) contenente sodio tiosolfato. Soluzione **finale 20 mg/L** per la neutralizzazione del cloro presente nel campione di acqua.  
Dotato di tappo a vite con **apertura del sigillo a strappo**, ideale per gli impieghi in cui non debba essere consentita l'apertura indesiderata nelle fasi successive al riempimento.  
Con **etichetta** per la registrazione dei dati del campione, che assicura anche una completa tracciabilità del prodotto grazie al numero di lotto e data di scadenza riportati sull'etichetta apposta su ciascun flacone.  
Conforme alla norma internazionale **ISO 19458: 2006(E)**.



## SACCHETTI STERILI CON SODIO TIOSOLFATO


Sacchetto in plastica speciale ad alta resistenza - **sterile** - trasparente - con sodio tiosolfato - per il prelievo e il trasporto di acqua potabile - saldatura su tre lati - speciale fondo che consente al sacchetto, una volta riempito, di stare in piedi da solo - sigillo superiore a strappo per garantire la sterilità - sistema di chiusura a nastro animato - con area di scrittura.

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>SACCHETTI SETRILI TISOL "STAND UP" 500 ML</b> Sodio Tiosolfato 10 mg	<b>ISO 19458: 2006</b>	<b>250 Pz</b>	<b>87374</b>



Ideale per il campionamento di acqua potabile per analisi microbiologiche. Ogni sacchetto sterile da 500 mL contiene 10 mg, soluzione finale **20 mg/L** per la neutralizzazione del cloro presente nel campione di acqua. Può essere utilizzato anche per campionamento di acqua di piscina, fiume, torrenti, laghi, scarichi industriali. L'area bianca di scrittura facilita la identificazione del campione. La linea superiore della banda bianca è utilizzata come segno di taratura quando si introduce il campione. Il sistema di chiusura a filo metallico garantisce la tenuta ermetica durante il trasporto. Approvato ufficialmente dall'United States Environmental Protection Agency.

## CONTENITORI MONOUSO STERILI

PRODOTTO	Cont.	REF
 <b>CONTENITORE STERILE 150 ML</b> Contenitore sterile in polipropilene, tappo a vite – conf. singola.	<b>250 Flaconi</b>	<b>82120/SG</b>
<b>CONTENITORE STERILE 200 ML + Etichetta</b> Contenitore sterile in polipropilene, tappo a vite – conf. Singola.	<b>250 Flaconi</b>	<b>231200</b>

## FLACONI MONOUSO STERILI

PRODOTTO	Cont.	REF
<b><u>FLACONE COLLO STRETTO Ø 22 mm.</u></b>		
<b>FLACONE STERILE 250 ML</b> Tappo a strappo – <b>COLLO STRETTO Ø 22 mm</b>	<b>100 Flaconi</b>	<b>8323/SG</b>
<b>FLACONE STERILE 500 ML</b> Tappo a strappo – <b>COLLO STRETTO Ø 22 mm</b>	<b>100 Flaconi</b>	<b>8324/SG</b>
<b>FLACONE STERILE 1000 ML</b> Tappo a strappo – <b>COLLO STRETTO Ø 22 mm</b>	<b>50 Flaconi</b>	<b>8325/SG</b>



Flacone in polietilene sterile, a **collo stretto (Ø 22 mm.)**, dotato di **tappo a vite** con apertura del sigillo a strappo. Ideale per gli impieghi in cui non debba essere consentita l'apertura indesiderata nelle fasi successive al riempimento. Con **etichetta** per la registrazione dei dati del campione, che assicura anche una completa tracciabilità del prodotto grazie al numero di lotto e data di scadenza riportati sull'etichetta apposta su ciascun flacone.

### **FLACONE COLLO LARGO**

<b>FLACONE STERILE 500 ML</b> Tappo a strappo – <b>COLLO LARGO Ø 30 mm</b>	<b>150 Flaconi</b>	<b>8327/SG</b>
<b>FLACONE STERILE 1000 ML</b> Tappo a strappo – <b>COLLO LARGO Ø 30 mm</b>	<b>80 Flaconi</b>	<b>8328/SG</b>



Flaconi in polietilene sterili, a **collo largo (Ø 30 mm.)**, dotate di **tappo a vite** con apertura del sigillo a strappo. Ideale per gli impieghi in cui non debba essere consentita l'apertura indesiderata nelle fasi successive al riempimento. Con **etichetta** per la registrazione dei dati del campione, che assicura anche una completa tracciabilità del prodotto grazie al numero di lotto e data di scadenza riportati sull'etichetta apposta su ciascun flacone.



## FLACONI MONOUSO STERILI

PRODOTTO	Cont.	REF
<b>FLACONE RETTANGOLARE COLLO LARGO</b> <sup>NEW</sup>		
FLACONE RETTANGOLARE STERILE 500 ML Tappo a strappo – COLLO LARGO Ø 35 mm	125 Flacons	8329/SG
FLACONE RETTANGOLARE STERILE 1000 ML Tappo a strappo – COLLO LARGO Ø 35 mm	135 Flacons	8330/SG
FLACONE RETTANGOLARE STERILE 2000 ML Tappo a strappo – COLLO LARGO Ø 35 mm	60 Flacons	8331/SG



Flacone **rettangolare** (salva spazio) in polietilene sterile, a **collo largo (Ø 35 mm.)**, dotato di **tappo a vite** con apertura del sigillo a strappo. Ideale per gli impieghi in cui non debba essere consentita l'apertura indesiderata nelle fasi successive al riempimento.  
Con **etichetta** per la registrazione dei dati del campione, che assicura anche una completa tracciabilità del prodotto grazie al numero di lotto e data di scadenza riportati sull'etichetta apposta su ciascun flacone.

## FLACONI MONOUSO

PRODOTTO	Cont.	REF
<b>FLACONE COLLO STRETTO</b>		
FLACONE MONOUSO 250 ML Tappo a strappo – COLLO STRETTO Ø 22 mm	100 Flacons	15702/100
FLACONE MONOUSO 500 ML Tappo a strappo – COLLO STRETTO Ø 22 mm	100 Flacons	15703/100
FLACONE MONOUSO 1000 ML Tappo a strappo – COLLO STRETTO Ø 22 mm	50 Flacons	15704/50
<b>FLACONE RETTANGOLARE COLLO LARGO</b> <sup>NEW</sup>		
FLACONE MONOUSO RETTANGOLARE 500 ML Tappo a strappo – COLLO LARGO Ø 35 mm	125 Flacons	15705/125
FLACONE MONOUSO RETTANGOLARE 1000 ML Tappo a strappo – COLLO LARGO Ø 35 mm	135 Flacons	15706/135
FLACONE MONOUSO RETTANGOLARE 2000 ML Tappo a strappo – COLLO LARGO Ø 35 mm	60 Flacons	15707/60





### FLACONI GRADUATI IN VETRO

Flaconi in vetro Pyrex®. Guarnizione sul collo della bottiglia: evita sgocciolamenti e garantisce la tenuta ermetica del tappo. Graduazione serigrafata in bianco. Tappo e flacone sterilizzabili a 140 °C

PRODOTTO	Cont.	REF
<b>FLACONE VETRO GRADUATO 250 ML / Tappo vite</b> <b>FLACONE VETRO GRADUATO 500 ML / Tappo vite</b> <b>FLACONE VETRO GRADUATO 1000 ML / Tappo vite</b> <b>FLACONE VETRO GRADUATO 2000 ML / Tappo vite</b>	<b>1 Pz</b> <b>1 Pz</b> <b>1 Pz</b> <b>1 Pz</b>	<b>FLA20310</b> <b>FLA20320</b> <b>FLA20330</b> <b>FLA20340</b>
Flacone graduato in vetro "Simax" con filettatura ISO4796 completi di tappo colore blu sterilizzabili in autoclave a 140 °C.		

### SONDA PRELEVA CAMPIONI


PRODOTTO	Cont.	REF
 <b>SONDA PRELEVA CAMPIONI Mod. SUB 15 IN ACCIAIO INOX</b> <b>Kit completo di:</b> Sonda SUB 15 inox-teflon – Avvolgitore in plexiglas – 15 mt. di fune marina – Anello inox a collare – Bottiglia graduata da 500 ml – Valigetta rigida antiurto.	<b>1 Pz</b>	<b>27450</b>
 <b>CAMPIONATORE "SWING"</b> Campionatore ad immersione in alluminio estendibile da 1950 a 4700 mm.	<b>1 Pz.</b>	<b>15729</b>

## FILTRAZIONE DELLE ACQUE



### SISTEMI MULTIPLI DI FILTRAZIONE SOTTOVUOTO

Sistemi per la filtrazione sottovuoto, per l'analisi batteriologiche delle acque.

PRODOTTO	Cont.	REF.
<b>SISTEMA RA-S</b>		
<b>RAMPA DI FILTRAZIONE IN ACCIAIO 1 POSTI Mod. RA-S</b>	<b>1 Unità</b>	<b>246226</b>
<b>RAMPA DI FILTRAZIONE IN ACCIAIO 3 POSTI Mod. RA-S</b>	<b>1 Unità</b>	<b>246227</b>
<b>RAMPA DI FILTRAZIONE IN ACCIAIO 6 POSTI Mod. RA-S</b>	<b>1 Unità</b>	<b>246228</b>
 <p>Il modello RA-S ha una colonna con l'estremità superiore piatta, per cui i bicchieri filtranti vengono appoggiati ad essa, con o senza l'ausilio di una pinza. Questa rampa può utilizzare bicchieri in acciaio inox o vetro. Le pinze sono necessarie, e vanno quindi inserite per tutti i bicchieri tranne che quelli in acciaio inox da 100 e 250 ml.</p>		
<b>BICCHIERE INOX DA 100 ML</b> Filtri in acciaio inox per vuoto da 100 ml, non necessita della pinza.	<b>1 Unità</b>	<b>249190</b>
<b>BICCHIERE INOX DA 250 ML</b> Filtri in acciaio inox per vuoto da 250 ml, non necessita della pinza.	<b>1 Unità</b>	<b>249185</b>
<b>BICCHIERE INOX DA 500 ML</b> Filtri in acciaio inox per vuoto da 500 ml, non necessita della pinza.	<b>1 Unità</b>	
<b>BICCHIERE VETRO DA 100 ML</b> Filtri in vetro per vuoto da 100 ml, non necessita della pinza – Graduato ogni 25 ml	<b>1 Unità</b>	<b>240970</b>
<b>BICCHIERE VETRO DA 250 ML</b> Filtri in vetro per vuoto da 250 ml, non necessita della pinza – Graduato ogni 50 ml	<b>1 Unità</b>	<b>249120</b>
<b>BICCHIERE VETRO DA 500 ML</b> Filtri in vetro per vuoto da 500 ml, non necessita della pinza – Graduato ogni 50 ml	<b>1 Unità</b>	
<b>PINZA PER BICCHIERE INOX E VETRO DA 500 ML</b>	<b>1 Unità</b>	<b>249170</b>

**SISTEMI MULTIPLI DI FILTRAZIONE SOTTOVUOTO**


PRODOTTO	Cont.	REF.
----------	-------	------


**SISTEMA KM-32**


<b>RAMPA DI FILTRAZIONE IN ACCIAIO 1 POSTO Mod. KM-1N</b>	<b>1 Unità</b>	<b>246030</b>
<b>RAMPA DI FILTRAZIONE IN ACCIAIO 3 POSTI Mod. KM-3N</b>	<b>1 Unità</b>	<b>246040</b>
<b>RAMPA DI FILTRAZIONE IN ACCIAIO 6 POSTI Mod. KM-6N</b>	<b>1 Unità</b>	<b>246050</b>



Il modello KM-N ha una colonna con un foro interno, nel quale si inserisce un tappo di misura F8 già incluso nei dispositivi di filtrazione. Questa rampa può utilizzare:  
Bicchieri in acciaio inox tipo KSL 47/50 - Bicchieri in vetro tipo KG 47 - Bicchieri in polisulfone tipo KP 47H.

	<b>BICCHIERE INOX KSL 47/50 DA 100 ML</b>	<b>1 Unità</b>	<b>545490</b>
	<b>BICCHIERE INOX KSL 47/50 DA 250 ML</b>	<b>1 Unità</b>	<b>245485</b>
	<b>BICCHIERE INOX KSL 47/50 DA 500 ML + PINZA</b>	<b>1 Unità</b>	<b>245480</b>
Filtri in acciaio inox per vuoto, Ø 47 o 50 mm, con bicchiere da 100 ml, 250 e 500 ml, imbuto inferiore liscio, da montarsi sulle rampe KM. <b>Completo di tappo F8.</b>			

	<b>BICCHIERE VETRO KG 47 DA 100 M</b>	<b>1 Unità</b>	<b>245116</b>
	<b>BICCHIERE VETRO KG 47 DA 300 ML</b>	<b>1 Unità</b>	<b>245310</b>
	<b>BICCHIERE VETRO KG 47 DA 500 ML</b>	<b>1 Unità</b>	<b>255260</b>
Filtro in vetro per vuoto, Ø 47 mm, bicchiere da 300 ml, supporto della membrana in vetro sinterizzato e tappo F8, da montarsi sulle rampe KM.			

	<b>BICCHIERE POLISULFONE KP 47H DA 300 ML AUTOCLAVABILE</b>	<b>1 Unità</b>	<b>245250</b>
	<b>BICCHIERE POLISULFONE KP 47H DA 500 ML AUTOCLAVABILE</b>	<b>1 Unità</b>	<b>245255</b>
Filtri in polisulfone per vuoto, Ø 47 mm con bicchiere graduato da 300 e 500 ml e tappo F8, da montarsi su beute da vuoto o su rampe tipo KM1, KM3 e KM6.			

**SISTEMI MULTIPLI DI FILTRAZIONE SOTTOVUOTO**

PRODOTTO	Cont.	REF.
----------	-------	------

**SISTEMA RA-M**

RAMPA DI FILTRAZIONE IN ACCIAIO 1 POSTO Mod. RA1-M	1 Unità	246230
RAMPA DI FILTRAZIONE IN ACCIAIO 3 POSTI Mod. RA3-M	1 Unità	246231
RAMPA DI FILTRAZIONE IN ACCIAIO 6 POSTI Mod. RA6-M	1 Unità	246232



Il modello **RA-M** ha una colonna con l'estremità superiore piatta, per cui i bicchieri filtranti monouso sterili vengono appoggiati ad essa.

**SISTEMA MICROFIL® Millipore®**


RAMPA DI FILTRAZIONE IN ACCIAIO 1 POSTO Millipore®	1 Unità	MIAC01P01
--	---------	-----------


**IMBUTI FILTRANTI MONOUSO PER SISTEMA RA-M e SISTEMA MICROFIL®**

Imbuto sterile in plastica da 100 e 250 ml per filtrazione sottovuoto, monouso in polipropilene, con membrana quadrettata S-Pak da 47 mm, in esteri misti di cellulosa (MCE), per sistema multiplo di filtrazione **RA-M**, e per sistema singolo **Microfil®**.

<b>IMBUTO MICROFIL 100 ML</b> Membrana bianca, retinata, sterile grado di filtrazione <b>0,45 um.</b>	<b>150 Pz</b> (150 Imbuti + 150 Filtri)	<b>MIHAWG100</b>
<b>IMBUTO MICROFIL 250 ML</b> Membrana bianca, retinata, sterile grado di filtrazione <b>0,45 um.</b>	<b>150 Pz</b> (150 Imbuti + 150 Filtri)	<b>MIHAW250</b>
<b>IMBUTO MICROFIL 100 ML / Lieviti e muffe</b> Membrana fondo nero, retinata, sterile grado di filtrazione <b>0,8 um.</b>	<b>72 Pz</b> (72 Imbuti +72 Filtri)	<b>MIAAWG072</b>
<b>IMBUTO MICROFIL 100 ML / Legionella</b> Membrana fondo nero, retinata, sterile grado di filtrazione <b>0,22 um.</b>	<b>150 Pz</b> (150 Imbuti + 150 Filtri)	<b>MIGSWG100</b>

## ACCESSORI PER SISTEMI MULTIPLI

PRODOTTO	Cont.	REF.
BEUTA DA VUOTO DA 5 LITRI PER TAPPO F16	1 Unità	06004
TAPPO F16 CON ATTACCHI E RUBINETTI	1 Unità	04016
BOTTIGLIA DI WOULF DA 2 LITRI CON ATTACCHI E RUBINETTI	1 Unità	06012
VALVOLA DI NON RITORNO	1 Unità	22795
TUBO DI GOMMA ( ALMENO 2 METRI )	1 Unità	07201
 <b>POMPA DUERR TECHNIK TD 461</b> Pompa da vuoto elettrica 220 V - portata 50 lt/min - a secco, vuoto 80%	1 Unità	22742


## SISTEMI SINGOLI PER FILTRAZIONE SOTTOVUOTO

Sistema singolo per la filtrazione sottovuoto, per l'analisi batteriologiche delle acque.


PRODOTTO	Cont.	REF.
IMBUTO MAGNETICO 150 ML / <b>AUTOCLAVABILE</b>	1 Unità	516-7597
IMBUTO MAGNETICO 300 ML / <b>AUTOCLAVABILE</b>	1 Unità	516-7594
 Imbuti filtranti, magnetici, 47 mm, polifenilsulfone, con esclusivo sigillo magnetico, con graduazione (incrementi di 50 ml). Struttura in poli.enilsulfone compatibile con agenti antischiuma. Utilizzabili per la tecnica MF: controllo dei trattamenti delle acque municipali, analisi acque superficie, analisi acque di processo, analisi acque potabili.		
<b>BEUTA DA VUOTO VETRO 1000 ML</b> Per la filtrazione sotto vuoto di liquidi e per l'analisi della contaminazione microbica e da particelle secondo la tecnica MF.	1 Unità	MAT10030
<b>POMPA PER VUOTO AD ACQUA</b> Pompa per vuoto a getto d'acqua in polipropilene	1 Unità	1395
<b>TAPPO CONICO 1 FORO</b> Tappo conico a 1 foro. Materiale, gomma rossa	1 Unità	3834
<b>TUBO PER VUOTO</b> Tubo per vuoto 12x17 mm.	1 Unità	3930
 <b>MINI POMPA DA VUOTO ELETTRICA</b> Portata della pompa 6 l/min. Pressione di lavoro: 2,4 bar. L'apparecchio è dotato di vacuometro di controllo.	1 Unità	181-0067

**IMBUTI FILTRANTI MONOUSO MICROFIL®**

Imbuto sterile in plastica da 100 e 250 ml per filtrazione sottovuoto, monouso in polipropilene, con membrana quadrettata S-Pack da 47 mm, in esteri misti di cellulosa (MCE), per sistema multiplo di filtrazione **RA-M**.

PRODOTTO	Cont.	REF.
 <b>IMBUTO MICROFIL S 100 ML</b> Membrana bianca, retinata, sterile grado di filtrazione 0,45 um, esteri misti di cellulosa (MCE), Conf. sing.	<b>24 Pz</b>	<b>MVHAWGS24</b>
<b>IMBUTO MICROFIL V 100 ML</b> Membrana bianca, retinata, sterile grado di filtrazione 0,45 um, esteri misti di cellulosa (MCE), Conf. 5 Pz.	<b>24 Pz</b>	<b>MVHAWG124</b>

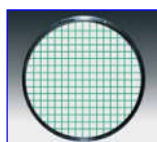
**ACCESSORI VARI**

PRODOTTO	Cont.	REF.
 <b>PINZETTA IN ACCIAIO INOX 18/8</b> Per il maneggiamento e lo spostamento di membrane da e verso gli imbuti filtranti e le piastre di petri. Punta piatte lung. 105.	<b>1 Unità</b>	<b>PIN0200</b>
<b>PINZE MONOUSO IN ABS, STERILI – Conf. singola</b>	<b>500 Pz</b>	<b>5701/SG/CS</b>
<b>PINZE MONOUSO IN ABS, STERILI – Conf. 100 pz</b>	<b>500 Pz</b>	<b>5701/SG</b>



**MEMBRANE FILTRANTI / ESTERI MISTI DI CELLULOSA**

La membrana è costituita di una **miscela di acetato e nitrato di cellulosa (esteri misti di cellulosa)**, biologicamente inerte: questa soluzione ha fatto dei filtri a membrana MF Millipore uno dei tipi di filtro maggiormente utilizzati in applicazioni analitiche e di ricerca. I filtri a membrana MF-Millipore sono disponibili in diverse dimensioni dei pori. Le membrane sono conformi alla norma ISO 7704: 1985, ISO 8199: 2005, ISO 11731-2: 2004, 7899-2: 2004, ISO 9308-2: 1990, ISO 6340: 1995 e ISO 6461-1: 1986.


**PRODOTTO**
**Cont.**
**REF.**

**MEMBRANE FILTRANTI FONDO BIANCO**

Per la determinazione di batteri in terreni di coltura contenenti coloranti

<b>MEMBRANE FILTRANTI 0,22 µm / Ø 47 mm RETINATE STERILI FONDO BIANCO</b> Membrane filtranti in <b>esteri misti di cellulosa</b> , grado di filtrazione <b>0,22 micron</b> , diametro <b>47 mm.</b> , <b>fondo bianco</b> , grigliate, con grigliatura tratteggiata. Adatto per l'analisi microbiologica dell'acqua ( <b>Legionella</b> ) e analisi ambientali. Conformi alla norma <b>ISO 11731-2: 2004</b> .	<b>150 Pz</b> <b>600 Pz</b>	<b>GSWG047S5</b> <b>GSWG047S6</b>
<b>MEMBRANE FILTRANTI 0,45 µm / Ø 47 mm RETINATE STERILI FONDO BIANCO</b> Membrane filtranti in <b>esteri misti di cellulosa</b> , grado di filtrazione <b>0,45 micron</b> , diametro <b>47 mm.</b> , <b>fondo bianco</b> , grigliate, con grigliatura tratteggiata, sterili <b>singolarmente</b> impacchettate. Per l'isolamento e la conta di <b>Coliformi fecali totali, dell'E.coli, degli streptococchi fecali, dei funghi e di altri batteri eterotrofi</b> .	<b>150 Pz</b> <b>600 Pz</b>	<b>HAWG047S5</b> <b>HAWG047S6</b>
<b>MEMBRANE FILTRANTI 0,45 µm / Ø 50 mm RETINATE STERILI FONDO BIANCO <sup>NEW</sup></b> Membrane filtranti in <b>esteri misti di cellulosa</b> , grado di filtrazione <b>0,45 micron</b> , diametro <b>50 mm.</b> , <b>fondo bianco</b> , grigliate, con grigliatura tratteggiata, sterili <b>singolarmente</b> impacchettate. Per l'isolamento e la conta di <b>Coliformi fecali totali, dell'E.coli, degli streptococchi fecali, dei funghi e di altri batteri eterotrofi</b> .	<b>150 Pz</b> <b>600 Pz</b>	<b>HAWG050S5</b> <b>HAWG050S6</b>


**MEMBRANE FILTRANTI FONDO VERDE**

Per un contrasto ottimale con colonie di batteri chiare o trasparenti

<b>MEMBRANE FILTRANTI 0,45 µm / Ø 50 mm RETINATE STERILI FONDO VERDE</b> Membrane filtranti in <b>esteri misti di cellulosa</b> , grado di filtrazione <b>0,45 micron</b> , diametro <b>50 mm.</b> , <b>fondo verde</b> , grigliate, con grigliatura tratteggiata, sterili <b>singolarmente</b> impacchettate.	<b>150 Pz</b> <b>600 Pz</b>	<b>HAGG050S5</b> <b>HAGG050S6</b>
---	--------------------------------	--------------------------------------


**MEMBRANE FILTRANTI FONDO NERO**

Per la ricerca di lieviti e muffe

<b>MEMBRANE FILTRANTI 0,45 µm / Ø 47 mm RETINATE STERILI FONDO NERO</b> Membrane filtranti in <b>esteri misti di cellulosa</b> , grado di filtrazione <b>0,45 micron</b> , diametro <b>47 mm.</b> , <b>fondo nero</b> , grigliate, con grigliatura tratteggiata, sterili <b>singolarmente</b> impacchettate. Massimo contrasto per il monitoraggio di <b>lieviti, muffe e particelle poco colorate</b> .	<b>150 Pz</b> <b>600 Pz</b>	<b>HABG047S5</b> <b>HABG047S6</b>
<b>MEMBRANE FILTRANTI 0,45 µm / Ø 50 mm RETINATE STERILI FONDO NERO <sup>NEW</sup></b> Membrane filtranti in <b>esteri misti di cellulosa</b> , grado di filtrazione <b>0,45 micron</b> , diametro <b>50 mm.</b> , <b>fondo nero</b> , grigliate, con grigliatura tratteggiata, sterili <b>singolarmente</b> impacchettate. Massimo contrasto per il monitoraggio di <b>lieviti, muffe e particelle poco colorate</b> .	<b>150 Pz</b> <b>600 Pz</b>	<b>HABG050S5</b> <b>HABG050S6</b>
<b>MEMBRANE FILTRANTI 0,80 µm / Ø 47 mm RETINATE STERILI FONDO NERO</b> Membrane filtranti in <b>polieteresulfone idrofilo</b> modificato, <b>fondo nero</b> , grado di filtrazione <b>0,80 micron</b> , diametro <b>47 mm.</b> , grigliate, con grigliatura tratteggiata, sterili <b>singolarmente</b> impacchettate. Massimo contrasto per il monitoraggio di <b>lieviti, muffe e particelle poco colorate</b> .	<b>600 Pz</b>	<b>AABG047S6</b>

**MEMBRANE FILTRANTI / NITRATO DI CELLULOSA**

Membrane filtranti in nitrato di cellulosa.

PRODOTTO	Cont.	REF.
<b>MEMBRANE FILTRANTI 0,20 µm / Ø 47 mm RETINATE FONDO BIANCO</b> Membrane filtranti in <b>nitrato di cellulosa</b> , grado di filtrazione <b>0,20 micron</b> , diametro <b>47 mm.</b> , <b>fondo bianco</b> , grigliate, con grigliatura tratteggiata. Adatto per l'analisi microbiologica dell'acqua ( <i>Legionella</i> ) e analisi ambientali.	<b>100 Pz</b>	<b>11407-47-ACN</b>

**MEMBRANE FILTRANTI / POLICARBONATO**

Membrane filtranti in policarbonato.

PRODOTTO	Cont.	REF.
<b>MEMBRANE FILTRANTI 0,22 µm / Ø 47 mm RETINATE FONDO BIANCO</b> Membrane filtranti in <b>policarbonato</b> , grado di filtrazione <b>0,22 micron</b> , diametro <b>47 mm.</b> , <b>fondo bianco</b> , grigliate, con grigliatura tratteggiata. Adatto per l'analisi microbiologica dell'acqua ( <i>Legionella</i> ) e analisi ambientali. <b>Sterilizzabili in autoclave a 125 °C.</b>	<b>100 Pz</b>	<b>GTTP04700</b>
<b>MEMBRANE FILTRANTI 0,22 µm / Ø 47 mm RETINATE FONDO NERO</b> Membrane filtranti in <b>policarbonato</b> , grado di filtrazione <b>0,22 micron</b> , diametro <b>47 mm.</b> , <b>fondo nero</b> , grigliate, con grigliatura tratteggiata. Adatto per l'analisi microbiologica dell'acqua ( <i>Legionella</i> ) e analisi ambientali. <b>Sterilizzabili in autoclave a 125 °C.</b>	<b>100 Pz</b>	<b>GTBP04700</b>


**SISTEMA EZ PAK® E MEMBRANE FILTRANTI NEW**

Membrane e dispensatore EZ-Pak, unendo i vantaggi delle membrane sterili, pronte all'uso e confezionate singolarmente ad una facilità di manipolazione unica, costituiscono un sistema rivoluzionario per la manipolazione dei filtri durante le prove analitiche col metodo della filtrazione su membrana.

PRODOTTO	Cont.	REF.
<b>EZ PAK® DISPENSER MEMBRANE</b>	<b>1 Unità</b>	<b>EZDISP001</b>

**MEMBRANE FILTRANTI FONDO BIANCO PER SISTEMA EZ PAK®**

Per la determinazione di batteri in terreni di coltura contenenti coloranti

<b>MEMBRANE FILTRANTI 0,45 µm / Ø 22 mm RETINATE STERILI FONDO BIANCO</b> Membrane filtranti in <b>esteri misti di cellulosa</b> , grado di filtrazione <b>0,22 micron</b> , diametro <b>47 mm.</b> , <b>fondo bianco</b> , grigliate, con grigliatura tratteggiata. Adatto per l'analisi microbiologica dell'acqua ( <i>Legionella</i> ) e analisi ambientali.	<b>4x150 Pz</b>	<b>EZGSWG474</b>
<b>MEMBRANE FILTRANTI 0,45 µm / Ø 47 mm RETINATE STERILI FONDO BIANCO</b> Membrane filtranti in <b>esteri misti di cellulosa</b> , grado di filtrazione <b>0,45 micron</b> , diametro <b>47 mm.</b> , <b>fondo bianco</b> , grigliate, con grigliatura tratteggiata, sterili <b>singolarmente</b> impaccettate. Per l'isolamento e la conta di <b>Coliformi fecali totali</b> , dell' <b>E.coli</b> , degli <b>streptococchi fecali</b> , dei <b>funghi</b> e di altri batteri eterotrofi.	<b>4x150 Pz</b>	<b>EZHAWG474</b>
<b>MEMBRANE FILTRANTI 0,45 µm / Ø 50 mm RETINATE STERILI FONDO BIANCO</b> Membrane filtranti in <b>esteri misti di cellulosa</b> , grado di filtrazione <b>0,45 micron</b> , diametro <b>50 mm.</b> , <b>fondo bianco</b> , grigliate, con grigliatura tratteggiata, sterili <b>singolarmente</b> impaccettate. Per l'isolamento e la conta di <b>Coliformi fecali totali</b> , dell' <b>E.coli</b> , degli <b>streptococchi fecali</b> , dei <b>funghi</b> e di altri batteri eterotrofi.	<b>4x150 Pz</b>	<b>EZHAWG504</b>

**MEMBRANE FILTRANTI FONDO VERDE PER SISTEMA EZ PAK®**

Per un contrasto ottimale con colonie di batteri chiare o trasparenti

<b>MEMBRANE FILTRANTI 0,45 µm / Ø 47 mm RETINATE STERILI FONDO VERDE</b> Membrane filtranti in <b>esteri misti di cellulosa</b> , grado di filtrazione <b>0,45 micron</b> , diametro <b>47 mm.</b> , <b>fondo verde</b> , grigliate, con grigliatura tratteggiata, sterili <b>singolarmente</b> impaccettate.	<b>4x150 Pz</b>	<b>EZHAGG474</b>
<b>MEMBRANE FILTRANTI 0,45 µm / Ø 50 mm RETINATE STERILI FONDO VERDE</b> Membrane filtranti in <b>esteri misti di cellulosa</b> , grado di filtrazione <b>0,45 micron</b> , diametro <b>50 mm.</b> , <b>fondo verde</b> , grigliate, con grigliatura tratteggiata, sterili <b>singolarmente</b> impaccettate.	<b>4x150 Pz</b>	<b>EZHAGG504</b>

- ✦ **COLORAZIONI BATTERICHE**
- ✦ **TEST DI IDENTIFICAZIONE**
- ✦ **SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE**
- ✦ **ANTISIERI**

# IDENTIFICAZIONE BATTERICA

CONTENUTO	PAG
<b>COLORAZIONI BATTERICHE</b>	
COLORAZIONE DI GRAM	80
<b>TEST DI IDENTIFICAZIONE</b>	
DISCHI DIAGNOSTICI	80
TEST RAPIDI PER LA FERMENTAZIONE DEGLI ZUCCHERI	81
REAGENTI DIAGNOSTICI	81
<b>SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE</b>	
SISTEMI MANUALI PER L'IDENTIFICAZIONE BATTERICA	82
ACCESSORI	83
STANDARD DI TORBIDITA' MC FARLAND	83
<b>ANTISIERI</b>	
ANTISIERI	83

## COLORAZIONI BATTERICHE

### COLORAZIONE DI GRAM

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>KIT COLORAZIONE GRAM</b> Kit completo per la colorazione di batteri gram positivi e gram negativi. Il kit contiene: 1. Cristal violetto soluzione - 2. Lugol soluzione - 3. Safranina soluzione - 4. Decolorante soluzione.		4x250 ml	67016/B
<b>CRISTAL VIOLETTO SOLUZIONE</b>		250 ml 6x250 ml 1000 ml	67001 67001/A 67001/B
<b>LUGOL SOLUZIONE</b>		250 ml 6x250 ml 1000 ml	67004 67004/A 67004/B
<b>DECOLORANTE SOLUZIONE</b>		250 ml 6x250 ml 1000 ml	67008 67008/A 67008/B
<b>SAFRANINA SOLUZIONE</b>		250 ml 6x250 ml 1000 ml	67011 67011/A 67011/B

## TEST DI IDENTIFICAZIONE

### DISCHI DIAGNOSTICI

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>AESULIN BILE TEST</b> Test rapido per l'idrolisi dell'esculina.		30 Tubi	88008
<b>ARGININE DECARBOXYLASE TEST</b> Test rapido per la decarbossilazione dell'arginina.		30 Tubi	88016
<b>C-390</b> Dischi contenenti l'antibiotico C-390 per l'identificazione di <i>Pseudomonas aeruginosa</i> .		50 Dischi	88040
<b>CAMP TEST – R</b> <b>CAMP TEST –S</b> Test rapido per l'identificazione delle Listerie.		30 Tubi 30 Tubi	88027 88021
<b>CATALISI/OXY TEST</b> Test rapido per la determinazione dell'enzima catalasi e perossidasi. <b>H<sub>2</sub>O<sub>2</sub> REAGENT</b>		30 Dischi 10 ml	88023 80057
<b>COAGULASE TEST</b> Plasma di coniglio citratato, liofilo per il test della coagulasi.		40 Test (5x4 ml)	88030
<b>E. COLI TEST</b> Test rapido per l'identificazione di E. Coli (MUG, ONPG, Indolo).		30 Tubi	88006
<b>H<sub>2</sub>S RAPID TEST</b> Test rapido per la produzione di H <sub>2</sub> S.		30 Tubi	88013
<b>INDOLO TEST</b> Test rapido per la produzione di indolo.		30 Test	88017
<b>LISTERIA – Mono TEST</b> Test rapido per l'identificazione della <i>Listeria monocytogenes</i> .		30 Test	88010
<b>LYSINE DECARBOXYLASE TEST</b> Test rapido per la decarbossilazione della lisina.		30 Test	88014
<b>NITRATE TEST</b> Test rapido per evidenziare la riduzione di nitrati e nitriti.		30 Tubi	88009

**DISCHI DIAGNOSTICI**

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>O.N.P.G. TEST</b> Test rapido per evidenziare germi lattosio-fermentanti.		<b>30 Tubi</b>	<b>88005</b>
<b>OSSIDASI TEST</b> Test rapido per la determinazione dell'enzima citocromo-ossidasi.		<b>30 Dischi 50 Sticks</b>	<b>88004 88029</b>
<b>UREA / INDOLO TEST</b> Test rapido per la determinazione dell'urea e dell'indolo.		<b>30 Test</b>	<b>88024</b>
<b>UREA RAPID TEST</b> Test rapido per la determinazione dell'urea.		<b>30 Tubi</b>	<b>88011</b>
<b>V.P. TEST EP</b> Test rapido per il test Voges-Proskauer.		<b>100/200 Test</b>	<b>80281</b>

**TEST RAPIDI PER FERMENTAZIONE DEGLI ZUCCHERI**

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>RHAMNOSE TEST</b> Test rapido per		<b>30 Tubi</b>	<b>88216</b>
<b>XYLOSE TEST</b> Test rapido per		<b>30 Tubi</b>	<b>88220</b>

**REAGENTI DIAGNOSTICI**

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>CATALASI REATTIVO</b> Test rapido per la determinazione dell'enzima catalasi e perossidasi.		<b>1x5 ml (50/100 Test)</b>	<b>LC050</b>
<b>INDOLO (KOVAC'S) REATTIVO</b> Test per la produzione dell'indolo.		<b>1x50 ml (500 Test)</b>	<b>67040</b>
<b>INDOLO REATTIVO PROVA RAPIDA</b> Test rapido per la produzione dell'indolo.		<b>1x50 ml (500 Test)</b>	<b>67042</b>
<b>OSSIDASI REATTIVO</b> Test rapido per la determinazione dell'enzima citocromo-ossidasi.		<b>1x2,5 ml (25/50 Test)</b>	<b>8430</b>
<b>VOGES – PROSCKAUER REATTIVO</b> Soluzione di NaOH e alfa-naftolo per il test Voges-Proskauer.		<b>12 ml (30/60 Test)</b>	<b>8440</b>

## SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE

### SISTEMI MANUALI PER L'IDENTIFICAZIONE BATTERICA

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>CAMPYLOBACTER</b>			
<b>CAMPYLOBACTER KIT LATEX</b> Test di agglutinazione al lattice per l'identificazione presuntiva di <i>Campylobacter</i> .		50 Test	DR0150M
<b>CAMPYLOBACTER LATEX<sup>NEW</sup></b> Test di agglutinazione al lattice per l'identificazione presuntiva di <i>Campylobacter</i>		50 Test	96143
<b>CLOSTRIDIUM</b>			
<b>CLOSTRIDIUM KIT LATEX<sup>NEW</sup></b> Test di agglutinazione al lattice per l'identificazione presuntiva di <i>Clostridium</i> .		50 Test	DR1107A
<b>CLOSTRIDIUM LATEX<sup>NEW</sup></b> Test di agglutinazione al lattice per l'identificazione presuntiva di <i>Clostridium</i> .		50 Test	96144
<b>E. COLI 0157</b>			
<b>E. COLI 157 KIT LATEX</b> Test di agglutinazione al lattice per l'identificazione presuntiva di <i>Escherichia coli 0157</i> .		50 Test	LC188
<b>ENTEROBATTERI</b>			
<b>ENTEROSYSTEM 18R</b> Sistema per l'identificazione degli enterobatteri.		20 Test	71618
<b>ENTEROSYSTEM 18R REAGENT</b> Reagenti biochimici supplementari per Enterosystem 18R.		100/200 Test	80252
<b>ENTERO PLURI TEST</b> Sistema ad inoculo simultaneo per l'identificazione delle Enterobacteriaceae.		10 Test 25 Test	78618 78619
<b>LEGIONELLA</b>			
<b>LEGIONELLA KIT LATEX</b> Test di agglutinazione al lattice per l'identificazione delle specie predominanti di Legionella.		6x50 Test	DR0800M
<b>LEGIONELLA LATEX KIT<sup>NEW</sup></b> Test di agglutinazione al lattice per l'identificazione delle specie predominanti di Legionella.		50 Test	96142
<b>LISTERIA</b>			
<b>LISTERIA SYSTEM 18R</b> Sistema per l'identificazione delle Listerie.		20 Test	71640
<b>LISTERIA SYSTEM 18R REAGENT</b> Reagenti biochimici supplementari per Listeriasystem 18R.		100/200 Test	71640
<b>LISTERIA KIT LATEX</b> Test di agglutinazione al lattice per l'identificazione delle Listerie.		100 Test	DR1126A
<b>LISTERIA LATEX<sup>NEW</sup></b> Test di agglutinazione al lattice per l'identificazione delle Listerie.		50 Test	96146
<b>SALMONELLA</b>			
<b>SALMONELLA KIT LATEX</b> Test di agglutinazione al lattice per l'identificazione presuntiva delle salmonelle.		30 Test	FT0203A
<b>SALMONELLA LATEX<sup>NEW</sup></b> Test di agglutinazione al lattice per l'identificazione presuntiva delle salmonelle.		50 Test	96151



**SISTEMI MANUALI PER L'IDENTIFICAZIONE BATTERICA**

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>STAFILOCOCCI</b>			
<b>COAGULASE TEST</b> Plasma di coniglio citratato, liofilo per il test della coagulasi.		<b>40 Test</b> (5x4 ml)	<b>88030</b>
<b>STAPHY KIT LATEX</b> Test al lattice per l'identificazione dello stafilococco aureus.		<b>2,5 ml</b> (50 Test)	<b>LC044</b>
<b>STAPHY SYSTEM 18R</b> Sistema per l'identificazione degli stafilococchi.		<b>20 Test</b>	<b>71630</b>
<b>IDENTIFICATION SYSTEM – REAGENT</b> Reagenti biochimici supplementari per tutti i sistemi di identificazione.		<b>100/200 Test</b>	<b>80260</b>

**STREPTOCOCCO**

<b>STREP KIT Slide Latex Test – Enzyme Extraction</b> Kit al lattice per l'identificazione di streptococchi del gruppo Lancerfield (A, B, C, D, F e G)		<b>6x50 Test</b>	<b>LC201</b>
<b>STREPTO SYSTEM 9R</b> Sistema per l'identificazione degli streptococchi.		<b>40 Test</b>	<b>72540</b>
<b>IDENTIFICATION SYSTEM – REAGENT</b> Reagenti biochimici supplementari per tutti i sistemi di identificazione.		<b>100/200 Test</b>	<b>80260</b>

**ACCESSORI**

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>CODE BOOK PER ENTERO PLURI TEST</b>		<b>1 Book</b>	<b>71709</b>
<b>IDENTIFICATION SYSTEM – REAGENT</b> Reagenti biochimici supplementari per tutti i sistemi di identificazione.		<b>100/200 Test</b>	<b>80260</b>
<b>OLIO DI VASELLINA STERILE</b> Reagente ausiliario per sistemi di identificazione.		<b>2x100 ml</b>	<b>80279</b>

**STANDARD TORBIDITA' MC FARLAND**

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>McFARLAND TURBIDITY STANDARD 0,5-1,0-2,0-3,0-4,0</b>		<b>5 Provette</b>	<b>8450</b>
<b>McFARLAND TURBIDITY STANDARD 0,5</b>		<b>5 Provette</b>	<b>8452</b>
<b>McFARLAND TURBIDITY STANDARD 1,0</b>		<b>5 Provette</b>	<b>8454</b>

**ANTISIERI**
**ANTISIERI**

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
<b>SALMONELLA ANTISIERO POLI ANTI-O (GRUPPO A-G)</b>		<b>1x2ml</b>	<b>R30858101</b>
<b>SALMONELLA ANTISIERO POLI ANTI-O (GRUPPO A-S)</b>		<b>1x2ml</b>	<b>R30858201</b>
<b>SALMONELLA ANTISIERO POLIVALENTE H</b>		<b>1x2ml</b>	<b>R30858501</b>
<b>SALMONELLA ANTISIERO POLIVALENTE ANTI-VI</b>		<b>1x2ml</b>	<b>R30957401</b>

# OLFOR-TZOC DI QUALITÀ

✦ **CEPPI BATTERICI**

✦ **INDICATORI BIOLOGICI**

# **CONTROLLO DI QUALITA'**

CONTENUTO	PAG
<b>CEPPI BATTERICI</b>	
CEPPI BATTERICI DERIVATI DA ATCC	<b>86</b>
CEPPI BATTERICI DERIVATI DA ATCC® MICROBIOLIGICS®	<b>88</b>
CONSERVAZIONE CEPPI BATTERICI	<b>88</b>
<b>INDICATORI PER STERILIZZAZIONE</b>	
INDICATORI BIOLOGICI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE	<b>89</b>
INDICATORI NASTRO ADESIVO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE	<b>89</b>

## CEPPI BATTERICI

### CEPPI BATTERICI DERIVATI DA ATCC

Pellet di microrganismi liofilizzati, vitali e stabilizzati di derivazione ATCC. Raccomandati per il Controllo di Qualità del materiale in uso quali: terreni di coltura, coloranti, kit diagnostici etc. e per la valutazione di procedimenti e di metodi utilizzati nei laboratori di microbiologia.

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<i>Aeromonas hydrophila</i>	10 Pellets	84230
<i>Aspergillus niger</i>	10 Pellets	84225
<i>Bacillus atrophaeus</i>	10 Pellets	84231
<i>Bacillus cereus</i>	10 Pellets	84211
<i>Bacillus pumilus</i>	10 Pellets	84232
<i>Bacillus subtilis</i>	10 Pellets	84202
<i>Candida albicans</i>	10 Pellets	84208
<i>Candida tropicalis</i>	10 Pellets	84233
<i>Candida krusei</i>	10 Pellets	84273
<i>Candida parapsilosis</i>	10 Pellets	84274
<i>Candida albicans</i>	10 Pellets	84272
<i>Citrobacter freundii</i>	10 Pellets	84212
<i>Clostridium sporogenes</i>	10 Pellets	84224
<i>Enterobacter cloacae</i>	10 Pellets	84213
<i>Enterococcus faecalis</i>	10 Pellets	84206
<i>Enterococcus faecalis</i>	10 Pellets	84243
<i>Escherichia coli</i>	10 Pellets	84204
<i>Escherichia coli</i>	10 Pellets	84244
<i>Escherichia coli</i> O 157	10 Pellets	84241
<i>Geobacillus stearothermophilus</i>	10 Pellets	84247
<i>Geobacillus stearothermophilus</i> subsp. <i>calidolactis</i>	10 Pellets	84248
<i>Jonesia denitrificans</i>	10 Pellets	84276
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	10 Pellets	84214
<i>Lactobacillus fermentum</i>	10 Pellets	84253
<i>Legionella pneumophila</i>	10 Pellets	84228
<i>Legionella pneumophila</i> subspp. <i>pasculei</i>	10 Pellets	84254
<i>Listeria grayi</i>	10 Pellets	84215
<i>Listeria innocua</i>	10 Pellets	84216
<i>Listeria monocytogenes</i>	10 Pellets	84219
<i>Listeria seeligeri</i>	10 Pellets	84275
<i>Listeria welshimeri</i>	10 Pellets	84277
<i>Listeria ivanovii</i>	10 Pellets	84278
<i>Proteus mirabilis</i>	10 Pellets	84201
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	10 Pellets	84203
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	10 Pellets	84223
<i>Rhodococcus equi</i>	10 Pellets	84262
<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	10 Pellets	84209
<i>Salmonella typhimurium</i>	10 Pellets	84205

**CEPPI BATTERICI DERIVATI DA ATCC**

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<i>Serratia marcescens</i>	10 Pellets	84217
<i>Serratia rubideae</i> ATCC 33670	10 Pellets	84218
<i>Shigella flexneri</i> ATCC 12022	10 Pellets	84266
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 33862 (Produces $\beta$ -hemolysin)	10 Pellets	84265
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 29213	10 Pellets	84207
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	10 Pellets	84267
<i>Staphylococcus aureus</i> subsp. <i>aureus</i> ATCC 43300 (Methicillin resistant strain)	10 Pellets	84221
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538	10 Pellets	84222
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 6538P	10 Pellets	84220
<i>Staphylococcus epidermidis</i> ATCC 12228	10 Pellets	84279
<i>Staphylococcus xylosus</i> ATCC 29971	10 Pellets	84226
<i>Streptococcus agalactiae</i> ATCC 13813	10 Pellets	84269
<i>Streptococcus pneumoniae</i> ATCC 49619	10 Pellets	84210
<i>Streptococcus pyogenes</i> ATCC 19615	10 Pellets	84270
<i>Yersinia enterocolitica</i> ATCC 9610	10 Pellets	84218



## CEPPI BATTERICI DERIVATI DA ATCC® MICROBIOLOGICS®

**Microrganismi LYFO DISK®, KWIK-STIK™ e KWIK-STIK™ Plus (Microbiologics®)** : Preparazioni liofilizzate di colture di riferimento, contenenti un singolo ceppo di microrganismi. Queste preparazioni a base di microrganismi provengono dall'American Type Culture Collection (ATCC®) o da altre autentiche collezioni di colture di riferimento come quelle.

I microrganismi **LYFO DISK®** sono confezionati in un flacone risigillabile contenente dieci (10) pastiglie liofilizzate di un singolo ceppo di microrganismi e un essiccatore che previene l'eccesso di umidità.

I microrganismi **LYFO DISK®** presentano una caratteristica aggiuntiva.

- Ogni preparazione liofilizzata di microrganismi non deriva da più di quattro (4) passaggi dalla coltura di riferimento.

Ogni unità **KWIK-STIK™** consta di una pastiglia liofilizzata di un singolo ceppo di microrganismi, un serbatoio per il fluido di idratazione e un tampone per inoculazione. Ogni dispositivo è sigillato all'interno di una bustina in alluminio contenente un essiccatore che previene l'eccesso di umidità.

I microrganismi **KWIK-STIK™** presentano una caratteristica aggiuntiva.

- Ogni preparazione liofilizzata di microrganismi non deriva da più di quattro (4) passaggi dalla coltura di riferimento.

I Microrganismi **KWIK-STIK™ Plus** presentano due caratteristiche aggiuntive.

- Ogni preparazione liofilizzata di microrganismi deriva da due (2) passaggi dalla coltura di riferimento.
- Viene fornito un Certificato di Analisi che offre la documentazione riguardante l'identità e la provenienza della preparazione dei microrganismi da una coltura di riferimento e il numero dei passaggi dopo i quali la preparazione dei microrganismi è stata estratta dalla coltura di riferimento.

La confezione dei Microrganismi **KWIK-STIK™ Plus** è identica a quella dei Microrganismi **KWIK-STIK™**.

(TM\*) The ATCC® Licensed Derivative Emblem, the ATCC® Licensed Derivative word mark, and the ATCC® catalog marks are trademarks of ATCC®. MicroBioLogics, Inc. is licensed to use these trademarks and to sell products derived from ATCC® cultures.

DESCRIZIONE	Cont.	REF
-------------	-------	-----

### LYPHO DISC®

<b>CEPPI BATTERICI (Max 4 passaggi) LYPHO DISC</b> Elenco a richiesta	<b>10 Lyfo Disc</b>	<b>/</b>
--	---------------------	----------

### KWIK-STIK™

<b>CEPPI BATTERICI (Max 4 passaggi) KWIK-STIK PLUS</b> Elenco a richiesta	<b>2 Kwik-Stik</b>	<b>/</b>
--	--------------------	----------

### KWIK-STIK PLUS™

<b>CEPPI BATTERICI (Max 2 passaggi) KWIK-STIK PLUS</b> Elenco a richiesta	<b>5 Kwik-Stik</b>	<b>/</b>
--	--------------------	----------



## CONSERVAZIONE CEPPI BATTERICI CRYOBANK™ MAST

SISTEMA PER LA CONSERVAZIONE DEI CEPPI MICROBICI

Provette criogeniche contenenti sferette di vetro trattate chimicamente e rivestite di una speciale sostanza criogenica conservante; adatte per il mantenimento dei ceppi microbici a lungo termine, a -20°/-70°C.

PRODOTTO	Cont.	REF	Euro
----------	-------	-----	------

<b>CRYOBANK™ (tappi misti)</b>	<b>64 Pz</b>	<b>MST-CRYO/M</b>	
<b>CRYOBANK™ (tappi rossi)</b>	<b>64 Pz</b>	<b>MST-CRYO/R</b>	
<b>CRYOBANK™ (tappi verdi)</b>	<b>64 Pz</b>	<b>MST-CRYO/G</b>	
<b>CRYOBANK™ (tappi gialli)</b>	<b>64 Pz</b>	<b>MST-CRYO/Y</b>	
<b>CRYOBANK™ (tappi blu)</b>	<b>64 Pz</b>	<b>MST-CRYO/B</b>	

<b>CRYOBLOCK</b> Piastra con 18 pozzetti per la manipolazione in sicurezza delle provette CRYOBANK	<b>1 Unità</b>	<b>MST-CRYO/Z</b>	
---	----------------	-------------------	--

## INDICATORI PER STERILIZZAZIONE



### INDICATORI BIOLOGICI PER STERILIZZAZIONE A VAPORE

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>AMPOLLE</b>		
<b>STERIL CONTROL E6 / Ampolle</b> Ampolle con brodo nutriente, indicatore di pH e spore di <i>G. stearothermophilus</i> ATCC 7953 (1-5x10 <sup>6</sup> CFU/Ampolle)	<b>10 Ampolle</b> <b>50 Ampolle</b>	<b>91010</b> <b>91050</b>
<b>STERIL CONTROL E5 / Ampolle</b> Ampolle con brodo nutriente, indicatore di pH e spore di <i>G. stearothermophilus</i> ATCC 7953 (1-5x10 <sup>5</sup> CFU/Ampolle)	<b>10 Ampolle</b> <b>50 Ampolle</b>	<b>91051</b> <b>91052</b>
<b>STERIL CONTROL E4 / Ampolle</b> Ampolle con brodo nutriente, indicatore di pH e spore di <i>G. stearothermophilus</i> ATCC 7953 (1-5x10 <sup>4</sup> CFU/Ampolle)	<b>10 Ampolle</b> <b>50 Ampolle</b>	<b>91053</b> <b>91054</b>
<b>STRIP</b>		
<b>STRIP CONTROL GST E6</b> (1-5x10 <sup>6</sup> CFU/strip) <b>STRIP CONTROL GST E5</b> (1-5x10 <sup>5</sup> CFU/strip) <b>STRIP CONTROL GST E4</b> (1-5x10 <sup>4</sup> CFU/strip) <b>STRIP CONTROL GST E3</b> (1-5x10 <sup>3</sup> CFU/strip) Strips con spore di <i>G. stearothermophilus</i> ATCC 7953 e Tubi con brodo nutriente con indicatore di pH.	<b>20 Strips</b> <b>20 Strips</b> <b>20 Strips</b> <b>20 Strips</b>	<b>91055</b> <b>91056</b> <b>91057</b> <b>91058</b>



### INDICATORI NASTRO ADESIVO PER STERILIZZAZIONE A VAPORE

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>INDICATORE DI STERILIZZAZIONE</b> Nastro adesivo dotato di indicatore di sterilizzazione. Viene utilizzato in autoclave per 20 min. a 120 °C o 10 min. a 125 °C o 5 min. a 135 °C. L' indicatore vira dal bianco al bruno.	<b>1 Pz</b>	<b>1052</b>
<b>INDICATORE DI STERILIZZAZIONE / Metodo Poupinel</b> Nastro adesivo dotato di indicatore di sterilizzazione metodo Poupinel (a secco).	<b>1 Pz</b>	<b>1051</b>



# ANALISI ALIMENTARE

✦ **ANALISI ALIMENTI VARI**

✦ **ANALISI DEL LATTE**

✦ **ANALISI DEL VINO**

✦ **TOSSINE BATTERICHE**

✦ **TOSSINE NATURALI**

# ANALISI ALIMENTARE

CONTENUTO	PAG
-----------	-----

## ANALISI ALIMENTI VARI

RICERCA ANTIBIOTICO RESIDUO	92
RICERCA DI RESIDUI DI PESTICIDI	92

## ANALISI DEL LATTE

ACIDITA'	92
ACQUA OSSIGENATA	92
CELLULE SOMATICHE	92
FOSFATASI	93
FRESCHEZZA	93
GRASSO	93
MICOTOSSINE	93
POTERE ANTIBATTERICO RESIDUO NEL LATTE	93
PROTEINE	94
TIPIZZAZIONE DI LATTE E FORMAGGI	94
ACCESSORI	94

## ANALISI DEL VINO

KIT (NPA) NUTRIENT PETRI AGAR (MF) PER L'ANALISI BATTERIOLOGICA DEL VINO	95
KIT (NPS) NUTRIENT PETRI SET (MF) PER L'ANALISI BATTERIOLOGICA DEL VINO	97

## TOSSINE BATTERICHE & TOSSINE NATURALI

TOSSINE BATTERICHE	98
MICOTOSSINE	98

## ANALISI ALIMENTI VARI

### RICERCA ANTIBIOTICO RESIDUO

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>RAPID ANTIBIOTIC TEST</b> Test biologico contenente spore di <i>Geobacillus stearothermophilus</i> ATCC 7953 per la ricerca ad ampio spettro di antibiotici residui nel <b>latte, carne ed altri alimenti</b> .	<b>50 Test</b>	<b>80351</b>
<b>MeRA TEST</b> Per la ricerca di residui antibiotici e sulfamidici <b>nella carne</b> con l'utilizzo di <i>Geobacillus stearothermophilus</i> subsp. <i>calidolactis</i> ATCC 10149.	<b>40 Test</b>	<b>80356</b>

### RICERCA DI RESIDUI DI PESTICIDI

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>MAIA® PESTICIDE MULTI TEST</b> Sistema colorimetrico per la ricerca di residui di pesticidi organofosforati, organoclorurati e carbammati in <b>acque, alimenti e bevande</b> .	<b>40 Test</b>	<b>79700</b>

## ANALISI DEL LATTE

### ACIDITA'

Reagenti pronti all'uso per la determinazione dell'acidità titolabile del latte.

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>FENOFTALEINA SOLUZIONE 0,1 %</b> Fenoftaleina soluzione idroalcolica al 0,1 %	<b>100 ml</b> <b>500 ml</b> <b>1000 ml</b>	<b>7116</b> <b>7114</b> <b>7113</b>
<b>SODIO IDRATO (N/4)</b> Sodio idrato soluzione titolata <b>0,25 N</b> (10 g NaOH).	<b>1000 ml</b> <b>5000 ml</b>	<b>7153</b> <b>7154</b>
<b>SODIO IDRATO SODIO IDRATO 0,1 mol/l (N/10)</b> Sodio idrato soluzione titolata <b>0,1 N</b> (4 g NaOH).	<b>1000 ml</b> <b>5000 ml</b>	<b>7142</b> <b>7144</b>

### ACQUA OSSIGENATA

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>QUANTOFIX</b> Scala 0,5-2-5-10-25.	<b>100 Test</b>	<b>Y5.91319</b>

### CELLULE SOMATICHE

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>BLU DI METILENE di NEWMAN</b> Colorazione e conteggio diretto delle cellule somatiche del latte.	<b>250 ml</b>	<b>67027</b>
<b>LEUCOCYTEST REATTIVO</b> Colorazione e conteggio diretto delle cellule somatiche del latte.	<b>1000 ml</b>	<b>06.0720</b>

## FOSFATASI

DESCRIZIONE	Cont.	REF
LACTOGNOST HEYL	100 Test	06.0720

## FRESCHEZZA

Soluzioni in alcool per il controllo della freschezza del latte.

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>ALIZAROLO SOLUZIONE</b> Soluzione in alcool denaturato, per il controllo della freschezza del latte.	1000 ml 100 PVP x 2 ml	9080 9094
<b>ALIZAROLO (GERBER) SOLUZIONE</b> Soluzione in alcool puro per il controllo della freschezza del latte.	1000 ml	9084
<b>SOLUZIONE ALCOLICA</b> Soluzione alcolica per il controllo della freschezza del latte.	1000 ml	9086
<b>ALCOOL ETILICO ASSOLUTO - RPE</b> Alcool etilico assoluto 99,8%	1000 ml	414607
<b>ALCOOL ETILICO ASSOLUTO 96 % - RPE</b> Alcool etilico assoluto 96%	1000 ml	414637

## GRASSO

Regenti per l'analisi grasso nel latte sec. Gerber

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>ACIDO SOLFORICO 1,820/25</b> Peso specifico <b>1,820/25</b> (analisi latte e crema a volume)	950 ml	06.0480
<b>ACIDO AMILICO 0,815</b> Peso specifico <b>0,815</b> (esente da furfurolo, colorato in rosso.)	950 ml	06.0491
<b>ACIDO SOLFORICO (66° Bè) 1,520</b> Peso specifico <b>1,520</b> (analisi formaggio)	950 ml	06.0483
<b>ACIDO SOLFORICO 1,600</b> Peso specifico <b>1,600</b> (analisi burro e crema a peso)	950 ml	06.0486

## MICOTOSSINE

Aflatossina M1 nel latte e derivati

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>AFLATOXIN M1 (0, 6.25, 12.5, 25, 50, 100, 200 ppt std)</b> Limite di quantificazione: <6 ppt nel latte e <10 ppt nei formaggi preparazione del campione latte mediante semplice centrifugazione. (Richiede lettore con filtro a 450 nm).	96 Test	ED31

## POTERE ANTIBATTERICO RESIDUO NEL LATTE

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>MIRA TEST</b> Per la ricerca di residui antibiotici e sulfamidici <b>nel latte</b> con l'utilizzo di Geobacillus stearothermophilus subsp. calidolactis ATCC 10149.	40 Test	80355
<b>RAPID ANTIBIOTIC TEST</b> Test biologico contenente spore di Geobacillus stearothermophilus ATCC 7953 per la ricerca ad ampio spettro di antibiotici residui <b>nel latte</b> , carne ed altri alimenti.	50 Test	80351

## PROTEINE

Reagenti per la determinazione delle proteine nel latte (**metodo sec. Kjeldhal**)

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>ACIDO SOLFORICO 96%</b>	<b>1000 ml</b>	<b>410301</b>
<b>SODIO IDRATO 32%</b>	<b>1000 ml</b>	<b>7152</b>
<b>SODIO IDRATO 0,1 mol/l (N/10)</b>	<b>1000 ml</b>	<b>7142</b>
Sodio idrato soluzione titolata 0,1 N (4 g NaOH)	<b>5000 ml</b>	<b>7144</b>

## TIPIZZAZIONE DI LATTE E FORMAGGI

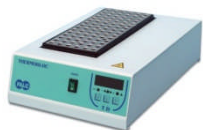
Test rapidi (CARD) qualitativi per la rivelazione dell'adulterazione del latte.


DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>IC BOVINO – CARD/ Qualitativo</b> Test qualitativo per la rivelazione dell'adulterazione del latte di pecora o di capra con latte bovino.	<b>25 Test</b>	<b>X8.TL201</b>
<b>IC CAPRINO – CARD / Qualitativo</b> Test qualitativo per la rivelazione dell'adulterazione del latte di pecora o di bovino con latte di capra.	<b>25 Test</b>	<b>X8.TL202</b>

## ACCESSORI

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>VETRERIA</b>		
<b>ACIDIMETRO SOXHELT 0-10 ML - Div 1/20</b>	<b>1 Unità</b>	<b>INT205511</b>
<b>ACIDIMETRO SOXHELT 0-25 ML - Div 1/10</b>	<b>1 Unità</b>	<b>INT205512</b>
<b>ACIDIMETRO SOXHELT 0-50 ML -Div 1/10</b>	<b>1 Unità</b>	<b>INT205513</b>
Con basamento, con buretta graduata, linea Schelbach, pinzetta di Mohr, gommino e contagocce.		

## STRUMENTAZIONE

THERMOBLOCK	1 Unità	621.0422.01
 <p>Thermoblock riscaldanti a secco con blocchi portaprovette intercambiabili. Custodie esterne in acciaio verniciata a forno con polvere epossidica antiacida, le vaschette di contenimento blocchi sono realizzate in alluminio in modo da assicurare una distribuzione uniforme del calore. Il controllo e l'impostazione dei valori per i modelli analogici avviene mediante un termoregolatore elettronico ad azione PB con sonda termocoppia "J" a lettura in °C, mentre i modelli digitali vengono dotati di un termoregolatore digitale con microprocessore ad azione PID e sonda PT 100 per una migliore precisione della temperatura. Il riscaldamento dei thermoblock è costituito da resistenze poste al di sotto delle vaschette, tutti gli strumenti vengono dotati da un interruttore ON / OFF con luce verde</p>		

THERMOBLOCK	1 Unità	621.0423.25
 <p>Realizzati in un unico pezzo, l'alluminio con le sue caratteristiche di eccellente conduttore di calore consentono una perfetta distribuzione della temperatura su tutto il blocco. I blocchi sono dotati di un foro per l'inserimento del termometro o di una sonda per il controllo della temperatura, un'altro foro filettato per poter inserire l'astina con relativo pomello per la rimozione blocco dallo strumento. ( ogni singolo blocco è dotato dell'astina ) I blocchi nei Thermoblock sono intercambiabili. Dimensione dei blocchi L X P X H 75 x 100 x 50 mm.</p>		

## ANALISI DEL VINO



### KIT (NPA) NUTRIENT PETRI AGAR (MF) PER L'ANALISI BATTERIOLOGICA DEL VINO

**Kit completi contenenti terreni di coltura pronti in piastra petri ø 60 mm + le membrane di filtrazione con reticolo, in confezione singola sterile.**

I Kit completi **Nutrient Petri Agar (NPA) MF**, vengono impiegati in combinazione con il metodo delle **membrane filtranti (MF)**, per l'analisi microbiologica **del vino**.

Per la loro praticità di utilizzo semplificano il procedimento per l'analisi microbiologica, garantendo una **migliore crescita delle colonie**.

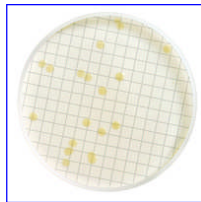
Il Kit **Nutrient Petri Agar (NPA) MF**, consiste in **una membrana filtrante** specifica per il tipo di crescita di colonie, sterile, confezionata in busta singola, ed **una piastra petri** dal diam. di 60 mm. con **terreno di coltura pronto all'uso**, prodotto secondo le GMP e in accordo con le formulazioni **UNI EN ISO, APAT CNR IRSA**.

**I Vantaggi per l'utilizzatore sono:**

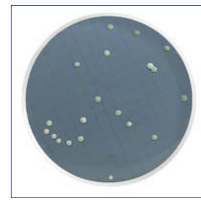
- 1) **La convenienza** (Confezioni da 50 determinazioni);
- 2) **Nessuna perdita di tempo** per la preparazione dei terreni di coltura (sterilizzazione, diidratazione, ecc.);
- 3) **Semplicità d'uso**: Tutti i materiali all'interno del kit **sono pronti all'uso**;
- 4) **Qualità**: in produzione, ciascun lotto di terreno di coltura pronti in piastre petri viene testato con i ceppi di riferimento ATCC. **Certificato di Qualità**: incluso nella confezione.
- 5) **Conservazione**: I Kit (NPA) **Nutrient Petri Agar (MF)** hanno una durata di **6 mesi**, se conservati in un luogo buio e asciutto ad una temperatura di **2-8 °C** e **4-25 °C**.

PRODOTTO	Cont.	REF.
<b>BRETTANOMYCES</b>		
<b>KIT (NPA) BRETTANOMYCES (MF)</b> <sup>NEW</sup> <i>Kit per la conta di Brettanomyces dekkera nei vini.</i>	<b>50 Test</b>	<b>40052</b>
<p>Il Kit contiene: n. 50 piastre petri (ø 60 mm.) con terreno pronto <b>Brettanomyces Selective Agar</b> / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.), <b>fondo bianco</b> con reticolo nero, porosità 0,45 µm - ø 47 mm.</p> <p>Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C - <b>Certificato di Qualità</b>: incluso nella confezione.</p> <p>Campo di applicazione: Bevande.</p> <p>Norme di riferimento: /</p> <p>Periodo e temperatura d'incubazione: 2/5 giorni a 30 °C</p> <p>Aspetto tipico delle colonie: Colonie di colore variabile tra il dorato e il giallo arancione.</p>		

### CONTA TOTALE

<b>KIT (NPA) CONTA TOTALE 1 (MF)</b> <i>Kit per la conta delle cariche microbiche.</i>	<b>50 Test</b>	<b>40000</b>
<div>  </div> <p>Il Kit contiene: n. 50 piastre petri (ø 60 mm.) con terreno pronto <b>Plate Count Agar (Standard Methods)</b> / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.), <b>fondo bianco</b> con reticolo nero, porosità 0,45 µm - ø 47 mm.</p> <p>Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C - <b>Certificato di Qualità</b>: incluso nella confezione.</p> <p>Campo di applicazione: Acque, alimenti, bevande.</p> <p>Norme di riferimento: <b>APHA (1998) - Standard Methods for the Examination of water and wastewater.</b></p> <p>Periodo e temperatura d'incubazione: 48 ore a 22.0 ± 1 °C, 48 ore a 37 ± 0.5 °C.</p> <p>Aspetto tipico delle colonie: Le colonie sono da trasparenti a bianche cremose, alcune possono essere pigmentate.</p>		

### FLORA BATTERICA

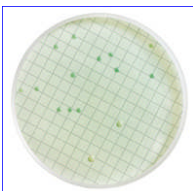
<b>KIT (NPA) FLORA BATTERICA 1 (MF)</b> <sup>NEW</sup> <i>Kit per la ricerca e la conta della flora batterica.</i>	<b>50 Test</b>	<b>40038*</b>
<div>  </div> <p>Il Kit contiene: n. 50 piastre (ø 60 mm.) con terreno <b>WL Nutrient Agar</b> / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) - <b>Fondo nero</b> con reticolo nero - Porosità 0,45 µm - ø 47 mm.</p> <p>Stabilità: 6 Mesi a 4/25 °C - <b>Certificato di Qualità</b>: incluso nella confezione.</p> <p>Campo di applicazione: Processi di fermentazione bevande (birra, vino).</p> <p>Norme di riferimento: /</p> <p>Periodo e temperatura d'incubazione: Incubare a 30 ± 2 (lieviti e muffe), 35 ± 2 °C (batteri) per 48-72 ore.</p> <p>Aspetto tipico delle colonie: Le colonie si presentano piccole di colore verde, con il centro verde scuro. I lieviti in colonie più grandi, bianche e di consistenza cremosa.</p>		

## KIT (NPA) NUTRIENT PETRI AGAR (MF) PER L'ANALISI BATTERIOLOGICA DEL VINO

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
----------	-------	-------	-----

### FLORA BATTERICA

<b>KIT (NPA) FLORA BATTERICA 2 (MF)</b> <sup>NEW</sup> <i>Kit per la ricerca e la conta della flora batterica, con inibizione di lieviti e muffe.</i>	<b>50 Test</b>	<b>40040*</b>
--	----------------	---------------



Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno **WL Differential Agar + Cicloeximide** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – **Fondo bianco** con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.  
**Stabilità:** 6 Mesi a 4/25 °C - **Certificato di Qualità:** incluso nella confezione.  
**Campo di applicazione:** Processi di fermentazione bevande (birra, vino).  
**Norme di riferimento:** /  
**Periodo e temperatura d'incubazione:** Incubare a 30 o 35 °C per 48- 72 ore.  
**Aspetto tipico delle colonie:** Le colonie si presentano verde-blu.

### LATTOBACILLI

<b>KIT (NPA) LATTOBACILLI (MF)</b> <sup>NEW</sup> <i>Kit per la ricerca e la conta di lattobacilli.</i>	<b>50 Test</b>	<b>40042*</b>
--	----------------	---------------

Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno **MRS Agar** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – **Fondo bianco** con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.  
**Stabilità:** 6 Mesi a 4/25 °C - **Certificato di Qualità:** incluso nella confezione.  
**Campo di applicazione:** Bevande (Vino, latte).  
**Norme di riferimento:** **ISO/DIS 15214.**  
**Periodo e temperatura d'incubazione:** lattobacilli termofili: 42 °C per 48 ore; lattobacilli mesofili: 35 °C per 48 ore; lattobacilli psicrofili: 25°C per 5 giorni; mesofili e psicrofili: 30 °C per 48 ore + 22 °C per 24 ore.  
**Aspetto tipico delle colonie:** *Lactobacillus*: Le colonie di sono piccole, bianche e di consistenza cremosa. *Saccharomyces*: le colonie sono grandi, bianche e di consistenza cremosa.

### LIEVITI E MUFFE

<b>KIT (NPA) LIEVITI E MUFFE (MF)</b> <i>Kit per la ricerca e la conta di Lieviti e Muffe.</i>	<b>50 Test</b>	<b>40015</b>
---	----------------	--------------



Il Kit contiene: n. 50 piastre (Ø 60 mm.) con terreno **Sabouraud Dextrose Agar** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – **Fondo nero** con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm.  
**Stabilità:** 6 Mesi a 4/25 °C - **Certificato di Qualità:** incluso nella confezione.  
**Campo di applicazione:** Acque, bevande (vino).  
**Norme di riferimento:** /  
**Periodo e temperatura d'incubazione:** 48/72 ore a 28/32 ± 0.5 °C.  
**Aspetto tipico delle colonie:** I lieviti formano grandi colonie verdi opache. Le colonie di muffa appaiono verdi e filamentose.



## KIT (NPS) NUTRIENT PADS SET (MF) PER L'ANALISI BATTERIOLOGICA DEL VINO

**Membrane con reticolo, in confezione sterile singola + cartone nutriente secco in piastra di Petri sterile.**

Kit completi contenenti 50 piastre di Petri (in 5 pacchi sterili da 10 piastre), ognuna delle quali contiene un cartoncino già imbibito di terreno di coltura specifico disidratato e sterile e n. 50 membrane con reticolo, confezionate in busta singola sterile, per l'analisi microbiologica del vino con il metodo della membrane filtranti (MF).

**Conservazione:** 4-25 °C – **Stabilità:** 24 Mesi.

PRODOTTO	Norma	Cont.	REF
----------	-------	-------	-----

### BRETTANOMYCES DEKKERA

<b>KIT NPS BRETTANOMYCES</b> <i>Kit per la conta di Brettanomyces dekkera nei vini, tendenzialmente rossi.</i>		<b>50 Test</b>	<b>NPS-BRTT</b>
---	--	----------------	-----------------

Il Kit contiene: n. 50 piastre di petri con cartoncino nutriente secco imbibito di terreno **Brettanomyces dekkera** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – fondo **bianco** con reticolo nero - Porosità 0,60 µm – Ø 47 mm. **Stabilità:** 12 Mesi a 4/25 °C - **Certificato di Qualità:** incluso nella confezione.

**Periodo e temperatura d'incubazione:** 2/5 giorni a 30 °C - **Aspetto tipico delle colonie:** Colonie di colore variabile tra il dorato e il giallo arancione.

### LATTOBACILLI

<b>KIT NPS LACTOBACILLI 1</b> <i>Kit per la conta di Lactobacilli.</i>		<b>50 Test</b>	<b>NPS-LCBC</b>
---	--	----------------	-----------------

Il Kit contiene: n. 50 piastre di petri con cartoncino nutriente secco imbibito di terreno **MRS** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – fondo **verde** con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm. **Stabilità:** 12 Mesi a 4/25 °C - **Certificato di Qualità:** incluso nella confezione.

**Periodo e temperatura d'incubazione:** 2/5 giorni a 30 °C (anaerobica) - **Aspetto tipico delle colonie:** Colonie piccole spumose bianche.

<b>KIT NPS LACTOBACILLI 2</b> <i>Kit per la selezione di batteri nel vino, come Leuconostoc, Lactobacilli e Pediococchi.</i>		<b>50 Test</b>	<b>NPS-WINE</b>
---	--	----------------	-----------------

Il Kit contiene: n. 50 piastre di petri con cartoncino nutriente secco imbibito di terreno **Succo di Pomodoro** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – fondo **verde** con reticolo nero - Porosità 0,45 µm – Ø 47 mm. **Stabilità:** 12 Mesi a 4/25 °C - **Certificato di Qualità:** incluso nella confezione.

**Periodo e temperatura d'incubazione:** 2/5 giorni a 30 °C (anaerobica) - **Aspetto tipico delle colonie:** Colonie chiare o trasparenti.

### LIEVITI E MUFFE

<b>KIT NPS LIEVITI E MUFFE</b> <i>Kit per la conta di Lieviti e Muffe con il metodo delle membrane filtranti (MF)</i>		<b>50 Test</b>	<b>NPS-SBDR</b>
--	--	----------------	-----------------

Il Kit contiene: n. 50 piastre di petri con cartoncino nutriente secco imbibito di terreno **Sabouraud** / n. 50 membrane di filtrazione sterili (conf. sing.) – fondo **nero** con reticolo bianco - Porosità 0,8 µm – Ø 47 mm. **Stabilità:** 12 Mesi a 4/25 °C - **Certificato di Qualità:** incluso nella confezione.

**Periodo e temperatura d'incubazione:** 2/5 giorni a 25 °C - **Aspetto tipico delle colonie:** Lieviti: colonie lisce bianche o colorate. Muffe: colonie vellutate o spumose

## TOSSINE BATTERICHE & TOSSINE NATURALI

### TOSSINE BATTERICHE

Test in ELISA per controlli rapidi di tossine e batteri negli alimenti

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>BACILLUS CEREUS</b>		
ENTEROTOSSINE BACILLUS DIARRHOEAL	48 Test	BET08
<b>CLOSTRIDIUM</b>		
ALPHA TOXIN CL. PERFRINGENS	96 Test	VB040
BETA TOXIN CL. PERFRINGENS	96 Test	VB041
EPSILON TOXIN CL. PERFRINGENS	96 Test	VB042
CLOSTRIDIUM PERFRINGENS	96 Test	VB043
<b>STAFILOCOCCO</b>		
ENTEROTOSSINE STAFILOCOCCO V.I.A	48 Test	BET06
<b>VEROTOSSINA VT1, VT2 E E. COLI</b>		
VEROTOXIN Kit per la ricerca di verotossine VT1 e VT2 DI e. Coli negli alimenti.	96 Test	F001

### MICOTOSSINE

Test in ELISA per analisi quantitativa di Micotossine negli alimenti

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>AFLATOXIN</b>		
<b>AFLATOXIN Quantitative</b> Kit per il saggio immunoenzimatico per la determinazione <b>quantitativa</b> di AFLATOXIN (B <sub>1</sub> , B <sub>2</sub> , G <sub>1</sub> , G <sub>2</sub> ) <b>negli alimenti, quali grano, farina di grano, glutine farina di grano, grano turco, frumento, riso, mais, semi di cotone intero, farina di semi di cotone, arachidi crudo, burro di arachidi e mangimi in genere.</b> Il kit contiene: n. 4 controlli (0, 5, 15 e 50 ppb). Risultato in <b>5 min.</b> Range di misura: 5 ppb - 50 ppb. Limite 1 ppb.	48 Test	VX8030
<b>AFLATOXIN HG (High Sensitivity) Quantitative</b> Kit per il saggio immunoenzimatico per la determinazione <b>quantitativa</b> di AFLATOXIN (High Sensitivity) (B <sub>1</sub> , B <sub>2</sub> , G <sub>1</sub> , G <sub>2</sub> ) <b>nei ceriali, quali grano, farina di grano, glutine farina di grano, grano turco, frumento, riso, mais, semi di cotone intero, farina di semi di cotone, arachidi crudo, burro di arachidi e mangimi in genere.</b> Il kit contiene: n. 4 controlli (0, 1, 2, 4 e 8 ppb). Risultato in <b>20 min.</b> Range di misura: 1 ppb - 8 ppb. Valore limite 0.5 ppb.	48 Test	VX8031
<b>AFLATOXIN M1 (0, 6.25, 12.5, 25, 50, 100, 200 ppt std)</b> Limite di quantificazione: <6 ppt <b>nel latte</b> e <10 ppt <b>nei formaggi</b> preparazione del campione latte mediante semplice centrifugazione. (Richiede lettore con filtro a 450 nm).	96 Test	ED31
<b>TOXIN T-2</b>		
<b>TOXIN T-2 Quantitative</b> Kit per il saggio immunoenzimatico per la determinazione <b>quantitativa</b> della TOXIN T-2 (Toxin T-2 100%, Ht-2 Toxin 17%) <b>nel grano.</b> Il kit contiene: n. 5 controlli (0, 25, 50, 100 e 250 ppb). Risultato in <b>10 min.</b> Range di misura: 25 ppb - 250 ppb. Limite 7.5 ppb.	48 Test	VX8210

- ✦ **MATERIALE DI CONSUMO**
- ✦ **REATTIVI VARI**
- ✦ **STRUMENTAZIONE**
- ✦ **STRUMENTAZIONE  
PER ANALISI CHIMICHE  
DELLE ACQUE**

# ACCESSORI PER BATTERIOLOGIA

CONTENUTO	PAG
-----------	-----

## MATERIALE DI CONSUMO

MONOUSO	101
SACCHETTI STERILI PER CAMPIONAMENTO	103
SACCHETTI STERILI PER OMOGEINIZZATORI	105
TAMPONI DI TRASPORTO	106
VARIE	107

## VETRERIA

VARIE	108
-------	-----

## REATTIVI VARI

REATTIVI AUSILIARI	109
SOLUZIONI TAMPONI PER pH	109

## MATERIALE DI CONSUMO

### MONOUSO

PRODOTTO	Cont.	REF
----------	-------	-----



#### ANSE STERILI

ANSE MONOUSO STERILI 1 ul	20 Pz	6001/SG
ANSE MONOUSO STERILI 10 ul	20 Pz	6010/SG
ANSE MONOUSO STERILI 1 ul / Conf. singola	2100 Pz	BSV1201
ANSE MONOUSO STERILI 10 ul / Conf. singola	2100 Pz	BSV1211



#### CONTENITORI MONOUSO STERILI

CONTENITORE STERILE 150 ML / Tappo a vite - conf. singola	250 Flaconi	82120/SG
CONTENITORE STERILE 200 ML / Tappo a vite - conf. singola + Etichetta	250 Flaconi	231200

#### ETICHETTE

ETICHETTE AUTODESIVE PER TUBI 35X22	1000 Pz	1017
-------------------------------------	---------	------

#### GUANTI LATTICE

GUANTI IN LATTICE TALCATI – MIS. XSMALL	100 Pz	44521
GUANTI IN LATTICE TALCATI – MIS. SMALL	100 Pz	44522
GUANTI IN LATTICE TALCATI – MIS. MEDIA	100 Pz	44523
GUANTI IN LATTICE TALCATI – MIS. LARGE	100 Pz	44524

#### PARAFILM


PARAFILM cm. 10x4 mt.	1 Pz	10901
-----------------------	------	-------



#### PIASTRE PETRI

PIASTRE PETRI STERILI ø 60 mm	500 Pz	161/SG
PIASTRE PETRI STERILI ø 60 mm	680 Pz	18130
PIASTRE PETRI ASETTICHE ø 90 mm	500 Pz	91APT
PIASTRE PETRI VENTILATE STERILI ø 90 mm	500 Pz	80122518
PIASTRE DA CONTATTO VENTILATE STERILI ø 60 mm	600 Pz	155/SG
PIASTRE DA CONTATTO VENTILATE STERILI ø 65 mm	690 Pz	17510
PIASTRE DA CONTATTO VENTILATE STERILI ø 90 mm	500 Pz	195APT

## MONOUSO

PRODOTTO	Cont.	REF
		
<b>PINZE MONOUSO IN ABS, STERILI – Conf. singola</b>	<b>500 Pz</b>	<b>5701/SG/CS</b>
<b>PINZE MONOUSO IN ABS, STERILI – Conf. 100 pz</b>	<b>500 Pz</b>	<b>5701/SG</b>

### PINZE STERILI

<b>PIPETTE GRADUATE STERILI 1 ML – 1/10 - Conf. singola</b>	<b>500 Pz</b>	<b>27080</b>
<b>PIPETTE GRADUATE STERILI 2 ML – 1/10 - Conf. singola</b>	<b>500 Pz</b>	<b>27078</b>
<b>PIPETTE GRADUATE STERILI 5 ML – 1/10 - Conf. singola</b>	<b>250 Pz</b>	<b>27076</b>
<b>PIPETTE GRADUATE STERILI 10 ML – 1/10 - Conf. singola</b>	<b>200 Pz</b>	<b>27074</b>
<b>PIPETTE GRADUATE STERILI 25 ML – 1/10 - Conf. singola</b>	<b>100 Pz</b>	<b>27072</b>

### PIPETTE PASTEUR STERILI

<b>PIPETTE PASTEUR MONOUSO 1 ML STERILI - Conf. singola</b>	<b>1000 Pz</b>	<b>27040</b>
<b>PIPETTE PASTEUR MONOUSO 3ML STERILI - Conf. singola</b>	<b>1000 Pz</b>	<b>27045</b>




### PROVETTE STERILI / Tappo a pressione

<b>PROVETTE 16x100, STERILI + ETICHETTA DA 10 ML</b> In polistirolo, non graduate, con <b>tappo a pressione</b> che ne garantisce la perfetta tenuta, Ø 16x100 mm.	<b>800 Pz</b>	<b>18011</b>
<b>PROVETTE 16x150, STERILI + ETICHETTA DA 20 ML</b> In polistirolo, non graduate, con <b>tappo a pressione</b> che ne garantisce la perfetta tenuta. Ø 16x150 mm.	<b>200 Pz</b>	<b>5140/TE/SG</b>

### PROVETTE STERILI / Tappo a vite

<b>PROVETTE 10 ML TAPPO A VITE - STERILI</b> In polistirolo, non graduate, con <b>tappo a vite</b> che ne garantisce la perfetta tenuta. Ø 16x100 mm – Conf. 200 Pz.	<b>1000 Pz</b>	<b>10361/SG</b>
<b>PROVETTE 20 ML TAPPO A VITE - STERILI</b> In polistirolo, non graduate, con <b>tappo a vite</b> che ne garantisce la perfetta tenuta. Ø 16x150 mm – Conf. 100 Pz	<b>500 Pz</b>	<b>10363/SG</b>

### PROVETTE TIPO/FALCON STERILI

 <b>PROVETTE CONCHE DA 15 ML - STERILI</b> In polipropilene, graduate, con tappo a vite che ne garantisce la perfetta tenuta. Ø 17 x 120 mm - RCF= 5.000 g. Autoclavabili.	<b>500 Pz</b>	<b>10352/SG</b>
<b>PROVETTE CONCHE DA 50 ML - STERILI</b> In polipropilene, graduate, con tappo a vite che ne garantisce la perfetta tenuta. Ø 30 x 115 mm - RCF= 5.000 g. Autoclavabili.	<b>500 Pz</b>	<b>10351/SG</b>
 <b>PROVETTE CONCHE DA 50 ML – STERILI</b> <b>BASE DI APPOGGIO</b> In polipropilene, graduate, con tappo a vite che ne garantisce la perfetta tenuta. Ø 30 x 115 mm - RCF= 5.000 g. Autoclavabili.	<b>500 Pz</b>	<b>20351/SG</b>

## MONOUSO

PRODOTTO	Cont.	REF
<b>PUNTALE IN RACK AUTOCLAVABILI</b>		
<b>PUNTALE NEUTRO 0,5-10 ul /Tipo Eppendorf – Rack autoclavabile</b>	<b>10x96 Pz</b>	<b>9624</b>
<b>PUNTALE GIALLO 2-200 ul / Tipo Gilson – Rack autoclavabile</b>	<b>10x96 Pz</b>	<b>9585</b>
<b>PUNTALE GIALLO 0-200 ul / Tipo Universale – Rack autoclavabile</b>	<b>10x96 Pz</b>	<b>9605</b>
<b>PUNTALE AZZURRO 100-1000 ul / Tipo Universale – Rack autoclavabile</b>	<b>10x 96 Pz</b>	<b>9615</b>

### ROTOLE CARTA

<b>ROTOLE CARTA ASCIUGAMANI 2V - 800 Strappi</b>	<b>2 Pz</b>	<b>525404</b>
--	-------------	---------------

### SACCHETTI PER AUTOCLAVE

<b>SACCHETTI PER AUTOCLAVE 30x50</b> <b>SACCHETTI PER AUTOCLAVE 60x78</b> Sacchetti termoresistenti in polipropilene, trasparenti e autoclavabili <b>fino a 125 °C.</b>	<b>100 Pz</b> <b>100 Pz</b>	<b>7847</b> <b>7848</b>
<b>SACCHETTI PER AUTOCLAVE 30x50</b> <b>SACCHETTI PER AUTOCLAVE 60x78</b> Sacchetti termoresistenti in polipropilene, trasparenti e autoclavabili <b>fino a 135 °C.</b>	<b>100 Pz</b> <b>100 Pz</b>	<b>8330</b> <b>8331</b>



**SPATOLE**

<b>SPATOLE MONOUSO IN PLASTICA AD "L" STERILI / Sacchetti da 5 Pz</b>	<b>5 Pz</b>	<b>5200/SG</b>
---	-------------	----------------



### SACCHETTI STERILI PER CAMPIONAMENTO

**Sacchetti sterili** per la raccolta e il trasporto di **campioni liquidi, solidi e semi-solidi**.  
Sacchetti sterili con **spugna sterile** per il campionamento microbiologico di **superfici e carcasse animali**.

PRODOTTO	Cont.	REF
<b>SACCHETTI STERILI PER TRASPORTO CAMPIONE</b>		
<b>Sacchetti sterili</b> (con ossido di etilene) per la raccolta e il trasporto di <b>campioni liquidi, solidi e semi-solidi</b> .		
<b>SACCHETTI PER CAMPIONAMENTO STERILI</b> Cm. 115x230 (540 ml) – Con area di scrittura.	<b>100 Pz</b> <b>500 Pz</b>	<b>6331</b> <b>6331/500</b>
<b>SACCHETTI PER CAMPIONAMENTO STERILI</b> Cm. 150x230 (720 ml) – Con area di scrittura.	<b>100 Pz</b> <b>500 Pz</b>	<b>20415</b> <b>20415/500</b>
<b>SACCHETTI PER CAMPIONAMENTO STERILI</b> Cm. 190x300 (1650 ml) – Con area di scrittura.	<b>100 Pz</b> <b>500 Pz</b>	<b>11722</b> <b>11722/500</b>



## SACCHETTI STERILI PER CAMPIONAMENTO

Sacchetti sterili per la raccolta e il trasporto di **campioni liquidi, solidi e semi-solidi**.

Sacchetti sterili con **spugna sterile** per il campionamento microbiologico di **superfici e carcasce animali**.

PRODOTTO	Cont.	REF
----------	-------	-----

### SACCHETTI STERILI "CON SPUGNA" PER CAMPIONAMENTO

Sacchetti sterili con **spugna sterile** per il campionamento microbiologico di **superfici e carcasce animali**.

<b>SACCHETTI STERILI CON SPUGNA</b> <b>Mis. 115x230 – Capacità 540 ml</b>	<b>100 Pz</b>	<b>13273</b>
--	---------------	--------------



Sacchetto in plastica speciale ad alta resistenza - **sterile** - trasparente - con area di scrittura - sigillo superiore a strappo per garantire la sterilità - sistema di chiusura a nastro animato - saldatura su tre lati - dotato di spugna (dim.: 35x75 mm) per la raccolta del campione - ideale per il campionamento microbiologico (Listeria, Salmonella ed altri microrganismi patogeni) delle superfici e per il campionamento su carcasce animali per la ricerca di E. coli (metodo USA Federal Register).

<b>SACCHETTI STERILI CON SPUGNA "PREINUMIDITA"</b> <b>Mis. 115x230 – Capacità 540 ml</b>	<b>100 Pz</b>	<b>35118</b>
<b>KIT CAMPIONAMENTO CARCASSE ANIMALI</b> <b>SACCHETTI STERILI CON SPUGNA "PREINUMIDITA" + GUANTI</b> <b>Mis. 115x230 – Capacità 540 ml</b>	<b>100 Pz</b>	<b>35119</b>



Sacchetto in plastica speciale ad alta resistenza - **sterile** - trasparente - dimensioni sacchetto 115x230 mm - capacità 540 mL - spessore 0.064 mm - sigillo superiore a strappo per garantire la sterilità - sistema di chiusura a nastro animato - saldatura su tre lati - dotato di spugna (dim. 35x75 mm) per la raccolta del campione - completo di guanti sterili - ideale per il campionamento microbiologico (Listeria, Salmonella ed altri microrganismi patogeni) delle superfici e per il campionamento su carcasce animali per la ricerca di E. Coli (metodo USA Federal Register).

### "SPUGNE" STERILI PER IL CAMPIONAMENTO SUPERFICI

Il sistema "Sponge-Poliwipe" permette di eseguire campionamenti in conformità alle norme ISO in virtù della formulazione dei neutralizzanti contenuti. I codici 91903 e 91890 sono indicati per campionamenti per la ricerca di carica batterica totale e Salmonella spp secondo la norma **ISO 18593:2004**; il codice 91901 è indicato per il campionamento delle carcasce animali per la ricerca di Salmonella spp ed E.coli secondo la norma **ISO 17604:2004** ed il regolamento 1441:2007 (ex 2073:2005).

<b>SPUGNA "SPONGE-POLIWIPE" PRE-INUMIDITA STERILE</b> <b>CONF. SINGOLA</b>	<b>50 Pz</b>	<b>91903</b>
<b>SACCHETTO CON SPUGNA "SPONGE-POLIWIPE" – SPUGNA CON TAMPONE FOSFATO - GUANTI - SACCHETTO STERILE TIPO "PRESTO-CHIUSO"</b>	<b>50 Pz</b>	<b>91890</b>
<b>SACCHETTO CON SPUGNA "SPONGE-POLIWIPE" – SPUGNA CON PEPTONE SALINE - GUANTI - SACCHETTO STERILE CON CHIUSURA A PRESSIONE</b>	<b>50 Pz</b>	<b>91901</b>



Sacchetto **sterile** con spugna sterile pre-inumidita con soluzione neutralizzante dei disinfettanti - spugna pronta all'uso, in speciale materiale che garantisce un alto livello di recupero di microrganismi e la loro vitalità durante il trasporto - il colore blu favorisce l'identificazione della spugna in caso di caduta accidentale - i certificati allegati ad ogni singola confezione attestano la sterilità ed il recupero di *E.coli*, *S.aureus*, *Salmonella typhimurium* e *Listeria monocytogenes* - confezione singola - disponibile nella versione con sacchetto richiudibile a pressione e guanti oppure con sacchetto tipo "Presto-Chiuso" e guanti - dimensioni spugna: **100x45 mm** - scadenza 12 mesi dalla data di produzione.



## SACCHETTI STERILI PER OMOGENEIZZATORI

BagFilter® e BagPage® sono dei sacchetti in plastica rinforzata estremamente resistenti. Hanno un filtro interno, laterale per BagFilter®, filtro totale per i BagPage®. Dopo l'omogeneizzazione, le fibre restano bloccate nel compartimento filtro. La soluzione da analizzare è già filtrata e può essere prelevata facilmente. I risultati sono garantiti perché non ci sono particelle. Mono-uso, i sacchetti filtranti sterili permettono di ridurre i tempi d'analisi con sicurezza.

PRODOTTO	Cont.	REF
<b>BAG LIGHT 100® - Senza Filtro</b> Confezione sterile da 25 pz., 100 ml, 110x185 mm.	<b>500 Pz (20x25)</b>	<b>131025</b>
<b>BAG LIGHT 400® - Senza Filtro</b> Confezione sterile da 25 pz., 400 ml, 180x290 mm.  BagLight® è un sacchetto per prodotti che non necessitano di filtrare. In PolySilk®, la sua resistenza è notevole, anche per la congelazione. Chiusi dalle sbarette BagClip®, BagLight® permette il trasporto dei prelievi solidi o semi solidi.	<b>500 Pz (20x25)</b>	<b>BLT04025</b>
<b>BAG PAGE PLUS 100® - Filtro totale</b> Confezione sterile da 25 pz., 100 ml, 120x190 mm.	<b>500 Pz (20x25)</b>	<b>121025</b>
<b>BAG PAGE PLUS 400® - Filtro totale</b> Confezione sterile da 25 pz., 400 ml, 190x300 mm.  BagPage® permette di diminuire i tempi d'analisi perché le particelle rimangono dietro il filtro. Il filtro di grande dimensione non si intasa. BagPage® è adatto per un'omogeneizzazione e una filtrazione efficace dei prodotti impastati : formaggio, pasticceria, farina, cioccolato. Filtro plastica perforata •Eccellente resistenza meccanica. BagPage® + a due compartimenti separati dal filtro: l'uno con il marchio per introdurre Facilmente il campione, l'altro più piccolo con una saldatura per prelievo senza errori. (Brevetto interscience)	<b>500 Pz (20x25)</b>	<b>122025</b>
<b>BAG FILTER 400® - Filtro laterale</b> Confezione sterile da 25 pz., 140 ml, 190x300 mm.  BagFilter®, con il suo filtro non tessuto, è raccomandato per l'analisi della carne, salumeria, pesce, verdura, frutta. Due modelli : « P » per prelievo con pipetta o « S » per versare, perché una Saldatura ferma le particelle. Filtro in non tessuto - Eccellente resistenza meccanica	<b>500 Pz (20x25)</b>	<b>111425</b>
 <b>ROLL BAG 400®</b> Confezione sterile da 25 pz., 450 ml, 110x230 mm.	<b>1000 Pz (40x25)</b>	<b>145010</b>

## SISTEMA ROLL BAG



**TAMPONI DI TRASPORTO**

PRODOTTO	Cont.	REF
----------	-------	-----

**TAMPONI SECCHI**

<b>TAMPONI SECCHI IN LEGNO STERILI / Punta Cotone</b> Tampone <b>cotone</b> sterile confezionato in busta singola. <b>Asta in legno.</b>	<b>500 Pz</b> <b>1000 Pz</b>	<b>26075</b> <b>5100/SG/CS</b>
<b>TAMPONI SECCHI IN PLASTICA STERILI / Punta rayon</b> Tampone in fibra sintetica ( <b>rayon</b> ), sterile confezionato in busta singola - <b>Asta in plastica</b>	<b>100 Pz</b> <b>1000 Pz</b>	<b>26080</b> <b>6100/SG/CS</b>

**TAMPONI SECCHI IN PROVETTA**

<b>TAMPONI SECCHI STERILI IN PROVETTA</b> Tampone <b>cotone</b> sterile in provetta 12x150 + Etichetta - <b>Asta in legno</b>	<b>100 Pz</b> <b>400 Pz</b> <b>6x400 Pz</b>	<b>26060</b> <b>2150/SG</b> <b>1421000</b>
<b>TAMPONI SECCHI STERILI IN PROVETTA</b> Tampone <b>fibra sintetica (rayon)</b> sterile in provetta 12x150 + Etichetta - <b>Asta in plastica</b>	<b>100 Pz</b> <b>10x100 Pz</b> <b>400 Pz</b> <b>6x400 Pz</b>	<b>26061</b> <b>26061/100</b> <b>2160/SG</b> <b>1422000</b>
<b>TAMPONI SECCHI STERILI IN PROVETTA</b> Tampone <b>fibra sintetica (rayon)</b> sterile in provetta 16x150 + Etichetta - <b>Asta in plastica</b>	<b>1000 Pz</b>	<b>51500/E/SG</b>

**TAMPONI CON TERRENO DI TRASPORTO AMIES E STUART**

<b>AMIES MEDIUM</b> Tamponi con terreno amies per la raccolta e il trasporto materiali clinici.	<b>150 Pz</b> <b>6x150 Pz</b>	<b>301/SG</b> <b>1412000</b>
<b>STUART'S MEDIUM</b> Tamponi con terreno stuart per la raccolta e il trasporto materiali clinici.	<b>150 Pz</b> <b>6x150 Pz</b>	<b>305/SG</b> <b>1414000</b>

## VARIE


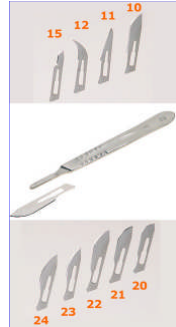
PRODOTTO	Cont.	REF
<b>ANSE</b>		
PORTA ANSE "KOLLE", Diam. 10x200 mm	1 Pz	9762
ANSE CALIBRATE IN FILO NICHEL-CROMO, 1 ul - Diam. dell'ansa 1,59	25 pz.	9544
ANSE CALIBRATE IN FILO NICHEL-CROMO, 10 ul - Diam. dell'ansa 5,05	25 pz.	9539
ANSE CALIBRATE IN FILO DI PLATINO, 1 ul	2 pz.	3511
ANSE CALIBRATE IN FILO DI PLATINO, 10 ul	2 pz.	3510





## ASPIRATORI PER PIPETTE

ASPIRATORI PER PIPETTE 2 ML / Colore Blu	1 Pz	5050KAR
ASPIRATORI PER PIPETTE 10 ML / Colore Verde	1 Pz	5051KAR
ASPIRATORI PER PIPETTE 25 ML / Colore Rosso	1 Pz	5052KAR


## BISTURI

	<b>BISTURI MONOUSO STERILI</b> Manico in plastica e lama in acciaio inox 18/8. <b>Lama retta Tipo 11 – Lunghezza 137 mm</b> <b>Lama paciuta Tipo 10 – Lunghezza 137 mm</b>	10 Pz. 10 Pz.	126.1256.03 126.1256.04
	<b>BISTURI MULTIUSO</b> Manico zigrinato in acciaio inox 18/8 <b>Lama panciuta larga – Lunghezza 150 mm</b> <b>Lama paciuta stretta – Lunghezza 150 mm</b>	1 Pz. 1 Pz.	126.1251.61 126.1251.62
	<b>BISTURI MONOUSO, TIPO 3 e 4</b> Con lame intercambiabili, Manico in acciaio inox 18/8 con lame sterili. in confezione indivisibile <b>MANICO IN ACCIAIO PER LAME Tipo 3</b> <b>LAMA IN ACCIAIO n. 10</b> <b>LAMA IN ACCIAIO n. 11</b> <b>LAMA IN ACCIAIO n. 12</b> <b>LAMA IN ACCIAIO n. 15</b>	1 Pz. 10 Pz. 10 Pz. 10 Pz. 10 Pz.	126.1254.00 126.1254.10 126.1254.11 126.1254.12 126.1254.15
	<b>MANICO IN ACCIAIO PER LAME Tipo 4</b> <b>LAMA IN ACCIAIO n. 20</b> <b>LAMA IN ACCIAIO n. 21</b> <b>LAMA IN ACCIAIO n. 22</b> <b>LAMA IN ACCIAIO n. 23</b>	1 Pz. 10 Pz. 10 Pz. 10 Pz. 10 Pz.	126.1253.00 126.1253.20 126.1253.21 126.1253.22 126.1253.23



## FORBICI

	<b>FORBICI A LAME CORTE CON MANICI IN PLASTICA ACCIAIO NICHELATO</b> Lunghezza totale 145 mm.	1 Pz.	134.2020.70
	<b>FORBICI A LAME LUNGHE DIRITTE ACCIAIO NICHELATO</b> Lunghezza Totale 180 mm. Lunghezza Totale 230 mm.	1 Pz. 1 Pz.	134.2019.60 134.2019.61
	<b>FORBICI A PUNTE ACUTE LAME DIRITTE ACCIAIO INOX 18/8</b> Lunghezza Totale 120 mm. Lunghezza Totale 140 mm. Lunghezza Totale 160 mm.	1 Pz. 1 Pz. 1 Pz.	134.2019.45 134.2019.46 134.2019.47

## VARIE

PRODOTTO	Cont.	REF
<b>PORTATUBI</b>		
PORTATUBI 50 POSTI PER TUBI 12 mm.	1 Pz	10431
PORTATUBI 50 POSTI PER TUBI 16 mm.	1 Pz	10432
 <b>PORTATUBI 12 FORI</b> <b>PORTATUBI 24 FORI</b> <b>PORTATUBI 48 FORI</b> In acciaio inox 18/8, con maniglie laterali leggermente curve	1 Pz. 1 Pz. 1 Pz.	212.5260.26 212.5260.27 212.5260.29

## SPATOLE

 <b>SPATOLA CON ESTREMITÀ A FORMA DI CUCCHIAINO</b> In acciaio inox 18/8 con estremità a forma di paletta e l'altra a cucchiaino. <b>Lunghezza totale 180 mm.</b>	1 Pz	268.7600.71
 <b>SPATOLA CON ESTREMITÀ A FORMA DI CUCCHIAIO</b> In acciaio inox 18/8 e spatola corta. <b>Lunghezza totale 150 mm.</b> <b>Lunghezza totale 200 mm.</b>	1 Pz 1 Pz	268.7600.97 268.7600.98



## VETRERIA

## VARIE

PRODOTTO	Cont.	REF
<b>BEUTA VETRO GRADUATA 100 ML</b> <b>BEUTA VETRO GRADUATA 500 ML</b> <b>BEUTA VETRO GRADUATA 1000 ML</b> Beuta <b>vetro Simax</b> bocca stretta sec. ISO 1773, DIN 12380	1 Pz 1 Pz 1 Pz	<b>BEU04020</b> <b>BEU04070</b> <b>BEU04090</b>
<b>BICCHIERE VETRO GRADUATO FORMA BASSA 100 ML</b> <b>BICCHIERE VETRO GRADUATO FORMA BASSA 250 ML</b> <b>BICCHIERE VETRO GRADUATO FORMA BASSA 600 ML</b> <b>BICCHIERE VETRO GRADUATO FORMA BASSA 1000 ML</b> Bicchiere <b>vetro simax</b> con becco sec. ISO3819, DIN12331	1 Pz 1 Pz 1 Pz	<b>BIC06040</b> <b>BIC06060</b> <b>BIC06080</b> <b>BIC06110</b>
<b>CILINDRI VETRO GRADUATO 10 ML</b> <b>CILINDRI VETRO GRADUATO 50 ML</b> <b>CILINDRI VETRO GRADUATO 100 ML</b> Cilindri graduati vetro con becco base esagonale, forma alta, cl. AS. Sec.ISO 4788, DIN12680-2 con certificato di conformità "H".	1 Pz 1 Pz 1 Pz	<b>VCI04010</b> <b>VCI04030</b> <b>VCI04040</b>
<b>FLACONE VETRO GRADUATO 250 ML / Tappo vite</b> <b>FLACONE VETRO GRADUATO 500 ML / Tappo vite</b> <b>FLACONE VETRO GRADUATO 1000 ML / Tappo vite</b> Flacone <b>vetro Simax</b> , bocca larga a vite con tappo a vite ISO GL45	1 Pz 1 Pz 1 Pz	<b>FLA20310</b> <b>FLA20320</b> <b>FLA20330</b>
<b>MATRACCIO VETRO GRADUATO 100 ML / Tappo vite</b> <b>MATRACCIO VETRO GRADUATO 500 ML / Tappo vite</b> <b>MATRACCIO VETRO GRADUATO 1000 ML / Tappo vite</b> Matracci Erlenmeyer, <b>vetro Simax</b> con tappo a vite ISO 45.	1 Pz 1 Pz 1 Pz	<b>BEU07150</b> <b>BEU07160</b> <b>BEU07165</b>
<b>CAMPANELLA DI DURAM 6x35 mm</b>	<b>100 Pz</b>	<b>PRO13017</b>
<b>TUBI VETRO 18x145 + TAPPO A VITE ALLUMINIO</b>	<b>252 Pz</b>	<b>PRO76052</b>

## REATTIVI VARI

### REATTIVI AUSILIARI

PRODOTTO	Cont.	REF
<b>ACQUA DISTILLATA</b> Res. > 500.000 Ohms/cm2 - Residuo CaCO <sub>3</sub> 1 P.P.M	<b>10 Lt</b>	<b>7000</b>
<b>ACQUA BIDISTILLATA</b> Res. > 5.000.000 Ohms/cm2 - Residuo CaCO <sub>3</sub> 0,001 P.P.M.	<b>10 Lt</b>	<b>7001</b>



### SOLUZIONI TAMPONI PER pH

CERTIFICATE ISO 9001 – DKD - **AutoCAL Hamilton** Bottiglia brevettata AutoCAL Hamilton. Tutte le soluzioni sono certificate ISO 9001 e DKD (equivalente SIT). Il certificato di analisi è sempre fornito gratuitamente.

PRODOTTO	Cont.	REF
<b>TAMPONE pH 4.01</b> ± 0.01/25 ° / Tappo Rosso	<b>500 ml</b>	<b>32382173</b>
<b>TAMPONE pH 7.00</b> ± 0.01/25 ° / Tappo Verde	<b>500 ml</b>	<b>32382183</b>
<b>TAMPONE pH 9.21</b> ± 0.02/25 ° / Tappo Blu	<b>500 ml</b>	<b>32382193</b>
<b>TAMPONE pH 10.01</b> ± 0.02/25 ° / Tappo Giallo	<b>500 ml</b>	<b>32382233</b>

# STRUMENTAZIONE

CONTENUTO	PAG
-----------	-----

## STRUMENTAZIONE PER BATTERIOLOGIA

AGITATORI	111
APPLICATORE PIASTRE DA CONTATTO	111
ARMADI DI SICUREZZA	111
AUTOCLAVI	112
BAGNOMARIA	113
BANCONI DA LABORATORIO	114
BILANC	114
BUNSEN	115
CAMPIONATORE D'ARIA	115
CAPPA A FLUSSO LAMINARE	115
CENTRIFUGHE	116
CONDUTTIMETRO	117
CONTACOLONIE	117
DATA LOGGER	118
DILUITORI	119
FRIGORIFERI	119
FRIGORIFERI PORTATILI	120
GERMODEPURATORE	120
MICROSCOPI	120
OMOGENEIZZATORI	121
pH METRI	122
PIPETTE AUTOMATICHE	122
TERMOMETRI	123
MISURATORI DI TEMPERATURA	123
TERMOSTATI (INCUBATORI) E STUFE	124
INCUBATORI CO <sup>2</sup>	125

## STRUMENTAZIONE PER ANALISI CHIMICHE DELLE ACQUE

FOTOMETRI MULTIPARAMETRO	126
--------------------------	-----




## STRUMENTAZIONE PER BATTERIOLOGIA


### AGITATORI

PRODOTTO	Cont.	REF
<b>VIBRATORE A VORTICE PER TUBI Mod. TK3S</b>	<b>1 Unità</b>	<b>2241KAR</b>
 <p><b>Specifiche tecniche:</b> Vibratore a vortice per Tubi; funzionamento ad azionamento automatico mediante pressione sul supporto delle Tubi. Possibilità di funzionamento continuo mediante interruttore apposito. Intensità di miscelazione variabile in modo continuo mediante variazione della frequenza di vibrazione per mezzo di apposita manopola (0-40 Hertz). Supporto in gomma per Tubi fino a 20 mm di diametro.</p>		
<b>AGITATORE MAGNETICO Mod. TK22.</b>	<b>1 Unità</b>	<b>2237KAR</b>
 <p><b>Specifiche tecniche:</b> Agitatore magnetico con piatto di appoggio riscaldante realizzato in lega di alluminio e rivestito con una speciale protezione antiacida che assicura una distribuzione uniforme del calore su tutta la superficie.</p>		


### APPLICATORI PIASTRE DA CONTATTO

PRODOTTO	Cont.	REF
<b>APPLICATORE "RODAC-WEIGHT"</b>	<b>1 Unità</b>	<b>015496</b>
 <p>Applicatore per piastre da contatto costituito da un supporto metallico sterilizzabile in stufa o in autoclave e da un temporizzatore digitale estraibile. Consente di applicare sempre la stessa pressione per lo stesso tempo sulla piastra a contatto; in questo modo il campionamento microbiologico delle superfici è sempre riproducibile e confrontabile indipendentemente dall'operatore. Specifiche tecniche: a richiesta.</p>		



### ARMADI DI SICUREZZA

PRODOTTO	Cont.	REF
<b>INFIAMMABILI</b>		
<b>SAFETY BOX MOD. AC 600/50 CM</b>	<b>1 Unità</b>	<b>FL006/5CM</b>
 <p><b>Armadio di sicurezza per lo stoccaggio di circa 30 litri di prodotti liquidi e solidi infiammabili conforme alla norma EN 14470-1 con protezione fumi freddi e caldi.</b></p> <p><b>Specifiche tecniche:</b> Chiusura porta a battente con ritorno automatico. Guarnizione termoespandente che in caso di incendio isola l'interno dell'armadio dall'esterno. Guarnizione termoespandente supplementare per tenuta ai fumi freddi e caldi. Sistema di ventilazione interno non forzato per vapori completo di due valvole di sicurezza da 100 mm con chiusura automatica ad una temperatura ambiente di 70 +/-10°C come da norma. Ripiano in acciaio elettrozincato e verniciato a polveri epossidiche montato su staffe regolabili. Il ripiano è del tipo a vaschetta per la raccolta di eventuali spanti a causa di rotture accidentali dei recipienti. Capacità di ogni ripiano circa 7 litri. Portata ripiano kg 50. Vasca di fondo in acciaio elettrozincato e verniciato a polveri epossidiche, capacità di raccolta 10 litri. Sistema di chiusura brevettato Ignis Lock che mantiene chiuse la porta in caso di incendio. Controllo su scala 1:1 dello spessore verniciatura come da procedura UNI EN ISO 9001:2000. Cartelli di segnalazione pericolo presenza prodotti infiammabili e divieto di fumare, come da norme italiane ed europee sulla sicurezza (DIN 4844 e ISO 3864). 4 piedini regolabili. Morsetto a terra per prevenire le cariche elettrostatiche.</p>		

## ARMADI DI SICUREZZA

PRODOTTO	Cont.	REF
<b>ACIDI CHIMICI BASI</b>		
<b>SAFETY BOX MOD. AC 900/50</b>	<b>1 Unità</b>	<b>CH009/5</b>
 <p><b>Armadio di sicurezza aspirato per lo stoccaggio di 70 litri di prodotti chimici,acidi e basi secondo test TUV PP 51021:1996, conforme alle norme DIN 31 001-1/DIN 4554/ZH 1/428.</b></p> <p><b>Specifiche tecniche:</b> Due scomparti separati: uno per acidi ed uno per basi. Due ripiani a vaschetta per acidi in acciaio verniciato antiacido, capacità 6 litri e portata 60 kg. Due ripiani a vaschetta per basi in acciaio inox AISI 304, capacità 6 litri e portata 60 kg. Aspiratore a ventola termoprotetto CE. Lampada di accensione impianto di aspirazione. Alimentazione: 220/230 V. Assorbimento: 21 Watt. Cartelli di segnalazione di pericolo presenza di prodotti corrosivi,nocivi e tossici, in accordo alle normative italiane ed europee sulla sicurezza.Quattro piedini regolabili.</p>		

## AUTOCLAVI

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>AUTOCLAVE MOD. 760</b>	<b>1 Unità</b>	<b>29960001</b>
 <p>Autoclave per sterilizzazione a caricamento verticale, <b>capacità camera 18 Lt</b>, dotata di camera di sterilizzazione in alluminio, coperchio inox con staffa di bloccaggio, valvole di scarico e di sicurezza. Costruzione esterna in acciaio con verniciatura a polvere. Resistenza elettrica a piastra radiale. Manometro per verifica pressione di esercizio. Sensore di sicurezza a riarmo manuale in caso di mancanza d'acqua. Pressione max. di esercizio 1 Atm. (121 °C). Alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz. Assorbimento 1500 W. Peso kg. 18. <b>Esente da controllo I.S.P.E.S.L.</b> perché entro i limiti di capacità e pressione.</p>		
<b>AUTOCLAVE VAPOR MATIC MOD. 770/A</b>	<b>1 Unità</b>	<b>29960002</b>
 <p>Autoclave per sterilizzazione a caricamento verticale, <b>capacità camera 23 Lt.</b>, con ciclo di sterilizzazione completamente automatico, termoregolato e controllato da microprocessore, che permette di programmare diversi tempi e temperature, tra cui le due fasi di sterilizzazione più comuni: fase 1 = 121 °C. a 1 Atm. - 20'; fase 2 = 134 °C - 2 Atm. - 20'. Tali fasi sono memorizzabili e richiamabili tramite la digitazione di un solo tasto, in modo da rendere immediata e sicura la predisposizione al funzionamento dell'autoclave. Tasto per ciclo F.U. 30-60 minuti. <b>Esente da controllo I.S.P.E.S.L.</b> perché entro i limiti di capacità e pressione. Autodiagnosi di sicurezza che avverte, con segnalazione acustica e visiva un'errata impostazione o un guasto interno. Alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz. Assorbimento 2200 W. - Dimensioni interne camera Ø mm. 260x430 h. - Capacità camera Lt. 23. - Dimensioni d'ingombro mm. 720x580x1210 h. - Peso netto Kg. 52</p>		

## ACCESSORI PER AUTOCLAVE

<b>CESTELLO ACCAIO INOX Mod. 760</b>	<b>1 Unità</b>	<b>29810006</b>
<b>CESTELLO FORATO ACCAIO INOX Mod. 760</b>	<b>1 Unità</b>	<b>29810007</b>
<b>CESTELLO ACCAIO INOX Mod. 770/A</b>	<b>1 Unità</b>	<b>29810008</b>
<b>CESTELLO FORATO ACCAIO INOX Mod. 770/A</b>	<b>1 Unità</b>	<b>29810009</b>

## BAGNOMARIA

PRODOTTO	Cont.	REF
<b>BAGNOMARIA DIGITALE Mod. 740</b>	<b>1 Unità</b>	<b>29950001</b>
<div>  <p><b>BAGNOMARIA DIGITALE Mod. 740</b></p> <p>Trova largo utilizzo nei settori chimici, industriali e farmaceutici. Funzionamento a microprocessore in tecnologia HCMOS. Visualizzazione della temperatura e del set-point. Rilevazione della temperatura con sonda termoresistiva di precisione tipo PT 100, regolabile da temperatura ambiente a 99,9°C. con risoluzione 0,1°C. Tre canali programmabili con richiamo diretto. Indicazione di allarme sonda guasta e dispositivo per segnalazione insufficienza liquido. Coperchio incernierato anticondensa. Dotato di rubinetto per scarico esterno. Vasca interna in acciaio inox stampata adatta a contenere 4 porta Tubi con 36 posti Ø mm. 18 o altri contenitori. Livello di protezione agli spruzzi IP 54. Costruzione esterna in acciaio con verniciatura in polvere. □□□□</p> </div>		
<b>GRUPPO TERMOSTATICO DIGITALE 720/D</b>	<b>1 Unità</b>	<b>29910005</b>
<div>  <p>Dotato di motorino agitatore ad elica e spirale riscaldante. Termoregolatore elettronico con possibilità di regolazione della temperatura. Dispositivo di allarme.</p> </div>		
	<b>VASCA ACCIAIO INOX COIBENTATA</b> Mis. 500x300x150 mm. - Lt. 20	<b>1 Unità</b> <b>29780001</b>
	<b>PORTATUBI IN ACCIO INOX</b> 24 Fori Ø 13 mm.	<b>1 Pz</b> <b>29750001</b>
	<b>PORTATUBI IN ACCIO INOX</b> 24 Fori Ø 18 mm.	<b>1 Pz</b> <b>29750002</b>
<b>Bagno Maria SALVIS LAB WB 10 Lt</b>	<b>1 Unità</b>	<b>41001602</b>
<b>Bagno Maria SALVIS LAB WB 20 Lt</b>	<b>1 Unità</b>	<b>41001612</b>
<b>Bagno Maria SALVIS LAB WB 40 Lt</b>	<b>1 Unità</b>	<b>41001622</b>
<div>  <p>Bagnomaria. Campo di lavoro da 5°C sopra temperatura ambiente a 80°C. Capacità della vasca <b>10/20/40 litri</b>. Regolatore elettronico della temperatura con controllo PID integrato. Classe di sicurezza 2 secondo DIN 12880. Stabilità della temperatura a 37°C: ±0,1 °C, accuratezza della temperatura: ±0,2 °C. Vasca interna e piatto fondo forato rimovibile in acciaio di alta qualità 1.4301 (AISI 304). Coperchio in acciaio incernierato alla vasca con foro da 6mm per il passaggio di un sensore esterno per il controllo o la certificazione della temperatura. Ampia gamma di rack porta provette disponibili. Dimensioni esterne con coperchio (base x profondità x altezza): 577 x 295 x 338mm. Peso: 8 Kg. Alimentazione: 230V/50Hz, potenza: 1000W.</p> </div>		

## BANCONI DA LABORATORIO

PRODOTTO	Cont.	REF
<b>BANCONE LABORATORIO 120 Dimensioni 120x80x90</b>	<b>1 Unità</b>	<b>/</b>
<b>BANCONE LABORATORIO 150 Dimensioni 150x80x90</b>	<b>1 Unità</b>	<b>/</b>
<b>BANCONE LABORATORIO 180 Dimensioni 176x80x90</b>	<b>1 Unità</b>	<b>/</b>



### TELAIO

TELAIO costruito con tubolari d'acciaio in moduli indipendenti tra loro, componibili e con possibilità di intercambiabilità e sostituzione di singoli elementi. Trattamento di protezione con procedimento di decappaggio e fosfatizzazione a caldo ed applicazione elettrostatica di polveri epossidiche con pigmentazione di colore AZZURRO RAL 5024. Quindi lo smalto subisce un trattamento di essiccazione e cottura in galleria termica a 210°C. Viti a testa esagonale in acciaio consentono un rapido assemblaggio dei vari componenti, creando una struttura portante particolarmente solida e robusta. Piedini regolabili alla base consentono la messa a livello della struttura.

### PIANO DI LAVORO / LAMINATO PLASTICO

Supporto di legno truciolare idrofugo, rivestito sui due lati con laminato plastico melamminico ignifugo FI finitura quarz antigraffio, costituito da fogli di carta kraft impregnata di resina fenolica, da un foglio decorativo superiore di colore BIANCO impregnato di resina melamminica, sottoposti all'azione combinata di pressione (90kg/cmq) e calore (150°), in apposite presse dove avviene la policondenazione delle resine. La superficie offre discreta resistenza agli acidi, in particolare acetico, citrico e basi deboli. Bordatura frontale post-formata.

<b>BANCONE LABORATORIO ANGOLARE</b>	<b>1 Unità</b>	<b>/</b>
<b>GRUPPO LAVAGGIO 64</b>	<b>1 Unità</b>	<b>/</b>
<b>GRUPPO LAVAGGIO 120</b>	<b>1 Unità</b>	<b>/</b>

## BILANCIE ANALITICHE E TECNICHE

PRODOTTO	Cont.	REF
<b>BILANCIA ANALITICA Mod. EB100 / Portata 100 g - Div. 0,0001 gr</b>	<b>1 Unità</b>	<b>EB100</b>
<b>BILANCIA ANALITICA Mod. BAC120 / Portata 120 g -Div. 0,0001 gr</b>	<b>1 Unità</b>	<b>BCA120</b>






Tara automatica sull'intera portata. - Peso di calibrazione esterno (fornito in dotazione) sul modello BCA 120. Modello BCA 120S con calibrazione interna azionata da un servomotore controllato da un microprocessore per la calibrazione automatica -Selezione di diverse unità di misura: g, ct, oz, lb, dwt, GN, tl, ecc. - Filtri per smorzamento vibrazioni selezionabili - Sistema di zero automatico - Interfaccia RS232 - Piatto di pesata diam 80mm - Vetrinetta con antine scorrevoli in vetro da mm 184x325x 260h - Bolla d'aria e piedini di livellamento  
Completa di istruzioni per l'uso. - Peso netto Kg 7,0

<b>BILANCIA TECNICA Mod. BC 1000 / Porata 1000 g - Div. 0,01</b>	<b>1 Unità</b>	<b>BCA1000</b>
<b>BILANCIA TECNICA Mod. BC 500 / Porata 500 g - Div. 0,001</b>	<b>1 Unità</b>	<b>BCA500</b>




Autocalibrazione con peso campione di serie - Tara automatica su tutta la portata. - Interfaccia RS232 di serie su tutti i modelli - Funzione contapezzi - Variabilità delle unità di misura tramite tasto dedicato: GRAMMI-CARATI-ONCE-LIBRE-PENNYWEIGHT-ONCE TROY-GRANI ecc - Filtri per pesare in condizioni particolari e per dosaggio - Dimensioni 190x350x100h - Fornita di serie con anello protettivo antivento in plexiglass e e coperchio in inox - Bolla d'aria e piedini di livellamento.

## BUNSEN

PRODOTTO	Cont.	REF
<b>LAMPADA BUNSEN DI SICUREZZA "BRAVO-FLAM DIGIT"</b>	<b>1 Unità</b>	<b>91702</b>
 <p>Bunsen di sicurezza dotato di sensore a infrarossi per l'accensione della fiamma - portatile - può essere collegato alla rete elettrica o ad una batteria ricaricabile* - si può utilizzare con gas di rete o altra fonte di gas oppure può essere reso indipendente mediante l'impiego di un adattatore* e una bomboletta di gas autonoma* - non necessita di fiamma pilota - protezione da sovra-temperatura - allarme luminoso - tre modalità di funzionamento: 1) con comando a pedale, 2) funzionamento in continuo, 3) con sensore a infrarossi - completo di connettore per tubo gas diam. 10 mm e di ugelli per gas città, propano/butano e gas naturale - dimensioni: 100x150x90 h mm - 240 V, 50/60 Hz, batteria ricaricabile 7,2 V ESCLUSA.</p>		
<b>ADATTATORE PER BOMBOLETTA DA 52 G</b>	<b>1 Unità</b>	<b>91703</b>
<b>BOMBOLETTA DI BUTANO CON VALVOLA CV 360 - 52 G</b>	<b>1 Unità</b>	<b>29092</b>
<b>COMANDO A PEDALE</b>	<b>1 Unità</b>	<b>29007</b>
 <p><b>FLAMBATORE LABORGAS</b> Con accensione piezoelettrico rubinetto regolazione gas N.B. senza cartuccia. <b>RICAMBIO CARTUCCIA</b> gas Propano e Butano da grammi 190 pari a 360 ml</p>		
	<b>1 Pz.</b>	<b>140.2840.02</b>
	<b>1 Pz.</b>	<b>140.2840.05</b>
 <p><b>LAMPADE BUNSEN MULTIGAS CON RUBINETTO A VITE</b> Fiammella costante e stabilizzatore di fiamma. Lampada in ottone nichelato e base in acciaio cromato. Tubo di allacciamento gas 10/13 mm</p>		
	<b>1 Pz.</b>	<b>140.2440.10</b>

## CAMPIONATORE D'ARIA


Campionatore d'aria portatile per il controllo microbiologico.

PRODOTTO	Cont.	REF
<b>MICROFLOW 60</b>	<b>1 Unità</b>	<b>G1001</b>
<b>MICROFLOW 90</b>	<b>1 Unità</b>	<b>G1010</b>
 <p>Kit per il controllo microbiologico ambientale con Contact Plates (Rodac) da Ø 55 mm completo di: valigetta di trasporto, lo strumento, una testa di ricambio in alluminio anodizzato, carica batteria, telecomando, penna flambatrice, certificato di calibrazione.</p>		
<b>STATIVO A TRE PIEDI tipo MASTER</b>	<b>1 Pz</b>	<b>A2004</b>
Stativo a tre piedi tipo Master, in metallo, completo di morsetto per il fissaggio del campionatore.		

## CAPPA A FLUSSO LAMINARE VERTICALE


PRODOTTO	Cont.	REF
<b>CAPPA A FLUSSO LAMINARE VERTICALE Mod. 700 DIGITALE</b>	<b>1 Unità</b>	<b>29940001</b>
 <p>Questa cappa a flusso laminare verticale è stata studiata e realizzata per consentire manipolazioni in ambiente sterile di materiali vari. La protezione totale da germi e pulviscolo estende l'utilizzo di questa cabina ai più svariati settori: microbiologico, farmaceutico, elettronico, ottico. L'impiego di materiali e filtri di prima qualità (come da specifiche) nella costruzione di questa cappa, le consentono di rispondere ai requisiti di una classe 100. La cabina non è idonea per la manipolazione di micro organismi o particelle che costituiscono un rischio per l'operatore e l'ambiente</p>		

## CENTRIFUGHE

PRODOTTO	Cont.	REF
<b>CENTRIFUGA Mod. R5S 12 POSTI</b>	<b>1 Unità</b>	<b>40000022</b>
 <p>Costruzione estremamente compatta. Facile Accessibilità. Manopole e display digitale luminoso. Interfaccia intuitiva di semplice lettura. Bloccaggio automatico del coperchio (motorizzato). Tempi ridotti di accelerazione e frenata con la funzione BREAK. Sistema di rilevamento del disequilibrio con interruzione automatica del funzionamento per evitare incidenti. Motore a induzione senza spazzole con funzionamento silenzioso, minimi interventi di manutenzione e nessun deposito carbonioso per un ambiente di lavoro sano e sicuro. Dimensioni contenute per ottimizzare lo spazio sui banchi di laboratorio. Materiali costruttivi di qualità per una lunga durata di esercizio.</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Velocità massima:</b> 5000 gir/min</li> <li>- <b>RCF massima:</b> 4000 x g</li> <li>- <b>Timer:</b> da 1 a 60 min. + continuo.</li> <li>- <b>Tipo di frenata:</b> rapida o lenta.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Controllo sbilanciamento carico:</b> Sì</li> <li>- <b>Potenza assorbita:</b> 325 W</li> <li>- <b>Livello di rumorosità:</b> 75 dBA</li> <li>- <b>Tensione di alimentazione:</b> 220 Vac - 50 Hz</li> <li>- <b>Dimensioni / Peso:</b> Altezza: 280 mm; Larghezza: 330 mm; Profondità: 370 mm; Peso senza imballo (escl. Rotori): 20 kg;</li> </ul>		

### Completa di

<b>ROTORE ANGOLO FISSO R-83A (12 POSTI)</b> Rotore ad angolo fisso 16x15 ml in lega di alluminio. Velocità max 5.250 giri/min. RCF max 4.280xg	<b>1 Unità</b>	
<b>PORTATUBI PER TUBI DA 15 ML (17x100)</b> PortaTubi per Tubi in plastica da 15 ml. (17 x 100).	<b>12 Unità</b>	


<b>CENTRIFUGA Mod. R8-C 16/24 POSTI</b>	<b>1 Unità</b>	<b>40000002</b>
 <p>Costruzione estremamente compatta. Facile Accessibilità. Manopole e display digitale luminoso. Interfaccia intuitiva di semplice lettura. Bloccaggio automatico del coperchio (motorizzato). Tempi ridotti di accelerazione e frenata con la funzione BREAK. Sistema di rilevamento del disequilibrio con interruzione automatica del funzionamento per evitare incidenti. Motore a induzione senza spazzole con funzionamento silenzioso, minimi interventi di manutenzione e nessun deposito carbonioso per un ambiente di lavoro sano e sicuro. Dimensioni contenute per ottimizzare lo spazio sui banchi di laboratorio. Materiali costruttivi di qualità per una lunga durata di esercizio.</p> <p>Caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Velocità massima:</b> 6000 gir/min - <b>Timer:</b> da 1 a 60 min. + continuo</li> <li>- <b>Tipo di frenata:</b> rapida o lenta- <b>Controllo sbilanciamento carico:</b> Sì</li> <li>- <b>Potenza assorbita:</b> 325 W - <b>Livello di rumorosità:</b> 75 dBA</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Tensione di alimentazione:</b> 220 Vac - 50 Hz</li> </ul>		

### ACCESSORI



<b>ROTORE OSCILLANTE R-81 (16 POSTI)</b> Rotore oscillante 16x15 ml in lega di alluminio. Velocità max 4.500 giri/min. RCF max 3.485xg	<b>1 Unità</b>	<b>40000212</b>
<b>ROTORE ANGOLO FISSO R-83 (16 POSTI)</b> Rotore ad angolo fisso 16x15 ml in lega di alluminio. Velocità max 5.250 giri/min. RCF max 4.280xg	<b>1 Unità</b>	<b>40000202</b>
<b>ROTORE ANGOLO FISSO R-89 (24 POSTI)</b> Rotore ad angolo fisso 24x15 ml in lega di alluminio. Velocità max 6.000 giri/min. RCF max 5.070xg	<b>1 Unità</b>	<b>40000252</b>
<b>PORTATUBI ACCIAIO PER TUBI DA 15 ML (17x100) 15-P</b> PortaTubi per Tubi in plastica da 15 ml. (17 x 100).	<b>1 Unità</b>	<b>40000422</b>
<b>ROTORE OSCILLANTE R-82 / 6X50 ML</b> Rotore oscillante in lega di alluminio. Velocità max 4.500 giri/min. RCF max 3.530xg	<b>1 Unità</b>	<b>40000322</b>
<b>ROTORE ANGOLO FISSO R-84 / 6X50 ML</b> Rotore ad angolo fisso in lega di alluminio. Velocità max 6.000 giri/min. RCF max 4.700x	<b>1 Unità</b>	<b>40000222</b>
<b>PORTATUBI IN ACCIAIO PER ROTORE R-82 Mod. 50-P</b> PortaTubi per Tubi in plastica da 50ml. (29 x 95).	<b>1 Unità</b>	<b>40000462</b>
<b>PORTATUBI IN ACCIAIO PER ROTORE R-84 Mod. 50-XF</b> PortaTubi per Tubi in plastica da 50ml. (29 x 95).	<b>1 Unità</b>	<b>40000432</b>



## CONDUTTIMETRO



PRODOTTO	Cont.	REF
<b>CONDUTTIMETRO Mod. COND 6+</b>	<b>1 Unità</b>	<b>51001502</b>
 <p><b>Conduttimetro</b> portatile con microprocessore. Cambio scala automatico e compensazione della temperatura automatica e manuale (0...100 °C). Temperatura di riferimento (20/25 °C) e costante di cella (C= 0,1; 1; 10) selezionabili. Funzioni "Fermo-lettura" e autospegnimento, messaggi di auto-diagnosi. Taratura automatica e manuale con riconoscimento automatico di 4 standard (84; 1413 µS e 12,88; 111 mS). Guscio protettivo in gomma con supporto da banco. Garanzia sulla parte elettronica di 3 anni. IP54.</p> <p><b>Campo di misura:</b> (con cella <b>C=1</b>) 0,0...199,9 – 1999 µS / 0,00...19,99 - 199,9 mS / °C -10,0...110,0 (0,1 °C)</p> <p><b>Completo</b> di cella ST6 a 2 anelli con sensore di temperatura incorporato, soluzioni standard e istruzioni per l'uso, in valigia da trasporto.</p>		

## CONTACOLONIE

PRODOTTO	Cont.	REF
<b>CONTACOLONIE MANUALE Mod. SCAN 100</b>	<b>1 Unità</b>	<b>435000</b>
 <p><b>Technical specifications :</b>            Adapter for Ø 90 mm Petri dishes Lighting with long-life LEDs (dark field technology) White background plate USB data transfer (Word, Excel, Note Pad...)            USB connecting cable Stainless steel, compact (25 cm width)            Power cord Petri size Ø : 55, 65, 90 and 150 mm            User's manual Multifunction digital screen            Counting range : 0 to 1 999 UFC            Adjustable volume counting signal            Adjustable pressure sensitivity            Ergonomic hand rest for maximum comfort            Convenient and accessible drawer storage. Can be used with any pen            Power : 220/110 V - 50/60 Hz            Dimensions of unit : 31 x 25 x 17 cm, 5.2 Kg</p>		
<b>CONTACOLONIE ELETTRICO Mod. SU570</b>	<b>1 Unità</b>	<b>240570</b>
 <p>Strumento elettrico munito di piano a membrana sensibile al contatto, adatto alla conta delle colonie dopo coltura in capsule Petri.            Lettura su display a LED rossi 15 mm a 4 cifre (=9999 max.)            - accetta capsule fino al diametro 100 mm            - lente di ingrandimento 1,5x con sostegno flessibile per facilitare la lettura e la posizione            - retroilluminazione con lampada fluorescente            - bottone di azzeramento.            Funziona con la sola pressione di una punta, una matita od una penna.            - dimensioni: 330 x 300 x 100 mm - voltaggio: 220V - Peso 5 Kg.</p>		
<b>PENNA CON CONTATTO ELETTRICO</b>	<b>1 Unità</b>	<b>240571</b>





**DATA LOGGER**


PRODOTTO	Cont.	REF
ESCORT iMINI PLUS (1 CANALE )	1 Unità	70000963
ESCORT iMINI PLUS (1 CANALE ) / SONDA ESTERNA	1 Unità	70000973
ESCORT iMINI PLUS PDF (1 CANALE )	1 Unità	70000983
ESCORT iMINI PLUS PDF (1 CANALE ) / SONDA ESTERNA	1 Unità	70000993
 <p>Scala di misura: -40...+70°C - N° misure: 1.868 - Display a cristalli liquidi multifunzione <b>Certificabile SIT</b> - Controllo costante di ogni tipo di temperatura. Ideale per magazzini, frigoriferi, termostati. Marcatura di evento da parte di un operatore per il controllo periodico dello stato del Data Logger. - Certificato d'accuratezza tracciabile SIT sempre fornito con il Logger. - Batteria al litio (durata da 1 a 2 anni) sostituibile. <b>Caratteristiche tecniche:</b> Parametri: Temperatura – Sensori: Interno (I) e/o estremo - Risoluzione / Precisione: 0,1°C / <math>\pm 0,3^{\circ}\text{C}</math> - Intervallo di misura: da 1 sec a 255 min.</p>		
<b>MINI-USB-WIN PROFESSIONAL</b> Interfaccia per configurazione e scarico dei dati dal Data Logger tramite PC. - Software di base compatibile con tutti i sistemi operativi Windows, multilingue ( <b>italiano</b> , inglese, francese, tedesco, spagnolo, polacco, ceco, olandese e giapponese), permette la programmazione e lo scarico dei dati dal Logger. Il software visualizza in modo numerico e graficamente tutti i valori memorizzati nel Data Logger I.	1 Unità	70000923
ESCORT I-LOG (1 CANALE) Mod. 61D32	1 Unità	70000763
ESCORT I-LOG (2 CANALE) Mod. 61D32	1 Unità	70000773
 <p>Scala di misura: -40...+70°C - N° misure: <b>32.000</b> - Display a cristalli liquidi multifunzione <b>Certificabile SIT</b> - Controllo costante di ogni tipo di temperatura. Ideale per magazzini, frigoriferi, termostati. Marcatura di evento da parte di un operatore per il controllo periodico dello stato del Data Logger. - Certificato d'accuratezza tracciabile SIT sempre fornito con il Logger. - Batteria al litio (durata da 1 a 2 anni) sostituibile. <b>Caratteristiche tecniche:</b> Parametri: Temperatura – Sensori: Interno (I) - Risoluzione / Precisione: 0,1°C / <math>\pm 0,3^{\circ}\text{C}</math> - Intervallo di misura: da 5 sec a 255 min.</p>		
<b>INTERFACCIA INT+WIN PER MOD. ESCORT</b> Interfaccia per configurazione e scarico dei dati dal Data Logger tramite PC. - Software di base compatibile con tutti i sistemi operativi Windows, multilingue ( <b>italiano</b> , inglese, francese, tedesco, spagnolo, polacco, ceco, olandese e giapponese), permette la programmazione e lo scarico dei dati dal Logger. Il software visualizza in modo numerico e graficamente tutti i valori memorizzati nel Data Logger I.	1 Unità	70000223

## DILUITORI


Il diluitore gravimetrico Gravimat® è impiegato per la diluizione dei campioni solidi con l'appropriata quantità (*m*) di diluente. Ogni metodo di diluizione e di dispensazione usato in laboratorio può essere scelto sullo strumento. Il fattore di diluizione prescelto è automaticamente salvato per applicazioni future.

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>DILUITORE GRAVIMETRICO BABY GRAVIMAT®</b>	<b>1 Unità</b>	<b>500230</b>
 <p>Il diluitore gravimetrico Baby Gravimat® è impiegato per la diluizione dei campioni solidi con l'appropriata quantità (<i>m</i>) di diluente. Ogni metodo di diluizione e di dispensazione usato in laboratorio può essere scelto sullo strumento. Il fattore di diluizione prescelto è automaticamente salvato per applicazioni future.</p> <p><b>Specifiche Tecniche:</b>  Tempo di diluizione &lt; 20 sec (per 250 ml) - Fattore di diluizione da 1:2 a 1:99 - Accuratezza &lt; 0,05 g (per il peso del campione) 99% (per la quantità di diluente) - Quantità massima <b>1000 g</b>.  Parametri: data e ora, identificazione del campione, peso iniziale, peso totale, fattore di diluizione, accuratezza della diluizione. - Piattaforma di peso Accuratezza &lt; 0,05 g.  Funzioni di distribuzione liquidi da 1 g a 2500 g (accuratezza &lt; 0,1 g). - Lingua del display Italiano. - Dimensioni 25 x 42 x 30 cm - Peso 10 kg.</p>		
<b>DILUITORE GRAVIMETRICO GRAVIMAT®</b>	<b>1 Unità</b>	<b>500230</b>
 <p>Il diluitore gravimetrico Gravimat® è impiegato per la diluizione dei campioni solidi con l'appropriata quantità (<i>m</i>) di diluente. Ogni metodo di diluizione e di dispensazione usato in laboratorio può essere scelto sullo strumento. Il fattore di diluizione prescelto è automaticamente salvato per applicazioni future.</p> <p><b>Specifiche Tecniche:</b>  Tempo di diluizione &lt; 20 sec (per 250 ml) - Fattore di diluizione da 1:2 a 1:99 - Accuratezza &lt; 0,05 g (per il peso del campione) 99% (per la quantità di diluente) - Quantità massima <b>2500 g</b>.  Parametri: data e ora, identificazione del campione, peso iniziale, peso totale, fattore di diluizione, accuratezza della diluizione. - Piattaforma di peso Accuratezza &lt; 0,05 g.  Funzioni di distribuzione liquidi da 1 g a 2500 g (accuratezza &lt; 0,1 g). - Lingua del display Italiano. - Dimensioni 25 x 42 x 30 cm - Peso 10 kg.</p>		


## FRIGORIFERI

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>ARMADIO FRIGORIFERO Mod. KICPVB40M BIANCO / 1 ANTA - Capacità Lt. 400</b>	<b>1 Unità</b>	<b>DAS37405</b>
<b>ARMADIO FRIGORIFERO Mod. KICPVB60M BIANCO / 1 ANTA - Capacità Lt. 640</b>	<b>1 Unità</b>	<b>DAS37290</b>
<b>ARMADIO FRIGORIFERO Mod. KICPVX40M ACCIAIO INOX / 1 ANTA - Capacità Lt. 400</b>	<b>1 Unità</b>	<b>DAS37407</b>
<b>ARMADIO FRIGORIFERO Mod. KICPVX60M ACCIAIO INOX / 1 ANTA - Capacità Lt. 640</b>	<b>1 Unità</b>	<b>DAS37291</b>
 <p>Struttura monocrpo in acciaio inox 18/10 AISI 304 oppure in acciaio plastificato bianco con film calandrato di PVC laminato in maniera permanente al supporto metallico mediante accoppiamento a caldo atossico sia all'interno che all'esterno - angoli arrotondati e fondo a vasca per evitare qualsiasi fuoriuscita di liquidi od altro dal frigorifero - capacità 700lt.</p> <p>Montata su piedini in acciaio inox regolabili in altezza per un perfetto livellamento al pavimento. Isolamento in poliuretano espanso ad alta densità (42kg.m3) ottenuta senza l'utilizzo di CFC - Spessore 60mm. Nr.01 Porta cieca dello stesso materiale ed isolamento della struttura - Guarnizione magnetica perimetrale montata ad incastro sulla porta che garantisce una perfetta tenuta e una facile manutenzione e sostituzione - fermo porta a 90° - chiusura automatica. Gruppo comandi composto da Nuova centralina elettronica di ultima generazione con display alfanumerico LCD luminoso in grado di dialogare con l'utente fornendo informazioni immediate e precise sullo stato dell'apparecchiatura</p> <p><b>Temperatura (-2°/+8 °C)</b>  <b>Completo di n. 4 ripiani</b></p>		




## FRIGORIGERI PORTATILI

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>FRIGORIFERO PORTATILE 12V/24V - 110V/240V Mod. 41 Litri</b>	<b>1 Unità</b>	<b>C41</b>
 <p><b>Caratteristiche</b>            Struttura: Materiale plastico atossico - Spessore isolamento: 40 (poliur. mm)            Tipo refrigerazione. Statico - Refrigerante: R134A            Campo temperatura: +10° -10°            Controllo/Regolazione temperatura: Termostato elettronico digitale con allarme acustico e visivo (no attivo mancanza corrente) - Voltaggio: 12V/24V - 110V/240V -50Hz/60Hz  <b>Capacità (LT): 41</b>            Chiusura chiave: di serie - Illuminazione interna: di serie .Larghezza (cm): 60 - Profondità (cm): 37 - Altezza (cm): 40 - Peso netto (Kg): 18. Apparecchiatura conforme a direttive 98/37/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE e successive modifiche e integrazioni.</p>		



## GERMODEPURATORE

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>GERMODEPURATORE DI ARIA A FLUSSO CONTINUO "GERMREDUC</b>	<b>1 Unità</b>	<b>32109</b>
 <p>Germodepuratore da parete per la distruzione dei microrganismi presenti nell'aria mediante raggi UV (<math>\lambda=254</math> nm) - utilizzabile in presenza di personale - grado di depurazione dell'aria: 92% - 220 V, 50 Hz - durata lampade: 6000 ore - da parete - 1 modulo aspirante con 2 lampade UV - portata: 128 m<sup>3</sup>/h - dimensioni: 890x70x160 h mm</p>		




## MICROSCOPI

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>MICROSCOPIO BIOLOGICO Mod. 500Bpl</b>	<b>1 Unità</b>	<b>B-500Bpl</b>
<b>MICROSCOPIO BIOLOGICO Mod. 600B</b>	<b>1 Unità</b>	<b>B-600B</b>
 <p><b>Caratteristiche</b>            Testata: Binoculare;            Obbiettivi: Planacromatici 4x,10x, 40x, 100x;</p>		
<b>MICROSCOPIO BIOLOGICO CONTRASTO DI FASE Mod. 600B</b>	<b>1 Unità</b>	<b>B-600Bph</b>
 <p><b>Caratteristiche</b>            Testata: Binoculare;            Obbiettivi: Planacromatici 4x,10x, 40x, 100x;</p>		
<b>STEREO MICROSCOPIO BINOCULARE Mod. SZM-1</b>	<b>1 Unità</b>	<b>SZKM-1</b>
<b>STEREO MICROSCOPIO BINOCULARE Mod. SZM-2</b>	<b>1 Unità</b>	<b>SZKM-2</b>
 <p><b>Caratteristiche</b>  <b>SZM-1:</b> Con <b>testata binoculare</b>, dispone di stativo dotato di doppio illuminatore per luce incidente e trasmessa. Messa a fuoco controllata da coppia di manopole. Dimensioni base: 29x23 cm; altezza stativo: 22 cm.  <b>SZM-2:</b> Versione con <b>testata trinoculare</b> del modello SZM-1. Per applicazioni foto/video.</p>		



**OMOGENEIZZATORI**

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>BAG MIXER® 400 W</b>  <p>Omogeneizzatore per analisi batteriche degli alimenti: carne, salumeria, pesce, vegetali, frutta, biscotti, prodotti farmaceutici e cosmetici. Capacità utile da 50 a 400 ml. – Sportello trasparente.</p>	<b>1 Unità</b>	<b>022230</b>
<b>BAG MIXER® 400 P</b>  <p>Omogeneizzatore per analisi batteriche degli alimenti: carne, salumeria, pesce, vegetali, frutta, biscotti, prodotti farmaceutici e cosmetici. Capacità utile da 50 a 400 ml. – Sportello inox.</p>	<b>1 Unità</b>	<b>021230</b>



**ACCESSORI**

 <p><b>BAG OPEN 400</b> Apri sacchetto con sostegno.</p>	<b>1 Unità</b>	<b>211040</b>
 <p><b>BAG RACK 400</b> Sistemazione razionale e pulita da 11 a 12 sacchetti chiusi dalla sbarre BagClip</p>	<b>1 Unità</b>	<b>221040</b>
<p><b>BAG CLIP 400</b> Barrette di chiusura per sacchetti da 400 ml</p>	<b>50 Pz</b>	<b>231040</b>
 <p><b>BAG PIPET</b></p>	<b>5 Pz</b>	<b>251091</b>
<p><b>BAG TIPS</b> Barrette di chiusura per sacchetti da 400 ml</p>	<b>1000 Pz</b>	<b>252019</b>



## pH METRI

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>pH METRO PORTATILE Mod. XS pH6</b>	<b>1 Unità</b>	<b>51001012</b>
 <p>pHmetro portatile con microprocessore e compensazione manuale o automatica della temperatura con sonda NTC30K. Taratura automatica fino a 3 punti. Tamponi selezionabili NIST, USA e Pb (9 valori). Fermo-lettura e autospegnimento. Guscio protettivo in gomma con supporto da banco. Messaggi di auto-diagnosi, garanzia sulla parte elettronica di 3 anni. IP54. Campo di misura: pH 0,00...14,00 (0,01pH); mV <math>\pm</math> 1000 (1 mV); °C 0,0...100,0 (0,1 °C).  <b>Completo di elettrodo PolyPlast BNC Hamilton</b>, sonda di temperatura NT 30, tamponi colorati e istruzioni per l'uso, in valigia da trasporto.</p>		
<b>pH METRO DA BANCO Mod. pH 510</b>	<b>1 Unità</b>	<b>51001212</b>
 <p>pHmetro da banco digitale a microprocessore, accuratezza <math>\pm</math> 0,01 pH e compensazione manuale o automatica della temperatura con sonda NTC30K. Taratura automatica da 1 a 3 punti. Tamponi selezionabili NIST e USA (6 valori). Memoria/richiamo fino a 50 dati. Funzioni "Fermo-lettura" e "Stabilità", messaggi di auto-diagnosi e uscita per registratore. Tastiera a prova di schizzi IP54, garanzia sulla parte elettronica di 3 anni. Cartolina Istruzioniestraibile. Campo di misura: pH 0,00...14,00 (0,01 pH); mV -199,9...+199,9 (0,1 mV) / -1999...+1999 (1mV); °C 0,0...100,0 (0,1 °C).  <b>Completo di elettrodo Polilyte Lab Hamilton</b>, cavo BNC, sonda di temperatura NT31, supporto portaelettrodo, tamponi certificati colorati e istruzioni per l'uso.</p>		



## PIPETTE AUTOMATICHE

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>FIXOPET / Volume Fisso</b>	<b>1 Unità</b>	<b>/</b>
 <p>La linea Kartell® FIXOPET è costituita da micropipette a volume fisso di elevata precisione. Le capacità disponibili sono: 5, 10, 20, 25, 50, 100, 200, 250, 500, 750 e 1000 <math>\mu</math>l. Ciascuna di esse è dotata di espulsore del puntale, regolabile, in modo da eliminare ogni rischio di contaminazione.</p>		
<b>PLURIPET / Volume variabile PL 2/10 <math>\mu</math>l</b>	<b>1 Unità</b>	<b>/</b>
<b>PLURIPET /Volume variabile PL 20/100/200/1001/5000/10000 <math>\mu</math>l</b>	<b>1 Unità</b>	<b>/</b>
 <p>Otto micropipette a volume variabile costituiscono la linea Kartell PLURIPET e coprono la gamma di capacità da 0,5 a 10000 <math>\mu</math>l. Ciascuna di esse è dotata di espulsore del puntale, regolabile, in modo da eliminare ogni rischio di contaminazione.</p>		
<b>MINI FIX 5/10/20/25/50/100 (Max 500 pipettaggi)</b>	<b>1 Pz</b>	<b>/</b>
<b>PLURIPET II 20/100/200/1001</b>	<b>1Pz</b>	<b>/</b>

## PIPETTE AUTOMATICHE

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>PIPETTATRICE SEMI-AUTOMATICA ROTA-FILLER 1000</b>	<b>1 Unità</b>	<b>15100023</b>
 <p>Pipettatore manuale molto leggero per uso con pipette in vetro o in plastica sia graduate che volumetriche <b>da 1 a 100ml</b>. Controllo totale con una mano sola. premendo l'impugnatura si mette in pressione il pipettatore, azionando verso l'alto o verso il basso un pulsante si provvede all'aspirazione o espulsione del liquido per caduta. Un secondo pulsante permette lo svuotamento totale della pipetta. L'imboccatura, completamente autoclavabile, contiene un fermapipette in silicone, un filtro a membrana idrofobica da 0,45 µm. Il kit include anche un porta strumento da parete.</p>		
<b>PIPETTATRICE AUTOMATICA ELETTRICA ROTA-FILLER 3000</b>	<b>1 Unità</b>	<b>15100003</b>
<b>PIPETTATRICE AUTOMATICA ELETTRICA ROTA-FILLER 5000</b>	<b>1 Unità</b>	<b>15100013</b>
 <p>Pipettatore brevettato con imboccatura ad angolazione variabile su tre posizioni per il massimo comfort. Profilo dell'impugnatura ergonomico per un uso rilassato senza "crampi" alla mano. Tre velocità selezionabili: alta, bassa e per gravità Rota-Filler 3000: un potente motore in un leggero e confortevole strumento. Il massimo del comfort. Caratteristiche quali l'impugnatura zigrinata, il design "neutro" sia per utenti destri che mancini, i pulsanti concavi e un facile controllo assicura un uso semplice e comodo nelle mani dell'utilizzatore per molte ore. La velocità è facilmente selezionabile. Sono disponibili due modi operativi: a soffio "Blow-out", con potenza "alta" e "bassa" oppure per gravità, senza utilizzare il motore. leggero e senza cavi per uso con pipette in vetro o in plastica sia graduate che volumetriche <b>da 1 a 100 ml con</b> eccezionale controllo di aspirazione/dosaggio in un design compatto e ergonomico. L'imboccatura, completamente autoclavabile, contiene un fermapipette in silicone, un filtro a membrana idrofobica da 0,45 µm. Il kit include sia lo stativo da banco che un porta strumento da parete, <b>l'alimentatore a rete</b> per la ricarica delle batterie e 2 filtri di ricambio.</p>		

## TERMOMETRI - MISURATORI DI TEMPERATURA

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>TERMOMETRO PORTATILE Mod. TEMP 5</b>	<b>1 Unità</b>	<b>51000002</b>
 <p>Termometro portatile, con microprocessore, per sonde Pt100. Lettura dei valori MAX e MIN, memoria permanente anche con batteria disconnessa. Calibrabile dall'esterno. Fermo-lettura e autospegnimento dopo 17 minuti di non funzionamento. Messaggi di autodiagnosi, guscio protettivo in gomma con supporto da banco. Garanzia per la parte elettronica di 3 anni. IP54. Campo di misura: -200...+850 °C (0,1 °C tra -99,9...199,9 °C / oltre 1 °C). Fornito senza sonde (vedere modelli PT56). Certificabile SIT.</p>		
<b>SONDA MOD. PT56L</b> Sensore di temperatura per termometro Mod. TEMP 5. Campo di misura: -50...+400 °C	<b>1 Unità</b>	<b>51000202</b>
<b>TERMOMETRO A RAGGI INFRAROSSI SCANTEMO 410</b>	<b>1 Unità</b>	<b>64000172</b>
 <p>Termometro con display retroilluminato LCD e possibilità di misura su bersagli con 2 cm di diametro a distanza di 22 cm (rapporto D:S=11:1).  <b>Letture fino a +500 °C</b>  <b>Rapporto D:S = 11:1</b>  <b>Emissività fissa 0,95</b>  <b>Puntamento laser singolo</b>            Funzione MAX. Consente di leggere contemporaneamente la temperatura misurata e il suo valore massimo.            Temperatura ambiente operativa 0...50 °C, umidità relativa 10...95% fino a 30 °C. Alimentazione 2 pile AA, peso g 180. Dimensioni mm 175 x 39 x 79. Fornito completo di custodia e istruzioni d'uso.</p>		



**TERMOMETRI - MISURATORI DI TEMPERATURA**

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>TERMOMETRO DIGITALE Mod. DTE</b>	<b>1 Unità</b>	<b>62000123</b>
<b>TERMOMETRO DIGITALE Mod. DT90</b>	<b>1 Unità</b>	<b>62000213</b>



Termometro digitale con doppio display e due sonde di lettura: interna e esterna. Campo di misura: interna -5...+50 °C, esterna -50...+70 °C. Risoluzione 0,1 °C. Possibilità di richiamare le temperature Min/Max. Possibilità di fissaggio a muro o a pannello. Lunghezza della sonda esterna 3 m. Commutatore °C/°F. Dimensioni 100x110x18 mm, peso 150 g. Alimentazione a pila AAA 1,5V.

<b>TERMOMETRO DIGITALE ELETTRONICO Mod. LT 102</b>	<b>1 Unità</b>	<b>62000283</b>
--	----------------	-----------------



Termometro digitale elettronico **a tenuta stagna**, protezione IP 65 adatto anche per usi semi-professionali e per misure sia in aria che liquidi o solidi. **Sonda di temperatura con 3 mt di cavo. Allarme di soglia regolabile con avviso <!--[endif]-->acustico.** Ideale per settore alimentare, industria e agricoltura. **Campo di misura - 40...+ 70 °C**, risoluzione 0,1 °C, precisione  $\pm 0,5^{\circ}\text{C}$  da -20...+25°C, oltre  $\pm 1^{\circ}\text{C}$ . Memorizzazione delle temperature funzione **MIN/MAX/HOLD**. Sostegno da tavolo e calamita. Dimensione termometro: mm 86x 57 x 30, dimensione sonda (LxØ) mm 20 x 5. Alimentazione a batteria. Marchio CE.

**TERMOSTATI (INCUBATORI) E STUFE**

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>TERMOSTATO MINI BATT Mod. 805 / Capacità 9,5 Lt.</b>	<b>1 Unità</b>	<b>29860002</b>
<b>TERMOSTATO MINI BATT Mod. 806 / Capacità 17 Lt.</b>	<b>1 Unità</b>	<b>29860011</b>



Possiede una notevole stabilità termica ed è indicato per laboratori d'urgenza (senza eccessivi carichi di lavoro), per studi medici e laboratori con medie richieste di esami culturali. Elettroventola per circolazione aria. Pannello frontale con regolatore di temperatura elettronico digitale. Controllo di sicurezza temperatura. **Regolazione temperatura da ambiente a 60 °C. +/- 0,25 °C.** Dispositivo di sicurezza con spia mancanza flusso d'aria. Costruzione esterna in acciaio con verniciatura in polvere. Camera interna in acciaio inox con 3 ripiani regolabili in altezza. Sportello in resina acrilica per consentire l'ispezione senza alterare l'equilibrio termico. Display digitale per impostare la temperatura di lavoro. Allarme acustico in caso di "over temperature - Alimentazione elettrica 230 V - 50 Hz. Assorbimento 270 W.  
Specifiche tecniche: **Mod. 805:** Dimensioni interne mm. 220x140x310 h. - Lt. 9,5. - Dimensioni d'ingombro mm. 310x210x520 h. - Peso netto Kg. 9. **Mod. 806:** Dimensioni interne mm. 220x220x350 h. - Lt. 17. Dimensioni d'ingombro mm. 300x300x565 h. - Peso netto Kg. 13.

<b>TERMOSTATO A SECCO PER BATTERIOLOGIA Mod. DIGITALE / Capacità 40 Lt.</b>	<b>1 Unità</b>	<b>DAS73000</b>
<b>TERMOSTATO A SECCO PER BATTERIOLOGIA Mod. DIGITALE / Capacità 80 Lt.</b>	<b>1 Unità</b>	<b>DAS73010</b>




Questi termostati a secco vengono utilizzati nelle prove di laboratorio in cui sono richieste temperature pari o superiori a quelle ambientali, ed in particolare in tutte le prove di microbiologia, invecchiamento e conservazione dei prodotti. STRUTTURA ESTERNA realizzato in acciaio trattato con vernici epossidiche antiacido, antigraffio - CAMERA INTERNA in acciaio INOX AISI 304 con ripiani estraibili regolabili in altezza - TERMOREGOLATORE regolazione elettronica della temperatura. Display digitale a lettura decimale ad azione PID con sonda PT 100, con sensibilità di  $\pm 0,2^{\circ}\text{C}$ . Campo di temperatura regolabile **+5°C sopra ambiente +90°C** - Uniformità °C (37°):  $\pm 0.5$




## TERMOSTATI (INCUBATORI) A CIRCOLAZIONE NATURALE


DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>INCUBATORE Mod. IC52 Mod. DIGITALE / Capacità 52 Lt.</b>	<b>1 Unità</b>	<b>41000552</b>
 <p>Incubatore a circolazione d'aria naturale. Campo di lavoro: da 5° oltre temperatura ambiente <b>fino a 100°C</b>. Volume utile <b>52 litri</b>. Variazione della temperatura a 37°C: <math>\pm 0,5^\circ\text{C}</math>. <b>Porta interna</b> costruita in <b>vetro</b> antinfortunistico. Avanzato sistema di controllo digitale a microprocessore tipo PID. Display digitale, alfanumerico LCD con scelta di cinque lingue, italiano compreso. Timer digitale 0-999 h ed orologio con data ed ora per funzioni GLP e GMP permanente. Programmatore: 50 programmi, memorizzati in modo permanente con 15 steps (temperatura, gradiente, tempo e velocità ventilazione). Possibilità di taratura della temperatura su di un punto. Interfaccia RS485 per collegamento a PC o stampante. <b>Classe di sicurezza in classe 3.1</b> con doppio limitatore digitale della temperatura ed limitatore di massima ad espansione di fluido. Camera in acciaio inossidabile con bordi arrotondati. Foro di passaggio Ø 6 mm sul tetto per inserimento di un sensore esterno per controllo o certificazione della temperatura interna. Fornito con 2 ripiani grigliati in acciaio (carico massimo 26Kg). Dimensioni esterne (base x altezza x profondità): 460 x 501 x 527 mm. Peso 30Kg. Alimentazione 230V/ 450W. La potenza assorbita da questo modello è la più bassa di tutta la categoria e consente un risparmio energetico del 50% con gli stessi tempi di riscaldamento.</p>		

## TERMOSTATI (INCUBATORI) E STUFE

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>INCUBATORE Mod. IC40 Mod. DIGITALE / Capacità 40 Lt.</b>	<b>1 Unità</b>	<b>41000502</b>
<b>INCUBATORE Mod. IC80 Mod. DIGITALE / Capacità 80 Lt.</b>	<b>1 Unità</b>	<b>41000512</b>
 <p>Incubatore a circolazione d'aria forzata. Campo di lavoro: da 5° oltre temperatura ambiente <b>fino a 110°C</b>. Volume utile 40Lt Mod. IC40, 80 Lt Mod. IC 80. <b>Porta interna</b> costruita in <b>vetro</b> antinfortunistico. Avanzato sistema di controllo digitale a microprocessore tipo PID. Display digitale, alfanumerico LCD con scelta di cinque lingue: <b>italiano compreso</b>. Timer digitale 0-999 h ed orologio con data ed ora per funzioni <b>GLP</b> e <b>GMP</b> permanente. Programmatore: 50 programmi, memorizzati in modo permanente con 15 steps (temperatura, gradiente, tempo e velocità ventilazione). Possibilità di taratura della temperatura su di un punto. Interfaccia <b>RS232C</b> per collegamento a PC o stampante. <b>Classe di sicurezza in classe 3.1</b> con doppio limitatore digitale della temperatura ed limitatore di massima ad espansione di fluido. Camera in acciaio inossidabile con bordi arrotondati. Foro di passaggio diam. 6mm sul tetto per inserimento di un sensore esterno per controllo o certificazione della temperatura interna. Fornito con n. 1 ripiano grigliati in acciaio (carico massimo 26Kg). Alimentazione 230V/ 500W. La potenza assorbita da questo modello è la più bassa di tutta la categoria e consente un risparmio energetico del 50% con gli stessi tempi di riscaldamento.</p>		

<b>STUFA Mod. TC40 Mod. DIGITALE / Capacità 40 Lt.</b>	<b>1 Unità</b>	<b>41000002</b>
<b>STUFA Mod. TC100 Mod. DIGITALE / Capacità 100 Lt</b>	<b>1 Unità</b>	<b>41000012</b>
 <p>Stufa a circolazione d'aria forzata. <b>Tecnologia "All in door"</b> coperta da brevetto internazionale dove tutti i componenti tecnici ( resistenze, ventilazione e regolatore di temperatura) sono installati nella porta. Campo di lavoro: da 5° oltre temperatura ambiente <b>fino a 200°C</b>. Volume utile 40Lt e 100 Lt. Avanzato sistema di controllo digitale a microprocessore tipo PID. Display digitale, alfanumerico LCD con scelta di cinque lingue: <b>italiano compreso</b>. Timer digitale 0-999 h ed orologio con data ed ora per funzioni <b>GLP</b> e <b>GMP</b> permanente. Programmatore: 50 programmi, memorizzati in modo permanente con 15 steps (temperatura, gradiente, tempo e velocità ventilazione). Possibilità di taratura della temperatura su di un punto. Interfaccia <b>RS232C</b> per collegamento a PC o stampante. <b>Classe di sicurezza in classe 3.1</b> con doppio limitatore digitale della temperatura ed limitatore di massima ad espansione di fluido. Camera in acciaio inossidabile con bordi arrotondati. Fornita con un ripiano in acciaio non forato ( carico massimo 20Kg). Questi modelli ha il miglior rapporto dimensioni esterne / volume utile della camera ed il minor consumo energetico della sua categoria.</p>		


## INCUBATORI CO<sub>2</sub>

DESCRIZIONE	Cont.	REF
<b>INCUBATORE CO<sub>2</sub> Mod. BC175/ Capacità 175 Lt</b>	<b>1 Unità</b>	<b>41001302</b>
 <p>Incubatore per colture di cellule e di tessuti in atmosfera di CO<sub>2</sub>. Volume utile 175Lt. Campo di lavoro: temperatura <b>massima 50,0°C</b>, controllo della <b>CO<sub>2</sub> da 0,2..20%</b>. Regolatore a microprocessore con ampio display retroilluminato di facile programmazione. Sensore IR a stato solido autocalibrante per controllo CO<sub>2</sub>. Due livelli di allarme acustici e visivi programmabili garantiscono l'affidabilità di cidi molto lunghi Porta interna costruita con vetro antinfortunistico per la verifica dei campioni all'interno della camera. L'innovativo e sicuro disegno garantisce una condizione ottimale per le Vostre applicazioni. Il controllo della temperatura selezionata agisce senza l'ausilio di una ventilazione all'interno della camera, questo riduce al minimo il rischio di contaminazione. Le condizioni costanti della temperatura, CO<sub>2</sub> e l'umidità è mantenuta indipendentemente dal carico nell'incubatore. La camera interna monoblocco in acciaio ed il sistema di supporto dei ripiani completamente estraibile consente una facile ed efficace pulizia della camera. Una vasca interna garantisce una umidità costante del 95% a 37°C. Fornito con n. 4 ripiani in acciaio. Dimensioni esterne ( base x altezza x profondità ): 845 x 685 x 651 mm. Peso 80Kg. Alimentazione 230V/ 1500W.</p>		

## STRUMENTAZIONE PER ANALISI CHIMICHE DELLE ACQUE

### FOTOMETRI MULTIPARAMETRO

PRODOTTO	Cont.	REF
<b>MINIFOTOMETRO Mod. PF12</b>	<b>1 unità</b>	<b>RM0919200</b>




Il Fotometro compatto PF12 a filtri interferenziali è la soluzione **ideale per l'analisi di acque e acque di scarico**. PF12 è un **fotometro portatile multiparametro per l'utilizzo sia sul campo che in laboratorio**, con più di 100 metodi preprogrammati, selezione della lunghezza d'onda automatica e dotato di display grafico retroilluminato con tutte le informazioni utili all'utente per poter eseguire le analisi in modo semplice e veloce. L'ottica è insensibile alla luce esterna e rende la **misurazione rapida e diretta** senza l'utilizzo della cover per la sede di alloggiamento della provetta.

Munito di **memoria capace di salvare 200 risultati** in conformità alle GLP e di interfaccia USB per un agevole trasferimento dei risultati al PC (in formato MS Excel).

L'accuratezza del fotometro può essere facilmente e rapidamente monitorata con l'utilizzo di NANOCOLOR Nanocheck (cod. CM0925701) in accordo alle ISO 9001.

<b>FOTOMETRO NANOCOLOR Mod. 400D</b>	<b>1 Unità</b>	<b>RM0091970</b>
<b>FOTOMETRO NANOCOLOR Mod. 500D</b>	<b>1 Unità</b>	<b>RM0091950</b>




Fotometro universale per l'analisi di routine di acque e acque di scarico con test in provetta e set di reagenti.

**Caratteristiche:**

- display grafico illuminato
- interfaccia USB per aggiornamento e trasferimento dati (10 filtri fissi e due alloggiamenti per l'aggiunta di filtri aggiuntivi tra 340 e 860 nm);
- numerosi metodi NANOCOLOR® già preprogrammati;
- possibilità di memorizzare fino a 99 metodi personalizzati dall'utente;
- **programmi di misura:**
  - concentrazione direttamente in mg/l - estinzione -concentrazione (con fattore) -concentrazione (con due punti di calibrazione) -cinetiche (misura continua in un intervallo di tempo flessibile) -trasmissione
- alimentazione con batterie ricaricabili (oltre 3000 misure) o con adattatore di rete esterno;
- richiamo dell'ultimo metodo utilizzato con un solo tasto;
- visualizzazione dell'ultimo valore misurato con un solo tasto possibilità di alloggiare diversi tipi di cuvette per misure più precise a diversi intervalli;
- visualizzazione grafica dello stato delle batterie.


<b>FOTOMETRO PORTATILE MAXI DIRECT Mod. AL400</b>	<b>1 Unità</b>	<b>82140203</b>
---	----------------	-----------------



MaxiDirect è un moderno fotometro a **tenuta stagna** controllato da microprocessore con tastiera ergonomicamente studiata e un ampio display grafico. È equipaggiato con un vasto range di metodi pre-programmati basati sui provati range dei reattivi AQUALITIC in compresse, liquidi, vial-test e in polvere (VARIO). L'utilizzatore può comunque memorizzare i propri metodi. **Usa gli stessi reattivi del PCMULTI.**

L'intera unità, Il comparto di misura (il componente critico di ogni fotometro) e il compartimento delle batterie sono assolutamente a tenuta stagna, assicurando che l'acqua non può entrare in contatto con i componenti elettronici. Il numero e la varietà dei metodi d'analisi sono adattate per incontrare le richieste del mercato attuale. I metodi possono essere aggiunti facilmente e velocemente, è possibile trovare gli aggiornamenti per nuovi metodi sul nostro sito.

<b>FOTOMETRO MULTI DIRECT Mod. AL450</b>	<b>1 Unità</b>	<b>82100003</b>
--	----------------	-----------------



PCMULTI è un moderno fotometro controllato da microprocessore con tastiera ergonomicamente studiata e un ampio display grafico. È equipaggiato con un vasto range di metodi pre-programmati basati sui provati range dei reattivi AQUALITIC in compresse, liquidi, vial-test e in polvere (VARIO). L'utilizzatore può comunque memorizzare i propri metodi.

Sette batterie ricaricabili standard (fornite) assicurano un facile uso sul campo. Queste batterie standard sono disponibili in tutto il mondo e facili da sostituire. Il controllo "intelligente" di carica integrato nell'unità consente di usare lo strumento anche mentre è in ricarica (usando il "power pack" fornito). Il PCMULTI può anche lavorare senza "power pack" ma usando batterie alcaline-manganese.

L'intera unità, Il comparto di misura (il componente critico di ogni fotometro) e il compartimento delle batterie sono assolutamente a tenuta stagna, assicurando che l'acqua non può entrare in contatto con i componenti elettronici. Il numero e la varietà dei metodi d'analisi sono adattate per incontrare le richieste del mercato attuale. I metodi possono essere aggiunti facilmente e velocemente, è possibile trovare gli aggiornamenti per nuovi metodi sul nostro sito.

**AGENTE DI ZONA**

**DISTRIBUTORE DI ZONA**

**LICKSON** s.r.l.

**Uffici amministrativi e Stabilimento:**

S.S. 189 (PA-AG) C.da Pettineo

90020 VICARI (PA) - ITALY

Casella Postale 90025 Lercara Friddi (PA)

**Telefono:** 0039. 091. 8252670 - 8248561

**Fax:** 0039. 091. 8213696

**E-mail:** Amministrazione: [licksonsr1@virgilio.it](mailto:licksonsr1@virgilio.it)

Commerciale: [info@lickson.com](mailto:info@lickson.com)

**Sito web:** <http://www.lickson.com>